






INSTRUCTIONS FOR USE






Ambu® AuraStraight™
Single Use Laryngeal Mask - Sterile.






For use by medical professionals trained
in airway management only.




Ambu










Symbol Indication					
EN	Medical Device	MR safe	Sterilized using irradiation Single sterile barrier system	Do not use if the product sterilization barrier or its packaging is damaged	Country of manufacturer
BG	Медицинско изделие	Безопасно за работа в магнитнорезонансна среда	Стерилизирано чрез облъчване Единична стерилна бариерна система	Не използвайте, ако стерилизационната бариера на продукта или неговата опаковка са повредени	Държава на производителя
CS	Zdravotnický prostředek	MR bezpečný	Sterilizováno zářením Systém jedné sterilní bariéry	Prostředek nepoužívejte, pokud došlo k narušení sterilní bariéry nebo k poškození obalu	Země výrobce
DA	Medicinsk udstyr	MR-sikker	Strålesteriliseret Enkelt sterilt barriersystem	Produktet må ikke anvendes, hvis dets sterile barriere eller emballagen er beskadiget	Producentland
DE	Medizinprodukt	MR-sicher	Mit Bestrahlung sterilisiert Einzel-Sterilbarriersystem	Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Sterilbarriere oder die Verpackung beschädigt ist	Produktionsland
EL	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Ασφαλές για MR	Αποστειρωμένο με χρήση ακτινοβολίας Ενιαίο σύστημα φραγμού αποστείρωσης	Μην το χρησιμοποιήσετε εάν ο φραγμός αποστείρωσης του προϊόντος ή η συσκευασία του έχει καταστραφεί	Χώρα κατασκευαστή
ES	Producto sanitario	Compatible con RM	Esterilizado mediante irradiación Sistema de barrera estéril simple	No lo utilice si la barrera de esterilización del producto o su embalaje están dañados	País de origen del fabricante

Symbol Indication					
ET	Meditsiiniseade	Sobib MRT-seadmetega kasutamiseks	Steriliseeritud kiirgusega Ühekordne steriilne barjäärisüsteem	Ärge kasutage toodet, kui selle sterilisatsioonibarjäär või pakend on kahjustunud	Tootja riik
FI	Lääkinnällinen laite	MRI-turvallinen	Steriloitu säteilyttämällä Yksinkertainen steriili sulkujärjestelmä	Älä käytä, jos tuotteen sterilointisuoja tai sen pakkaus on vaurioitunut.	Valmistusmaa
FR	Dispositif médical	Compatible avec l'IRM	Stérilisation par irradiation Système de barrière stérile simple	Ne pas utiliser si la barrière de stérilisation ou l'emballage est endommagé(e).	Pays du fabricant
HR	Medicinski uređaj	Sigurno za upotrebu uz MR	Sterilizirano zračenjem Sustav jednostruke sterilne barijere	Ne upotrebljavajte ako su sterilizacijska zaštita ili pakiranje proizvoda oštećeni	Zemlja proizvodnje
HU	Orvostechnikai eszköz	MRI szempontjából biztonságos	Besugárzással sterilizálva Egyszeres sterilgát-rendszer	Ne használja fel a terméket, ha a steril védőcsomagolás vagy a csomagolás megsérült	A gyártó országa
IT	Dispositivo medico	Compatibile con RM	Sterilizzato con irradiazione Sistema a barriera sterile singola	Non utilizzare il prodotto se la barriera sterile o la confezione sono danneggiate	Paese di produzione
JA	医療機器	MR適合	放射線を利用した滅菌 シングル滅菌バリアシステム	製品の殺菌バリアまたは包装が破損している場合は使用しないこと	製造業者の国
LT	Medicinos priemonė	Saugi naudoti MR aplinkoje	Sterilizuota spinduliuote Viengubo sterilaus barjero sistema	Nenaudokite gaminio, jeigu pažeista jo sterili ar išorinė pakuotė	Gamintojo šalis

Symbol Indication					
LV	Medicīniskā ierīce	MR droša	Sterilizēta, izmantojot apstarošanu Vienas sterilas barjeras sistēma	Nelietot izstrādājumu, ja tā sterilizācijas barjera vai iepakojums ir bojāts	Ražotājvalsts
NL	Medisch hulpmiddel	MR-veilig	Gesteriliseerd door bestraling Enkelvoudig steriel barrièresysteem	Gebruik het product niet wanneer de steriele barrière of de verpakking beschadigd is	Land van fabrikant
NO	Medisinsk utstyr	MR-sikker	Sterilisert med stråling Enkelt sterilt barrieresystem	Produktet må ikke brukes hvis produktets sterile barriere eller emballasjen er skadet	Produksjonsland
PL	Wyrób medyczny	Bezpieczny w trakcie badania rezonansem magnetycznym	Sterylizowany radiacyjnie System pojedynczej bariery sterylnej	Produktu nie należy używać, jeśli jego sterylna osłona jest nieszczelna lub opakowanie jest uszkodzone	Kraj producenta
PT	Dispositivo médico	MR seguro	Esterilizado por irradiação Sistema de barreira estéril único	Não utilize se a barreira de esterilização do produto ou a respetiva embalagem estiverem danificadas	País do fabricante
RO	Dispozitiv medical	Sigur pentru utilizarea cu aparate de RMN	Sterilizat prin iradiere Sistem cu ecran steril unic	A nu se utiliza dacă ecranul de sterilizare a produsului sau ambalajul acestuia este deteriorat	Țara producătorului
RU	Медицинское изделие	Может использоваться во время МРТ	Стерилизовано облучением Одна система стерильного покрытия	Не используйте изделие, если его стерилизационный барьер или упаковка повреждены	Страна-изготовитель

Symbol Indication					
SK	Zdravotnícka pomôcka	Bezpečné pre prostredie MR	Sterilizované ožarovaním Systém jednej sterilnej bariéry	Výrobok nepoužívajte, ak je poškodená sterilná bariéra alebo obal výrobku	Krajina výrobcu
SL	Medicinski pripomoček	Varno za MR	Sterilizirano z obsevanjem Enojni sterilni pregradni sistem	Izdelka ne uporabljajte, če je sterilna zaščita ali embalaža izdelka poškodovana	Država proizvajalca
SV	Medicinteknisk produkt	MR-säker	Steriliserad med strålning Enkelt sterilbarriärsystem	Får inte användas om produktens sterilbarriär eller förpackning är skadad	Tillverkningsland
TR	Tıbbi Cihazdır	MR için güvenli	Radyasyonla sterilize edilmiştir Tekli steril bariyer sistemi	Ürünün sterilizasyon bariyeri ya da ambalajı hasarlıysa ürünü kullanmayın	Üretildiği ülke
ZH	医疗器械	MR 安全	采用辐照灭菌 单层无菌屏障系统	如果产品的无菌屏障或其包装损坏, 不得使用本产品	制造商所属国家/地区

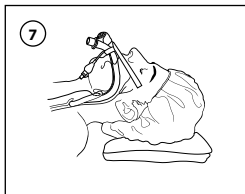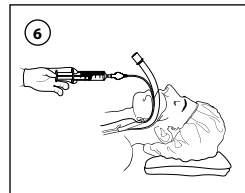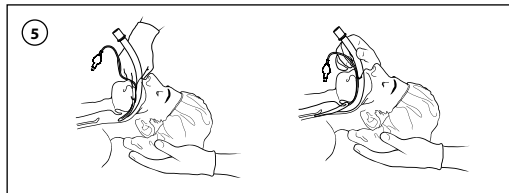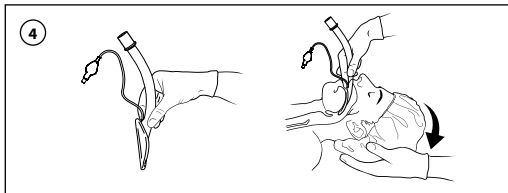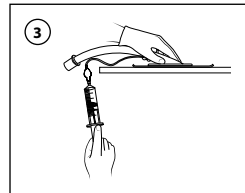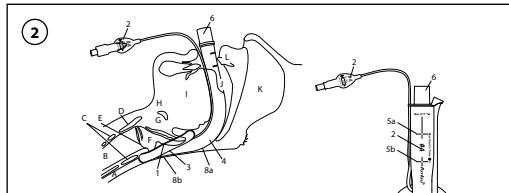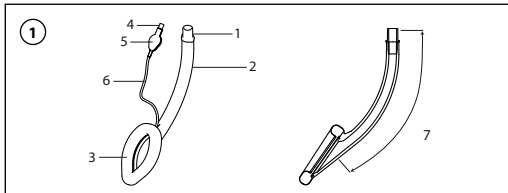

Content	Page
English.....	8
България.....	25
Česky.....	21
Dansk\.....	27
Deutsch.....	33
Ελληνικά.....	40
Español.....	48
Eesti.....	55
Suomi.....	61
Français.....	67
Hrvatski.....	74
Magyar.....	80
Italiano.....	87

Content	Page
日本語.....	97
Lietuviškai.....	100
Latviski.....	107
Nederlands.....	113
Norsk.....	120
Polski.....	126
Português.....	133
Romania.....	140
Русский.....	147
Slovenčina.....	154
Slovenščina.....	161
Svenska.....	167
Türkçe.....	173
中文.....	179



2797

1.1. Intended use /Indication for use

The Ambu AuraStraight is intended for use as an alternative to the facemask for achieving and maintaining control of the airway during routine and emergency anesthetic procedures in fasted patients.

1.2. Intended users and use environment

Medical professionals trained in airway management. AuraStraight is intended to be used in a hospital setting.

1.3. Intended patient population

Adult and pediatric patients from 2 kg and above evaluated as eligible for a supraglottic airway.

1.4. Contraindications

None known.

1.5. Clinical benefits

Keeps the upper airway open to allow passage of gases.

1.6. Warnings and cautions

Before insertion, it is essential that all medical professionals using Ambu AuraStraight are familiar with the warnings, precautions, indications, and contraindications found in *Instruction for use*.

WARNINGS



1. The product is intended to be used by medical professionals trained in airway management only.
 2. Always visually inspect the product and perform a functional test after unpacking and prior to use according to section 3.1 Preparation before use, as defects and foreign matters can lead to no or reduced ventilation, mucosal damage, or infection of the patient. Do not use the product if any steps in Preparation before use fails.
 3. Do not re-use AuraStraight on another patient as it is a single use device. Re-use of a contaminated product can lead to infection.
 4. AuraStraight does not protect the trachea or lungs from the risk of aspiration.
 5. Do not use excessive force when inserting and removing AuraStraight as this can lead to tissue trauma.
 6. The cuff volume or pressure may change in the presence of nitrous oxide, oxygen, or other medical gases which can lead to tissue trauma. Ensure to monitor cuff pressure continuously during the surgical procedure.
 7. Do not use AuraStraight in the presence of lasers and electrocautery equipment as this could lead to airway fire and tissue burns.
8. Do not perform direct intubation through AuraStraight as the endotracheal (ET) tube may get stuck leading to insufficient ventilation.
 9. In general, AuraStraight should only be used in patients who are profoundly unconscious and will not resist insertion.
 10. The overall complication rate for laryngeal mask is low, but the user must exercise professional judgement when deciding whether the use of a laryngeal mask will be appropriate. The following patients are at higher risk of serious complications including aspiration and inadequate ventilation:
 - Patients with upper airway obstruction.
 - Non-fasted patients (including those cases where fasting cannot be confirmed).
 - Patients suffering from upper gastrointestinal issues (e.g., esophagectomy, hiatal hernia, gastroesophageal reflux disease, morbid obesity, pregnancy >10 weeks).
 - Patients requiring high pressure ventilation.
 - Patients who present with pharyngeal/laryngeal pathology potentially complicating anatomical fit of the mask (e.g., tumors, radiotherapy to the neck involving the hypopharynx, severe oropharyngeal trauma).
 - Patients with inadequate mouth opening to permit insertion.

CAUTIONS

1. Do not soak, rinse, or sterilize this device as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.
2. Before use, always check for compatibility between AuraStraight and the external device to avoid the use of devices not being able to pass through lumen of AuraStraight.
3. The cuff pressure should be kept as low as possible while still providing sufficient seal and should not exceed 60 cm H₂O.
4. Any signs of airway problems or inadequate ventilation must be monitored regularly and AuraStraight must be repositioned, reinserted or replaced as required to maintain a patent airway.
5. Always reconfirm the patency of the airway after any change in the patient's head or neck position.

1.7. Potential adverse events

The use of laryngeal masks is associated with minor adverse effects (e.g., sore throat, bleeding, dysphonia, dysphagia) and major adverse effects (e.g., regurgitation/ aspiration, laryngospasm, nerve injury).

1.8. General notes

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

2.0. Device description

AuraStraight is a sterile, single-use laryngeal mask consisting of a patient tube with an inflatable cuff at the distal end. The cuff can be inflated through the check valve allowing the pilot balloon to indicate the inflation/ deflation status. The cuff conforms to the contours of the hypopharynx and with its lumen facing the laryngeal opening of the patient. The tip of the cuff presses against the upper oesophageal sphincter and the proximal end of the cuff rests against the base of the tongue.

AuraStraight comes in 8 different sizes. The main components of AuraStraight are seen in figure ①.

Figure 1 (page 4): Overview of AuraStraight parts:

1. Connector; 2. Patient tube; 3. Cuff; 4. Check valve; 5. Pilot balloon; 6. Pilot tube; 7. Nominal length of internal ventilatory pathway*.

* See Table 1 for the nominal length provided in centimeters.

Figure 2 (page 4): Correct position of AuraStraight in relation to AuraStraight parts and anatomical landmarks

AuraStraight parts: 1. Inflatable cuff; 2. Size marking; 3. Ventilatory opening; 4. Ventilatory pathway; 5. Normal depth of insertion marks; 6. Machine end.

Anatomical landmarks: A. Esophagus; B. Trachea; C. Cricoid ring; D. Thyroid cartilage; E. Vocal cords; F. Laryngeal inlet; G. Epiglottis; H. Hyoid bone; I. Tongue; J. Buccal cavity; K. Nasopharynx; L. Incisors.

COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES/EQUIPMENT

AuraStraight can be used in conjunction with:

- Ventilation equipment; 15 mm conical connectors in compliance with ISO 5356-1.
- Airway management devices; Bronchoscopes and exchange catheters*.
- Other accessories; Standard 6 % conical Luer syringe, Manometer with standard 6 % conical Luer connector, Water-based lubrication, Suction catheter.

When using instruments through the mask ensure that the instrument is compatible and well lubricated before insertion.

* See Table 1 for information on maximum instrument size.

3.0. Product use

3.1. Preparation before use

SIZE SELECTION

Ambu AuraStraight comes in different sizes for use in patients of different weights.

For pediatric patients, it is recommended that Ambu AuraStraight is used by a medical professional familiar with pediatric anesthesia.

See selection guidelines and max. intracuff pressure in Table 1, section 4.0. (Specifications).

INSPECTION OF AURASTRAIGHT

Always wear gloves during the preparation and insertion of Ambu AuraStraight to minimize contamination.

Handle AuraStraight carefully as it can be torn or punctured. Avoid contact with sharp or pointed objects.

Check that the pouch seal is intact before opening and discard Ambu AuraStraight if the pouch seal has been damaged.

Closely examine AuraStraight for any damage, such as perforation, scratches, cuts, tears, loose parts, sharp edges etc.

Make sure that the cuff protector has been removed from the cuff.

Check that the interior of the patient tube and the cuff are free from blockage and any loose parts. Do not use AuraStraight if it is blocked or damaged.

Deflate the cuff of AuraStraight completely. Once deflated, check the cuff thoroughly for any wrinkles or folds. Inflate the cuff to the volume as specified in Table 1. Check that the inflated cuff is symmetrical and smooth. There should not be any bulge nor any sign of leakage in the cuff, pilot tubing or pilot balloon. Deflate the cuff again before insertion.

3.2. Preparations for use

PRE-INSERTION PREPARATION

- Deflate the cuff completely so that the cuff is flat and free of wrinkles by pressing the cuff down onto a flat sterile surface (e.g., a piece of sterile gauze) while at the same time deflating the device with a syringe. ③
- Lubricate the posterior tip of the cuff prior to insertion by applying a sterile, water-based lubricant to the distal posterior surface of the cuff.
- Always have a spare Ambu AuraStraight ready for use.
- Pre-oxygenate and use standard monitoring procedures.
- Check that the level of anesthesia (or unconsciousness) is adequate before attempting insertion. The insertion should be successful at the same level of anesthesia that would be suitable for tracheal intubation.
- The head of the patient should be positioned extended with flexion of the neck in a position normally used for tracheal intubation (i.e., "the sniffing position").

3.3. Insertion

- Never use excessive force.
- Hold the Ambu AuraStraight like a pencil, with the index finger placed at the transition between the cuff and the patient tube. Your other hand should be placed under the patient's head. ④
- Insert the tip of the cuff pressing upwards against the hard palate and flatten the cuff against it. ⑤
- Verify that the tip of the cuff is flattened against the palate before proceeding – push the jaw gently downwards with your middle finger to open the mouth further.
- Ensure that the tip of the cuff avoids entering the valleculae or the glottic opening and does not become caught up against the epiglottis or the arytenoids. The cuff should be pressed against the patient's posterior pharyngeal wall.
- When the mask is in place, resistance will be felt.
- Before pulling back the hand holding the mask, the other hand is used to press down on the airway tube. This ensures that the Ambu AuraStraight stays in place when the finger is removed.
- After insertion ensure lips are not trapped between patient tube and teeth to avoid trauma to lips.

INSERTION PROBLEMS

- For pediatric patients, a partial rotational technique is recommended in case of placement difficulties.
- Coughing and breath-holding during Ambu AuraStraight insertion indicates inadequate depth of anesthesia – Immediately deepen anesthesia with inhalational or intravenous agents and initiate manual ventilation.
- If you cannot open the patient's mouth sufficiently to insert the mask, check that the patient is adequately anesthetized. Ask an assistant to pull the jaw downwards thus making it easier to see into the mouth and verify the position of the mask.
- For difficulty in maneuvering the angle at the back of the tongue when inserting AuraStraight, press the tip against the palate throughout or else the tip may fold on itself or meet an irregularity in the posterior pharynx, e.g., hypertrophied tonsils. Should the cuff fail to flatten or begin to curl over as it is inserted, withdraw the mask and reinsert it. In case of tonsillar obstruction, a diagonal movement of the mask is recommended.

3.4. Fixation

If deemed necessary, secure AuraStraight to the patient's face with adhesive tape or with a mechanical tube holder suited for this purpose. ⑦ It is recommended to use a gauze bite block.

3.5. Inflation

- Without holding the tube, inflate the cuff with just enough air to obtain a seal, equivalent to intracuff pressures of a maximum of 60 cm H₂O. ⑥ Often only half of the maximum volume is sufficient to achieve a seal – please refer to Table 1 for maximum intracuff volumes.
- Monitor the cuff pressure continuously during the surgical procedure with a cuff pressure gauge. This is especially important during prolonged use or when nitrous oxide gases are used.
- Look for the following signs of correct placement: The possible slight outward movement of the tube upon cuff inflation, the presence of a smooth oval swelling in the neck around the thyroid and cricoid area, or no cuff visible in the oral cavity.
- The mask may leak slightly for the first three or four breaths before settling into position in the pharynx. In case leakage persists, check that there is adequate depth of anesthesia and that the pulmonary inflation pressures are low before assuming that reinsertion of AuraStraight is necessary.

3.6. Verification of correct position

- Correct placement should produce a leak-free seal against the glottis with the tip of the cuff at the upper oesophageal sphincter.

- The vertical line on the patient tube should be oriented anteriorly towards the patient's nose.
 - AuraStraight is inserted correctly when the patient's incisors are between the two horizontal lines on the patient tube. ②, item 5. Reposition the mask if the patient's incisors are outside this range.
 - The position of AuraStraight can be assessed by capnography, by observation of changes in tidal volume (e.g., a reduction in expired tidal volume), by auscultating bilateral breath sounds and an absence of sounds over the epigastrium and/or by observing chest rise with ventilation. If you suspect that AuraStraight has been positioned incorrectly, remove and reinsert – and ensure that anesthetic depth is adequate.
 - Visual confirmation of anatomically correct position is recommended, e.g., by using a flexible scope.
- Apply suction through the mask's patient tube and through the mouth. Suction the tracheobronchial tree and inspect the bronchi using a flexible scope.

3.7. Usage with other devices/equipment ANESTHETIC SYSTEM AND VENTILATION BAG

The mask can be used for either spontaneous or controlled ventilation.

During anesthesia, nitrous oxide may diffuse into the cuff causing an increase in cuff volume/pressure. Adjust cuff pressure just enough to obtain an adequate seal (cuff pressure should not exceed 60 cm H₂O).

The anesthetic breathing system must be adequately supported when connected to AuraStraight to avoid rotation of the mask.

USAGE WITH SPONTANEOUS VENTILATION

AuraStraight is suitable for spontaneously breathing patients when used with volatile agents or intravenous anesthesia on condition that anesthesia is adequate to match the level of surgical stimulus and the cuff is not overinflated.

USAGE WITH POSITIVE PRESSURE VENTILATION

When applying positive pressure ventilation, ensure that the seal is adequate. To improve the seal the following is suggested:

- Optimize placement of AuraStraight by head turning or traction.
- Adjust the cuff pressure. Try both lower and higher pressures (a poor cuff seal may be caused by either too low or too high cuff pressure).
- If leakage should occur around the cuff, remove the mask and reinsert while ensuring that anesthetic depth is adequate.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MR)

AuraStraight is MR-safe.

3.8. Removal procedure

Removal should always be carried out in an area where suction equipment and the facility for rapid tracheal intubation are available.

Do not remove AuraStraight with the cuff fully inflated to prevent tissue trauma and laryngospasm.

3.9. Disposal

Dispose of used Ambu AuraStraight in a safe manner according to local procedures.

4.0. Specifications

Ambu AuraStraight is in conformity with ISO 11712 Anaesthetic and respiratory equipment – Supralaryngeal airways and connectors.

UNEXPECTED REGURGITATION:

- Regurgitation may be caused by inadequate level of anesthesia. The first signs of regurgitation may be spontaneous breathing, coughing or breath-holding.
- If regurgitation occurs, if oxygen saturation remains at acceptable levels, AuraStraight should not be removed. This should be managed by putting the patient in a "head-down" position. Briefly disconnect the anesthetic circuit so that the gastric contents are not forced into the lungs. Check that anesthetic depth is adequate and deepen anesthesia intravenously, if appropriate.

	Pediatric				Adult			
Mask Size	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Patient weight	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maximum intracuff volume	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
Maximum intracuff pressure	60 cm H ₂ O							
Connector	15 mm male (ISO 5356-1)							
Maximum instrument size*	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.5 mm	9.0 mm	9.5 mm	10.5 mm	11.0 mm
Inflation Valve Luer cone compatibility	Luer cone compatible with ISO 594-1 and ISO 80369-7 compliant equipment							
Appropriate storage condition	10 °C (50 °F) to 25 °C (77 °F)							
Approximate mask weight	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Internal volume of ventilatory pathway	4.3 ± 0.5 mL	5.7 ± 0.5 mL	7.1 ± 0.5 mL	10.2 ± 0.6 mL	13.4 ± 0.4 mL	15.3 ± 0.4 mL	20.6 ± 0.4 mL	22.2 ± 0.5 mL
Pressure drop as determined according to ISO 11712 annex C	0.4 cm H ₂ O at 15 L/min	0.3 cm H ₂ O at 15 L/min	0.4 cm H ₂ O at 30 L/min	0.3 cm H ₂ O at 30 L/min	0.4 cm H ₂ O at 60 L/min	0.4 cm H ₂ O at 60 L/min	0.3 cm H ₂ O at 60 L/min	0.3 cm H ₂ O at 60 L/min
Min. Interdental gap	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominal length of the Internal ventilatory pathway	10.2 ± 0.6 cm	11.8 ± 0.7 cm	13.4 ± 0.8 cm	15.3 ± 0.9 cm	17.1 ± 1.0 cm	17.6 ± 1.1 cm	19.6 ± 1.2 cm	20.8 ± 1.2 cm

Table 1: Specifications for Ambu AuraStraight.

* The maximum instrument size is intended as a guide for selecting the appropriate diameter of a device to be passed through the patient tube of AuraStraight.

A full list of symbol explanations can be found on <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Denmark. All rights reserved.

No part of this documentation may be reproduced in any form, including photocopying, without the prior written permission of the copyright owner.

1.1. Предназначение/ Показания за употреба

Изделието Ambu AuraStraight е предназначено за употреба като алтернатива на маска за лице за постигане и поддържане на по-добър контрол на проходимостта на дихателните пътища по време на рутинни и спешни анестетични процедури при пациенти на режим без прием на храна и течности.

1.2. Предвидена група потребители и среда на употреба

Медицински специалисти, обучени в обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища. Изделието AuraStraight е предназначено за използване в болнична среда.

1.3. Целева пациентска популация

Възрастни и педиатрични пациенти с тегло над 2 kg, оценени като отговарящи на условията за супраглотичен въздуховод.

1.4. Противопоказания

Не са известни.

1.5. Клинични ползи

Поддържа горните дихателни пътища отворени, за да позволи преминаването на газове.

1.6. Предупреждения и предпазни мерки

Преди поставяне е важно всички медицински специалисти, използващи Ambu AuraStraight, да са запознати с предупрежденията, предпазните мерки, показанията и противопоказанията, съдържащи се в инструкциите за употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1. Продуктът е предназначен за употреба само от медицински специалисти, обучени за обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища.
2. Винаги проверявайте продукта визуално и изпълнявайте функционален тест след разопаковане и преди употреба, съгласно раздел 3.1 „Подготовка преди употреба“, тъй като дефектите и чуждите тела могат да доведат до липса или намалено вентилиране на пациента, мукозни увреждания или инфекция на пациента. Не използвайте продукта, ако някоя от стъпките в подготовката преди употреба не е била успешна.
3. Не използвайте повторно AuraStraight за друг пациент, защото това е изделие за еднократна употреба. Повторното използване на контаминиран продукт може да доведе до инфекция.
4. AuraStraight не предпазва трахеята или белите дробове от риск от аспирация.
5. Не прилагайте прекомерна сила при поставяне и отстраняване на AuraStraight, тъй като това може да доведе до травма на тъканите.
6. Обемът или налягането на маншета могат да се променят при наличие на азотен оксид, кислород или други газове за медицинска употреба, които могат да доведат до травма на тъканите. Наблюдавайте постоянно налягането в маншета по време на хирургичната процедура.
7. Не използвайте AuraStraight в присъствието на лазери и електрокаутерно оборудване, тъй като това може да доведе до изгаряне на въздуховода и на тъканите.
8. Не извършвайте директна интубация през AuraStraight, тъй като ендотрахеалната (ЕТ) тръба може да заседне, което да доведе до недостатъчна вентилация.
9. По принцип AuraStraight трябва да се използва само при пациенти, които са в дълбоко безсъзнание и няма да окажат съпротива при поставянето.

10. Общата честота на усложненията при ларингеалната маска е ниска, но потребителят трябва да направи професионална преценка, когато решава дали използването на ларингеална маска ще бъде подходящо. Следните пациенти са изложени на по-висок риск от сериозни усложнения, включително аспирация и неадекватна вентилация:

- Пациенти с обструкция на горните дихателни пътища.
- Пациенти, които не са „на гладен стомах“ (включително случаите, при които не може да се потвърди гладуването).
- Пациенти, страдащи от горни стомашно-чревни проблеми (напр. езофагектомия, хиатална херния, гастроезофагеална рефлуксна болест, морбидно затлъстяване, бременност > 10 седмици).
- Пациенти, нуждаещи се от вентилация с високо налягане.
- Пациенти с патология на фаринкса/ларинкса, която може да усложни анатомичното прилягане на маската (напр. тумори, лъчетерапия на шията, засягаща хипофаринкса, тежка орофарингеална травма).
- Пациенти, при които устата не може да бъде отворена достатъчно, за да позволи поставяне.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Не накисвайте, изплаквайте или стерилизирайте това изделие, тъй като тези процедури може да оставят вредни остатъци или да причинят неизправност на изделието. Конструкцията и използваният материал не са съвместими с конвенционалните процедури за почистване и стерилизация.
2. Преди употреба винаги проверявайте съвместимостта на AuraStraight с външното изделие, за да избегнете употребата на изделия, които не могат да преминат през лумена на AuraStraight.
Налягането на маншета трябва да се поддържа възможно най-ниско, като се осигурява достатъчно уплътнение, и не трябва да надвишава 60 cm H₂O.
3. Всякакви признаци на проблеми с дихателните пътища или неадекватна вентилация трябва да се наблюдават редовно, а AuraStraight трябва да се репозиционира, поставя отново или заменя, когато е необходимо, за да се поддържат дихателните пътища на пациента проходими.
4. Винаги проверявайте повторно проходимостта на дихателните пътища след всяка промяна на позицията на главата или на врата на пациента.

1.7. Потенциални нежелани събития

Употребата на ларингеални маски е асоциирана с леки нежелани ефекти (напр. възпалено гърло, кървене, дисфония, дисфагия) и значителни нежелани ефекти (напр. регургитация/аспирация, ларингоспазъм, увреждане на нерви).

1.8. Общи бележки

Ако по време на употреба на това изделие или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган.

2.0. Описание на изделието

AuraStraight стерилна ларингеална маска за еднократна употреба, състояща се от извита пациентска тръба с надуваем маншет в дисталния край. Маншетът може да бъде надут през възвратния клапан, което позволява на пилотния балон да укаже състоянието на надуване/спадане. Маншетът приляга към контурите на хипофаринкса, а луменът му е обърнат към ларингеалния отвор на пациента. Върхът на маншета се притиска към горния езофагеален сфинктер, а проксималният му край се опира в основата на езика.

AuraStraight се предлага в 8 различни размера. Основните компоненти на AuraStraight са показани на фигура ①.

Фигура 1 (страница 4): Общ преглед на частите на AuraStraight:

- 1.** Конектор; **2.** Пациентска тръба; **3.** Маншет;
4. Възвратен клапан; **5.** Пилотен балон;
6. Пилотна тръба; **7.** Номинална дължина на вътрешния вентилационен път*.

* Вижте таблица 1 за номиналната дължина, дадена в сантиметри.

Фигура 2 (страница 4): Правилна позиция на AuraStraight по отношение на нейните части и анатомичните ориентри

- Части на AuraStraight:** **1.** Надуваем маншет; **2.** Маркировка за размер; **3.** Вентилационен отвор; **4.** Вентилационен път; **5.** Нормална дълбочина на маркировките за поставяне; **6.** Край за машина.

Анатомични ориентри: **A.** Езофагус; **B.** Трахея; **C.** Пръстеновиден хрущял; **D.** Тироиден хрущял; **E.** Гласни струни; **F.** Ларингеален вход; **G.** Епиглотис; **H.** Хиоидална кост; **I.** Език; **J.** Устна кухина; **K.** Назофаринкс; **L.** Резци.

СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ/ОБОРУДВАНЕ

AuraStraight може да се използва в комбинация с:

- Оборудване за вентилация; 15 mm конусни конектори в съответствие с ISO 5356-1.
- Изделия за обезпечаване на проходимостта на дихателните пътища; бронхоскопи и обменни катетри*.
- Други аксесоари; стандартна 6 % конична луерова спринцовка, манометър със стандартен 6 % конусен луеров конектор, смазване на водна основа, сукционен катетър.

Когато използвате инструменти през маската, се уверете, че инструментът е съвместим и добре смазан преди въвеждане.

* Вижте таблица 1 за информацията относно максималния размер на инструмента.

3.0. Използване на продукта

3.1. Подготовка преди употреба

ИЗБОР НА РАЗМЕР

Ambu AuraStraight се предлага в различни размери за употреба при пациенти с различно телло.

За педиатрични пациенти се препоръчва Ambu AuraStraight да се използва от медицински специалист, запознат с педиатричната анестезия.

Вижте указанията за избор и макс. вътрешно налягане в маншета в таблица 1, раздел 4.0. (Спецификации).

ИНСПЕКЦИЯ НА AURASTRAIGHT

Винаги носете ръкавици по време на подготовката и поставянето на Ambu AuraStraight, за да сведете до минимум контаминацията.

Работете внимателно с изделието AuraStraight, тъй като то може да се разкъса или пробие. Избягвайте контакт с остри или заострени предмети.

Проверете дали печатът на торбичката е непокътнат, преди да я отворите, и изхвърлете изделието Ambu AuraStraight, ако той е повреден.

Внимателно проверете AuraStraight за повреди, като пробиване, надрасквания, срязвания, разкъсвания, разхлабени части, остри ръбове и др.

Уверете се, че протекторът на маншета е отстранен от маншета.

Проверете дали във вътрешността на пациентската тръба и маншета няма запушване и разхлабени части. Не използвайте AuraStraight, ако изделието е запушено или повредено.

Изпуснете напълно маншета на AuraStraight. След изпускането маншетът трябва да се провери щателно за гънки или ръбове. Надуйте маншета до обема, посочен в таблица 1. Проверете дали надутият маншет е симетричен и гладък. Не трябва да има никакви издутини или какъвто и да е признак за изпускане на маншета, пилотната тръба или пилотния балон. Изпуснете маншета отново преди поставяне.

3.2. Подготовка за употреба ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПОСТАВЯНЕ

- Изпуснете маншета напълно, така че той да е гладък и без гънки, като го натиснете върху гладка стерилна повърхност (напр. парче стерилна марля), докато същевременно изпускате изделието със спринцовка. ③
- Смажете задния връх на маншета преди поставяне, като нанесете стерилен лубрикант на водна основа върху дисталната постериорна повърхност на маншета.
- Винаги имайте под ръка резервна маска Ambu AuraStraight, готова за употреба.
- Проведете предварителна оксигенация и използвайте стандартни процедури за мониторинг.
- Проверете дали нивото на анестезия (или безсъзнание) е достатъчно, преди да предприемете поставянето. Поставянето трябва да е успешно при същото ниво на анестезия, което би било подходящо за трахеална интубация.

- Главата на пациента трябва да бъде поставена изтеглена назад с флексия на врата в позицията, която обикновено се използва за трахеална интубация (т.е. „позиция на обдишване“).

3.3. Поставяне

- Никога не използвайте прекомерна сила.
- Дръжте Ambu AuraStraight като молив, като показалецът трябва да е поставен на прехода между маншета и пациентската тръба. Другата ви ръка трябва да бъде поставена под главата на пациента. ④
- Вкарайте върха на маншета, притискайки го нагоре към твърдото небце, и изравнете маншета с него. ⑤
- Уверете се, че върхът на маншета е изравнен към небцето, преди да продължите – натиснете леко челюстта надолу със средния си пръст, за да отворите устата допълнително.
- Внимавайте върхът на маншета да не попадне във валекулата или в глотиса и да не се запира в епиглотиса или аритеноидите. Маншетът трябва да се притисне към постериорната фарингеална стена на пациента.
- Когато маската е на място, ще се почувства съпротивление.
- Преди да издърпате назад ръката, която държи маската, с другата ръка натиснете надолу върху дихателната тръба. Това гарантира, че Ambu

AuraStraight ще остане на мястото си, когато пръстът бъде махнат.

- След поставяне се уверете, че устните не са притиснати между пациентската тръба и зъбите, за да избегнете травмиране на устните.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО

- За педиатрични пациенти се препоръчва частично ротационна техника в случай на затруднения при поставянето.
- Кашлицата и задържането на въздух по време на поставяне на Ambu AuraStraight показва недостатъчна дълбочина на анестезията – незабавно задълбочете анестезията с инхалационни или интравенозни агенти, и започнете ръчна вентилация.
- Ако не можете да отворите устата на пациента достатъчно, за да поставите маската, проверете дали пациентът е анестезиран адекватно. Поискайте асистент да издърпа челюстта надолу, за да се увеличи видимостта в устата и да се провери позицията на маската.
- Ако имате затруднения при маневрирането в задната част на езика при поставянето на AuraStraight, притиснете върха към небцето през цялото време, в противен случай върхът може да се огъне върху себе си или да срещне неравност в постериорната част на фаринкса, например

хипертрофирани сливици. Ако маншетът не се подравни или започне да се нагъва, докато се поставя, извадете маската и я поставете отново. В случай на тонзиларна обструкция се препоръчва диагонално движение на маската.

3.4. Фиксиране

Ако сметнете за необходимо, закрепете AuraStraight към лицето на пациента с лепенка или с механичен държач за тръба, подходящ за тази цел. ⑦ Препоръчително е да използвате марлен тампон за захапване.

3.5. Надуване

- Без да държите тръбата, надуйте маншета с достатъчно въздух, за да се получи уплътнение, еквивалентно на максималното налягане в маншета от 60 cm H₂O. ⑥ Често само половината от максималния обем е достатъчна за постигане на уплътнение – вижте таблица 1 за максималните обеми в маншета.
- Наблюдавайте налягането на маншета непрекъснато по време на хирургическата процедура с помощта на манометър за маншета. Това е особено важно при продължителна употреба или при използване на газове, съдържащи азотни оксиди.

- Следете за следните признаци за правилно поставяне: Възможност за леко движение на тръбата навън при надуването на маншета, наличие на гладка овална подутина на шията в областта на щитовидния и пръстеновидния хрущял, или липса на видим маншет в устната кухина.
- Маската може да изпусне леко при първите три или четири вдишвания, преди да се постави на позиция във фаринкса. В случай че изпускането продължава, проверете дали има достатъчна дълбочина на анестезия и дали наляганията на белодробното раздуване са ниски, преди да решите, че е необходимо повторно поставяне на AuraStraight.

3.6. Потвърждаване на правилната позиция

- Правилното поставяне трябва да направи уплътнение без изпускане към глотиса с върха на маншета при горния езофагеален сфинктер.
- Вертикалната линия на пациентската тръба трябва да е ориентирана антериорно към носа на пациента.
- Изделието AuraStraight е поставено правилно, когато резците на пациента се намират между двете хоризонтални линии на пациентската тръба. ②, позиция 5. Препозиционирайте маската, ако резците на пациента са извън този диапазон.
- Позицията на AuraStraight може да бъде оценена

чрез капнография, като се наблюдават промените в дихателния обем (напр. намаляване на издишания дихателен обем), чрез преслушване на двустранните шумове при дишане и отсъствие на шумове над епигаструма, както и/или чрез наблюдаване на повдигането на гръдния кош с вентилация. Ако подозирате, че изделието AuraStraight е поставено неправилно, отстранете го и го поставете повторно, като се уверите, че дълбочината на анестезия е адекватна.

- Препоръчва се визуално потвърждение за правилна анатомична позиция, например чрез използване на гъвкав ендоскоп.

НЕОЧАКВАНА РЕГУРГИТАЦИЯ:

- Регургитацията може да бъде причинена от недостатъчно ниво на анестезия. Първите признаци за регургитация може да са спонтанно дишане, кашлица или задържане на дъха.
- При възникване на регургитация, ако кислородната сатурация остава на приемливи нива, AuraStraight не трябва да се отстранява. Това трябва да се овладее чрез поставяне на пациента в позиция с главата надолу. За кратко време разкачете анестетичната верига, така че стомашното съдържание да не се изтласка в белите дробове. Проверете дали дълбочината на анестезия е достатъчна и увеличете анестезията интравенозно, ако е необходимо.

- Приложете сукция (аспирирайте) през пациентската тръба на маската и през устата. Направете сукция на трахеята и бронхиалното дърво и инспектирайте бронхите с помощта на гъвкав ендоскоп.

3.7. Използване с други изделия/оборудване АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА СИСТЕМА И БАЛОН ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

Маската може да се използва както за спонтанна, така и за контролирана вентилация.

По време на анестезия азотният оксид може да се разпръсне в маншета и да доведе до увеличаване на обема/налягането на маншета. Регулирайте налягането на маншета, докато постигнете достатъчно уплътнение (налягането на маншета не трябва да надвишава 60 cm H₂O).

Анестезиологичната дихателна система трябва да бъде поддържана адекватно, когато е свързана към AuraStraight, за да се избегне завъртане на маската.

ИЗПОЛЗВАНЕ СЪС СПОНТАННА ВЕНТИЛАЦИЯ

Изделието AuraStraight е подходящо за пациенти със спонтанно дишане, когато се използва с летливи агенти или интравенозна анестезия, при условие че нивото на

анестезията е адекватно на хирургичната интервенция и маншетът не е прекалено надут.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ВЕНТИЛАЦИЯ С ПОЛОЖИТЕЛНО НАЛЯГАНЕ

Когато прилагате вентилация с положително налягане, се уверете, че уплътнението е достатъчно. За подобряване на уплътнението се предлага следното:

- Оптимизирайте поставянето на AuraStraight чрез завъртане на главата или тракция.
- Регулирайте налягането на маншета. Опитайте както по-ниско, така и по-високо налягане (лошото уплътняване на маншета може да се дължи на прекалено ниско или твърде високо налягане на маншета).
- Ако около маншета се появи изпускане на газове, свалете маската и я поставете отново, като се уверите, че дълбочината на анестезията е достатъчна.

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (МР)

Изделието AuraStraight е безопасно за употреба в МР среда.

3.8. Процедура за отстраняване

Отстраняването трябва винаги да се извършва на място, където е налично сукционно оборудване и има възможност за бърза трахеална интубация.

Не отстранявайте AuraStraight с напълно надут маншет, за да се предотврати травма на тъканите и ларингоспазъм.

3.9. Изхвърляне

Изхвърлете използваното изделие Ambu AuraStraight по безопасен начин съгласно местните процедури.

4.0. Спецификации

Ambu AuraStraight е в съответствие с ISO 11712 за анестезиологично и респираторно оборудване – супраларингеални въздуховоди и конектори.

Размер на маската	Деца				Възрастни			
	№ 1	№ 1½	№ 2	№ 2½	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Тегло на пациента	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Максимален обем в маншета	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Максимално налягане в маншета	60 cm H ₂ O							
Конектор	15 mm мъжки (ISO 5356-1)							
Максимален размер на инструмента*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Съвместимост на луеровия конус на вентила за надуване	Луеров конус, съвместим с отговарящо на ISO 594-1 и ISO 80369-7 оборудване							
Подходящи условия на съхранение	10°C (50°F) до 25°C (77°F)							
Приблизително тегло на маската	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Вътрешен обем на вентилационния път	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Спад на налягането, определен съгласно ISO 11712, приложение С	0,4 cm H ₂ O при 15 l/min	0,3 cm H ₂ O при 15 l/min	0,4 cm H ₂ O при 30 l/min	0,3 cm H ₂ O при 30 l/min	0,4 cm H ₂ O при 60 l/min	0,4 cm H ₂ O при 60 l/min	0,3 cm H ₂ O при 60 l/min	0,3 cm H ₂ O при 60 l/min
Мин. междузъбно пространство	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Номинална дължина на вътрешния вентилационен път	10,2 ±0,6 cm	11,8 ±0,7 cm	13,4 ±0,8 cm	15,3 ±0,9 cm	17,1 ±1,0 cm	17,6 ±1,1 cm	19,6 ±1,2 cm	20,8 ±1,2 cm

Таблица 1: Спецификации на Ambu AuraStraight.

* Максималният размер на инструмента е предназначен като ориентир за избор на подходящия диаметър на изделието, което се прекарва през пациентската тръба на AuraStraight.

Пълен списък на обясненията на символите можете да намерите на <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© 2021 Ambu A/S, Дания. Всички права запазени.

Никаква част от тази документация не може да бъде възпроизвеждана в каквато и да било форма, включително фотокопиране, без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права.

1.1. Určené použití/ Indikace k použití

Maska Ambu AuraStraight je určena k použití jako alternativa obličejové masky k zajištění a udržení průchodnosti dýchacích cest během rutinních a urgentních anestetických postupů u lačních pacientů.

1.2. Určení uživatelé a prostředí určeného použití

Zdravotničtí pracovníci vyškolení v oblasti zajištění dýchacích cest.

Maska AuraStraight je určena k použití v nemocničním prostředí.

1.3. Určená populace pacientů

Dospělí a dětská pacientí od 2 kg výše, kteří jsou posouzeni jako vhodní pro použití supraglotické pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest.

1.4. Kontraindikace

Žádné nejsou známe.

1.5. Klinické přínosy

Udrží horní dýchací cesty průchodné pro plyny.

1.6. Varování a upozornění

Před zavedením je nezbytné, aby se všichni zdravotničtí pracovníci používající masku Ambu AuraStraight seznámili s varováními, preventivními opatřeními, indikacemi a kontraindikacemi uvedenými v *návodu k použití*.

VAROVÁNÍ



1. Výrobek je určen k použití pouze zdravotnickými pracovníky vyškolenými v postupech pro zajištění dýchacích cest.
2. Po vybalení a před použitím výrobek vždy nejprve vizuálně zkontrolujte a proveďte test funkčnosti v souladu s oddílem 3.1 Příprava před použitím, neboť vady a cizí látky mohou znemožnit nebo omezit ventilaci pacienta, způsobit poškození sliznice, případně mohou vést k infekci pacienta. Nepoužívejte výrobek, pokud neproběhne úspěšně kterýkoli z kroků provedených v rámci přípravy.
3. Masku AuraStraight nepoužívejte opakovaně u jiného pacienta, neboť se jedná o prostředek pro jedno použití. Opakované použití kontaminovaného prostředku může vést k infekci.
4. Masku AuraStraight nechrání tracheu ani plíce před nebezpečím aspirace.
5. Při zavádění a vyjímání masky AuraStraight nepoužívejte nadměrnou sílu, neboť by tím mohlo dojít k poranění tkáně.
6. Objem či tlak manžety se mohou měnit působením oxidu dusného, kyslíku nebo jiných lékařských plynů, což může mít za následek poranění tkáně. Dbejte na to, abyste během chirurgického výkonu průběžně monitorovali tlak v manžetě.

7. Masku AuraStraight nepoužívejte v přítomnosti laserů a elektrokauterizačních zařízení, jelikož by to mohlo vést ke vznícení a popálení tkáně v dýchacích cestách.
8. Neprovádějte přímou intubaci maskou AuraStraight, jelikož endotracheální (ET) trubice se v ní může zaseknout a způsobit nedostatečnou ventilaci.
9. Obecně by maska AuraStraight měla být používána pouze u pacientů, kteří jsou v hlubokém bezvědomí a nebudou při jejím zavádění klást odpor.
10. Celková míra komplikací je u laryngeální masky nízká, při rozhodování o vhodnosti jejího použití by však uživatel měl spoléhat na odborný úsudek. U níže uvedených pacientů existuje vyšší riziko závažných komplikací, včetně aspirace a nedostatečné ventilace:
 - Pacienti s obstrukcí horních cest dýchacích.
 - Nelační pacienti (včetně případů, kdy lačnění nelze potvrdit).
 - Pacienti trpící problémy v horní části gastrointestinálního traktu (např. esofagektomie, hiátová hernie, gastroesofageální reflux, morbidní obezita, těhotenství > 10 týdnů).
 - Pacienti vyžadující vysokotlakou ventilaci.
 - Pacienti s faryngeální/laryngeální patologií, jež může potenciálně zkomplikovat anatomický tvar masky (např. tumory, radioterapie krku zahrnující hypofarynx, závažné orofaryngeální trauma).
 - Pacienti s nedostatečně velkým ústním otvorem pro zavedení masky.

UPOZORNĚNÍ

1. Zdravotnický prostředek nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, jelikož tyto postupy na něm mohou zanechávat škodlivá rezidua anebo způsobit jeho poruchu. Provedení a použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními postupy čištění a sterilizace.
2. Před použitím vždy zkontrolujte kompatibilitu masky AuraStraight a externího prostředku, abyste předešli situaci, kdy zvolený prostředek neprojde lumen masky AuraStraight.
3. Tlak manžety by měl být udržován co nejnižší při zachování dostatečného utěsnění a neměl by překročit 60 cm H₂O.
4. Je nutné pravidelně monitorovat případné známky problémů s dýchacími cestami nebo nedostatečné ventilace a v zájmu zachování průchodnosti dýchacích cest je nezbytné upravit polohu masky AuraStraight, opětovně ji zavést nebo vyměnit za jinou.
5. Po jakékoli změně polohy pacientovy hlavy nebo krku ověřte průchodnost dýchacích cest.

1.7. Potenciální nepříznivé události

Použití laryngeálních masek je spojeno s mírnými nežádoucími účinky (např. bolestí v krku, krvácením, dysfonií, dysfagií) a s výraznými nežádoucími účinky (např. regurgitací/aspirací, laryngospasmem, poraněním nervů).

1.8. Obecné poznámky

Jestliže v průběhu anebo v důsledku použití tohoto zdravotnického prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému národnímu úřadu.

2.0. Popis prostředku

AuraStraight je sterilní laryngeální maska pro jedno použití sestávající ze zahnuté pacientské trubice s nafukovací manžetou na distálním konci. Manžetu lze nafouknout pomocí jednosměrného ventilu, díky čemuž může pilotní balónek ukazovat stav nafouknutí/vyfouknutí. Manžeta se přizpůsobí tvaru hypofaryngu a její lumen směřuje ke vchodu do hrtanu pacienta. Špička manžety se opírá o horní jícnový svěrač a její proximální konec spočívá na kořeni jazyka.

Maska AuraStraight je dostupná v 8 různých velikostech. Hlavní součásti masky AuraStraight jsou znázorněny na obrázku ①.

Obrázek 1 (strana 4): Přehled součástí masky AuraStraight:

1. Konektor; 2. Pacientská trubice; 3. Manžeta; 4. Jednosměrný ventil; 5. Pilotní balónek; 6. Pilotní trubice; 7. Jmenovitá délka vnitřní ventilační dráhy.*
- * Jmenovitá délka v centimetrech viz tabulka 1.

Obrázek 2 (strana 4): Správná poloha masky AuraStraight vzhledem k jejím součástem a anatomickým orientačním bodům

Součásti masky AuraStraight: 1. Nafukovací manžeta; 2. Označení velikosti; 3. Ventilační otvor; 4. Ventilační dráha; 5. Normální hloubka značek pro zavedení; 6. Konec prostředku.

Anatomické orientační body: A. Esofagus; B. Trachea; C. Prstencová chrupavka; D. Štítná chrupavka; E. Hlasivky; F. Laryngeální aditus; G. Epiglottis; H. Jazyk; I. Jazyk; J. Dutina ústní; K. Nosohltan; L. Řezáky.

KOMPATIBILITA S JINÝMI PROSTŘEDKY/VYBAVENÍM

Masku AuraStraight lze použít v kombinaci s následujícími:

- Ventilační přístroje; kónické spojky 15 mm v souladu s normou ISO 5356-1.
- Prostředky pro zajištění dýchacích cest; bronchoskopy a výměnné katétry.*
- Další příslušenství; standardní kónická 6 % stříkačka Luer, manometr se standardním 6 % kónickým konektorem Luer, lubrikant na vodní bázi, odsávací katétr.

Před zaváděním nástrojů skrze masku se nejprve ujistěte, že je nástroj kompatibilní a dostatečně lubrikovaný.

* Informace o maximální velikosti nástrojů naleznete v tabulce 1.

3.0. Použití prostředku

3.1. Příprava před použitím

VOLBA VELIKOSTI

Maska Ambu AuraStraight je dostupná v různých velikostech pro použití u pacientů s různou hmotností.

U dětských pacientů je doporučeno, aby masku Ambu AuraStraight použil zdravotnický pracovník obeznámený s pediatrickou anestezií.

Pokyny pro výběr a hodnoty max. tlaku v manžetě naleznete v tabulce 1 v části 4.0. (Specifikace).

KONTROLA MASKY AURASTRAIGHT

Během přípravy a zavádění masky Ambu AuraStraight vždy používejte rukavice, abyste minimalizovali kontaminaci.

S maskou AuraStraight zacházejte opatrně, jelikož by mohlo dojít k jejímu protržení nebo propíchnutí. Vyvarujte se kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty.

Před otevřením zkontrolujte, zda není porušen uzávěr obalu, a pokud je porušený, masku Ambu AuraStraight zlikvidujte.

Pečlivě zkontrolujte, zda maska AuraStraight nevykazuje známky poškození, jako např. perforace, škrábance, proříznutí, trhliny, uvolněné části, ostré hrany atd.

Dbejte na to, aby byl z manžety odstraněn její chránič.

Zkontrolujte, zda vnitřní část patientské trubice a manžety nejsou zablokované a zda nejsou přítomny uvolněné části. Je-li maska AuraStraight zablokovaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Zcela vyfoukněte manžetu masky AuraStraight. Po vyfouknutí důkladně zkontrolujte, zda na manžetě nejsou

přítomny přehyby nebo zvrásnění. Nafoukněte manžetu na objem uvedený v tabulce 1. Zkontrolujte, zda je nafouknutá manžeta symetrická a hladká. Na manžetě, pilotní trubici a balónku by neměly být patrné známky vyboulení nebo netěsnosti. Před zavedením manžetu znovu vyfoukněte.

3.2. Příprava pro použití PŘÍPRAVA PŘED ZAVEDENÍM

- Manžetu zcela vyfoukněte, aby byla plochá a nedošlo k jejímu zvrásnění, čehož dosáhnete jejím přitlačením na rovný sterilní povrch (např. na kus sterilní gázy) a současným vypuštěním za použití stříkačky. ③
- Před zavedením proveďte lubrikaci zadního konce manžety tak, že aplikujete sterilní lubrikant na bázi vody na zadní povrch na distálním konci manžety.
- Vždy mějte připravenou náhradní masku Ambu AuraStraight pro okamžité použití.
- Proveďte preoxygenaci a použijte standardní monitorovací postupy.
- Před pokusem o zavedení zkontrolujte, zda je úroveň anestezie (nebo bezvědomí) dostatečná. Zavedení by mělo být úspěšné při stejné úrovni anestezie, jež je vhodná pro tracheální intubaci.
- Poloha pacientovy hlavy by měla být flexí krku upravena do předsunuté pozice běžně používané pro tracheální intubaci (tzv. čichací poloha).

3.3. Zavedení

- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Masku Ambu AuraStraight uchopte podobně jako tužku s ukazováčkem položeným na přechod mezi manžetou a pacientskou trubicí. Druhou ruku podsuňte pod pacientovu hlavu. ④
- Konec manžety zavádějte tak, že ho přitlačíte k tvrdému patru a vyrovnáte. ⑤
- Před pokračováním se ujistěte se, že je konec manžety rovnoměrně rozprostřený na patře, poté prostředníkem jemně zatlačte čelist směrem dolů, aby se více rozevřela ústa.
- Dbejte na to, aby se konec manžety nedostal do vallecul nebo rima glottidis a nezachytil se o epiglottis nebo arytenoidy. Manžeta by měla být přitisknuta k zadní stěně faryngu.
- Po správném umístění masky by měl být citelný odpor.
- Před vytažením ruky, v níž jste drželi masku, druhou rukou zatlačte na vzduchovou trubicí. Tím zajistíte, aby maska Ambu AuraStraight zůstala po odstranění prstu na svém místě.
- Po zavedení ověřte, zda rty pacienta nejsou zachyceny mezi pacientskou trubicí a zuby, aby nedošlo k jejich poranění.

PROBLÉMY PŘI ZAVÁDĚNÍ

- U dětských pacientů se v případě obtíží se správným umístěním doporučuje použít techniku částečné rotace.
- Kašel a zadržování dechu během zavádění masky Ambu AuraStraight indikuje nedostatečně hlubokou úroveň anestezie. Neprodleně zajistěte prohloubení anestezie inhalačními nebo intravenózními anestetiky a zahajte manuální ventilaci.
- Jestliže nemůžete dostatečně rozevřít pacientova ústa pro zavedení masky, ověřte, zda je úroveň anestezie odpovídající. Asistenta požádejte o stlačení čelisti pacienta dolů, abyste lépe viděli do úst pacienta a mohli ověřit polohu masky.
- Vyskytnou-li se obtíže při zavádění masky AuraStraight a manévrování s ní v úhlu kolem zadní části jazyka, konec přitlačte k patru po celé jeho délce, jinak se může přehnout, případně může narazit na nepravidelnost v zadním faryngu, jako např. při hypertrofii tonsil. Pokud se manžeta při zavádění nezploští nebo se začne rolovat, vytáhněte ji a zaveďte znovu. V případě tonsilární obstrukce je doporučeno provést diagonální posun masky.

3.4. Fixace

Podle potřeby masku AuraStraight k obličejí pacienta fixujte lepicí páskou nebo mechanickým držákem trubic vhodným pro tento účel. ⑦ Je doporučeno použít skusový blok z gázy.

3.5. Nafouknutí

- Bez držení trubice nafoukněte manžetu dostatečným množstvím vzduchu, abyste dosáhli utěsnění odpovídajícího tlaku v manžetě 60 cm H₂O. ⑥ K dosažení těsnosti často stačí pouze polovina maximálního objemu – maximální objemy manžety naleznete v tabulce 1.
- Tlak v manžetě během chirurgického výkonu průběžně monitorujte pomocí tlakoměru manžety. To je zvláště důležité při delším použití, případně při aplikaci plynů oxidu dusného.
- Pozornost věnujte následujícím známkám správné polohy: Možný mírný pohyb trubice směrem ven při nafukování manžety, přítomnost hladkého oválného otoku v krku v oblasti štítné a prstencové chrupavky, případně neviditelná manžeta v dutině ústní.
- Během prvních tří nebo čtyř dechů může maska lehce unikat, než se usadí ve své poloze v hltanu. Jestliže únik přetrvává, ověřte, zda je anestezie dostatečně hluboká a zda tlaky plicní inflace jsou nízké, než začnete uvažovat o nezbytném znovuzavedení masky AuraStraight.

3.6. Ověření správné polohy

- Při správné poloze by mělo být dosaženo utěsnění glottis s koncem manžety u horního jícnového svěrače.

- Vertikální čára na patientské trubici by měla být orientována anteriorně k nosu pacienta.
- Masky AuraStraight je zavedena správně, když se pacientovy řezáky nacházejí mezi dvěma vodorovnými čarami na patientské trubici. ②, položka 5. Jsou-li pacientovy řezáky mimo tento rozsah, upravte polohu masky.
- Polohu masky AuraStraight lze posoudit za použití kapnografie, sledováním změn dechového objemu (např. snížení exspirovaného dechového objemu), auskultací bilaterálních dechových zvuků a absencí zvuků v oblasti epigastria, případně pozorováním zvedání hrudníku při ventilaci. Jestliže máte podezření, že poloha masky AuraStraight není správná, vyjměte ji a znovu zaveďte, zároveň ověřte adekvátní hloubku anestezie.
- Anatomicky správnou polohu je doporučeno ověřit vizuálně, např. pomocí flexibilního endoskopu.

NÁHLÁ REGURGITACE:

- Regurgitace může být způsobena nedostatečnou úrovní anestezie. Prvními příznaky regurgitace mohou být spontánní dýchání, kašel nebo zadržování dechu.
- Při výskytu regurgitace by maska AuraStraight neměla být vyjmuta za předpokladu, že saturace kyslíkem zůstává na přijatelné úrovni. Toho lze dosáhnout umístěním pacienta do polohy „hlavou dolů“. Dočasně odpojte anestetický okruh, aby obsah žaludku nepronikl do plic. Zkontrolujte, zda je hloubka anestezie dostatečná a podle potřeby proveďte její prohloubení.

- Patientskou trubici masky a ústy pacienta proveďte sání. Odsajte tracheobronchiální strom a flexibilním endoskopem proveďte kontrolu průdušek.

3.7. Použití s jinými prostředky/vybavením ANESTETICKÝ SYSTÉM A VENTILAČNÍ VAK

Maska může být použita buď při spontánní, nebo řízené ventilaci.

Během anestezie může oxid dusný proniknout do manžety a způsobit zvýšení jejího objemu/tlaku. Tlak manžety nastavte natolik, aby bylo dosaženo dostatečného utěsnění (tlak manžety by neměl překročit 60 cm H₂O).

Anestetický dýchací systém musí mít po připojení k masce AuraStraight adekvátní oporu, aby se předešlo rotaci masky.

POUŽITÍ PŘI SPONTÁNNÍ VENTILACI

Maska AuraStraight je vhodná pro spontánně dýchající pacienty při použití s těkavými látkami nebo intravenózní anestezii pod podmínkou, že je anestezie dostatečná pro danou úroveň chirurgického stimulu a že manžeta není přehušťená.

POUŽITÍ PŘI PŘETLAKOVÉ VENTILACI

V případě použití přetlakové ventilace ověřte dostatečné utěsnění. Pro zvýšení těsnosti je doporučeno následující:

- Optimalizujte polohu masky AuraStraight otočením nebo trakcí hlavy.

- Upravte tlak v manžetě. Vyzkoušejte jak nižší, tak i vyšší tlak (nedostatečné utěsnění manžety může být způsobeno příliš nízkým nebo naopak příliš vysokým tlakem v manžetě).
- Vyskytne-li se netěsnost kolem manžety, masku vyjměte a znovu zaveďte, zároveň ověřte adekvátní hloubku anestezie.

MAGNETICKÁ REZONANCE (MR)

Maska AuraStraight je bezpečná pro MR.

3.8. Postup při vyjímání

Vyjímání by mělo být vždy prováděno v místě, kde je k dispozici odsávací zařízení a prostředky pro rychlou tracheální intubaci.

Neodstraňujte masku AuraStraight s plně nafouknutou manžetou, abyste předešli poranění tkáně a laryngospasmu.

3.9. Likvidace

Použitou masku Ambu AuraStraight zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními postupy.

4.0. Specifikace

Maska Ambu AuraStraight je ve shodě s britskou technickou normou ISO 11712 Anaesthetic and respiratory equipment – Supralaryngeal airways and connectors.

	Děti				Dospělí			
Velikost masky	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Hmotnost pacienta	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Maximální objem manžety	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximální tlak v manžetě	60 cm H ₂ O							
Konektor	15 mm samec (ISO 5356-1)							
Maximální velikost nástroje*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilita kuželu Luer nafukovacího ventilu	Kužel Luer kompatibilní se zařízeními splňujícími požadavky norem ISO 594-1 a ISO 80369-7							
Vhodné podmínky pro skladování	10 °C (50 °F) až 25 °C (77 °F)							
Přibližná hmotnost masky	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Vnitřní objem ventilační dráhy	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Pokles tlaku stanovený podle přílohy C normy ISO 11712	0,4 cm H ₂ O při 15 l/min	0,3 cm H ₂ O při 15 l/min	0,4 cm H ₂ O při 30 l/min	0,3 cm H ₂ O při 30 l/min	0,4 cm H ₂ O při 60 l/min	0,4 cm H ₂ O při 60 l/min	0,3 cm H ₂ O při 60 l/min	0,3 cm H ₂ O při 60 l/min
Min. mezizubní mezera	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Jmenovitá délka vnitřní ventilační dráhy	10,2 ±0,6 cm	11,8 ±0,7 cm	13,4 ±0,8 cm	15,3 ±0,9 cm	17,1 ±1,0 cm	17,6 ±1,1 cm	19,6 ±1,2 cm	20,8 ±1,2 cm

Tabulka 1: Specifikace pro masku Ambu AuraStraight.

* Maximální velikost nástroje je určena jako pomůcka pro usnadnění výběru odpovídajícího průměru prostředku, který má být zaveden patientskou trubicí masky AuraStraight.

Úplný seznam vysvětlivek k symbolům naleznete na adrese <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dánsko. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována jakýmkoli způsobem, včetně pořízení fotokopii, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka copyrightu.

1.1. Tilsigtet anvendelse/ Indikationer for brug

Ambu AuraStraight er beregnet til anvendelse som et alternativ til en ansigtsmaske samt for at opnå og opretholde luftvejskontrol under rutinemæssige og akutte anæstesi-procedurer hos fastende patienter.

1.2. Tilsigtede brugere og brugsmiljø

Sundhedsfagligt personale, der er uddannet i luftvejshåndtering.
AuraStraight er beregnet til brug på hospitaler.

1.3. Tilsigtet patientpopulation

Voksne og pædiatriske patienter fra 2 kg og derover, der er vurderet egnede til en supraglottisk luftvej.

1.4. Kontraindikationer

Ingen kendte.

1.5. Kliniske fordele

Holder de øvre luftveje åbne for at tillade passage af gasser.

1.6. Advarsler og forsigtighedsregler

Før indføring er det vigtigt, at alt sundhedsfagligt personale, der bruger Ambu AuraStraight, er bekendt med de advarsler, forholdsregler, indikationer og kontraindikationer, der er anført i *brugsanvisningen*.

ADVARSLER



1. Produktet er kun beregnet til at blive anvendt af sundhedsfagligt personale, der er uddannet i luftvejshåndtering.
2. Kontrollér altid produktet visuelt, og udfør en funktionstest efter udpakning og før brug iht. afsnit 3.1 Klargøring før brug, da defekter og fremmedlegemer kan føre til ingen eller nedsat ventilation af, mukosal skade på eller infektion af patienten. Brug ikke produktet, hvis nogen af trinnene i Klargøring før brug mislykkes.
3. AuraStraight må ikke genbruges på en anden patient, da det er et engangsprodukt. Genbrug af et kontamineret produkt kan medføre infektion.
4. AuraStraight beskytter ikke trachea eller lungerne mod risikoen for aspiration.
5. Anvend ikke overdreven kraft ved indføring og fjernelse af AuraStraight, da dette kan føre til vævstraume.
6. Cuff-volumet eller -trykket kan ændre sig i nærvær af nitrogenoxid, oxygen eller andre medicinske gasarter, hvilket kan føre til vævstraume. Sørg for at overvåge cufftrykket kontinuerligt under det kirurgiske indgreb.
7. AuraStraight må ikke anvendes i nærheden af lasere og elektrokauterisationsudstyr, da dette kan medføre brand i luftvejene og vævsforbrændinger.

8. Udfør ikke direkte intubation gennem AuraStraight, da den endotrakeale tube (ET) kan sætte sig fast og føre til utilstrækkelig ventilation.
9. Generelt bør AuraStraight kun anvendes til patienter, som er dybt bevidstløse og ikke vil yde modstand mod indføring.
10. Den samlede komplikationsrate for larynxmasken er lav, men brugeren skal udvise professionel dømmekraft, når det skal besluttes, om brugen af larynxmaske vil være hensigtsmæssig. Følgende patienter har større risiko for alvorlige komplikationer, herunder aspiration og utilstrækkelig ventilation:
 - Patienter med øvre luftvejsobstruktion.
 - Ikke-fastende patienter (herunder de tilfælde, hvor faste ikke kan bekræftes).
 - Patienter med øvre gastrointestinale problemer (f.eks. øsofagektomi, hiatushernie, gastroøsofageal refluxsygdom, svær fedme, graviditet >10 uger).
 - Patienter, der har behov for højtryksventilation.
 - Patienter med faryngeal/laryngeal patologi, der potentielt komplicerer maskens anatomiske pasform (f.eks. tumorer, strålebehandling af halsen, der involverer hypofarynx, alvorligt orofaryngealt traume).
 - Patienter med utilstrækkelig mundåbning til indføring.

FORSIGTIGHEDSREGLER

1. Udstyret må ikke lægges i væske, skylles eller steriliseres, da det kan efterlade skadelige rester eller forårsage funktionsfejl. Udformning og materiale egner sig ikke til traditionelle rengørings- og sterilisationsmetoder.
2. Før brug skal det altid kontrolleres, at AuraStraight er kompatibel med den eksterne enhed for at undgå, at der anvendes anordninger, der ikke kan passere gennem AuraStraights' lumen.
3. Cufftrykket skal holdes så lavt som muligt, mens der stadig opnås tilstrækkelig forsegling, og må ikke overstige 60 cm H₂O.
4. Tegn på luftvejsproblemer eller utilstrækkelig ventilation skal monitoreres regelmæssigt, og AuraStraight skal flyttes, genindsættes eller udskiftes efter behov for at opretholde frie luftveje.
5. Bekræft altid frie luftveje efter enhver ændring i patientens hoved- eller halsstilling.

1.7. Potentielle utilsigtede hændelser

Brugen af larynxmasker er forbundet med mindre bivirkninger (f.eks. ondt i halsen, blødning, dysfoni, dysfagi) og større bivirkninger (f.eks. tilbageløb/aspiration, laryngospasme, nerveskade).

1.8. Generelle bemærkninger

Hvis der sker en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som resultat af brugen af den, bedes det indberettet til producenten og til den nationale myndighed.

2.0. Beskrivelse af udstyret

AuraStraight er en steril larynxmaske til engangsbrug, der består af en patienttube med en oppustelig cuff i den distale ende. Cuffen kan inflateres gennem kontraventilen, så pilotballonen angiver inflations-/deflationsstatus. Cuffen former sig efter hypofarynx' konturer og med lumen vendt mod patientens larynxåbning. Cuffens spids presser mod den øvre øsophageale lukkemuskel, og cuffens proximale ende hviler mod tungeroden.

AuraStraight fås i 8 forskellige størrelser.

Hovedkomponenterne i AuraStraight ses i figur ①.

Figur 1 (side 4): Oversigt over AuraStraight-dele:

1. Konnektor, 2. Patienttube, 3. Cuff, 4. Kontraventil, 5. Pilotballon, 6. Pilotslange, 7. Nominel længde af intern ventilationsvej*.

* Se tabel 1 for den nominelle længde angivet i centimeter.

Figur 2 (side 4): Korrekt placering af AuraStraight i forhold til AuraStraight-dele og anatomiske orienteringspunkter

AuraStraight-dele: 1. Oppustelig cuff, 2. Størrelsesmærkning, 3. Ventilationsåbning, 4. Ventilationsveje, 5. Normal dybde på indføringsmærker, 6. Maskinende.

Anatomiske orienteringspunkter A. Spiserør; B. Trachea; C. Cricoid ring; D. Thyroideabrusk; E. Stemmehånd; F. Larynxindløb; G. Epiglottis; H. Hyoidben; I. Tunge; J. Bukkal kavitet; K. Næsesevæg; L. Fortænder.

KOMPATIBILITET MED ANDRE ENHEDER/UDSTYR

AuraStraight kan anvendes sammen med:

- Ventilationsudstyr; 15 mm koniske konnektorer i overensstemmelse med ISO 5356-1.
- Anordninger til luftvejshåndtering; bronkoskoper og exchange-katetre*.

- Andet tilbehør: 6 % standard konisk Luer-sprøjte, manometer med 6 % standard konisk Luer-konnektor, vandbaseret smøring, sugekateter.

Når instrumenter anvendes gennem masken, skal det sikres, at instrumentet er kompatibelt og velsmurt før indføring.

* Se tabel 1 for oplysninger om maksimal instrumentstørrelse.

3.0. Anvendelsesområde

3.1. Klargøring før brug

STØRRELSESUDVALG

Ambu AuraStraight fås i forskellige størrelser til brug hos patienter med forskellig vægt.

Til pædiatriske patienter anbefales det, at Ambu AuraStraight anvendes af en sundhedsfaglig person, der er bekendt med pædiatrisk anæstesi.

Se udvælgelsesvejledning og maks. intracuff-tryk i tabel 1, afsnit 4.0. (Specifikationer).

KONTROL AF AURASTRAIGHT

Bær altid handsker under klargøring og indføring af Ambu AuraStraight for at minimere kontaminering.

AuraStraight skal håndteres forsigtigt, da den kan blive revet i stykker eller punkteret. Undgå kontakt med skarpe eller spidse genstande.

Kontrollér, at posens forsegling er intakt, før den åbnes, og kassér Ambu AuraStraight, hvis posens forsegling er beskadiget.

Undersøg AuraStraight nøje for eventuelle skader, såsom perforation, ridser, snit, flænger, løse dele, skarpe kanter osv.

Sørg for, at cuffbeskytteren er taget af cuffen.

Kontrollér, at det indre af patienttuben og cuffen er fri for blokering og løse dele. AuraStraight må ikke anvendes, hvis den er blokeret eller beskadiget.

Deflater AuraStraights cuff fuldstændigt. Når cuffen er helt deflateret, skal den kontrolleres grundigt for rynker eller folder. Inflatér cuffen til den volumen, der er angivet i tabel 1. Kontrollér, at den inflaterede cuff er symmetrisk og glat. Der må ikke være udbuling eller tegn på lækage i cuffen, pilot-slangen eller pilotballonen. Deflater cuffen igen før indføring.

3.2. Klargøring

FORBEREDELSE FØR INDFØRING

- Deflater cuffen helt, så den er flad og fri for rynker, ved at trykke cuffen ned på en flad, steril overflade (f.eks. et

stykke steril gaze), samtidig med at den deflateres med en sprøjte. ③

- Smør cuffens posteriore spids før indføring ved at påføre et sterilt, vandbaseret smøremiddel på cuffens distale posteriore overflade.
- Sørg altid for at have en ekstra Ambu AuraStraight klar til brug.
- Præ-oxygenér og brug standard overvågningsprocedurer.
- Kontrollér, at anæstesiiveauet (eller bevidstløsheden) er tilstrækkeligt, før indføringen forsøges. Indføringen skal lykkes på samme anæstesiiveau, som ville være egnet til intubation.
- Patientens hoved skal positioneres strakt med halsens fleksion i en position, der normalt anvendes til intubation (dvs. "sniffing-positionen").

3.3. Indføring

- Der må aldrig anvendes overdreven kraft.
- Hold Ambu AuraStraight som en blyant med pegefingern placeret ved overgangen mellem cuffen og patienttuben. Den anden hånd skal placeres under patientens hoved. ④
- Indfør cuffens spids ved at trykke den opad mod den hårde gane og trykke cuffen fladt mod den. ⑤

- Kontrollér, at cuffens spids ligger fladt mod ganen, før der fortsættes – skub kæben forsigtigt nedad med langfingeren for at åbne munden yderligere.
- Sørg for, at cuffens spids undgår at komme ind i valleculeae eller den glottiske åbning og ikke bliver fanget mod epiglottis eller arytenoiderne. Cuffen skal presses mod patientens posteriore faryngealvæg.
- Når masken er på plads, mærkes der modstand.
- Før hånden, der holder masken, trækkes tilbage, bruges den anden hånd til at trykke ned på luftvejsslangen. Dette sikrer, at Ambu AuraStraight forbliver på plads, når fingeren fjernes.
- Efter indføring skal det sikres, at læberne ikke kommer i klemme mellem patientslangen og tænderne for at undgå traume på læberne.

INDFØRINGSPROBLEMER

- Til pædiatriske patienter anbefales en delvis rotationsteknik i tilfælde af placeringsproblemer.
- Hoste og tilbageholdt vejrtrækning under indføring af Ambu AuraStraight indikerer utilstrækkelig anæstesi-dybde – Øg omgående anæstesen med inhalations- eller intravenøse midler og start manuel ventilation.
- Hvis du ikke kan åbne patientens mund tilstrækkeligt til at indføre masken, skal du kontrollere, at patienten er tilstrækkeligt anæstiseret. Bed en hjælper om at trække

kæben nedad for at gøre det nemmere at se ind i munden og kontrollere maskens placering.

- Ved vanskeligheder med at manøvrere forbi vinklen bag på tungen, når AuraStraight indføres, skal spidsen trykkes mod ganen hele vejen igennem, da spidsen ellers kan folde sig eller møde en uregelmæssighed i den posteriore farynx, f.eks. hypertrofiske tonsiller. Hvis cuffen ikke bliver flad eller begynder at krølle, når den indføres, skal masken trækkes ud og indføres igen. I tilfælde af tonsillær obstruktion anbefales det at bevæge masken diagonalt.

3.4. Fiksering

Hvis det skønnes nødvendigt, fastgøres AuraStraight til patientens ansigt med tape eller med en mekanisk slangeholder, der er egnet til dette formål. ⑦ Det anbefales at bruge en bideblok af gaze.

3.5. Inflation

- Inflatér cuffen uden at holde på tuben med lige præcis så meget luft, at der opnås en forsegling, svarende til et intracuff-tryk på højst 60 cm H₂O. ⑥ Ofte er kun halvdelen af den maksimale volumen tilstrækkelig til at opnå forsegling – se tabel 1 for maksimale intracuff-volumener.
- Cufftrykket skal monitoreres kontinuerligt under det kirurgiske indgreb med en cufftrykmåler. Dette er især

vigtigt ved langvarig brug, eller når der anvendes nitrogenoxidgasser.

- Se efter følgende tegn på korrekt placering: Tubens mulige lette udadgående bevægelse efter inflation af cuffen, tilstedeværelsen af en glat, oval hævelse i halsen omkring thyroidea og cricoidea eller ingen synlig cuff i mundhulen.
- Masken kan lække en smule i de første tre eller fire vejrtrækninger, før den falder på plads i svælget. Hvis lækagen varer ved, skal det kontrolleres, at anæstesen er tilstrækkelig dyb, og at det pulmonale inflationstryk er lavt, før det antages, at det er nødvendigt at indføre AuraStraight på ny.

3.6. Kontrol af korrekt position

- Korrekt placering bør skabe en lækagefri forsegling mod glottis med spidsen af cuffen ved den øvre øsofageale lukkemuskel.
- Den lodrette linje på patienttuben skal vende anteriort mod patientens næse.
- AuraStraight er indført korrekt, når patientens fortænder befinder sig mellem de to vandrette linjer på patientslangen. ②, punkt 5. Flyt masken, hvis patientens fortænder er uden for dette område.
- AuraStraights position kan vurderes ved kapnografi, ved observation af ændringer i tidalvolumen (f.eks. en

reduktion i ekspireret tidalvolumen), ved auskultation af bilaterale respirationslyde og fravær af lyde over epigastriet og/eller ved observation af bryststigning med ventilation. Hvis der er mistanke om, at AuraStraight er placeret forkert, skal den fjernes og indføres igen – og det skal sikres, at anæstesidybden er tilstrækkelig.

- Visuel bekræftelse af anatomisk korrekt position anbefales, f.eks. ved brug af et fleksibelt skop.

UVENTET TILBAGELØB:

- Tilbageløb kan skyldes utilstrækkeligt anæstesiniveau. De første tegn på tilbageløb kan være spontan vejrtrækning, hoste eller tilbageholdt vejrtrækning.
- Hvis der forekommer tilbageløb, og saturation forbliver på et acceptabelt niveau, bør AuraStraight ikke fjernes. Dette skal håndteres ved at lægge patienten i en "head-down"-position. Afbryd kort anæstesikredsløbet, så maveindholdet ikke tvinges ind i lungerne. Kontrollér, at anæstesidybden er tilstrækkelig, og øg anæstesien intravenøst, hvis det er relevant.
- Påfør sugning gennem maskens patientslange og gennem munden. Sug trakeobronkialtræet, og efterse bronkierne med et fleksibelt skop.

3.7. Brug med andre enheder/andet udstyr ANÆSTESISYSTEM OG VENTILATIONSPOSE

Masken kan anvendes til enten spontan eller kontrolleret ventilation.

Under anæstesi kan nitrogenoxid diffundere ind i cuffen og forårsage en stigning i cuffens volumen/tryk. Justér cufftrykket lige netop nok til at opnå en tilstrækkelig forsegling (cufftrykket må ikke overstige 60 cm H₂O).

Anæstesirespirationssystemet skal være tilstrækkeligt understøttet, når det er tilsluttet AuraStraight, for at undgå rotation af masken.

ANVENDELSE VED SPONTAN VENTILATION

AuraStraight er velegnet til patienter med spontan respiration, når den anvendes med flygtige stoffer eller intravenøs anæstesi, forudsat at anæstesien er tilstrækkelig til at matche niveauet af kirurgisk stimulus, og at cuffen ikke er overinflateret.

ANVENDELSE MED POSITIV TRYKVENTILATION

Når der anvendes positiv trykventilation, skal det sikres, at forseglingen er tilstrækkelig. For at forbedre forseglingen foreslås følgende:

- Optimer placering af AuraStraight ved at dreje hovedet eller trække i det.

- Juster cufftrykket. Prøv med både lavere og højere tryk (en dårlig cuffforsegling kan skyldes enten for lavt eller for højt cufftryk).
- Hvis der opstår lækage omkring cuffen, skal masken fjernes og indføres igen, mens det sikres, at anæstesidybden er tilstrækkelig.

MAGNETISK RESONANSBILLEDDANNELSE (MR)

AuraStraight er MR-sikker.

3.8. Udtagning

Fjernelse skal altid udføres i et område, hvor der er sugeudstyr og mulighed for hurtig intubation.

AuraStraight må ikke fjernes med cuffen fuldt inflateret for at forhindre vævstraume og laryngospasme.

3.9. Bortskaffelse

Bortskaf den brugte Ambu AuraStraight på en sikker måde i henhold til lokale procedurer.

4.0. Specifikationer

Ambu AuraStraight er i overensstemmelse med ISO 11712 Anæstesi- og respirationsudstyr – Supralaryngeale luftveje og konnektorer.

	Børn				Voksne			
Maskestørrelse	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Patientvægt	2-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Maksimal intracuff-volumen	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksimalt intracuff-tryk	60 cm H ₂ O							
Konnektor	15 mm hanstik (ISO 5356-1)							
Maks. instrumentstørrelse*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilitet mellem oppumpningsventil og Luer-kegle	Luer-kegle, der er kompatibel med udstyr, der overholder ISO 594-1 og ISO 80369-7							
Passende opbevaringsforhold	10 °C (50 °F) til 25 °C (77 °F)							
Omtrentlig maskevægt	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Internt volumen af ventilationsvej	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Trykfald som bestemt i henhold til ISO 11712 bilag C	0,4cm H ₂ O ved 15 l/min	0,3cm H ₂ O ved 15 l/min	0,4cm H ₂ O ved 30 l/min	0,3cm H ₂ O ved 30 l/min	0,4cm H ₂ O ved 60 l/min	0,4cm H ₂ O ved 60 l/min	0,3cm H ₂ O ved 60 l/min	0,3cm H ₂ O ved 60 l/min
Min. Mellemlængde mellem tænderne	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominal længde af den interne ventilationsvej	10,2 ± 0,6 ml	11,8 ± 0,7 ml	13,4 ± 0,8 ml	15,3 ± 0,9 ml	17,1 ± 1,0 ml	17,6 ± 1,1 ml	19,6 ± 1,2 ml	20,8 ± 1,2 ml

Tabel 1: Specifikationer for Ambu AuraStraight.

* Den maksimale instrumentstørrelse er beregnet som en vejledning til valg af den korrekte diameter på en anordning, der skal føres gennem AuraStraight-patienttuben.

En komplet liste over symbolforklaringer kan findes på <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Denmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne dokumentation må gengives i nogen form, herunder ved fotokopiering, uden forudgående skriftlig tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

1.1. Zweckbestimmung/ Indikationen

Die Ambu AuraStraight ist zur Verwendung als Alternative zur Gesichtsmaske für die Sicherung und Aufrechterhaltung der Atmung bei routinemäßigen und Notfall-Anästhesieverfahren bei Patienten vorgesehen, die eine Nahrungskarenz eingehalten haben.

1.2. Vorgesehene Anwender und Anwendungsumgebung

Medizinisches Fachpersonal mit einer Ausbildung im Atemwegsmanagement

Die Ambu AuraStraight ist für den Einsatz im Krankenhaus vorgesehen.

1.3. Vorgesehene Patientengruppe

Erwachsene und pädiatrische Patienten ab 2 kg, die als geeignet für eine supraglottische Atemwegshilfe eingestuft werden.

1.4. Kontraindikationen

Keine bekannt.

1.5. Klinische Vorteile

Hält die oberen Atemwege offen, damit Gase durchströmen können.

1.6. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vor dem Einführen der Ambu AuraStraight ist es erforderlich, dass das medizinische Fachpersonal mit allen in dieser *Bedienungsanleitung* aufgeführten Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, Indikationen und Kontraindikationen vertraut ist.

WARNHINWEISE



1. Das Produkt darf nur von medizinischen Fachkräften verwendet werden, die im Atemwegsmanagement geschult sind.
2. Führen Sie nach dem Auspacken und vor der Verwendung immer eine Sichtprüfung des Produkts und einen Funktionstest gemäß Abschnitt 3.1 „Vorbereitung vor der Anwendung“ durch, da Defekte und Fremdkörper dazu führen können, dass der Patient nicht oder nur eingeschränkt beatmet wird, sowie zu einer Verletzung der Schleimhäute oder einer Infektion des Patienten. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Schritte unter „Vorbereitung vor der Anwendung“ fehlschlagen.
3. Ambu AuraStraight darf nicht an einem anderen Patienten wiederverwendet werden, da es sich um ein Einwegprodukt handelt. Die Wiederverwendung eines kontaminierten Produkts kann zu Infektionen führen.
4. Ambu AuraStraight schützt die Trachea oder die Lunge nicht vor den Risiken einer Aspiration.
5. Wenden Sie beim Einführen und Entfernen der Ambu AuraStraight keine übermäßige Kraft an, da dies zu Gewebetraumata führen kann.
6. Das Cuff-Volumen oder der Cuff-Druck kann sich ändern, wenn Lachgas, Sauerstoff oder andere medizinische Gase vorhanden sind, was zu Gewebetrauma führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Cuffdruck während des chirurgischen Eingriffs kontinuierlich überwacht wird.
7. Verwenden Sie die Ambu AuraStraight nicht in der Nähe von Lasern und Elektroautergeräten, da dies zu Atemwegsbränden und Gewebeverbrennungen führen kann.
8. Führen Sie keine direkte Intubation durch Ambu AuraStraight durch, da sich der Endotrachealtubus (ET) verklemmen kann, was zu einer unzureichenden Beatmung führen kann.
9. Generell sollte die Ambu AuraStraight nur bei Patienten angewendet werden, die tief bewusstlos sind und sich nicht gegen die Einführung wehren.
10. Die allgemeine Komplikationsrate für Larynxmasken ist gering, aber der Anwender muss bei der Entscheidung, ob die Verwendung einer Larynxmaske angemessen ist, ein professionelles Urteilsvermögen walten lassen. Die folgenden Patienten haben ein höheres Risiko für schwerwiegende Komplikationen, einschließlich Aspiration und unzureichende Beatmung:

- Patienten mit einer Obstruktion der oberen Atemwege.
- Nicht nüchterne Patienten (einschließlich der Fälle, in denen die Nüchternheit nicht bestätigt werden kann).
- Patienten, die an Problemen mit dem oberen Gastrointestinaltrakt leiden (z. B. Ösophagektomie, Hiatushernie, gastroösophageale Refluxerkrankung, morbide Adipositas, Schwangerschaft > 10 Wochen).
- Patienten, die eine Hochdruckbeatmung benötigen.
- Patienten, bei denen eine pharyngeale/laryngeale Pathologie vorliegt, die den anatomischen Sitz der Larynxmaske möglicherweise erschwert (z. B. Tumore, Strahlentherapie des Halses mit Hypopharynx, schweres oropharyngeales Trauma).
- Patienten mit unzureichender Mundöffnung, wodurch das Einführen nicht möglich ist.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Nicht einweichen, spülen oder sterilisieren, da dies schädliche Rückstände hinterlassen oder eine Fehlfunktion des Produkts verursachen kann. Der Aufbau und das verwendete Material sind nicht für herkömmliche Reinigungs- und Sterilisationsverfahren geeignet.
2. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Kompatibilität zwischen Ambu AuraStraight und dem externen Gerät, um zu vermeiden, dass die Geräte nicht durch das Lumen der Ambu AuraStraight eingeführt werden können.
3. Der Cuffdruck sollte so niedrig wie möglich gehalten werden und dennoch eine ausreichende Abdichtung bieten. Er sollte 60 cm H₂O nicht überschreiten.
4. Wenn Anzeichen für Atemwegsprobleme oder inadäquate Beatmung bestehen, ist eine regelmäßige Überwachung erforderlich. Außerdem muss die Ambu AuraStraight neu positioniert, neu platziert oder ersetzt werden, wie dies für die Atemwegssicherung des Patienten erforderlich ist.
5. Überprüfen Sie nach jeder Änderung der Kopf- oder Halsposition des Patienten immer die Durchgängigkeit der Atemwege.

1.7. Potenziell unerwünschte Ereignisse

Die Verwendung von Larynxmasken ist mit leichten Nebenwirkungen (z. B. Halsschmerzen, Blutungen, Dysphonie, Dysphagie) und schweren Nebenwirkungen (z. B. Regurgitation/Aspiration, Laryngospasmus, Nervenverletzung) verbunden.

1.8. Allgemeine Hinweise

Falls während oder infolge der Verwendung des Produkts ein schwerwiegender Zwischenfall aufgetreten ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

2.0. Gerätebeschreibung

Die Ambu AuraStraight ist eine sterile Einweg-Larynxmaske, die aus einem gebogenen Patiententubus mit aufblasbarem Cuff am distalen Ende besteht. Der Cuff kann durch das Rückschlagventil befüllt werden, sodass der Pilotballon den Auffüll-/Entlüftungsstatus anzeigen kann. Der Cuff passt sich den Konturen des Hypopharynx an und das Lumen zeigt zur Larynxöffnung des Patienten. Die Spitze des Cuffs drückt gegen den oberen Ösophagusphinkter und das proximale Ende des Cuffs liegt an der Zungenbasis an.

Ambu AuraStraight ist in 8 verschiedenen Größen erhältlich. Die Hauptkomponenten der Ambu AuraStraight sind in Abbildung ① dargestellt.

Abbildung 1 (Seite 4): Teileübersicht der Ambu AuraStraight:

1. Konnektor; 2. Patiententubus; 3. Cuff;
4. Rückschlagventil; 5. Pilotballon; 6. Cufffüllleitung;
7. Nennlänge des internen Beatmungswegs*

* Die Nennlänge in Zentimetern ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Abbildung 2 (Seite 4): Korrekte Position der Ambu AuraStraight in Bezug auf die AuraStraight Komponenten und anatomischen Orientierungspunkte

- Teile der AuraStraight:** 1. Aufblasbarer Cuff; 2. Größenmarkierung; 3. Beatmungsöffnung; 4. Beatmungsweg; 5. Normale Tiefe der Einführungsmarkierungen; 6. Geräteende.

- Anatomische Orientierungspunkte:** A. Ösophagus; B. Trachea; C. Ringknorpel; D. Schilddrüsenknorpel; E. Stimmbänder; F. Larynxeingang; G. Epiglottis; H. Zungenbein; I. Zunge; J. Wangentasche; K. Nasopharynx; L. Schneidezähne.

KOMPATIBILITÄT MIT ANDEREN INSTRUMENTEN/GERÄTEN

Die Ambu AuraStraight kann in Verbindung mit folgenden Instrumenten/Geräten/Mitteln verwendet werden:

- Beatmungsequipment; konische 15-mm-Anschlüsse gemäß ISO 5356-1.
- Atemwegsmanagement-Geräte; Bronchoskope und Wechselkatheter*.
- Sonstiges Zubehör: konische Standard-Luer-Spritze (6 %), Manometer mit konischem Standard-Luer-Konnektor (6 %), wasserbasiertes Gleitmittel, Absaugkatheter.

Stellen Sie bei der Verwendung von Instrumenten durch die Larynxmaske sicher, dass das Instrument kompatibel ist und ausreichend mit Gleitmittel benetzt wurde, bevor es eingeführt wird.

* Informationen zur maximalen Instrumentengröße finden Sie in Tabelle 1.

3.0. Anwendung des Produkts

3.1. Vorbereitung vor der Anwendung

GRÖSSENAUSWAHL

Die Ambu AuraStraight ist in verschiedenen Größen für Patienten verschiedener Gewichtsklassen erhältlich.

Bei pädiatrischen Patienten wird empfohlen, dass die Ambu AuraStraight von einer medizinischen Fachkraft verwendet wird, die mit der pädiatrischen Anästhesie vertraut ist.

Siehe Auswahlrichtlinien und max. Cuffinnendruck in Tabelle 1, Abschnitt 4.0. (Spezifikationen).

ÜBERPRÜFUNG DER AMBU AURASTRAIGHT

Tragen Sie bei der Vorbereitung und Platzierung der Ambu AuraStraight immer Handschuhe, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren.

Gehen Sie vorsichtig mit der Ambu AuraStraight um, da sie reißen oder durchbohrt werden kann. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen.

Prüfen Sie vor dem Öffnen, ob die Versiegelung des Beutels unversehrt ist, und entsorgen Sie die Ambu AuraStraight, falls die Versiegelung beschädigt wurde.

Untersuchen Sie die Ambu AuraStraight sorgfältig auf Schäden wie Perforationen, Kratzer, Schnitte, Risse, lose Teile, scharfe Kanten usw.

Achten Sie darauf, dass der Cuffschutz vom Cuff entfernt wurde.

Vergewissern Sie sich, dass das Innere von Patiententubus und Cuff keine Blockaden und losen Teile enthält. Verwenden Sie die Ambu AuraStraight nicht, wenn sie blockiert oder beschädigt ist.

Entleeren Sie den Cuff der Ambu AuraStraight vollständig. Prüfen Sie nach dem Entlüften den Cuff sorgfältig auf mögliche Falten oder Knicke. Füllen Sie nun den Cuff mit dem Volumen, das in Tabelle 1 angegeben ist. Überprüfen Sie, ob der aufgefüllte Cuff symmetrisch und eben ist. Cuff, Cufffülleitung und Pilotballon sollten keinerlei Unebenheiten oder Zeichen von Leckagen aufweisen. Entleeren Sie den Cuff vor dem Einführen erneut.

3.2. Vorbereitung zur Anwendung VORBEREITUNG DER EINFÜHRUNG

- Entlüften Sie den Cuff vollständig, so dass er flach und frei von Falten ist, indem Sie ihn auf eine flache sterile Oberfläche (z. B. ein Stück sterile Gaze) drücken, während Sie die Larynxmaske gleichzeitig mithilfe einer Spritze entlüften. ③
- Verwenden Sie vor dem Einführen Gleitmittel an der hinteren Spitze des Cuffs, indem Sie ein steriles, wasserlösliches Gleitmittel auf die distale posteriore Fläche des Cuffs auftragen.
- Legen Sie immer eine zweite Ambu AuraStraight griffbereit.
- Führen Sie eine Prä-Oxygenierung und ein Standard-Monitoring durch.
- Stellen Sie eine angemessene Anästhesietiefe sicher (oder prüfen Sie die Bewusstlosigkeit des Patienten), bevor Sie versuchen, die Larynxmaske einzuführen. Bei

der Einführung sollte die gleiche Anästhesietiefe verwendet werden, die für eine tracheale Intubation geeignet wäre.

- Der Kopf sollte gestreckt und der Hals so gebeugt sein, wie es normalerweise für die tracheale Intubation üblich ist (d. h. die „Schnüffelstellung“).

3.3. Einführen der Larynxmaske

- Eine übermäßige Kraftanwendung ist unbedingt zu vermeiden.
- Halten Sie die Ambu AuraStraight wie einen Bleistift mit dem Zeigefinger am Übergang zwischen Cuff und Patiententubus. Die andere Hand sollte unter dem Kopf des Patienten platziert werden. ④
- Führen Sie die Spitze des Cuffs entlang des harten Gaumens ein, wobei sich der Cuff flach an diesen anlegt. ⑤
- Stellen Sie sicher, dass die Spitze des Cuffs flach gegen den harten Gaumen drückt, bevor Sie weiter fortfahren. Drücken Sie das Kinn mit dem Mittelfinger leicht nach unten, um den Mund weiter zu öffnen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spitze des Cuffs nicht in die Valleculae oder die Glottisöffnung hineingelangt und nicht auf die Epiglottis oder die Aryknorpel drückt. Der Cuff sollte gegen den hinteren Pharynx des Patienten gedrückt werden.

- Wenn die Larynxmaske vollständig eingeführt wurde, ist ein Widerstand zu spüren.
- Bevor Sie die Hand zurückziehen, die die Larynxmaske hält, wird der Tubus mit der anderen Hand nach unten gedrückt. Sie stellen so sicher, dass die Ambu AuraStraight nach dem Zurückziehen des Fingers in ihrer Position bleibt.
- Stellen Sie nach dem Einführen sicher, dass die Lippen nicht zwischen dem Patiententubus und den Zähnen eingeklemmt sind, um ein Trauma an den Lippen zu vermeiden.

PROBLEME BEI DER EINFÜHRUNG

- Bei pädiatrischen Patienten wird bei Schwierigkeiten bei der Platzierung eine partielle Rotationstechnik empfohlen.
- Ein Husten oder Anhalten des Atems während der Einführung der Ambu AuraStraight weist auf eine unzureichende Narkosetiefe hin. Sollte dies der Fall sein, muss die Narkose sofort mit einem Inhalationsnarkotikum oder durch ein intravenös appliziertes Narkotikum vertieft und eine manuelle Beatmung durchgeführt werden.
- Wenn sich der Mund des Patienten nicht weit genug öffnen lässt, um die Larynxmaske einzuführen, sollte geprüft werden, ob der Patient ausreichend narkotisiert ist. Ein

Assistent kann gebeten werden, das Kinn nach unten zu ziehen. Dadurch wird es einfacher, in den Mund zu schauen und die Position der Larynxmaske zu überprüfen.

- Wenn es schwierig ist, beim Einführen der Ambu AuraStraight den Winkel an der Rückseite der Zunge zu manövrieren, drücken Sie die Spitze durchweg gegen den Gaumen, andernfalls kann die Spitze umklappen oder auf eine Unregelmäßigkeit im posterioren Pharynx treffen, z. B. hypertrophierte Tonsillen. Ist der Cuff nicht richtig flach oder beginnt er sich beim Verschieben umzubiegen, muss die Maske entfernt und noch einmal eingeführt werden. Im Falle einer Obstruktion durch die Tonsillen wird eine diagonale Bewegung der Maske empfohlen.

3.4. Fixierung

Fixieren Sie die Ambu AuraStraight, falls notwendig, mit Pflaster oder mit einem zu diesem Zweck geeigneten mechanischen Tubushalter am Gesicht des Patienten. ⑦ Es wird empfohlen, als Beißschutz ein Stück Gaze zu verwenden.

3.5. Blocken des Cuffs

- Füllen Sie den Cuff, ohne den Tubus zu halten, mit gerade soviel Luft auf, dass eine Abdichtung erreicht wird. Diese sollte maximal einem Cuffdruck von 60 cm H₂O entsprechen. ⑥ Häufig ist bereits die Hälfte des Maximalvolumens ausreichend, um eine Abdichtung zu

erreichen. Angaben zu Maximalvolumina des Cuffs finden Sie in Tabelle 1.

- Überwachen Sie den Cuffdruck während des chirurgischen Eingriffs kontinuierlich mit einem Cuffdruckmesser. Dies ist besonders bei längerem Gebrauch oder beim Einsatz von Stickoxidgasen wichtig.
- Achten Sie auf die folgenden Zeichen für eine korrekte Lage: Die folgenden Anzeichen sprechen für eine korrekte Lage: leichte Aufwärtsbewegungen des Tubus beim Auffüllen des Cuffs, das Vorhandensein einer leichten ovalen Schwellung im Hals um den Schild- und Ringknorpelbereich oder ein nicht sichtbarer Cuff in der Mundhöhle.
- Die Larynxmaske kann bei den ersten drei oder vier Atemzügen leicht undicht sein, bevor sie sich im Pharynx richtig positioniert. Falls die Leckage jedoch fortbesteht, prüfen Sie, ob eine ausreichende Narkosetiefe besteht und ob die Beatmungsdrücke niedrig sind, bevor Sie annehmen, dass eine Neueinführung der Ambu AuraStraight erforderlich ist.

3.6. Überprüfung der korrekten Position

- Die korrekte Platzierung sollte eine leckagefreie Abdichtung gegen die Glottis mit der Spitze des Cuffs am oberen Ösophagussphinkter bewirken.
- Die vertikale Linie des Patiententubus sollte anterior in Richtung der Nase des Patienten zeigen.

- Die Ambu AuraStraight ist korrekt eingeführt, wenn sich die Schneidezähne des Patienten zwischen den beiden horizontalen Linien auf dem Patientenschlauch befinden. ②, Ziffer 5. Repositionieren Sie die Larynxmaske, wenn die Schneidezähne des Patienten außerhalb dieses Bereichs liegen.
- Die Position der Ambu AuraStraight kann durch Kapnografie, durch Beobachtung von Veränderungen des Tidalvolumens (z. B. Verringerung des expiratorischen Tidalvolumens), durch Auskultation bilateraler Atemgeräusche und durch Abwesenheit von Geräuschen über dem Epigastrium und/oder durch Beobachtung des Brustkorbanstiegs bei der Beatmung beurteilt werden. Wenn Sie vermuten, dass die Ambu AuraStraight falsch positioniert wurde, entfernen Sie diese und führen Sie sie neu ein – und stellen Sie sicher, dass die Narkose ausreichend tief ist.
- Eine visuelle Bestätigung der anatomisch korrekten Position wird empfohlen, z. B. durch Verwendung eines flexiblen Endoskops.

UNERWARTETE REGURGITATION:

- Eine Regurgitation kann zum Beispiel durch eine nicht ausreichende Narkosetiefe verursacht werden. Ein erstes Zeichen einer Regurgitation kann spontanes Atmen, Husten oder das Anhalten des Atems sein.
- Falls eine Regurgitation auftritt und die

Sauerstoffsättigung in einem angemessenen Bereich liegt, sollte die Ambu AuraStraight nicht entfernt werden. Der Patient sollte in dieser Situation in Kopftieflage gebracht werden. Unterbrechen Sie für einen Moment die Verbindung mit dem Beatmungsgerät, damit der Mageninhalt nicht in die Lunge gedrückt wird. Überprüfen Sie, ob die Narkosetiefe ausreichend ist, und vertiefen Sie die Narkose bei Bedarf intravenös.

- Danach sollte durch den Patiententubus der Maske und durch den Mund abgesaugt werden. Saugen Sie den Tracheobronchialbaum mithilfe eines flexiblen Endoskops ab und überprüfen Sie die Bronchien.

3.7. Verwendung mit anderen Instrumenten/ Geräten

ANÄSTHESIESYSTEM UND BEATMUNGSBEUTEL

Die Larynxmaske kann entweder bei Spontanatmung oder kontrollierter Beatmung verwendet werden.

Während der Anästhesie kann Lachgas in den Cuff gelangen, was zu einem Anstieg des Cuffvolumens oder -drucks führen kann. Stellen Sie den Cuffdruck gerade so ein, dass eine ausreichende Abdichtung erreicht wird (der Cuffdruck sollte 60 cm H₂O nicht überschreiten).

Das Narkosesystem muss beim Anschluss an die Ambu AuraStraight entsprechend gestützt werden, um eine Rotation der Maske zu vermeiden.

VERWENDUNG BEI SPONTANATMUNG

Die Ambu AuraStraight ist in Verbindung mit volatilen Anästhetika oder intravenöser Anästhesie für spontan atmende Patienten geeignet, falls die Narkosetiefe dem Grad des chirurgischen Stimulus entspricht und der Cuff nicht zu stark befüllt wird.

ANWENDUNG BEI INTERMITTIERENDER ÜBERDRUCKBEATMUNG

Stellen Sie bei Anwendung einer Überdruckbeatmung sicher, dass die Larynxmaske ausreichend abgedichtet ist. Zur Verbesserung der Abdichtung wird Folgendes vorgeschlagen:

- Optimieren Sie die Platzierung der Ambu AuraStraight durch Drehen des Kopfes oder Zug.
- Passen Sie den Cuffdruck an. Versuchen Sie es mit niedrigeren und höheren Drücken (eine schlechte Cuffabdichtung kann entweder durch einen zu niedrigen oder zu hohen Cuffdruck verursacht werden).
- Sollte es um den Cuff herum zu Undichtigkeiten kommen, entfernen Sie die Larynxmaske und führen Sie sie erneut ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Narkosetiefe ausreichend ist.

MAGNETRESONANZTOMOGRAFIE (MR)

Ambu AuraStraight ist MR-sicher.

3.8. Entfernen der Larynxmaske

Die Maske sollte immer an einem Ort entfernt werden, an dem Absaugeinrichtungen und die Möglichkeit für eine schnelle tracheale Intubation vorhanden sind.

Entfernen Sie die Ambu AuraStraight nicht, wenn der Cuff vollständig gefüllt ist, um Gewebetrauma und Laryngospasmus zu vermeiden.

3.9. Entsorgung

Entsorgen Sie die gebrauchte Ambu AuraStraight auf sichere Weise gemäß den örtlichen Richtlinien.

4.0. Spezifikationen

Die Ambu AuraStraight entspricht der Norm ISO 11712 Anästhesie- und Beatmungsgeräte – Supralaryngeale Atemwege und Konnektoren.

	Kinder				Erwachsene			
Maskengröße	1	1½	2	2½	3	4	5	6
Patientengewicht	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maximales Cuffinnenvolumen	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximaler Cuffinnendruck	60 cm H ₂ O							
Anschluss	15 mm männlich (ISO 5356-1)							
Maximale Instrumentengröße*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilität des Rückschlagventils mit dem Luer-Anschluss	Der Luer-Anschluss ist kompatibel mit Geräten nach ISO 594-1 und ISO 80369-7							
Geeignete Lagerbedingungen	10 °C bis 25 °C							
Ungefähres Maskengewicht	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Tubusvolumen	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Druckabfall gemäß ISO 11712 Anhang C	(0,4 cm H ₂ O) bei 15 l/min	(0,3 cm H ₂ O) bei 15 l/min	(0,4 cm H ₂ O) bei 30 l/min	(0,3 cm H ₂ O) bei 30 l/min	(0,4 cm H ₂ O) bei 60 l/min	(0,4 cm H ₂ O) bei 60 l/min	(0,3 cm H ₂ O) bei 60 l/min	(0,3 cm H ₂ O) bei 60 l/min
Min. Interdental-Abstand	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nennlänge des internen Beatmungswegs	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabelle 1: Technische Daten der Ambu AuraStraight.

* Die maximale Instrumentengröße dient als Orientierungshilfe bei der Auswahl des geeigneten Durchmessers eines Produkts, das durch den Patiententubus der Ambu AuraStraight eingeführt werden soll.

Eine vollständige Liste der Symbolerklärungen finden Sie unter <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dänemark. Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form reproduziert werden, ohne dass der Urheberrechtseigentümer zuvor seine schriftliche Einwilligung dazu erteilt hat. Dies gilt auch für Kopien.

1.1. Χρήση για την οποία προορίζεται/ Ενδείξεις χρήσης

Η Ambu AuraStraight προορίζεται για χρήση ως εναλλακτική σε μια μάσκα προσώπου για την επίτευξη και τη διατήρηση του ελέγχου της διόδου αέρα κατά τις διαδικασίες αναισθησίας ρουτίνας και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε νηστικούς ασθενείς.

1.2. Ενδεδειγμένοι χρήστες και περιβάλλον χρήσης

Επαγγελματίες εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση των αεραγωγών.

Η AuraStraight προορίζεται για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

1.3. Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών

Ενήλικες και παιδιατρικοί ασθενείς από 2 kg και άνω αξιολογήθηκαν ως κατάλληλοι για υπεργλωσσικό αεραγωγό.

1.4. Αντενδείξεις

Καμία γνωστή.

1.5. Κλινικά οφέλη

Διατηρεί τον άνω αεραγωγό ανοικτό για να επιτραπεί η διέλευση αερίων.

1.6. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Πριν από την εισαγωγή, είναι σημαντικό όλοι οι επαγγελματίες υγείας που χρησιμοποιούν την Ambu AuraStraight να είναι εξοικειωμένοι με τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, ενδείξεις και αντενδείξεις που περιέχονται στις *Οδηγίες χρήσης*.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



1. Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένους στην αντιμετώπιση των αεραγωγών μόνο.
2. Επιθεωρείτε πάντα οπτικά το προϊόν και πραγματοποιείτε δοκιμή λειτουργικότητας μετά την αποσυσκευασία και πριν από τη χρήση σύμφωνα με την ενότητα 3.1 Προετοιμασία πριν από τη χρήση, καθώς τυχόν ελαττώματα και ξένα σώματα μπορούν να οδηγήσουν στην απουσία ή τη μείωση του αερισμού του ασθενούς. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αποτύχει οποιαδήποτε βήματα στην Προετοιμασία πριν από τη χρήση.
3. Μη επαναχρησιμοποιείτε την AuraStraight σε άλλον ασθενή, καθώς πρόκειται για συσκευή μίας χρήσης. Η επαναχρησιμοποίηση μολυσμένου προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη.

4. Η AuraStraight δεν προστατεύει την τραχεία ή τους πνεύμονες από τον κίνδυνο αναρρόφησης.
5. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εισαγωγή και την αφαίρεση της AuraStraight, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ιστού.
6. Ο όγκος ή η πίεση της μανσέτας ενδέχεται να αλλάξει με την ύπαρξη υποξειδίου του αζώτου, οξυγόνου ή άλλων ιατρικών αερίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ιστού. Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε συνεχώς την πίεση της μανσέτας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
7. Μη χρησιμοποιείτε την AuraStraight παρουσία συσκευών λέιζερ και εξοπλισμού ηλεκτροκαυτηρίασης, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καύση των αεραγωγών και εγκαύματα των ιστών.
8. Μην εκτελείτε άμεση διασωλήνωση μέσω της AuraStraight, καθώς ο ενδοτραχειακός σωλήνας (ET) μπορεί να κολλήσει και να οδηγήσει σε ανεπαρκή αερισμό.
9. Γενικά, η AuraStraight θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ασθενείς που είναι έντονα αναισθητικοί και δεν θα αντιστέκονται στην εισαγωγή.

10. Ο συνολικός ρυθμός επιπλοκής για τη λαρυγγική μάσκα είναι χαμηλός, αλλά ο χρήστης πρέπει να ασκεί επαγγελματική κρίση κατά την απόφαση για το κατά πόσο θα είναι κατάλληλη η χρήση λαρυγγικής μάσκας. Οι ακόλουθοι ασθενείς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της αναρρόφησης και του ανεπαρκούς αερισμού:
- Ασθενείς με απόφραξη άνω αεραγωγού.
 - Ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε νηστεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η νηστεία).
 - Ασθενείς που πάσχουν από ανώτερα γαστρεντερικά προβλήματα (π.χ. οισοφαγεκτομή, διαφραγματοκήλη δια τρήματος, νόσο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, παχυσαρκία, εγκυμοσύνη >10 εβδομάδων).
 - Ασθενείς που χρειάζονται αερισμό υψηλής πίεσης.
 - Ασθενείς που εμφανίζουν φαρυγγική/λαρυγγική παθολογία πιθανώς να δυσχεραίνουν την ανατομική εφαρμογή της μάσκας (π.χ. όγκοι, ακτινοθεραπεία στον αυχένα με συμμετοχή του υποφάρυγγα, σοβαρό λαρυγγικό τραύμα).
 - Ασθενείς με ανεπαρκές άνοιγμα στο στόμα για να επιτραπεί η εισαγωγή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

1. Μην μουλιάζετε, ξεπλένετε ή αποστειρώνετε αυτή τη συσκευή καθώς αυτές οι διαδικασίες ενδέχεται να αφήσουν επιβλαβή υπολείμματα ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή. Ο σχεδιασμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι συμβατά με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα μεταξύ της AuraStraight και της εξωτερικής συσκευής για να αποφύγετε τη χρήση συσκευών που δεν μπορούν να περάσουν μέσα από τον αυλό του AuraStraight.
3. Η πίεση της μανσέτας πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται επαρκής σφράγιση και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 cm H₂O.
4. Τυχόν ενδείξεις προβλημάτων αεραγωγών ή ανεπαρκούς αερισμού πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά και η AuraStraight πρέπει να επανατοποθετείται, να τοποθετείται εκ νέου ή να αντικαθίσταται όπως απαιτείται για τη διατήρηση βατού αεραγωγού.
5. Επιβεβαιώνετε πάντα τη βατότητα του αεραγωγού μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση του κεφαλιού ή του αυχένα του ασθενούς.

1.7. Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Η χρήση λαρυγγικών μασκών σχετίζεται με μικρές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. πονόλαιμος, αιμορραγία, δυσφωνία, δυσφαγία) και μειζονες ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. αναζωογόνηση/αναρρόφηση, λαρυγγόσπασμος, τραυματισμός νεύρων).

1.8. Γενικές παρατηρήσεις

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της προκύψει σοβαρό περιστατικό, μην παραλείψετε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

2.0. Περιγραφή της συσκευής

Η AuraStraight είναι μια αποστειρωμένη λαρυγγική μάσκα μίας χρήσης που αποτελείται από ένα σωλήνα ασθενούς με αεροθάλαμο που φουσκώνει στο περιφερικό άκρο. Ο αεροθάλαμος μπορεί να φουσκώσει μέσω της βαλβίδας ελέγχου επιτρέποντας στο μπαλόνι-οδηγό να δείξει την κατάσταση φουσκώματος/ξεφουσκώματος. Το περικάρπιο είναι σύμφωνο με το περίγραμμα του υποφάρυγγα και με τον αυλό του στραμμένο προς το λαρυγγικό άνοιγμα του ασθενούς. Το άκρο του περιβραχιονίου πιέζει τον άνω οισοφαγικό σφιγκτήρα και το εγγύς άκρο του περιβραχιονίου στηρίζεται στη βάση της γλώσσας.

Η AuraStraight διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη. Τα κύρια εξαρτήματα της AuraStraight φαίνονται στην εικόνα ①.

Εικόνα 1 (σελίδα 4): Τα εξαρτήματα AuraStraight συνοπτικά:

1. Σύνδεσμος, **2.** Σωλήνας ασθενούς, **3.** Μανσέτα, **4.** Βαλβίδα ελέγχου, **5.** Μπαλόνι-οδηγός, **6.** Σωλήνας-οδηγός, **7.** Ονομαστικό μήκος της εσωτερικής διαδρομής αερισμού*.

* Δείτε τον Πίνακα 1 για το ονομαστικό μήκος που παρέχεται σε εκατοστά.

Εικόνα 2 (σελίδα 4): Σωστή θέση της AuraStraight σε σχέση με τα εξαρτήματα AuraStraight και τα ανατομικά σημεία αναφοράς

Εξαρτήματα AuraStraight: **1.** Φουσκωτή μανσέτα, **2.** Σήμανση μεγέθους, **3.** Άνοιγμα αερισμού, **4.** Διαδρομή αερισμού, **5.** Κανονικό βάθος των σημαδιών εισαγωγής, **6.** Άκρο μηχανής.

Ανατομικά ορόσημα: **A.** Οισοφάγος, **B.** Τραχεία, **Γ.** Κρικοειδής δακτύλιος, **Δ.** Χόνδρος θυρεοειδούς, **Ε.** Κολπικά καλώδια, **Ζ.** Λαρυγγική είσοδος, **Η.** Επιγλωττίδα, **Θ.** Υαλοειδές οστό, **Ι.** Γλώσσα, **Κ.** Στοματική κοιλότητα, **Λ.** Ρινοφάρυγγας, **Μ.** Κοπήρες.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Η AuraStraight μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με:

- Εξοπλισμός εξαερισμού, κωνικοί σύνδεσμοι 15 mm σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 5356-1.
- Συσκευές διαχείρισης αεραγωγών, βρογχοσκόπια και καθετήρες αντικατάστασης*.
- Άλλα εξαρτήματα: Τυπική κωνική σύριγγα Luer 6 %, μανόμετρο με τυπικό κωνικό σύνδεσμο Luer 6 %, λίπανση με βάση το νερό, καθετήρας αναρρόφησης.

Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία μέσω της μάσκας, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι συμβατό και καλά λιπασμένο πριν από την εισαγωγή.

* Δείτε τον Πίνακα 1 για πληροφορίες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος του εργαλείου.

3.0. Χρήση προϊόντος

3.1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Η Ambu AuraStraight διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για χρήση σε ασθενείς με διαφορετικά βάρη.

Για παιδιατρικούς ασθενείς, συνιστάται η χρήση του Ambu AuraStraight από επαγγελματία εξοικειωμένο με την παιδιατρική αναισθησία.

Δείτε τις οδηγίες επιλογής και τη μέγ. πίεση εντός του αεροθαλάμου στον Πίνακα 1, ενότητα 4.0. (Προδιαγραφές).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ AURASTRAIGHT

Φοράτε πάντα γάντια κατά την προετοιμασία και την εισαγωγή της Ambu AuraStraight για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης.

Χειριστείτε την AuraStraight προσεκτικά, καθώς μπορεί να σκιστεί ή να τρυπήσει. Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα.

Βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση της σακούλας είναι ανέπαφη πριν το άνοιγμα, και απορρίψτε την Ambu AuraStraight αν η σφράγιση έχει υποστεί ζημιά.

Εξετάστε προσεκτικά την AuraStraight για ζημιές, όπως διάτρηση, γρατσουνιές, κοψίματα, σκισίματα, χαλαρά μέρη, αιχμηρές ακμές κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό της μανσέτας έχει αφαιρεθεί από τη μανσέτα.

Ελέγξτε ότι το εσωτερικό του σωλήνα ασθενούς και της μανσέτας δεν έχουν φραγεί και δεν έχουν χαλαρώσει τμήματα. Μη χρησιμοποιείτε την AuraStraight εάν είναι φραγμένη ή έχει υποστεί ζημιά.

Ξεφουσκώστε εντελώς τον αεροθάλαμο της AuraStraight. Αφού ξεφουσκώσετε, ελέγξτε καλά τη μανσέτα για τυχόν ρικνώσεις ή πτυχώσεις. Φουσκώστε τη μανσέτα στον όγκο, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1. Ελέγξτε ότι ο διογκωμένος αεροθάλαμος είναι συμμετρικός και ομαλός. Δεν πρέπει να υπάρχει εξόγκωμα, ούτε ενδείξεις διαρροής στη μανσέτα, τη σωλήνωση-οδηγό ή το μπαλόνι-οδηγό. Ξεφουσκώστε ξανά τον αεροθάλαμο πριν από την εισαγωγή.

3.2. Προετοιμασίες για χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Ξεφουσκώστε πλήρως τη μανσέτα, έτσι ώστε η μανσέτα να είναι επίπεδη και χωρίς πτυχές, πιέζοντας τη μανσέτα σε επίπεδη αποστειρωμένη επιφάνεια (π.χ. ένα κομμάτι αποστειρωμένης γάζας), ενώ ταυτόχρονα ξεφουσκώνετε τη συσκευή με μια σύριγγα. ③
- Λιπάνετε το οπίσθιο άκρο του αεροθαλάμου πριν από την εισαγωγή, εφαρμόζοντας ένα στείρο λιπαντικό με βάση το νερό στην περιφερική οπίσθια επιφάνεια του αεροθαλάμου.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμη μια εφεδρική Ambu AuraStraight.
- Προ-οξυγονώστε και χρησιμοποιήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης.
- Ελέγξτε εάν το επίπεδο αναισθησίας (ή απώλεια των αισθήσεων) είναι επαρκές προτού επιχειρήσετε την εισαγωγή. Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι επιτυχή στο ίδιο επίπεδο αναισθησίας που θα ήταν κατάλληλη για τραχειακή διασωλήνωση.
- Το κεφάλι του ασθενούς θα πρέπει να είναι σε θέση έκτασης με κάμψη του λαιμού σε μια θέση που χρησιμοποιείται συνήθως για τραχειακή διασωλήνωση (δηλ. "η θέση νάρθηκα").

3.3. Εισαγωγή

- Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
- Κρατήστε την Ambu AuraStraight σαν μολύβι, με τον δείκτη τοποθετημένο στο σημείο μετάβασης μεταξύ της μανσέτας και του σωλήνα ασθενούς. Το άλλο χέρι σας θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από την κεφαλή του ασθενούς. ④
- Εισαγάγετε το άκρο της μανσέτας πιέζοντας προς τα επάνω στον σκληρό ουρανίσκο και οριζοντίωστε τη μανσέτα. ⑤

- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του περιβραχιονίου έχει εξομαλυνθεί σε σχέση με τον ουρανίσκο πριν συνεχίσετε - πιέστε απαλά το σαγόνι προς τα κάτω με το μεσαίο δάκτυλο για να ανοίξετε κι άλλο το στόμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της μανσέτας δεν εισέρχεται στο βοθρίο ή στο άνοιγμα της γλωττίδας και ότι δεν πιάνεται στην επιγλωττίδα ή στις αρυταινοειδείς. Η μανσέτα πρέπει να πιέζεται στο οπίσθιο λαρυγγικό τοίχωμα του ασθενούς.
- Όταν η μάσκα βρίσκεται στη θέση της, θα αισθανθείτε αντίσταση.
- Πριν τραβήξετε προς τα πίσω το χέρι που συγκρατεί τη μάσκα, το άλλο χέρι χρησιμοποιείται για να πιέσετε προς τα κάτω τον σωλήνα αεραγωγών. Αυτό διασφαλίζει ότι η Ambu AuraStraight παραμένει στη θέση της όταν αφαιρείται το δάκτυλο.
- Μετά την εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι τα χείλη δεν έχουν παγιδευτεί μεταξύ του σωλήνα του ασθενούς και των δοντιών, για την αποφυγή τραυματισμού στα χείλη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- Για παιδιατρικούς ασθενείς, συνιστάται η χρήση μερικής περιστροφικής τεχνικής σε περίπτωση δυσκολιών τοποθέτησης.

- Ο βήχας και το κράτημα της αναπνοής κατά τη διάρκεια της εισαγωγής της Ambu AuraStraight υποδεικνύουν ανεπαρκές βάθος αναισθησίας - Αυξήστε αμέσως την αναισθησία με εισπνεόμενους ή ενδοφλέβιους παράγοντες και ξεκινήστε τον χειροκίνητο αερισμό.
- Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε επαρκώς το στόμα του ασθενούς για να εισάγετε τη μάσκα, ελέγξτε εάν ο ασθενής είναι επαρκώς αναισθητοποιημένος. Ζητήστε από έναν βοηθό να τραβήξει το επιστόμιο προς τα κάτω, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του στο στόμα και την επαλήθευση της θέσης της μάσκας.
- Για δυσκολία στους ελιγμούς της γωνίας στο πίσω μέρος της γλώσσας κατά την εισαγωγή της AuraStraight, πιέστε το άκρο κόντρα στον ουρανίσκο καθ' όλη τη διάρκεια ή διαφορετικά το άκρο μπορεί να διπλωθεί μόνο του ή να αντιμετωπίσει ανωμαλία στον οπίσθιο φάρυγγα, π.χ. υπερτροφικές αμυγδαλές. Σε περίπτωση που η μανσέτα δεν ευθυγραμμίζεται ή αρχίσει να καμπυλώνει κατά την εισαγωγή της, αποσύρετε τη μάσκα και επανεισαγάγετέ την. Σε περίπτωση απόφραξης των αμυγδαλών, συνιστάται η διαγώνια κίνηση της μάσκας.

3.4. Σταθεροποίηση

Εάν κριθεί απαραίτητο, ασφαλίστε την AuraStraight στο πρόσωπο του ασθενούς με κολλητική ταινία ή με ένα μηχανικό στήριγμα σωλήνα κατάλληλο για τον σκοπό αυτό.

⑦ Συνιστάται η χρήση μπλοκ δαγκώματος από γάζες.

3.5. Φούσκωμα

- Χωρίς να κρατάτε τον σωλήνα, φουσκώστε τον αεροθάλαμο με αρκετό αέρα ώστε να επιτύχετε σφράγιση, ισοδύναμη με τις πιέσεις εντός του αεροθαλάμου με μέγιστο όριο 60 cm H₂O. ⑥ Συχνά, μόνο το ήμισυ του μέγιστου όγκου επαρκεί για την επίτευξη στεγανοποίησης - ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για τον μέγιστο όγκο αεροθαλάμου.
- Παρακολουθείτε συνεχώς την πίεση του αεροθαλάμου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με ένα μανόμετρο αεροθαλάμου ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την παρατεταμένη χρήση ή όταν χρησιμοποιούνται αέρια οξειδίου του αζώτου.
- Κοιτάξτε για τα παρακάτω σημάδια σωστής τοποθέτησης: Η πιθανή ελαφριά κίνηση του σωλήνα προς τα έξω κατά το φούσκωμα του αεροθαλάμου, η παρουσία ήπιας οβάλ διόγκωσης στον αυχένα γύρω από τον θυρεοειδή και την κρικοειδή περιοχή ή η μη ορατή μανσέτα στην στοματική κοιλότητα.

- Η μάσκα μπορεί να εμφανίσει διαρροή ελαφρώς για τις πρώτες τρεις ή τέσσερις αναπνοές πριν από την τοποθέτηση στη θέση της στον φάρυγγα. Σε περίπτωση που η διαρροή επιμένει, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές βάθος αναισθησίας και ότι οι πιέσεις πνευμονικού φουσκώματος είναι χαμηλές πριν υποθέσετε ότι απαιτείται επανεισαγωγή της AuraStraight.

3.6. Επαλήθευση σωστής θέσης

- Η σωστή τοποθέτηση θα πρέπει να δημιουργήσει μια στεγανή εφαρμογή χωρίς διαρροές επάνω στη γλωττίδα με το άκρο του αεροθαλάμου στον επάνω οισοφαγικό σφιγκτήρα.
- Η κατακόρυφη γραμμή στο σωλήνα ασθενούς πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τα εμπρός, προς τη μύτη του ασθενούς.
- Η AuraStraight εισάγεται σωστά όταν οι κοπήρες του ασθενούς βρίσκονται μεταξύ των δύο οριζόντιων γραμμών στο σωλήνα του ασθενούς. ②, στοιχείο 5. Επανατοποθετήστε τη μάσκα εάν οι κοπήρες του ασθενούς βρίσκονται εκτός αυτού του εύρους.
- Η θέση της AuraStraight μπορεί να αξιολογηθεί με αγγειογραφία, με παρατήρηση των αλλαγών στον όγκο αναπνοής (π.χ. μείωση του εκπνεόμενου όγκου αναπνοής), με αποδοχή των αμφοτερόπλευρων ήχων αναπνοής

και απουσία ήχων στο επιγάστριο ή/και με παρατήρηση της αύξησης του θώρακα με αερισμό. Εάν υποψιάζεστε ότι η AuraStraight έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα, αφαιρέστε και επανεισαγάγετε - και διασφαλίστε ότι το βάθος της αναισθησίας είναι επαρκές.

- Συνιστάται οπτική επιβεβαίωση της ανατομικά σωστής θέσης, π.χ. χρησιμοποιώντας ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο.

ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΞΩΓΟΝΗΣΗ:

- Η παλινδρόμηση μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκές επίπεδο αναισθησίας. Τα πρώτα σημάδια αναξωγόνησης μπορεί να είναι αυθόρμητη αναπνοή, βήχας ή κράτημα στην αναπνοή.
- Εάν προκύψει παλινδρόμηση, εάν ο κορεσμός οξυγόνου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, η AuraStraight δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η διαχείριση αυτή θα πρέπει να γίνεται θέτοντας τον ασθενή σε θέση "προς τα κάτω". Αποσυνδέστε για λίγο το αναισθητικό κύκλωμα, ώστε το γαστρικό περιεχόμενο να μην εξαναγκαστεί να εισέλθει στους πνεύμονες. Ελέγξτε ότι το βάθος της αναισθησίας είναι επαρκές και ενισχύστε την αναισθησία ενδοφλέβια, εάν χρειάζεται.
- Εφαρμόστε αναρρόφηση μέσω του σωλήνα ασθενούς της μάσκας και μέσω του στόματος. Αναρρόφηση του τραχειοβρογχικού δένδρου και επιθεώρηση των βρόγχων με χρήση εύκαμπτου πεδίου.

3.7. Χρήση με άλλες συσκευές/εξοπλισμό ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυθόρμητο ή ελεγχόμενο αερισμό.

Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, ενδέχεται να διαχυθεί υποξείδιο του αζώτου μέσα στον αεροθάλαμο προκαλώντας αύξηση στον όγκο/πίεση του αεροθαλάμου. Ρυθμίστε την πίεση της μανσέτας αρκετά ώστε να επιτευχθεί επαρκής σφράγιση (η πίεση της μανσέτας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 cm H₂O).

Το σύστημα αναπνοής αναισθητικού πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώς όταν συνδέεται στην AuraStraight για να αποφευχθεί η περιστροφή της μάσκας.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

Η AuraStraight είναι κατάλληλη για ασθενείς που αναπνέουν αυθόρμητα, όταν χρησιμοποιείται με πτητικούς παράγοντες ή ενδοφλέβια αναισθησία σε κατάσταση που η αναισθησία είναι επαρκής για να αντιστοιχεί στο επίπεδο του χειρουργικού ερεθίσματος και η μανσέτα δεν έχει υπερδιογκωθεί.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΣΜΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Όταν εφαρμόζετε αερισμό θετικής πίεσης, βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση είναι επαρκής. Για τη βελτίωση της στεγανοποίησης προτείνεται:

- Βελτιστοποιήστε την τοποθέτηση της AuraStraight με περιστροφή κεφαλής ή έλξη.
- Ρυθμίστε την πίεση της μανσέτας. Δοκιμάστε και τις δύο χαμηλότερες και τις υψηλότερες πιέσεις (η ανεπαρκής σφράγιση της μανσέτας μπορεί να οφείλεται είτε σε πολύ χαμηλή είτε σε πολύ υψηλή πίεση της μανσέτας).
- Εάν παρουσιαστεί διαρροή γύρω από τον αεροθάλαμο, αφαιρέστε τη μάσκα και επανεισαγάγετε, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το βάθος του αναισθητικού είναι επαρκές.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MR)

Η AuraStraight είναι ασφαλής για μαγνητική τομογραφία.

3.8. Διαδικασία αφαίρεσης

Η αφαίρεση πρέπει να πραγματοποιείται πάντα σε μια περιοχή όπου ο εξοπλισμός αναρρόφησης και η εγκατάσταση για ταχεία τραχειακή διασωλήνωση είναι διαθέσιμα.

Μην αφαιρείτε την AuraStraight με τη μανσέτα πλήρως διογκωμένη, για να αποτρέψετε τραυματισμό του ιστού και λαρυγγόσπασμό.

3.9. Απόρριψη

Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη Ambu AuraStraight με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.

4.0. Προδιαγραφές

Η Ambu AuraStraight είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 11712 Αναισθητικός και αναπνευστικός εξοπλισμός - Υπερλαρυγγικοί αεραγωγοί και σύνδεσμοι.

	Παιδιατρική				Ενήλικες			
Μέγεθος μάσκας	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Βάρος ασθενή	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Μέγιστος όγκος αεροθαλάμου	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
Μέγιστη πίεση αεροθαλάμου	60 cm H ₂ O							
Σύνδεσμος	15 mm αρσενικός (ISO 5356-1)							
Μέγιστο μέγεθος εργαλείου*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Συμβατότητα κώνου Luer βαλβίδας πλήρωσης	Κώνος Luer συμβατός με εξοπλισμό που συμμορφώνεται με τα ISO 594-1 και ISO 80369-7							
Κατάλληλη κατάσταση αποθήκευσης	10 °C (50 °F) έως 25 °C (77 °F)							
Βάρος μάσκας κατά προσέγγιση	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Εσωτερικός όγκος αναπνευστικής οδού	4,3 ± 0,5 mL	5,7 ± 0,5 mL	7,1 ± 0,5 mL	10,2 ± 0,6 mL	13,4 ± 0,4 mL	15,3 ± 0,4 mL	20,6 ± 0,4 mL	22,2 ± 0,5 mL
Πτώση πίεσης όπως καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα C ISO 11712	0,4 cm H ₂ O στα 15 L/min	0,3 cm H ₂ O στα 15 L/min	0,4 cm H ₂ O στα 30 L/min	0,3 cm H ₂ O στα 30 L/min	0,4 cm H ₂ O στα 60 L/min	0,4 cm H ₂ O στα 60 L/min	0,3 cm H ₂ O στα 60 L/min	0,3 cm H ₂ O στα 60 L/min
Ελάχ. Ενδιάμεσο διάκενο	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Ονομαστικό μήκος της εσωτερικής οδού αερισμού	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Πίνακας 1: Προδιαγραφές για την Ambu AuraStraight.

* Το μέγιστο μέγεθος εργαλείου προορίζεται για χρήση ως οδηγός για την επιλογή της κατάλληλης διαμέτρου μιας συσκευής που πρόκειται να περάσει μέσω του σωλήνα ασθενούς της AuraStraight.

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των επεξηγήσεων συμβόλων στο <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Δανία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κανένα μέρος της παρούσας τεκμηρίωσης δεν δύναται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της φωτοαντιγραφής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

1.1. Uso previsto / indicación de uso

Ambu AuraStraight está pensado para su uso como alternativa a la mascarilla facial para conseguir y mantener el control de la vía aérea durante los procedimientos anestésicos de rutina y de urgencia en pacientes en ayunas.

1.2. Usuarios y entorno de uso previstos

Profesionales médicos formados en el tratamiento de la vía aérea.

AuraStraight está concebido para ser utilizado en un entorno hospitalario.

1.3. Población de pacientes objetivo

Pacientes adultos y pediátricos a partir de 2 kg de peso evaluados como aptos para una vía aérea supraglótica.

1.4. Contraindicaciones

Ninguna conocida.

1.5. Beneficios clínicos

Mantiene abierta la vía aérea superior para permitir el paso de gases.

1.6. Precauciones y advertencias

Antes de la inserción es fundamental que todos los profesionales médicos que utilicen Ambu AuraStraight se familiaricen con las advertencias, precauciones, indicaciones y contraindicaciones que se recogen en las *Instrucciones de uso*.

ADVERTENCIAS



1. El producto está diseñado para ser utilizado únicamente por profesionales médicos formados específicamente en el tratamiento de la vía aérea.
2. Inspeccione siempre visualmente el producto y realice una prueba de funcionamiento después de desembalarlo y antes de usarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.1 Preparación antes del uso, ya que los defectos y las materias extrañas pueden provocar la ausencia o reducción de ventilación, daños en la mucosa o infección del paciente. No utilice el producto si se produce un fallo en algún paso de la preparación antes de su uso.
3. No reutilice el dispositivo AuraStraight en otro paciente, ya que es un dispositivo de un solo uso. La reutilización de un producto contaminado puede provocar una infección.
4. El AuraStraight no protege la tráquea ni los pulmones del riesgo de aspiración.
5. No ejerza una fuerza excesiva al insertar y extraer el dispositivo AuraStraight, ya que esto puede provocar traumatismos en los tejidos.
6. El volumen o la presión del manguito pueden cambiar en presencia de óxido nitroso, oxígeno u otros gases médicos, lo que puede provocar traumatismos en los tejidos. Asegúrese de controlar continuamente la presión del manguito durante el procedimiento quirúrgico.
7. No utilice AuraStraight en presencia de equipos láser o de electrocauterización, ya que esto podría provocar un incendio en la vía aérea y quemaduras en los tejidos.
8. No realice una intubación directa a través de AuraStraight, ya que el tubo endotraqueal (ET) podría atascarse y provocar una ventilación insuficiente.
9. En general, AuraStraight solo debe utilizarse en pacientes profundamente inconscientes y que no ofrezcan resistencia a la inserción.
10. La tasa general de complicaciones de la mascarilla laríngea es baja, pero el usuario debe tener un juicio profesional a la hora de decidir si es adecuado utilizar una mascarilla laríngea. Los siguientes pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, como aspiración o una ventilación inadecuada:

- Pacientes con obstrucción de la vía aérea superior.
- Pacientes que no estén en ayunas (incluidos los casos en los que no se pueda confirmar el ayuno).
- Pacientes con trastornos gastrointestinales superiores (por ejemplo, esofagectomía, hernia de hiato, enfermedad de reflujo gastroesofágico, obesidad mórbida, embarazo >10 semanas).
- Pacientes que requieren ventilación a alta presión.
- Pacientes con una patología faríngea/laríngea que pueda complicar el ajuste anatómico de la mascarilla (por ejemplo, tumores, radioterapia del cuello con afectación de la hipofaringe, traumatismo orofaríngeo grave).
- Pacientes con una abertura bucal inadecuada para permitir la inserción.

PRECAUCIONES

1. No moje, enjuague ni esterilice este dispositivo, ya que estos procedimientos pueden dejar residuos nocivos o afectar a su funcionamiento. El diseño y material utilizado no son compatibles con los procedimientos de limpieza y esterilización convencionales.

2. Antes de su uso, compruebe siempre la compatibilidad entre AuraStraight y el dispositivo externo para evitar que los dispositivos no puedan pasar a través de la luz de AuraStraight.
3. La presión del manguito debe mantenerse lo más baja posible mientras se proporciona un sellado suficiente y no debe superar los 60 cm H₂O.
4. Debe controlar regularmente cualquier signo de problemas en la vía aérea o ventilación inadecuada y deberá volver a colocar, reintroducir o sustituir el dispositivo AuraStraight si es necesario para mantener una vía aérea permeable.
5. Vuelva a confirmar siempre la permeabilidad de las vías respiratorias después de cualquier cambio en la posición de la cabeza o cuello del paciente.

1.7. Sucesos potencialmente adversos

El uso de mascarillas laríngeas está asociado a efectos adversos menores (p. ej., dolor de garganta, hemorragia, disfonía, disfagia) y efectos adversos importantes (p. ej., regurgitación/aspiración, laringoespasmos, lesión nerviosa).

1.8. Notas generales

Si, durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

2.0. Descripción del dispositivo

AuraStraight es una mascarilla laríngea estéril de un solo uso que consta de un tubo de paciente con un manguito inflable en el extremo distal. El manguito puede inflarse a través de la válvula de retención, lo que permite que el globo piloto indique el estado de inflado/desinflado. El manguito se ajusta a los contornos de la hipofaringe y con su luz orientada hacia la abertura laríngea del paciente. La punta del manguito presiona contra el esfínter esofágico superior y el extremo proximal del manguito descansa sobre la base de la lengua.

AuraStraight está disponible en 8 tamaños diferentes. Los componentes principales de AuraStraight se muestran en la figura ①.

Figura 1 (página 4): Vista general de las piezas de AuraStraight:

1. Conector;
2. Tubo del paciente;
3. Manguito;
4. Válvula de retención;
5. Balón piloto;
6. Tubo piloto;
7. Longitud nominal de la vía ventilatoria interna*.

* Consulte la tabla 1 para ver la longitud nominal en centímetros.

Figura 2 (página 4): Posición correcta de AuraStraight en relación con las piezas de AuraStraight y las referencias anatómicas

Piezas de AuraStraight: **1.** Manguito inflable; **2.** Marca de tamaño; **3.** Abertura de ventilación; **4.** Vía de ventilación; **5.** Profundidad normal de las marcas de inserción; **6.** Extremo de la máquina.

Referencias anatómicas: **A.** Esófago; **B.** Tráquea; **C.** Anillo cricoides; **D.** Cartílago tiroideos; **E.** Cuerdas vocales; **F.** Entrada laríngea; **G.** Epiglotis; **H.** Hioides; **I.** Lengua; **J.** Cavidad bucal; **K.** Nasofaringe; **L.** Incisivos.

COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS/EQUIPOS

AuraStraight se puede utilizar junto con:

- Equipos de ventilación; conectores cónicos de 15 mm de conformidad con la norma ISO 5356-1.
- Dispositivos de gestión de la vía aérea; broncoscopios y catéteres de intercambio*.
- Otros accesorios: jeringa Luer cónica estándar del 6 %, manómetro con conector Luer cónico estándar del 6 %, lubricación con agua, catéter de aspiración.

Cuando utilice instrumentos a través de la mascarilla, asegúrese de que el instrumento sea compatible y esté bien lubricado antes de su inserción.

** Consulte la Tabla 1 para obtener información sobre el tamaño máximo del instrumento.*

3.0. Uso del producto

3.1. Preparación antes del uso

SELECCIÓN DEL TAMAÑO

Ambu AuraStraight se presenta en diferentes tamaños para el uso en pacientes de diferentes pesos.

Para pacientes pediátricos, se recomienda que Ambu AuraStraight sea utilizado por un profesional médico familiarizado con la anestesia pediátrica.

Consulte las directrices de selección y la presión interna del manguito en la tabla 1, sección 4.0. (Especificaciones).

INSPECCIÓN DE AURASTRAIGHT

Utilice siempre guantes durante la preparación e inserción de Ambu AuraStraight para minimizar la contaminación.

Manipule AuraStraight con cuidado, ya que puede romperse o perforarse. Evite el contacto con objetos punzocortantes.

Asegúrese de que el sellado de la bolsa esté intacto antes de abrirla y deseche el dispositivo Ambu AuraStraight si el sellado de la bolsa ha sufrido algún daño.

Examine detenidamente el dispositivo AuraStraight en busca de daños, como perforaciones, arañazos, cortes, desgarros, piezas sueltas, bordes afilados, etc.

Asegúrese de que se ha retirado el protector del manguito.

Compruebe que el interior del tubo y del manguito del paciente no presentan bloqueos ni ninguna pieza suelta. No utilice el dispositivo AuraStraight si está obstruido o dañado.

Desinfe completamente el manguito del dispositivo AuraStraight. Una vez desinflado, compruebe exhaustivamente que el manguito no presenta arrugas ni pliegues. Infe el manguito hasta el volumen especificado en la tabla 1. Compruebe que el manguito inflado está simétrico y liso. No debe haber ninguna protuberancia ni ningún signo de fuga en el manguito, tubo piloto o globo piloto. Desinfe el manguito de nuevo antes de la inserción.

**3.2. Preparación para su uso
PREPARACIÓN ANTES DE LA INSERCIÓN**

- Desinfe totalmente el manguito de forma que quede plano y sin arrugas, presionando hacia abajo el

manguito sobre una superficie plana estéril (p. ej., un trozo de gasa estéril) y al mismo tiempo desinfele el dispositivo con una jeringa. ③

- Lubrique la punta posterior del manguito antes de su inserción aplicando un lubricante estéril a base de agua en la superficie posterior distal del manguito.
- Tenga siempre una mascarilla Ambu AuraStraight de repuesto lista para su uso.
- Preoxigene y utilice procedimientos de monitorización convencionales.
- Compruebe que el nivel de anestesia (o pérdida de conciencia) es el adecuado antes de intentar la inserción. La inserción se realizará satisfactoriamente con el mismo nivel de anestesia que sería adecuada para la intubación traqueal.
- La cabeza del paciente debe estar en posición extendida con flexión del cuello en la posición que normalmente se utiliza para la intubación traqueal (es decir, «la posición de olfateo»).

3.3. Inserción

- No emplee nunca una fuerza excesiva.
- Sujete la mascarilla Ambu AuraStraight como un lápiz, con el dedo índice colocado en la transición entre el manguito y el tubo del paciente. Debe colocar la otra mano bajo la cabeza del paciente. ④

- Inserte la punta del manguito presionando hacia arriba contra la bóveda del paladar y aplane el manguito contra el paladar. ⑤
- Verifique que la punta del manguito esté aplanada contra el paladar antes de continuar; empuje suavemente la mandíbula hacia atrás con el dedo corazón para abrir la boca más.
- Asegúrese de que la punta del manguito no entre en las valléculas ni en la abertura glótica y no quede atrapada contra la epiglotis o los aritenoides. El manguito debe presionarse contra la pared faríngea posterior del paciente.
- Cuando la mascarilla esté colocada, notará resistencia.
- Antes de tirar hacia atrás con la mano que sostiene la mascarilla, la otra mano se emplea para presionar hacia abajo en el tubo de la vía aérea. De este modo se asegura que el dispositivo Ambu AuraStraight permanezca en su lugar cuando se retire el dedo.
- Después de la inserción, asegúrese de que los labios no queden atrapados entre el tubo del paciente y los dientes para evitar traumatismos en los labios.

PROBLEMAS DE INSERCIÓN

- Para pacientes pediátricos, se recomienda una técnica de rotación parcial en caso de dificultades de colocación.

- La tos y la apnea inspiratoria durante la inserción de Ambu AuraStraight indican un nivel inadecuado de anestesia; aumente inmediatamente la anestesia con agentes inhalados o intravenosos e inicie la ventilación manual.
- Si no puede abrir la boca del paciente lo suficiente para insertar la mascarilla, compruebe que el paciente está adecuadamente anestesiado. Pida a un ayudante que tire de la mandíbula hacia abajo, de modo que sea más fácil ver dentro de la boca y verificar la posición de la mascarilla.
- Para dificultar la maniobra del ángulo en la parte posterior de la lengua al insertar el dispositivo Ambu AuraStraight, presione la punta contra el paladar por completo o, de lo contrario, la punta podría doblarse sobre sí misma o encontrar una irregularidad en la faringe posterior, por ejemplo, amígdalas hipertrofiadas. Si no se aplanan el manguito o si empieza a retorcerse cuando se inserta, retire la mascarilla y vuelva a insertarla. En el caso de obstrucción amigdalina se recomienda un movimiento diagonal de la mascarilla.

3.4. Fijación

Si se considera necesario, fije el dispositivo Ambu AuraStraight al rostro del paciente con esparadrapo o con un soporte mecánico de tubos adecuado a tal fin. ⑦ Se recomienda utilizar un bloque de mordida de gasa.

3.5. Inflado

- Sin sostener el tubo, infle el manguito sólo con el aire suficiente para obtener un sellado, equivalente a presiones dentro del manguito de un máximo de 60 cm H₂O. ⑥ En muchos casos, solo la mitad del volumen máximo es suficiente para conseguir un sellado (consulte los volúmenes máximos dentro del manguito en la tabla 1).
- Controle continuamente la presión del manguito durante el procedimiento quirúrgico con el manómetro del manguito. Esto es especialmente importante durante un uso prolongado o cuando se utilizan gases de óxido nítrico.
- Busque los siguientes signos que indican una colocación correcta: El posible ligero movimiento del tubo hacia afuera tras el inflado del manguito, la presencia de una hinchazón ovalada uniforme en el cuello alrededor de la tiroides y el área cricoide o que el manguito no es visible en la cavidad bucal.
- Es posible que la mascarilla tenga una ligera pérdida durante las tres o cuatro primeras respiraciones antes de asentarse en su posición en la faringe. Si la pérdida persiste, compruebe que se haya logrado un nivel adecuado de anestesia y que las presiones de inflado pulmonar son bajas antes de presuponer que es necesario volver a introducir la mascarilla AuraStraight.

3.6. Verificación de la posición correcta

- La colocación correcta debe proporcionar un sellado sin fugas contra la glotis con la punta del manguito en el esfínter esofágico superior.
- La línea vertical sobre el tubo del paciente debería tener una orientación anterior hacia la nariz del paciente.
- El dispositivo AuraStraight está correctamente insertado cuando los incisivos del paciente se encuentran entre las dos líneas horizontales del tubo del paciente. ②, elemento 5. Coloque de nuevo la mascarilla si los incisivos del paciente están fuera de este intervalo.
- La posición de AuraStraight se puede evaluar mediante capnografía, observando los cambios en el volumen corriente (por ejemplo, una reducción del volumen corriente espirado), auscultando los sonidos bilaterales de la respiración y la ausencia de sonidos sobre el epigastrio, y/u observando la elevación del tórax con ventilación. Si sospecha que el dispositivo AuraStraight se ha colocado mal, retírelo y vuélvalo a insertar (y asegúrese de que el nivel de anestesia sea el adecuado).
- Se recomienda la confirmación visual de la posición anatómicamente correcta, por ejemplo, mediante el uso de un endoscopio flexible.

REGURGITACIÓN INESPERADA:

- La regurgitación puede ser causa de un nivel inadecuado de anestesia. Los primeros signos de regurgitación puede ser respiración espontánea, tos o apnea inspiratoria.
- Si se produce regurgitación, siempre que la saturación de oxígeno se mantenga a niveles aceptables, no debe retirarse la mascarilla AuraStraight. Se debe tratar poniendo al paciente en posición «cabeza abajo». Desconecte brevemente el circuito de anestesia, de modo que el contenido gástrico no sea forzado hacia el interior de los pulmones. Compruebe que el nivel de anestesia es el adecuado y aumente la anestesia por vía intravenosa, si procede.
- Aplique presión a través del tubo del paciente de la mascarilla y a través de la boca. Succione el árbol traqueobronquial e inspeccione los bronquios con un endoscopio flexible.

3.7. Uso con otros dispositivos/equipos SISTEMA ANESTÉSICO Y BOLSA DE VENTILACIÓN

La mascarilla se puede usar tanto para la ventilación espontánea como controlada.

Durante la anestesia, el óxido nítrico puede propagarse dentro del manguito causando un aumento del volumen o presión de este. Ajuste la presión del manguito lo

suficiente para obtener un sellado adecuado (la presión del manguito no debe superar los 60 cm H₂O).

Los sistemas de respiración anestésica deben apoyarse de forma adecuada cuando se conecten a AuraStraight para evitar la rotación de la mascarilla.

UTILIZACIÓN CON VENTILACIÓN ESPONTÁNEA

AuraStraight es un dispositivo adecuado para pacientes con respiración espontánea cuando se utiliza anestesia con agentes volátiles o intravenosa a condición de que la anestesia sea la adecuada para el nivel de estímulo quirúrgico y el manguito no esté sobreinflado.

UTILIZACIÓN CON VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA

Al aplicar la ventilación con presión positiva, asegúrese de que el sellado sea adecuado. Para mejorar el sellado, se sugiere lo siguiente:

- Optimice la colocación de AuraStraight girando o tirando de la cabeza.
- Ajuste la presión del manguito. Pruebe con presiones más bajas y más altas (un sellado deficiente del manguito puede deberse a una presión demasiado baja o demasiado alta del manguito).

- Si se producen fugas alrededor del manguito, retire la mascarilla y vuelva a insertarla, asegurándose de que el nivel de anestesia sea el adecuado.

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

AuraStraight es compatible con RM.

3.8. Procedimiento de retirada

La extracción se debe realizar siempre en una zona en la que se disponga de un equipo de succión y posibilidad de intubación traqueal rápida.

No retire la mascarilla AuraStraight con el manguito completamente inflado para evitar traumatismos en los tejidos y laringoespasmos.

3.9. Eliminación

Deseche el dispositivo Ambu AuraStraight usado de forma segura de acuerdo con los procedimientos locales.

4.0. Especificaciones

Ambu AuraStraight cumple con la norma ISO 11712 Equipos anestésicos y respiratorios - Conexiones y vías aéreas supralaríngeas.

	Pediátrico				Adulto			
Tamaño de la mascarilla	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Peso del paciente	2-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg
Volumen máximo en el interior del manguito	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Presión máxima en el interior del manguito	60 cm H ₂ O							
Conector	15 mm macho (ISO 5356-1)							
Tamaño máximo del instrumento*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibilidad del cono Luer de la válvula de inflado	Cono Luer compatible con equipos que cumplan con las normas ISO 594-1 e ISO 80369-7							
Condiciones de almacenamiento adecuadas	10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)							
Peso aproximado de la mascarilla	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Volumen interno de la vía de ventilación	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Caída de presión según lo establecido en la norma ISO 11712, anexo C	0,4 cm H ₂ O a 15 l/min	0,3 cm H ₂ O a 15 l/min	0,4 cm H ₂ O a 30 l/min	0,3 cm H ₂ O a 30 l/min	0,4 cm H ₂ O a 60 l/min	0,4 cm H ₂ O a 60 l/min	0,3 cm H ₂ O a 60 l/min	0,3 cm H ₂ O a 60 l/min
Mín. interdental mínimo	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Longitud nominal de la vía ventilatoria interna	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabla 1: Especificaciones para Ambu AuraStraight

* El tamaño máximo del instrumento está indicado a modo de guía para la selección del diámetro adecuado de un dispositivo que tenga que pasar a través del tubo del paciente de AuraStraight.

Encontrará una lista con la explicación de todos los símbolos en <https://www.ambu.com/symbol-explanation>.

© Copyright 2021 Ambu A/S (Dinamarca). Reservados todos los derechos.

Ninguna de las partes de esta documentación puede reproducirse de ninguna forma, ni fotocopiar, sin la autorización previa por escrito de propietario de los derechos de autor.

1.1. Kasutusotstarve/ Näidustused

Ambu AuraStraight on mõeldud kasutamiseks alternatiivina näomaskile, et saavutada ja säilitada tühja kõhuga patsientidel kontroll hingamisteede üle nii rutiinsel kui erakorralistel anesteetilistel protseduuridel.

1.2. Ettenähtud kasutajad ja kasutuskeskkond

Hingamisteede jälgimise koolituse läbinud tervishoiutöötajad.
AuraStraight on mõeldud kasutamiseks haiglateskkonnas.

1.3. Ettenähtud sihtrühm

Täiskasvanud ja vähemalt 2 kg kaaluvad lapsed, kelle seisundis on neelupealsed tunnistatud hingamistoru kasutamiseks sobivaks.

1.4. Vastunäidustused

Ei ole teada.

1.5. Kliinilised eelised

Hoiab ülemised hingamisteed gaaside liikumiseks avatuna.

1.6. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne sisestamist peavad kõik Ambu AuraStraight'i kasutavad meditsiinitöötajad tutvuma kasutusjuhendis toodud hoiatuste, ettevaatusabinõude, näidustuste ja vastunäidustustega.

HOIATUSED



1. Toode on mõeldud kasutamiseks ainult hingamisteede jälgimise koolituse läbinud tervishoiutöötajatele.
2. Enne kasutamist kontrollige alati toodet visuaalselt ja kontrollige vastavalt jaotises 3.1 „Enne kasutamist ettevalmistamine“ kirjeldatule selle toimivust, sest defektne seade või võõrkehad seadmes võivad patsiendi hingamisteed ummistada, hingamist takistada, põhjustada limaskestakahjustusi ja infektsioone. Ärge kasutage toodet, kui kõik kasutamise eelsed sammud ei ole edukalt läbi viidud.
3. AuraStraight on mõeldud ainult ühel patsiendil kasutamiseks, ärge kasutage kasutatud seadet teisel patsiendil. Saastunud toote korduv kasutamine võib põhjustada infektsiooni.
4. AuraStraight ei kaitse hingetoru ega kopse võõrkehade sissehingamise ohu eest.
5. Ärge kasutage AuraStraight'i sisestamisel ja eemaldamisel liigset jõudu, kuna nii võite kudesid vigastada.
6. Manseti maht või rõhk võivad lämmastikoksiidi, hapniku või teiste meditsiiniliste gaasidega kokkupuutumisel muutuda, mis võib kudesid kahjustada. Jälgige operatsiooni ajal pidevalt manseti rõhku.
7. Ärge kasutage AuraStraight'i laserite ja elektrokauteri-satsiooni seadmete läheduses, kuna see võib põhjustada seadme süttimise hingamisteedes ja koepõletusi.

8. Ärge intubeerige patsienti otse läbi AuraStraight'i, kuna endotrahheaalne toru võib kinni jääda, mis võib põhjustada patsiendi ebapiisava õhuga varustamise.
9. Üldiselt tohib AuraStraight'i kasutada ainult patsiendil, kes on täielikult teadvusetu ja ei avalda seadme sisestamisel vastupanu.
10. Üldine larüngaalmaski kasutamisest tingitud tüsistuste määr on väike, kuid kasutaja peab oma kutseteadmistest lähtudes otsustama, kas larüngaalmaski kasutamine on sobiv lahendus. Järgnevad patsiendid on suurema tõsiste tüsistuste, sh võõrkehade hingamisteedesse sattumise ja ebapiisava õhuga varustatuse ohus:
 - Ülemiste hingamisteede obstruktsiooniga patsiendid;
 - Mittepaastunud patsiendid (sh need juhud, mille korral ei ole võimalik kontrollida, kas patsient on paastunud);
 - Seedetrakti ülemise osa probleemidega patsiendid (nt osofagektoomia, söögitorusong, gastroösofageaalne reflukshaigus, ekstreemne ülekaalus, rasedus üle 10 nädala);
 - Patsiendid, kes vajavad kõrgsurve hapnikugeneraatorit;

- Patsiendid, kellel esineb neelu-/kõripatoloogia, mille tõttu mask ei pruugi olla anotoomiliselt sobiv (nt tuumorid, kiiritusravi kaelale, mis hõlmab hüpofarünksi, raske suuneelu trauma);
- Patsiendid, kelle suuva ei ole seadme sisestamiseks piisavalt suur.

ETTEVAATUSABINÕUD

1. Ärge leotage ega steriliseerige seadet, sest see võib jätta seadmele kahjulikke jääke või põhjustada seadme rikkeid. Seadme ehituse ja materjali tõttu ei saa seda tavapärase puhastus- ja steriliseerimisprotseduuridega puhastada.
2. Kontrollige alati enne kasutamist AuraStraight´i ja välisseadme ühilduvust, et vältida seadmete kasutamist, mis ei läbi AuraStraight´i valendikku.
3. Manseti rõhk peab olema nii madal kui võimalik (tagades samas piisava õhukindluse) ning mitte kõrgem kui 60 cm H₂O.
4. Jälgige regulaarselt hingamisteede probleemide või ebapiisava õhuvarustuse tundemärkide teket ja muutke patsiendi hingamisteede vajadustest sõltuvalt AuraStraight´i asendit, sisestage seade uuesti või asendage uuega.
5. Kontrollige iga kord pärast patsiendi pea või kaela asendi muutmist uuesti hingamisteede läbitavust.

1.7. Võimalikud kõrvaltoimed

Larüingealmaskide kasutamist seostatakse väikeste kõrvaltoimetega (nt kurguvalu, verejooks, düsfoonia, düsfaagia) ja suuremate kõrvaltoimetega (nt oksendamise/ võõrkehade hingamisteedesse sattumine, neeluspasmid, närvikahjustus).

1.8. Üldised märkused

Kui selle seadme kasutamise ajal või kasutamise tulemusel on aset leidnud tõsine vahejuhtum, teatage sellest palun tootjale ja vastavale riiklikule asutusele.

2.0. Seadme kirjeldus

AuraStraight on steriilne ühekordselt kasutatav larüingealmask, mis koosneb patsiendivoolikust, mille distaalses otsas on täispuhutav mansett. Manseti saab täita läbi tagasilöögiklapi, mis võimaldab juhtballoonil näidata täitumise/tühjendamise olekut. Mansett vastab hüpofarünksi kontuuridele ja selle valendikule, mis on suunatud patsiendi kõriava poole. Manseti ots on surutud vastu söögitoru ülaosa ja manseti proksimaalots toetub keelepärale.

AuraStraight on saadaval kaheksas eri suuruses. AuraStraight´i põhikomponendid on kujutatud joonisel ①.

Joonis 1 (lk 4): AuraStraight´i osade ülevaade:

1.Ühenduspesa; 2.Patsiendivoolik; 3.Mansett
4.Kontrollklapp; 5.Juhtballoon; 6. Juhttoru;
7.Sisemiste hingamisteede nominaalne pikkus*.
* Vt tabelit 1, milles nominaalne pikkus on esitatud sentimeetrites.

Joonis 2 (lk 4): AuraStraight´i õige asend seoses AuraStraight´i osade ja anotoomiliste orientiiridega.

AuraStraight´i osad: 1.Õhuga täidetav mansett;
2.Suuruse tähis; 3.Õhuava; 4. Õhu liikumistee;
5.Sisestusmärkide tavaline sügavus; 6.Seadme ots.

Anatoomilised orientiirid: **A.** Söögitoru; **B.** Hingetoru; **C.** Rõngaskõhr; **D.** Kilpnäärme kõhr; **E.** Häälpeaelad; **F.** Kõriava; **G.** Kõriepalise põhi; **H.** Keeleluu; **I.** Keel; **J.** Suuõõs; **K.** Ninaneel; **L.** Lõikehambad.

VASTAVUS TEISTE SEADMETEGA

Seadet AuraStraight saab kasutada koos järgmiste seadmega:

- Hingamisaparaadid; 15 mm koonilised liitmikud vastavalt standardile ISO 5356-1.
- Hingamisteede jälgimise seadmed, bronhoskoobid ja vahetuskateetrid*.

- Muud tarvikud, standardne 6 % kooniline luer-tüüpi süstal, manomeeter standardse 6 % koonilise luer-lock ühendusega, veepõhine libesti, äratõmbekateeter.

Läbi maski instrumentide kasutamise korral veenduge enne sisestamist, et instrument on seadmega ühilduv ja hästi määritud.

** Vt tabelist 1 teavet instrumendi maksimaalse lubatud suuruse kohta.*

3.0. Toote kasutamine

3.1. Ettevalmistused kasutamiseks

SUURUSE VALIMINE

Ambu AuraStraight on saadaval eri suurustes kasutamiseks erineva kehakaaluga patsientidel.

Laste puhul on soovitatav, et Ambu AuraStraight'i kasutaks laste anesteesiaga tuttav arst.

Vt valimisjuhiseid ja maksimaalset mansetisest rõhku tabelist 1 (jaotis 4.0). (Tehnilised andmed).

AURASTRAIGHT'I KONTROLL

Saaste minimeerimiseks kandke Ambu AuraStraight'i ettevalmistamise ja sisestamise ajal alati kindaid.

Käsitsege AuraStraight'i ettevaatlikult, sest hooletu kasutamise korral võite seda rebestada või selle läbi torgata.

Vältige kokkupuudet teravate ja teravatipuliste esemetega.

Enne avamist kontrollige, kas pakend on kindlalt suletud, ning visake katkises kotis Ambu AuraStraight ära.

Veenduge hoolikalt, et AuraStraight ei ole kahjustatud, nt läbi torgatud, kriimustatud, katki lõigatud, rebenenud, lahtiste osadega, teravate servadega jne.

Veenduge, et mansetikaitse on mansetist eemaldatud.

Veenduge, et patsiendivooliku siseküljel ja mansetil ei ole ummistusi ega lahtiseid osi. Ärge kasutage AuraStraight'i, kui see on ummistunud või kahjustatud.

Tühjendage AuraStraight'i mansett täielikult õhust. Pärast tühjendamist kontrollige hoolikalt, et mansetis ei ole kortse ega volte. Täitke mansett tabelis 1 osutatud mahuni. Veenduge, kas täispuhutud mansett on sümmeetriline ja sile. Mansetil, juhttorudel ega juhtballoonil ei tohi olla kühme ega lekete tunnuseid. Tühjendage mansett enne sisestamist uuesti.

3.2. Kasutamiseks ettevalmistamine PAIGALDUSEELNE ETTEVALMISTAMINE

- Tühjendage mansett täielikult nii, et mansett oleks sirge ja kortsudeta, surudes mansetti vastu tasast steriilset

pinda (nt vastu steriilset marlitükki) ning tühjendades samal ajal seadme süstlaga. ③

- Enne sisestamist määrige manseti tagumist otsa, kandes manseti distaalsele tagumisele pinnale steriilset veepõhist libestit.
- Hoidke alati käepärast Ambu AuraStraight'i tagavaraseade.
- Küllastage hapnikuga ja kasutage standardseid seireprotseduure.
- Enne sisestamist veenduge, et patsiendi anesteesia tase (või teadvusetus) on piisav. Sisestamine peaks õnnestuma sama anesteesiatasemel, mis sobiks trahhea intubeerimiseks.
- Patsiendi pea peaks olema paigutatud nii, et kael on välja sirutatud tavalisel trahhea intubeerimisel kasutatavas asendis (st „nuusutamisasend“).

3.3. Sisestamine

- Ärge kasutage liigset jõudu.
- Hoidke Ambu AuraStraight'i nagu pliiaitsit, nii et nime-tissõrm jääks manseti ja patsiendivooliku üleminekukohale. Teine käsi tuleb asetada patsiendi pea alla. ④
- Sisestage manseti ots seda vastu suulage surudes ja suruge mansett vastu suulage lamedaks. ⑤
- Enne jätkamist veenduge, et manseti ots on vastu suulage lamedaks surutud – vajutage lõualuud õrnalt sõrmega allapoole, et suud rohkem avada.

- Veenduge, et manseti ots ei sisene kõrisse ega takerdu keelepealse põhja ega arütenoidide külge. Mansett tuleb suruda vastu patsiendi tagumist neeluseina.
- Kui mask on õiges kohas, tunneb sisestaja takistust.
- Enne maski paigal hoidva käe eemaldamist surutakse teise käega õhuvoolikule. See tagab sõrme eemaldamisel Ambu AuraStraight´i paigale jäämise.
- Pärast sisestamist veenduge, et patsiendi huuled ei jää patsienditoru ja hammaste vahele, kuna see võib huuli vigastada.

SISESTUSPROBLEEMID

- Lastest patsientide puhul soovitatakse paigaldusprobleemide korral kasutada osalist pööramistehnikat.
- Köhimine ja hingamine Ambu AuraStraight´i sisestamise ajal viitab sellele, et anesteesia ei ole piisavalt sügav. Manustage patsiendile kohe anesteesia piisava sügavuse tagamiseks sissehingatavaid või intravenoosseid aineid ja alustage manuaalset ventileerimist.
- Kui teil ei õnnestu patsiendi suud maski sisestamiseks piisavalt avada, veenduge, et patsient on piisavalt tuimestatud. Paluge abilisel sikutada patsiendi lõualuu alla, et teil oleks lihtsam patsiendi suhu näha ning maski asendit kontrollida.

- Kui AuraStraight´i nurka on keele tagaosas sisestamisel raske muuta, vajutage ots kogu pikkuses suulae vastu, vastasel juhul võib ots voltuda või neelu tagaosas suuõone ebanormaalse ehituse, näiteks mandlite hüpertroofiaga kokku puutuda. Kui mansetti ei õnnestu sisestamisel lamedaks suruda või see hakkab kaarduma, eemaldage mask ja paigaldage uuesti. Mandlite obstruktsiooni korral soovitatakse maski diagonaalselt liigutada.

3.4. Kinnitamine

Vajadusel kinnitage AuraStraight patsiendi näole teibiga või spetsiaalse selleks mõeldud mehaanilise voolikuhoidikuga. ⑦ Soovitatav on kasutada marlitupsuplokki.

3.5. Täitmine

- Täitke mansett voolikust kinni hoidmata piisava koguse õhuga, et saavutada tihendus, mis vastab maksimaalselt 60 cm H₂O suurusele mansetisisesele rõhule. ⑥ Tihenduse saavutamiseks piisab sageli vaid poolest maksimaalsest mahust – maksimaalsed mansetisisesed mahud on toodud tabelis 1.
- Jälgige manseti rõhku kirurgilise protseduuri ajal pidevalt manseti manomeetriga. See on eriti oluline pikaajalisel kasutamisel või lämmastikoksiidigaaside kasutamisel.

- Nõuetekohasele paigutusele viitavad järgmised tunnused: vooliku võimalik kerge väljapoole liikumine manseti täitmisel, sile ovaalne turse kaelal kilpnäärme ja rõngaskõhre piirkonnas ning manseti paiknemine nii, et see ei ole suuõones visuaalselt näha.
- Mask võib esimese kolme või nelja hingetõmbe ajal veidi lekkida, seejärel paigutub see neelus õigele kohale. Kui leke ei lakka, kontrollige enne AuraStraight´i uuesti sisestamist, kas anesteesia sügavus on piisav ja kas kopsusisene rõhk sissehingamisel on madal.

3.6. Õige asendi kontrollimine

- Õige paigutuse korral peaks tekkima lekkevaba tihend vastu kõri nii, et manseti ots paikneb söögitoru ülaosas.
- Patsiendivoolik peab olema vertikaalselt suunatud ettepoole patsiendi nina suunas.
- AuraStraight on õigesti sisestatud, kui patsiendi lõikehambad jäävad kahe horisontaalse joone vahele patsiendivoolikul ② (punkt 5). Kui patsiendi lõikehambad on sellest vahemikust väljas, muutke maski asendit.
- AuraStraight´i asendit saab hinnata kapnograafiamonitori abil, jälgides muutusi hingamismahus (nt väljahingatava õhu mahu vähenemine), kuulates stetoskoobiga kahepoolseid hingamiskahinaid ning hingamiskahinate puudumist

kõhu olemises osas ja/või jälgides rindkere liikumist hingamisel. Kui kahtlustate, et AuraStraight on valesti paigaldatud, eemaldage see ja sisestage uuesti veendudes, et anesteesia sügavus on piisav.

- Anatoomiliselt õiget asendit tuleks kontrollida visuaalselt, nt bronhoskoobiga.

OOTAMATU OKSENDAMINE:

- Oksendamine võib esineda ebapiisava anesteesiataseme korral. Esimesed oksendamise märgid võivad olla spontaanne hingamine, kõhimine või hinge kinnihoidmine.
- Kui hapnikutase jääb aktsepteeritavale tasemele, ei ole vaja oksendamise korral AuraStraight´i eemaldada. Olukorra lahendamiseks tuleb patsient asetada pea alaspidi asendisse. Ühendage anesteesiaaringe lühikeseks ajaks lahti, et maosisu ei satuks kopsudesse. Veenduge, et anesteesia sügavus oleks piisav ja vajaduse korral süvendage anesteesiast.
- Aspireerige maski patsiendivooliku ja patsiendi suu kaudu. Aspireerige hingetorud ja bronhid ja kontrollige bronhoskoobiga bronhe.

3.7. Kasutamine koos muude seadmetega ANESTEESIASÜSTEEM JA VENTILATSIOONIKOTT

Maski võib kasutada nii loomuliku kui ka kontrollitud hingamise korral.

Anesteesia ajal võib lämmastikoksiid mansetisse levida, põhjustades manseti mahu/rõhu suurenemise. Reguleerige manseti rõhku vaid nii palju, et saavutada piisav tihedus (manseti rõhk ei tohiks ületada 60 cm H₂O).

Maski pööremise vältimiseks peab anesteetiline hingamissüsteem AuraStraight´iga ühendamiselt piisavalt toetada.

KASUTAMINE LOOMULIKU HINGAMISE KORRAL

AuraStraight sobib lenduvate ainete või intravenoosse anesteesiaga kasutamise korral loomulikult hingavatele patsientidele tingimusel, et anesteesia on kirurgilise sekkumise tasemele vastav ning mansetti ei täideta liigselt õhuga.

KASUTAMINE POSITIIVSE RÕHUGA VENTILATSIOONISEADMEGA

Positiivse rõhuga ventilatsiooniseadme kasutamise korral tagage, et tihendus on piisav. Tihenduse tõhustamiseks soovitatatakse järgmist:

- Optimeerige AuraStraight´i asendit patsiendi pea pööramise või sikutamise teel.
- Reguleerige manseti rõhku. Proovige nii madalamat kui ka kõrgemat rõhku (manseti ebapiisava tihenduse põhjus võib olla liiga madal või liiga kõrge rõhk mansetis).

- Kui manseti ümber peaks tekkima leke, eemaldage mask ja paigaldage uuesti, veendudes, et anesteesia sügavus on piisav.

MAGNETRESONANTSTOMOGRAAFIA (MRT)

AuraStraight sobib kasutamiseks MRT-seadmes.

3.8. Eemaldamisprotseduur

Seade tuleb alati eemaldada alas, kus on olemas vaakumaparatuur ja vahendid trahhea kiiresti intubeerimiseks.

Ärge eemaldage AuraStraight´i koos mansetiga, mis on täielikult õhuga täidetud, et vältida kudede kahjustamist ja neeluspasme.

3.9. Ringlusest eemaldamine

Eemaldage kasutatud Ambu AuraStraight ringlusest ohutult vastavalt kohalikul tasandil kehtivale korrale.

4.0. Tehnilised andmed

Ambu AuraStraight vastab anesteesia- ja hingamisteede seadmete standardile ISO 11712 (Kõripealsed hingamisteed ja konnektorid).

	Laste versioon				Täiskasvanute versioon			
Maski suurus	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Patsiendi kehakaal	2-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	> 100 kg
Maksimaalne mansetisene maht	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksimaalne mansetisene rõhk	60 cm H ₂ O							
Konnektor:	15 mm, pistikühendus (ISO 5356-1)							
Maksimaalne instrumendi suurus*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Inflatsiooniklapi luer-tüüpi koonuse ühilduvus	Luer-tüüpi koonus, mis ühildub standarditele ISO 594-1 ja ISO 80369-7 vastavate seadmetega							
Sobivad hoiutingimused	10 °C kuni 25 °C							
Sobiv maski kaal	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Hingamisteede sisemine maht	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Rõhulangus vastavalt standardi ISO 11712 lisale C	0,4 cm H ₂ O 15 l/min juures	0,3 cm H ₂ O 15 l/min juures	0,4 cm H ₂ O 30 l/min juures	0,3 cm H ₂ O 30 l/min juures	0,4 cm H ₂ O 60 l/min juures	0,4 cm H ₂ O 60 l/min juures	0,3 cm H ₂ O 60 l/min juures	0,3 cm H ₂ O 60 l/min juures
Min hammaste vaheline vahe	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Hingamisteede nominaalne pikkus	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabel 1. Seadme Ambu AuraStraight tehnilised andmed.

* Maksimaalne instrumendi suurus on mõeldud kasutamiseks suunisena läbi AuraStraight'i patsienditoru sisestatava seadme sobiva diameetri valimiseks.

Kõigi sümbolite selgitused: <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Autoriõigused 2021, Ambu A/S, Taani. Kõik õigused kaitstud.

Ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku loata ei tohi ühtegi selle dokumendi osa ühelgi kujul taasesitada (sh paljundada).

1.1. Käyttötarkoitus/ Käyttöaihe

Ambu AuraStraight on tarkoitettu käytettäväksi vaihtoehtona kasvomaskille avaamaan hengitystie ja ylläpitämään ilmatien hallintaa rutiini- ja hätätilanteiden anestesiatoimenpiteissä.

1.2. Tarkoituksenmukaiset käyttäjät ja käyttöympäristö

Ilmatien hallintakoulutuksen saaneet ammattilaiset. AuraStraight on tarkoitettu sairaalakäyttöön.

1.3. Potilaskohderyhmä

Aikuiset ja yli 2 kg painavat lapsipotilaat, joille soveltuu arvion mukaan supraglottinen ilmatie.

1.4. Kontraindikaatiot

Ei tunnettuja.

1.5. Kliiniset edut

Pitää ylähengitystien auki, jotta kaasut pääsevät kulkemaan sen läpi.

1.6. Varoitukset ja huomautukset

Ennen sisäänvientiä on tärkeää, että kaikki Ambu AuraStraightia käyttävät lääketieteen ammattilaiset ovat tutustuneet käyttöohjeissa oleviin varoituksiin, varotoimiin, indikaatioihin ja kontraindikaatioihin.

VAROITUKSET



1. Tuote on tarkoitettu vain ilmatien hallintakoulutuksen saaneen lääkintähenkilökunnan käyttöön.
2. Tarkista tuote aina silmämääräisesti ja suorita toimintatesti pakkauksesta ottamisen jälkeen ja ennen käyttöä kohdassa 3.1 (Valmistelut ennen käyttöä) kuvatulla tavalla, sillä häiriöt ja vierasesineet voivat estää potilaan ventiloinnin tai heikentää sitä, aiheuttaa limakalvovaurioita tai infektoida potilaan. Tuotetta ei saa käyttää, jos valmistelut ennen käyttöä epäonnistuvat.
3. Älä käytä AuraStraightia toisen potilaan hoidossa, sillä se on kertakäyttöinen laite. Kontaminoituneen tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektion.
4. AuraStraight ei suojele henkitorvea tai keuhkoja aspiraatoriskiltä.
5. AuraStraightia sisäänvietäessä ja poistettaessa ei saa käyttää liiallista voimaa, sillä se voi aiheuttaa kudosaaurion.
6. Kuffiosan tilavuus tai paine voi muuttua typpioksidin, hapen tai muiden lääkinnällisten kaasujen vaikutuksesta, mikä voi aiheuttaa kudosaaurion. Tarkkaile kuffiosan painetta jatkuvasti kirurgisen toimenpiteen aikana.
7. Älä käytä AuraStraightia lasereiden tai sähköpolttimien läheisyydessä, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon ilmatiessä ja kudospalovammoja.

8. Älä suorita suoraa intubointia AuraStraightin kautta, sillä intubaatioputki (ET-putki) voi juuttua kiinni, mikä voi johtaa puutteelliseen ventilointiin.
9. Yleensä AuraStraightia tulee käyttää vain potilailla, jotka ovat syvästi tajuttomia eivätkä vastusta sisäänvientiä.
10. Larynxmaskin komplikaatioiden kokonaismäärä on pieni, mutta käyttäjän on käytettävä ammatillista harkintaa päättäessään, onko larynxmaskin käyttö asianmukaista. Seuraavilla potilailla on suurempi vakavien komplikaatioiden riski, mukaan lukien aspiratio ja riittämätön ventilointi:
 - Potilaat, joilla on ylähengitystietukos.
 - Paastoamattomat potilaat (mukaan lukien potilaat, joilla paastoamista ei voida vahvistaa).
 - Potilaat, joilla on yläruoansulatuskanavan ongelmia (esim. ruokatorviavanne, palleatyrä, ruokatorven refluksitauti, sairaaloinen ylipaino, raskaus >10 viikkoa).
 - Potilaat, jotka tarvitsevat korkeapaineista ventilointia.
 - Potilaat, joiden faryngeaalinen/laryngeaalinen patologia saattaa vaikeuttaa maskin anatomista istuvuutta (esim. kasvaimet, kaulan sädehoito alanelun alueella, vaikea orofaryngeaalinen trauma).
 - Potilaat, joiden suu ei aukea riittävästi sisäänvientiä varten.

HUOMIOITAVAA

1. Älä liota, huuhtele äläkä steriloi laitetta, koska seurauksena voi olla haitallisia jäämiä tai laitteen toimintahäiriö. Tavanomaisia puhdistus- ja sterilointitapoja ei saa käyttää laitteen rakenteen ja materiaalien vuoksi.
2. Tarkista aina ennen käyttöä AuraSraightin yhteensopivuus ulkoisen laitteen kanssa, jotta vältetään sellaisten laitteiden käyttö, jotka eivät pääse kulkemaan AuraSraightin lumenin läpi.
3. Kuffiosan paine on pidettävä mahdollisimman pienenä, mutta tiiviynen on oltava riittävä eikä paine saa olla yli 60 cm H₂O.
4. Mahdollisten hengitystieongelmien tai riittämättömän ventiloinnin merkkejä on valvottava säännöllisesti, ja AuraSraightin asentoa on tarvittaessa korjattava, se on vietävä sisään uudelleen tai vaihdettava, jotta ilmatie pysyy avoimena.
5. Varmista aina hengitystien avoimuus potilaan pään tai kaulan asennon muuttumisen jälkeen.

1.7. Mahdolliset haittavaikutukset

Larynx-maskien käyttöön liittyy vähäisiä haittavaikutuksia (esim. kurkkukipu, verenvuoto, dysfonia, dysfagia) ja merkittäviä haittavaikutuksia (esim. käänteisvirtaus/ aspiraatio, laryngospasmi, hermovaurio).

1.8. Yleisiä huomioita

Jos laitteen käytön aikana tapahtuu tai käytöstä aiheutuu vakava haitta, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle viranomaiselle.

2.0. Laitteen kuvaus

AuraSraight on steriili, kertakäyttöinen larynx-maski, joka koostuu potilasputkesta ja distaalipäässä olevasta ilmalla täytettävästä kuffiosasta. Kuffiosa voidaan täyttää sulkuventtiilin kautta, jolloin pilottipallo ilmaisee kuffiosan olevan täysi tai tyhjä. Kuffiosa mukautuu alanelun muotoihin niin, että sen lumen on potilaan kurkunpään aukkoa kohti. Kuffiosan kärki painautuu ylempää ruokatorven sulkijalihasta vasten, ja kuffiosan proksimaalinen pää on kielen tyven päällä.

AuraSraightia on saatavilla kahdeksan eri kokoa.
AuraSraightin pääkomponentit on esitetty kuvassa ①.

Kuva 1 (sivu 4): AuraSraightin osien yleiskatsaus:

1. Liitin; 2. Potilasputki; 3. Kuffiosa; 4. Sulkuventtiili; 5. Pilottipallo; 6. Ohjausputki; 7. Sisäisen ventiloitintien nimellispituus*

* Katso taulukosta 1 nimellispituus senttimetreinä.

Kuva 2 (sivu 4): AuraSraightin oikea sijainti suhteessa AuraSraightin osiin ja anatomisiin maamerkkeihin

AuraSraightin osat: 1. Ilmalla täytettävä kuffiosa; 2. Kokomerkinä; 3. Ventilointiaukko; 4. Ventiloitintie; 5. Normaalin asetussyvyyden merkit; 6. Laitepuolen pää.

Anatomiset maamerkit: A. Ruokatorvi; B. Trakea; C. Rengasrusto; D. Kilpirusto; E. Äänihuulet; F. Kurkunpään aukko; G. Kurkunkansi; H. Kieliluu; I. Kieli; J. Suuontelo; K. Nenänielu; L. Etuhampaat.

YHTEENSOPIVUUS MUIDEN LAITTEIDEN KANSSA

AuraSraightia voidaan käyttää yhdessä seuraavien kanssa:

- Ventilointilaitteet, joissa on ISO 5356-1 -standardin mukaiset 15 mm:n kartioliittimet.
- Ilmatien hallintalaitteet: bronkoskoopit ja vaihtokatetrit*.
- Muut lisävarusteet: vakiomuotoinen 6 % kartiomainen Luer-ruisku, vakiomuotoisella 6 % kartiomaisella Luer-liittimellä varustettu painemittari, vesipohjaiset voiteluaineet, imukatetri.

Kun instrumentteja käytetään maskin läpi, varmista ennen sisäänvientä, että instrumentti on yhteensopiva ja hyvin liukastettu.

* Katso instrumentin enimmäiskoko taulukosta 1.

3.0. Tuotteen käyttö

3.1. Valmistelut ennen käyttöä

KOON VALINTA

Ambu AuraSraight -maskeja on saatavana eri kokoisina eripainoisille potilaille.

Lapsipotilaita hoidettaessa suositellaan, että Ambu AuraSraight -maskia käyttää lasten anestesiaan perehtynyt lääketieteen ammattilainen.

Katso valintaohjeet ja suurin sallittu kuffiosan sisäinen paine taulukosta 1, kohdassa 4.0. (Tekniset tiedot).

AURASTRAIGHTIN TARKISTAMINEN

Käytä aina käsineitä Ambu AuraSraightin valmistelun ja sisäänviennin aikana kontaminoitumisen välttämiseksi.

Käsittele AuraSraightia varovasti, sillä se voi repeytyä tai puhjeta. Vältä kontaktia teräviin esineisiin.

Tarkista, että pussin sinetti on ehjä ennen avaamista, ja hävitä Ambu AuraSraight, jos pussin sinetti on vahingoittunut.

Tutki AuraSraight perusteellisesti vaurioiden varalta, ettei siinä ole puhkeamia, naarmuja, viiltoja, repeämiä, irrallisia osia, teräviä reunoja tms.

Varmista, että kuffiosan suojus on poistettu kuffiosasta.

Tarkista, että potilasputken ja kuffiosan sisällä ei ole tukoksia eikä irtonaisia osia. Älä käytä AuraSraightia, jos se on tukossa tai vaurioitunut.

Tyhjennä AuraSraightin kuffiosaa kokonaan. Kun kuffiosaa on tyhjennetty, tarkista huolellisesti, ettei siinä ole rypyjä tai taitoksia. Täytä kuffiosaa ilmalla taulukon 1 mukaiseen

tilavuuteen. Tarkista, että ilmalla täytetty kuffiosaa on symmetrinen ja sileä. Kuffiosassa, ohjausputkessa tai pilottipallossa ei saa olla pullistumia tai merkkejä vuodosta. Tyhjennä kuffiosaa uudelleen ennen asettamista.

3.2. Käytön valmistelu VALMISTELU ENNEN SISÄÄNVIENTIÄ

- Tyhjennä kuffiosaa kokonaan niin, että kuffiosaa on litteä ja sileä painamalla kuffiosaa tasaista steriiliä pintaa (esim. steriiliä sideharsotaitosta) vasten ja tyhjennä samalla laite ruiskulla. ③
- Liukasta kuffiosan posteriorinen kärki ennen sisäänvientä levittämällä steriiliä, vesipohjaista voiteluainetta kuffiosan distaalaiselle takapinnalle.
- Pidä aina toinen Ambu AuraSraight varalla käyttövalmiina.
- Esihapeta ja noudata normaaleja valvontamenettelyjä.
- Tarkista ennen sisäänvientä, että anestesian taso (tai tajuttomuus) on riittävä. Sisäänviennin pitäisi onnistua samalla anestesiatasolla kuin trakeaalinen intubaatio.
- Potilaan pää on asetettava niin, että niska on taivutettu asentoon, jota normaalisti käytetään trakeaalisessa intuboinnissa (ts. haisteluasentoon).

3.3. Sisäänvienti

- Älä milloinkaan käytä liikaa voimaa.
- Pitele Ambu AuraStraightia kynän tavoin siten, että etusormi on kuffiosan ja potilasletkun välisessä liitoskohdassa. Aseta toinen käsi potilaan pään alle. ④
- Vie kuffiosan kärki sisään painaen ylöspäin kovaa kitalakea vasten ja litistä kuffiosaa sitä vasten. ⑤
- Varmista ennen jatkamista, että kuffiosan kärki on litteänä kitalakea vasten – työnnä leukaa varovasti alas päin keskisormella avataksesi suuta lisää.
- Varmista, että kuffiosan kärki ei mene kuoppaan tai äänirakoon ja että se ei tartu kurkunkanteen tai kurkunpään rustoihin. Kuffiosaa on painettava potilaan nieluontelon takaosaa vasten.
- Kun maski on paikallaan, tuntuu vastusta.
- Ennen kuin vedät pois maskia pitelevän käden, paina toisella kädellä ilmatieputkea. Näin varmistetaan, että Ambu AuraStraight pysyy paikallaan, kun sormiote irrotetaan.
- Varmista sisäänviennin jälkeen, että huulet eivät jää puristuksiin potilasputken ja hampaiden väliin ja vaurioidu.

SISÄÄNVIENNIN ONGELMATILANTEET

- Lapsipotilaille suositellaan osittaista rotaatiotekniikkaa, jos asettaminen on vaikeaa.

- Yskiminen ja hengityksen pidättäminen Ambu AuraStraightin sisäänviennin aikana viittaa liian kevyeen anestesiaan. Syvennä anestesiaa välittömästi sisäänhengitettävillä tai suonensisäisillä aineilla ja aloita manuaalinen ventilaatio.
- Jos potilaan suuta ei voida avata riittävästi maskin asettamista varten, tarkista, että potilaan anestesiataso on riittävä. Pyydä avustajaa vetämään leukaa alaspäin, jotta suuhun on helpompi nähdä ja tarkistaa maskin asento.
- Jos ohjaaminen kielen takaosassa on vaikeaa AuraStraightia sisäänvietäessä, paina kärkeä koko ajan kitalakea vasten. Muuten kärki voi taittua tai osua nielun takaosassa olevaan kohoumaan, esim. suurentuneisiin kitarisoihin. Jos kuffiosaa ei litistyttyä alkaa käpristyä paikalleen asetettaessa, vedä maski pois ja aseta se uudelleen paikalleen. Nielurisatukoksen yhteydessä suositellaan maskin liikuttelua vinottain.

3.4. Kiinnittäminen

Kiinnitä Ambu Straight tarvittaessa potilaan kasvoihin teipillä tai tarkoitukseen sopivalla mekaanisella putken pidikkeellä. ⑦ Sideharsopurentasuojuksen käyttö on suositeltavaa.

3.5. Täyttäminen

- Pitelemättä putkesta kiinni täytä kuffiosaan ilmaa vain sen verran, että se on riittävän tiivis eli kuffiosan

sisäinen paine on enintään 60 cm H₂O. ⑥ Usein tiiviyden saavuttamiseen riittää vain puolet enimmäistilavuudesta – katso suurin sallittu kuffiosan sisäinen tilavuus taulukosta 1.

- Tarkkaile kuffiosan painetta jatkuvasti leikkaustoimenpiteen aikana kuffinpainemittarin avulla. Tämä on erityisen tärkeää pitkäaikaisessa käytössä tai käytettäessä tyypeä sisältäviä kaasuja.
- Tarkista seuraavat oikeasta asettamisesta kertovat merkit: Putken mahdollinen lievä ulospäin suuntautuva liike kuffiosan ilmalla täyttämisen yhteydessä, tasainen ovaalinmuotoinen kohouma kaulassa kilpiruston ja rengasruston alueella, tai kuffiosaa ei näy suuontelossa.
- Maski saattaa vuotaa hieman kolmen tai neljän ensimmäisen hengityksen aikana ennen kuin se asettuu paikalleen nieluun. Jos vuoto jatkuu, tarkista, että anestesian syvyys on riittävä ja että keuhkojen täyttöpaineet ovat alhaiset, ennen kuin oletat Ambu Straightin uudelleenasettamisen olevan tarpeen.

3.6. Oikean asennon varmistaminen

- Oikein asetettuna maski on tiiviisti äänirakoa vasten niin, että kuffiosan kärki on ruokatorven ylemmän sulkijalihaksen kohdalla.
- Potilasputken pystyviivan on oltava anteriorisesti potilaan nenää kohti.

- AuraSraight on asetettu oikein, kun potilaan etuhampaat ovat potilasputkessa olevien kahden vaakasuoran viivan välissä. ②, kohta 5. Korjaa maskin asentoa, jos potilaan etuhampaat eivät ole tällä alueella.
- AuraSraightin asentoa voidaan arvioida kapnografialla, tarkkailemalla muutoksia hengitystilavuudessa (esim. uloshengityshengitystilavuuden väheneminen), kuuntelemalla bilateraalista hengitystä ja äänien puuttumista ylävatsalla ja/tai tarkkailemalla rintakehän nousua ventiloinnin aikana. Jos epäilet, että AuraSraight on asetettu väärin, poista se ja aseta se uudelleen. Varmista anestesian riittävä syvyys.
- Anatomisesti oikean asennon varmistaminen silmämääräisesti on suositeltavaa, esim. käyttämällä taipuisaa skoopia.

ODOTTAMATON KÄÄNTEISVIRTAUS:

- Puutteellinen anestesia voi aiheuttaa käänteisvirtausta. Ensimmäisiä käänteisvirtauksen merkkejä voivat olla spontaani hengittäminen, yskiminen tai hengityksen pidättäminen.
- Jos käänteisvirtauksen ilmetessä happisaturaatio pysyy hyväksyttävällä tasolla, AuraSraightia ei tule poistaa. Tilannetta on hallittava asettamalla potilas pää alaspäin-asentoon. Irrota anestesialetkusto hetkeksi, jotta mahalaukun sisältöä ei joudu keuhkoihin. Tarkista, että

anestesian syvyys on riittävä, ja syvennä anestesiaa tarvittaessa suonensisäisesti.

- Käytä imua maskin potilasputken ja suun kautta. Käytä imua trakeobronkiaalisen puun alueella ja tutki keuhkoputket taipuisalla skoopilla.

3.7. Käyttö muiden laitteiden kanssa

ANESTESIAJÄRJESTELMÄ JA VENTILOINTIPALJE

Maskia voidaan käyttää joko spontaaniin tai hallittuun ventilointiin.

Anestesian aikana kuffiosaan voi joutua typpioksidia, mikä aiheuttaa kuffiosan tilavuuden/paineen nousun. Säädä kuffiosan painetta vain sen verran, että se on riittävän tiivis (kuffiosan paine ei saa olla yli 60 cm H₂O).

AuraSraightiin liitettäessä anestesiahengitysjärjestelmää on tuettava riittävästi, jotta maski ei pääse kääntymään.

KÄYTTÖ SPONTAANIN VENTILOINNIN KANSSA

AuraSraight sopii spontaanisti hengittäville potilaille, kun sitä käytetään haihtuvien aineiden tai suonensisäisen anestesian kanssa edellyttäen, että anestesia on riittävä kirurgiseen ärsykkeeseen nähden eikä kuffiosaa ole täytetty liikaa.

KÄYTTÖ YLIPAINEVENTILOINNIN KANSSA

Varmista ylipaineventilointia käytettäessä, että tiiviys on riittävä. Tiiviiden parantamiseksi suositellaan seuraavaa:

- Optimoi AuraSraightin asento kääntämällä tai vetämällä päätä.
- Säädä kuffiosan painetta. Kokeile sekä matalampaa että korkeampaa painetta (kuffiosan heikko tiiviys saattaa johtua liian matalasta tai korkeasta kuffiosan paineesta).
- Jos kuffiosan ympärillä ilmenee vuotoa, poista maski ja aseta se uudelleen varmistaen samalla, että anestesian syvyys on riittävä.

MRI-MAGNEETTILUKUVAUS

AuraSraight on MR-turvallinen.

3.8. Poistomenetelmä

Poisto on aina tehtävä paikassa, jossa on imulaite ja mahdollisuus nopeaan trakeaaliseen intubointiin.

Älä poista AuraSraightia kuffiosan ollessa täynnä ilmaa, jotta vältetään kudospaasit ja laryngospasmi.

3.9. Hävittäminen

Hävitä käytetty Ambu AuraSraight turvallisesti paikallisten menettelytapojen mukaisesti.

4.0. Tekniset tiedot

Ambu AuraSraight on seuraavan standardin mukainen: ISO 11712 Anestesia- ja hengityslaitteet – Supralaryngeaaliset ilmatiet ja liittimet.

	Lapsi				Aikuinen			
Maskin koko	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Potilaan paino	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	>100 kg
Kuffin sisäinen enimmäistilavuus	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Kuffin sisäinen enimmäispaine	60 cm H ₂ O							
Liitin	15 mm, uros (ISO 5356-1)							
Instrumentin enimmäiskoko*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Täyttöventtiilin Luer-kartion yhteensopivuus	Luer-kartio on yhteensopiva ISO 594-1- ja ISO 80369-7 -yhteensopivien laitteiden kanssa							
Asianmukaiset säilytysolosuhteet	10 °C (50 °F) ... 25 °C (77 °F)							
Maskin arvioitu paino	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Ventilointitien sisäinen tilavuus	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Painehäviö standardin ISO 11712 liitteen C mukaan	0,4 cm H ₂ O nopeudella 15 l/min	0,3 cm H ₂ O nopeudella 15 l/min	0,4 cm H ₂ O nopeudella 30 l/min	0,3 cm H ₂ O nopeudella 30 l/min	0,4 cm H ₂ O nopeudella 60 l/min	0,4 cm H ₂ O nopeudella 60 l/min	0,3 cm H ₂ O nopeudella 60 l/min	0,3 cm H ₂ O nopeudella 60 l/min
Min. Hammassväli	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Sisäisen ventiloitintien nimellispituus	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Taulukko 1 Ambu AuraStraightin tekniset tiedot.

* Instrumentin enimmäiskoko ohjaa valitsemaan läpimitaltaan oikean välineen AuraStraight-potilasputken läpi vietäväksi.

Kaikkien symbolien selitykset ovat osoitteessa <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Denmark. All rights reserved.

Mitään tämän dokumentaation osaa ei saa jäljentää missään muodossa, myöskään valokopioida, ilman tekijänoikeuden haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

1.1. Utilisation prévue/ Indications

Le masque laryngé Ambu AuraStraight est prévu pour un usage en remplacement du masque facial afin de rétablir et de maîtriser les voies aériennes lors de procédures anesthésiques de routine ou d'urgence chez les patients à jeun.

1.2. Utilisateurs prévus et environnement d'utilisation

Professionnels de santé formés à la gestion des voies aériennes.

Le masque AuraStraight est destiné à être utilisé en milieu hospitalier.

1.3. Population de patients cible

Patients adultes et pédiatriques à partir de 2 kg ayant été évalués comme éligibles à une voie aérienne supraglottique.

1.4. Contre-indications

Aucune connue.

1.5. Avantages cliniques

Maintient les voies aériennes supérieures ouvertes pour permettre le passage des gaz.

1.6. Avertissements et précautions

Avant insertion, il est impératif que tous les professionnels de santé utilisant le masque laryngé Ambu AuraStraight prennent connaissance des avertissements, des précautions, des indications et des contre-indications mentionnés dans ce *mode d'emploi*.

AVERTISSEMENTS



1. Le produit est destiné à être utilisé par des professionnels de santé formés à la gestion des voies aériennes uniquement.
2. Toujours inspecter visuellement le produit et effectuer un test de fonctionnement après le déballage et avant utilisation conformément à la section 3.1 Préparation avant utilisation, car les défauts et les corps étrangers peuvent entraîner une absence de ventilation ou une ventilation réduite, des dommages aux muqueuses ou une infection du patient. Ne pas utiliser le produit si l'une des étapes de la préparation avant utilisation échoue.
3. Ne pas réutiliser le masque AuraStraight sur un autre patient car il s'agit d'un dispositif à usage unique. La réutilisation d'un produit contaminé peut entraîner une infection.
4. Le masque AuraStraight ne protège pas la trachée ou les poumons du risque d'aspiration.
5. Ne pas exercer de force excessive lors de l'insertion et du retrait du masque AuraStraight, car cela pourrait entraîner un traumatisme des tissus.
6. Le volume ou la pression du bourrelet peut varier en présence de protoxyde d'azote, d'oxygène ou autres gaz médicaux susceptibles d'entraîner des traumatismes tissulaires. Surveiller en permanence la pression du bourrelet pendant l'intervention chirurgicale.
7. Ne pas utiliser le masque AuraStraight en présence de lasers et d'équipements d'électrocautérisation car cela pourrait provoquer des brûlures aux voies aériennes et aux tissus.
8. Ne pas pratiquer d'intubation directe via AuraStraight car la sonde endotrachéale risque de se coincer et d'entraîner une ventilation insuffisante.
9. En général, le masque AuraStraight ne doit être utilisé que chez les patients profondément inconscients et qui ne s'opposent pas à l'insertion de l'endoscope.
10. Le taux de complication global du masque laryngé est faible, mais l'utilisateur doit faire preuve de jugement professionnel pour déterminer si l'utilisation d'un masque laryngé sera appropriée. Les patients suivants présentent un risque plus élevé de complications graves, y compris l'aspiration et une ventilation inadéquate:

- Patients présentant une obstruction des voies aériennes supérieures.
- Patients non à jeun (y compris les cas où le jeûne ne peut pas être confirmé).
- Patients souffrant de problèmes du tractus gastro-intestinal supérieur (p. ex. œsophagectomie, hernie hiatale, reflux gastro-œsophagien, obésité morbide, grossesse > 10 semaines).
- Patients nécessitant une ventilation à haute pression.
- Patients présentant une pathologie pharyngée/laryngée susceptible de compliquer l'ajustement anatomique du masque (p. ex. tumeurs, radiothérapie du cou impliquant l'hypopharynx, traumatisme oropharyngé sévère).
- Patients présentant une ouverture buccale inadéquate pour permettre l'insertion.

MISES EN GARDE

1. Ne jamais faire tremper, rincer ou stériliser ce dispositif, ces procédures étant susceptibles de laisser des résidus nocifs ou de provoquer un dysfonctionnement du dispositif. La conception et le matériau utilisés ne sont pas compatibles avec les procédures de nettoyage et de stérilisation classiques.
2. Avant utilisation, toujours vérifier la compatibilité entre le masque AuraStraight et le dispositif externe pour éviter l'utilisation de dispositifs ne passant pas à travers la lumière du masque AuraStraight.
3. La pression du bourrelet doit être maintenue aussi basse que possible tout en assurant une étanchéité suffisante et ne doit pas dépasser 60 cm H₂O.
4. Surveiller régulièrement la manifestation du moindre signe de problèmes liés aux voies aériennes ou de ventilation inappropriée, et repositionner, réinsérer ou remplacer selon les cas le masque AuraStraight afin de maintenir la perméabilité des voies respiratoires.
5. Toujours revérifier la perméabilité des voies aériennes après tout changement de position de la tête ou du cou du patient.

1.7. Effets secondaires potentiels

L'utilisation de masques laryngés est associée à des effets indésirables mineurs (p. ex., maux de gorge, saignements, dysphonie, dysphagie) et à des effets indésirables majeurs (p. ex., régurgitation/aspiration, laryngospasme, lésion nerveuse).

1.8. Remarques générales

Si, pendant l'utilisation de ce dispositif ou en conséquence de celle-ci, un grave incident se produit, le signaler au fabricant et à l'autorité nationale.

2.0. Description du dispositif

Le masque AuraStraight est un masque laryngé stérile à usage unique composé d'un tube patient avec bourrelet gonflable à l'extrémité distale. Le bourrelet peut être gonflé via la valve de gonflage, ce qui permet au ballonnet témoin d'indiquer l'état de gonflage/dégonflage. Le bourrelet s'adapte aux contours de l'hypopharynx et sa lumière est orientée vers l'ouverture du larynx du patient. L'extrémité du bourrelet appuie contre le sphincter supérieur de l'œsophage et l'extrémité proximale du bourrelet repose contre la base de la langue.

Le masque AuraStraight est disponible en 8 tailles différentes. Les principaux composants du masque AuraStraight sont indiqués dans la figure ①.

Figure 1 (page 4) : Aperçu des éléments du masque AuraStraight:

1. Connecteur ; 2. Tube patient ; 3. Bourrelet ; 4. Valve de gonflage ; 5. Ballonnet témoin ; 6. Tube pilote ; 7. Longueur nominale de la voie ventilatoire interne*.

* Voir le tableau 1 pour la longueur nominale en centimètres.

Figure 2 (page 4): Positionnement correct du masque AuraStraight par rapport aux éléments du masque AuraStraight et aux repères anatomiques

Éléments du masque AuraStraight: 1. Bourrelet gonflable ; 2. Marquage des dimensions; 3. Ouverture de ventilation ; 4. Voie ventilatoire ; 5. Repères de profondeur normale d'insertion ; 6. Extrémité du dispositif.

Repères anatomiques: A. Œsophage ; B. Trachée ; C. Anneau cricoïde ; D. Cartilage thyroïdien ; E. Cordes vocales ; F. Entrée du larynx ; G. Épiglote ; H. Os hyoïde ; I. Langue ; J. Cavité buccale ; K. Nasopharynx ; L. Incisives.

COMPATIBILITÉ AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS/ÉQUIPEMENTS

Le masque AuraStraight peut être utilisé avec:

- Équipement de ventilation ; connecteurs coniques de 15 mm conformément à la norme ISO 5356- 1.
- Dispositifs de gestion des voies aériennes ; bronchoscopes et guides échangeurs*.
- Autres accessoires: seringue Luer conique 6 % standard, manomètre avec connecteur Luer conique 6 % standard, lubrification à base d'eau, sonde d'aspiration.

Lors de l'utilisation d'instruments à travers le masque, s'assurer que l'instrument est compatible et bien lubrifié avant l'insertion.

* Se référer au tableau 1 pour en savoir plus sur la taille maximale de l'instrument.

3.0. Utilisation du produit

3.1. Préparation avant utilisation

SÉLECTION DES TAILLES

Le masque laryngé Ambu AuraStraight est disponible en différentes tailles pour une utilisation chez des patients de poids différents.

Pour les patients pédiatriques, il est recommandé que le masque laryngé Ambu AuraStraight soit utilisé par un professionnel de santé familiarisé avec l'anesthésie pédiatrique.

Voir les directives de sélection et la pression interne du bourrelet dans le tableau 1, section 4.0. (Caractéristiques).

INSPECTION DU MASQUE AURASTRAIGHT

Toujours porter des gants pendant la préparation et l'insertion du masque laryngé Ambu AuraStraight pour minimiser le risque de contamination.

Le masque AuraStraight doit être manipulé avec précaution car il pourrait se déchirer ou se perforer. Éviter tout contact avec des objets tranchants ou pointus.

Vérifier que le sachet est scellé et intact avant ouverture et jeter le masque Ambu AuraStraight si le sceau du sachet est endommagé.

Examiner attentivement le masque laryngé Ambu AuraStraight pour détecter d'éventuels dommages tels que perforation, coupures, déchirures, pièces desserrées, bords tranchants, etc.

S'assurer que la coque protectrice du bourrelet est retirée.

Vérifier que l'intérieur du tube patient et du bourrelet ne présente aucune obstruction et qu'aucune pièce n'est desserrée. Ne pas utiliser le masque AuraStraight s'il est obstrué ou endommagé.

Dégonfler complètement le bourrelet du masque AuraStraight. Une fois le bourrelet dégonflé, vérifier soigneusement qu'il ne comporte aucun pli. Gonfler le bourrelet au volume spécifié dans le tableau 1. Vérifier que le bourrelet gonflé est symétrique et lisse. Il ne doit y avoir aucune aspérité, aucun signe de fuite sur le bourrelet, le tube pilote ou le ballonnet témoin. Dégonfler à nouveau le bourrelet avant l'insertion.

3.2. Préparation pour l'utilisation

PRÉPARATION AVANT INSERTION

- Dégonfler le bourrelet complètement afin qu'il soit plat et sans plis en appuyant le bourrelet contre une surface plane stérile (p. ex. morceau de gaze stérile) tout en dégonflant en même temps le dispositif à l'aide d'une seringue. (3)
- Lubrifier l'extrémité postérieure du bourrelet avant l'insertion en appliquant un lubrifiant stérile à base d'eau sur la surface postérieure distale du bourrelet.
- Toujours avoir un masque laryngé Ambu AuraStraight de rechange prêt à l'emploi.

- Pré-oxygéner et utiliser les procédures de surveillance standard.
- Avant de commencer l'insertion, vérifier que le niveau d'anesthésie (ou d'inconscience) est adéquat. L'insertion est censée pouvoir se faire au même niveau d'anesthésie que pour une intubation trachéale.
- La tête du patient doit être placée en extension avec la nuque légèrement fléchie dans une position normalement utilisée pour l'intubation trachéale (c.-à-d. « position du renifleur »).

3.3. Insertion

- Ne jamais faire usage d'une force excessive.
- Tenir le masque laryngé Ambu AuraStraight comme un crayon, avec l'index placé au niveau de la transition entre le bourrelet et le tube du patient. L'autre main doit être placée sous la tête du patient. (4)
- Insérer l'extrémité du bourrelet en pressant le bourrelet contre le palais osseux pour l'y aplatir. (5)
- Vérifier que l'extrémité du bourrelet est correctement aplatie contre le palais avant de poursuivre. Pousser doucement la mâchoire vers le bas avec le majeur pour ouvrir un peu plus la bouche.
- S'assurer que l'extrémité du bourrelet ne pénètre pas dans la vallécule ou l'ouverture de la glotte et n'est pas

coincée contre l'épiglotte ou les aryténoïdes. Le bourrelet doit être appuyé contre la paroi pharyngée postérieure du patient.

- Lorsque le masque est en place, une résistance se fait sentir.
- Avant de retirer la main qui tient le masque, appuyer sur le tube de l'autre main. Le masque Ambu AuraStraight reste ainsi en place lorsque le doigt est retiré.
- Après l'insertion, s'assurer que les lèvres ne sont pas coincées entre le tube patient et les dents pour éviter tout traumatisme des lèvres.

PROBLÈMES LORS DE L'INSERTION

- Pour les patients pédiatriques, une technique de rotation partielle est recommandée en cas de difficultés de mise en place.
- Si le patient tousse ou retient sa respiration lors de l'insertion du masque laryngé Ambu AuraStraight, le niveau de l'anesthésie est insuffisant: augmenter immédiatement le niveau de l'anesthésie à l'aide d'agents inhalés ou intraveineux, puis procéder à la ventilation manuelle.
- S'il n'est pas possible d'ouvrir suffisamment la bouche du patient pour insérer le masque, vérifier que l'anesthésie est adéquate. Demander à un assistant de tirer la mâchoire vers le bas pour permettre de regarder

dans la bouche plus facilement et de vérifier la position du masque.

- En cas de difficulté à manœuvrer dans l'angle situé à l'arrière de la langue lors de l'insertion du masque AuraStraight, appuyer l'extrémité contre le palais pendant toute la durée de l'insertion, sinon l'extrémité peut se replier sur elle-même ou rencontrer une irrégularité dans le pharynx postérieur (p. ex. amygdales hypertrophiées). Si le bourrelet ne s'aplatit pas ou commence à se recourber lors de son insertion, il est nécessaire de le retirer et de procéder à une nouvelle insertion. Si le masque est bloqué par les amygdales, il est recommandé d'effectuer un mouvement en diagonale.

3.4. Fixation

Si nécessaire, fixer le masque laryngé Ambu AuraStraight sur le visage du patient avec du ruban adhésif ou avec un support de tube mécanique prévu à cet effet. (7) Il est recommandé d'utiliser une compresse de gaze comme cale-dents.

3.5. Gonflage

- Lâcher le tube et gonfler le bourrelet avec suffisamment d'air pour obtenir l'étanchéité (pression de 60 cm H₂O maximum à l'intérieur du bourrelet). (6) Souvent, seule la moitié du volume maximal est

suffisante pour permettre l'étanchéité, se reporter au tableau 1 pour connaître les volumes maximaux à l'intérieur du bourrelet.

- Surveiller la pression du bourrelet en continu pendant l'intervention chirurgicale à l'aide d'un manomètre de pression du bourrelet. Ceci est particulièrement important en cas d'utilisation prolongée ou d'utilisation de gaz à base protoxyde d'azote.
- Les signes à observer pour vérifier que le positionnement est correct sont: le léger mouvement du tube du masque vers l'extérieur lors du gonflage du bourrelet, la présence d'une bosse ovale lisse dans le cou autour de la zone des cartilages thyroïde et cricoïde ou le fait que le bourrelet ne soit pas visible dans la cavité buccale.
- Le masque peut fuir légèrement pendant les trois ou quatre premières respirations avant de se positionner dans le pharynx. Si la fuite persiste, vérifier que le niveau de l'anesthésie est suffisant et que les pressions d'inflation pulmonaire sont faibles avant de prendre la décision d'insérer de nouveau le masque laryngé Ambu AuraStraight.

3.6. Vérification du positionnement correct

- Un positionnement correct doit assurer une étanchéité parfaite contre la glotte avec l'extrémité du bourrelet au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage.

- La ligne verticale du tube patient doit se situer dans le prolongement du nez du patient.
- Le masque AuraStraight est inséré correctement lorsque les incisives du patient se situent entre les deux lignes horizontales sur le tube patient. (2), élément 5. Repositionner le masque si les incisives du patient ne se trouvent pas dans cette zone.
- La position du masque AuraStraight peut être évaluée par capnographie, en observant les variations du volume courant (p. ex., une réduction du volume courant expiré), en auscultant les bruits respiratoires bilatéraux et en vérifiant l'absence de sons sur l'épigastre et/ou en observant le soulèvement de la poitrine avec la ventilation. En cas de doute quant au positionnement du masque AuraStraight, retirer et insérer à nouveau le masque laryngé en veillant à ce que la profondeur de l'anesthésie soit adéquate.
- Il est recommandé de confirmer visuellement la position anatomique correcte, p. ex. à l'aide d'un endoscope flexible.

RÉGURGITATION INATTENDUE:

- La régurgitation peut être due à un niveau d'anesthésie inapproprié. Les premiers signes de régurgitation peuvent être une respiration spontanée, la toux ou une apnée.

- En cas de régurgitation, ne pas retirer le masque laryngé AuraStraight si la saturation en oxygène est maintenue à un niveau acceptable. Le patient doit être immédiatement basculé tête vers le bas. Déconnecter rapidement le circuit d'anesthésie de façon à empêcher le passage forcé du contenu gastrique dans les poumons. Vérifier que la profondeur de l'anesthésie est adéquate et l'augmenter par intraveineuse si nécessaire.
- Aspirer par le tube patient du masque et dans la bouche. Aspirer l'arbre trachéobronchique et inspecter les bronches à l'aide d'un endoscope flexible.

3.7. Utilisation avec d'autres dispositifs/équipements

SYSTÈME D'ANESTHÉSIE ET BALLON DE VENTILATION

Celui-ci peut être utilisé pour la ventilation spontanée ou contrôlée.

Pendant l'anesthésie, du protoxyde d'azote peut se diffuser dans le bourrelet et en augmenter la pression/le volume. Régler une pression de bourrelet suffisante pour obtenir une étanchéité adéquate (la pression du bourrelet ne doit pas dépasser 60 cm H₂O).

Le système de respiration pour l'anesthésie doit être compatible avec le masque AuraStraight pour éviter sa rotation lors du raccordement.

UTILISATION LORS D'UNE VENTILATION SPONTANÉE

Le masque laryngé AuraStraight convient aux patients qui respirent spontanément lorsqu'il est utilisé avec des agents volatils ou une anesthésie par intraveineuse, mais uniquement si l'anesthésie correspond bien au niveau du stimulus chirurgical requis et si le bourrelet n'est pas trop gonflé.

UTILISATION LORS D'UNE VENTILATION EN PRESSION POSITIVE

Lors de l'application d'une ventilation en pression positive, s'assurer que l'étanchéité est adéquate. Afin d'améliorer l'étanchéité, il est conseillé :

- D'optimiser la mise en place du masque AuraStraight par rotation de la tête ou traction.
- De régler la pression du bourrelet. Essayer à la fois des pressions plus faibles et plus élevées (une mauvaise étanchéité du bourrelet peut être causée par une pression trop faible ou trop élevée).
- En cas de fuite autour du bourrelet, retirer le masque et le réinsérer tout en s'assurant que la profondeur de l'anesthésie est adéquate.

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM)

Le masque AuraStraight est compatible avec l'IRM.

3.8. Procédure de retrait

Le retrait doit toujours avoir lieu au sein d'une zone équipée de matériel d'aspiration et d'installations permettant une intubation trachéale rapide.

Ne pas retirer AuraStraight lorsque le bourrelet est complètement gonflé afin d'éviter un traumatisme tissulaire et un laryngospasme.

3.9. Mise au rebut

Éliminer le masque laryngé Ambu AuraStraight usagé de manière sûre et conformément aux procédures locales.

4.0. Caractéristiques

Le masque Ambu AuraStraight est conforme à la norme ISO 11712 Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire – Canules supralaryngées et raccords.

Taille du masque	Enfant				Adulte			
	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Poids du patient	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Volume maximal à l'intérieur du bourrelet	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Pression maximale à l'intérieur du bourrelet	60 cm H ₂ O							
Connecteur	15 mm mâle (ISO 5356-1)							
Taille maximale de l'instrument*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibilité du cône Luer de la valve de gonflage	Cône Luer compatible avec les équipements conformes aux normes ISO 594-1 et ISO 80369-7							
Conditions de stockage appropriées	10 °C (50 °F) à 25 °C (77 °F)							
Poids approximatif du masque	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Volume interne du tube de ventilation	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Chute de pression déterminée conformément à la norme ISO 11712 annexe C	0,4 cm H ₂ O à 15 l/min	0,3 cm H ₂ O à 15 l/min	0,4 cm H ₂ O à 30 l/min	0,3 cm H ₂ O à 30 l/min	0,4 cm H ₂ O à 60 l/min	0,4 cm H ₂ O à 60 l/min	0,3 cm H ₂ O à 60 l/min	0,3 cm H ₂ O à 60 l/min
Espace interdentaire min.	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Longueur nominale de la voie ventilatoire interne	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tableau 1: Caractéristiques techniques du masque laryngé Ambu AuraStraight.

* La taille maximale de l'instrument sert de guide pour sélectionner le diamètre approprié d'un dispositif à faire passer dans le tube patient du masque AuraStraight.

Une liste complète des explications des symboles est disponible à l'adresse <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Danemark. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette documentation ne peut être reproduite sous aucune forme, y compris par photocopie, sans l'autorisation écrite préalable du titulaire des droits d'auteur.

1.1. Namjena /Indikacija za upotrebu

Maska Ambu AuraStraight namijenjena je kao alternativa maski za lice za postizanje i održavanje kontrole nad dišnim putem tijekom rutinskih i hitnih anestezioloških postupaka na pacijentima s praznim želucem.

1.2. Predviđeni korisnici i okruženje upotrebe

Zdravstveni djelatnici obučeni za zbrinjavanje dišnih putova. Maska AuraStraight namijenjena je upotrebi u bolničkom okruženju.

1.3. Predviđena populacija pacijenata

Odrasli i pedijatrijski pacijenti od 2 kg i prethodno procijenjeni kao prikladni za upotrebu supraglotičkih uređaja za dišne putove.

1.4. Kontraindikacije

Nisu poznate.

1.5. Kliničke prednosti

Održava gornji dišni put otvorenim kako bi se omogućio prolazak plinova.

1.6. Upozorenja i mjere opreza

Prije umetanja ključno je da svi zdravstveni djelatnici koji upotrebljavaju masku Ambu AuraStraight budu upoznati s upozorenjima, mjerama opreza, indikacijama i kontraindikacijama navedenima u *Uputama za upotrebu*.

UPOZORENJA



1. Proizvod smiju upotrebljavati samo zdravstveni djelatnici obučeni za zbrinjavanje dišnih putova.
2. Nakon raspakiranja i prije upotrebe uvijek vizualno pregledajte proizvod i provedite ispitivanje funkcionalnosti u skladu s odjeljkom „3.1 Priprema prije upotrebe” jer nedostaci i strane tvari mogu dovesti do prekida ili smanjene ventilacije, oštećenja sluznice ili infekcije kod pacijenta. Nemojte upotrebljavati proizvod ako ne uspije bilo koji od koraka iz odjeljka „Priprema prije upotrebe”.
3. Nemojte ponovno upotrebljavati masku AuraStraight na drugom pacijentu jer je to proizvod namijenjen za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba kontaminiranog proizvoda može uzrokovati infekciju.
4. AuraStraight ne štiti dušnik ni pluća od rizika aspiracije.
5. Nemojte primjenjivati prekomjernu silu prilikom umetanja i uklanjanja maske AuraStraight jer to može uzrokovati traumu tkiva.
6. Volumen ili tlak u manšeti može se promijeniti u prisutnosti dušikova oksida, kisika ili drugih medicinskih plinova, što može dovesti do ozljede tkiva. Tijekom kirurškog postupka kontinuirano nadzirite tlak u manšeti.
7. Nemojte upotrebljavati masku AuraStraight u prisutnosti lasera i opreme za elektroauterizaciju jer to može uzrokovati opekline dišnih putova i tkiva.

8. Nemojte provoditi izravnu intubaciju kroz masku AuraStraight jer se endotrahealna (ET) cijev može zaglaviti, što će dovesti do nedovoljne ventilacije.
9. Općenito, masku AuraStraight treba upotrebljavati samo kod pacijenata koji su dovoljno nesvjesni i koji se neće opirati umetanju.
10. Ukupna je stopa komplikacija pri upotrebi laringealne maske niska, ali korisnik mora izvršiti stručnu procjenu prilikom odlučivanja hoće li upotreba laringealne maske biti odgovarajuća. Sljedeći su pacijenti izloženi većem riziku od ozbiljnih komplikacija, uključujući aspiraciju i nedovoljnu ventilaciju:
 - Pacijenti s opstrukcijom gornjih dišnih putova.
 - Pacijenti koji nisu natašte (uključujući i slučajeve kada nije moguće potvrditi da su natašte).
 - Pacijenti koji pate od problema s gornjim dijelom gastrointestinalnog trakta (npr. ezofagektomija, hijatalna hernija, gastroezofagealna refluksna bolest, morbidna pretilost, trudnoća >10 tjedana).
 - Pacijenti kojima je potrebna visokotlačna ventilacija.
 - Pacijenti kod kojih je prisutno patološko stanje ždrijela i grkljana, što potencijalno komplicira anatomsko pristajanje maske (npr. tumori, radioterapija vrata koja uključuje hipofarinkus, teška orofaringealna trauma).
 - Pacijenti s nedovoljnim otvorom usta za umetanje maske.

MJERE OPREZA

1. Nemojte namakati, ispirati niti sterilizirati ovaj uređaj jer se tim postupcima mogu na njemu stvoriti štetne nakupine ili to može uzrokovati neispravan rad uređaja. Dizajn i upotrijebljeni materijali nisu kompatibilni s klasičnim postupcima čišćenja i sterilizacije.
2. Prije upotrebe uvijek provjerite kompatibilnost između maske AuraStraight i vanjskog uređaja kako biste izbjegli nemogućnost prolaska uređaja kroz lumen maske AuraStraight.
3. Tlak u manšeti treba držati što je moguće nižim, ali pritom ipak održavati dovoljno brtvljenje i ne premašivati tlak od 60 cm H₂O.
4. Potrebno je redovito nadzirati ima li znakova da je došlo do problema s dišnim putovima ili da se radi o nedovoljnoj ventilaciji, a maska AuraStraight mora se premjestiti, ponovno umenuti ili zamijeniti ako je to potrebno da bi se održao prohodan dišni put pacijenta.
5. Uvijek provjerite prohodnost dišnog puta nakon bilo kakve promjene položaja glave ili vrata pacijenta.

1.7. Moguće neželjene posljedice

Upotreba laringealnih maski povezana je s manjim štetnim učincima (npr. grlobolja, krvarenje, disfonija, disfagija) i velikim štetnim učincima (npr. regurgitacija/aspiracija, laringospazam, ozljeda živca).

1.8. Opće napomene

Ako se prilikom upotrebe ovog uređaja ili zbog njegove upotrebe dogodi težak incident, prijavite ga proizvođaču i nadležnom državnom tijelu.

2.0. Opis uređaja

AuraStraight sterilna je laringealna maska za jednokratnu upotrebu koja se sastoji od cijevi za pacijenta s manšetom koja se može napuhati na distalnom kraju. Manšeta se može napuhati kroz nepovratni ventil, čime se omogućuje da pilotni balon pokaže status napuhivanja/ispuhivanja. Manšeta je u skladu sa konturama hipofarinksa i lumenom okrenutim prema otvoru larinksa pacijenta. Vrh manšete pritišće gornji sfinkter jednjaka, a proksimalni je kraj oslonjen na bazu jezika.

AuraStraight dolazi u 8 različitih veličina. Glavne komponente maske AuraStraight vidljive su na slici ①.

Slika 1 (stranica 4): Pregled dijelova maske

AuraStraight:

1. Priključak; 2. Cijev za pacijenta; 3. Manšeta; 4. Nepovratni ventil; 5. Pilotni balon; 6. Pilotna cijev; 7. Nazivna duljina unutarnjeg ventilacijskog puta*.

* Nazivnu duljinu koja je navedena u centimetrima potražite u tablici 1.

Slika 2 (stranica 4): Ispravan položaj maske AuraStraight u odnosu na dijelove AuraStraight i anatomske oznake

Dijelovi maske AuraStraight: 1. Manšeta koja se može napuhati; 2. Oznaka veličine; 3. Otvor za ventilaciju; 4. Ventilacijski put; 5. Normalna dubina oznaka za umetanje; 6. Kraj stroja.

Anatomske oznake: A. Jednjak; B. Dušnik; C. Krikoidni prsten; D. Hrskavica štitnjače; E. Glasnice; F. Laringealni ulaz; G. Epiglotis; H. Podjezična kost; I. Jezik; J. Usna šupljina; K. Nazofarinks; L. Sjekutići.

KOMPATIBILNOST S OSTALIM UREĐAJIMA/OPREMOM

Maska AuraStraight može se upotrebljavati u kombinaciji sa sljedećim uređajima:

- Oprema za ventilaciju; konusni priključci od 15 mm u skladu s normom ISO 5356-1.

- Uređajima za zbrinjavanje dišnih putova; bronhoskopima i kateterima za izmjenu*.
- Ostali pribor; standardna 6-postotna konusna luer štrcaljka, manometar sa standardnim 6-postotnim konusnim luer priključkom, vodeno podmazivanje, sukcijski kateter.

Pri upotrebi instrumenata preko maske provjerite je li instrument kompatibilan i dobro podmazan prije umetanja.

** U tablici 1 potražite informacije o maksimalnoj veličini instrumenta.*

3.0. Upotreba proizvoda

3.1. Priprema prije upotrebe

ODABIR VELIČINE

Maska Ambu AuraStraight dostupna je u različitim veličinama za upotrebu kod pacijenata različitih težina.

Za pedijatrijske pacijente preporučuje se da masku Ambu AuraStraight upotrebljava zdravstveni djelatnik upoznat s pedijatrijskom anestezijom.

Pogledajte smjernice za odabir i maks. tlak intrakcije u tablici 1, odjeljku 4.0. (Specifikacije).

PREGLED MASKE AURASTRAIGHT

Uvijek nosite rukavice tijekom pripreme i umetanja maske Ambu AuraStraight kako biste smanjili kontaminaciju.

Pažljivo rukujte maskom AuraStraight jer može puknuti ili se probušiti. Izbjegavajte kontakt s oštrim ili šiljastim predmetima.

Prije otvaranja provjerite je li plomba vrećice netaknuta i odložite masku Ambu AuraStraight u otpad ako je plomba vrećice oštećena.

Pažljivo pregledajte ima li na maski AuraStraight oštećenja, poput perforacija, ogrebotina, rezova, poderotina, nepričvršćenih dijelova, oštrih rubova, itd.

Provjerite je li štitnik manšete skinut s manšete.

Provjerite da unutar cijevi za pacijenta i manšeti nema začepjenja i labavih dijelova. Nemojte upotrebljavati masku AuraStraight ako postoje začepjenja ili oštećenja.

Potpuno ispušite manšetu maske AuraStraight. Nakon što se ispuše, temeljito provjerite ima li na manšeti nabora. Napužite manšetu na volumen naveden u tablici 1. Provjerite je li napuhana manšeta simetrična i glatka. Na manšeti, cijevi ili pilotnom balonu ne smije biti izbočina ili bilo kakvih znakova curenja. Ponovno ispušite manšetu prije umetanja.

3.2. Pripreme za upotrebu

PRIPREMA PRIJE UMETANJA

- Potpuno ispušite manšetu tako da je manšeta plosnata i bez nabora tako da pritisnete manšetu na ravnoj sterilnoj površini (npr. komadu sterilne gaze) te istovremeno ispušite proizvod s pomoću štrcaljke. ③
- Podmažite stražnji vrh manšete prije umetanja tako da na distalnu stražnju površinu manšete nanese sterilni lubrikant na bazi vode.
- Uvijek imajte pri ruci rezervnu masku Ambu AuraStraight.
- Predoksigenirajte i upotrijebite standardne postupke za praćenje.
- Prije pokušaja umetanja provjerite je li razina anestezije (ili nesvjesnog stanja) odgovarajuća. Umetanje treba biti uspješno na istoj razini anestezije koja bi bila prikladna za trahealnu intubaciju.
- Glavu pacijenta treba postaviti tako da je izdužena s fleksijom vrata u položaju koji se uobičajeno upotrebljava za trahealnu intubaciju (tj. „položaj njušenja”, eng. „sniffing position”).

3.3. Umetanje

- Nikada nemojte primjenjivati prekomjernu silu.
- Držite masku Ambu AuraStraight poput olovke, s kažiprstom postavljenim na prijelazu između manšete i

cijevi za pacijenta. Drugu ruku stavite ispod glave pacijenta. ④

- Umetnite vrh manšete tako da je pritisnete prema gore o tvrdo nepce i izravnajte manšetu uz njega. ⑤
- Prije nastavka provjerite je li vrh manšete spljošten uz uz nepce – lagano pritisnite čeljust srednjim prstom prema dolje kako biste dodatno otvorili usta.
- Pripazite da vrh manšete ne uđe u žlijeb ili glotični otvor i da ne zapne za epiglotis ili aritenoid. Manšeta treba biti pritisnuta uz stražnju faringealnu stijenku pacijenta.
- Kada je maska na mjestu, osjetit će se otpor.
- Prije povlačenja ruke koja drži masku unatrag, drugom se rukom pritišće cijev za dišni put. Time se osigurava da će maska Ambu AuraStraight ostati na mjestu kada se prst makne.
- Nakon umetanja provjerite da usne nisu ukliještene između cijevi za pacijenta i zuba kako biste izbjegli ozljede usana.

PROBLEMI S UMETANJEM

- Kod pedijatrijskih pacijenata preporučuje se tehnika djelomične rotacije u slučaju poteškoća pri postavljanju.
- Kašalj i zadržavanje daha tijekom umetanja maske Ambu AuraStraight ukazuju na neodgovarajuću dubinu anestezije – odmah produbite anesteziju inhalacijskim ili intravenskim agensima i započnite ručnu ventilaciju.

- Ako ne možete otvoriti usta pacijenta dovoljno da umetnete masku, provjerite je li pacijent odgovarajuće anesteziran. Zamolite pomoćnika da povuče čeljust prema dolje, čime se omogućuje bolji uvid u usta i potvrđivanje položaja maske.
- Ako imate poteškoća prilikom manevriranja pod kutom na stražnjoj strani jezika tijekom umetanja maske AuraStraight, pritisnite vrh o nepce po cijeloj površini, inače se vrh može presaviti ili naići na nepravilnost na stražnjoj strani ždrijela, npr. hipertrofične tonzile. Ako se manšeta pri umetanju ne izravna ili se počne uvijati, izvucite masku i ponovno je umetnite. U slučaju opstrukcije tonzile, preporučuje se dijagonalno pomicanje maske.

3.4. Učvršćivanje

Ako smatrate potrebnim, učvrstite masku AuraStraight na lice pacijenta ljepljivom trakom ili mehaničkim držačem cijevi koji je prikladan za tu svrhu. ⑦ Preporučuje se upotreba zagriznog komada gaze.

3.5. Napuhivanje

- Bez držanja cijevi napušite manšetu s dovoljno zraka da omogućite brtvljenje, što je ekvivalentno tlakovima unutar manšete od najviše 60 cm H₂O. ⑥ Često je za postizanje brtvljenja dovoljna samo polovica maksimalnog volumena – maksimalne volumene unutar manšete potražite u tablici 1.

- Tijekom kirurškog zahvata neprestano pratite tlak u manšeti s pomoću mjerača tlaka u manšeti. To je posebno važno tijekom produljene upotrebe ili upotrebe dušikova oksida.
- Potražite sljedeće znakove ispravnog postavljanja: moguće lagano pomicanje cijevi prema van nakon napuhivanja manšete, prisutnost glatkog ovalnog otoka u vratu oko područja tiroide i krikoida ili bez vidljive manšete u usnoj šupljini.
- Maska može lagano propuštati prva tri ili četiri udaha prije nego što se ustali na položaju u ždrijelu. Ako se propuštanje nastavi, provjerite je li dubina anestezije odgovarajuća i jesu li tlakovi plućnog napuhivanja niski prije pretpostavke da je potrebno ponovno umetanje maske AuraStraight.

3.6. Provjera ispravnog položaja

- Ispravno postavljanje trebalo bi rezultirati brtvljenjem bez propuštanja na glasnica s vrhom manšete na gornjem sfinkteru jednjaka.
- Okomita linija na cijevi za pacijenta treba biti usmjerena prema nosu pacijenta.
- Maska AuraStraight pravilno je umetnuta kada se pacijentovi sjekutići nalaze između dvije vodoravne linije na cijevi za pacijenta. ②, stavka 5. Ako su pacijentovi sjekutići izvan tog raspona, ponovno postavite masku.

- Položaj maske AuraStraight može se procijeniti kapnografijom, promatranjem promjena tidalnog volumena (npr. smanjenjem izdahnutog tidalnog volumena), auskultacijom bilateralnih zvukova disanja i izostankom zvukova na epigastriju i/ili praćenjem podizanja prsnog koša s ventilacijom. Ako sumnjate da maska AuraStraight nije pravilno postavljena, izvadite je i ponovno umetnite te provjerite je li dubina anestezije odgovarajuća.
- Preporučuje se vizualna potvrda anatomske ispravnosti položaja, npr. s pomoću fleksibilnog endoskopa.

NEOČEKIVANA REGURGITACIJA:

- Regurgitaciju može uzrokovati neodgovarajuća razina anestezije. Prvi znakovi regurgitacije mogu biti spontano disanje, kašalj ili zadržavanje daha.
- Ako dođe do regurgitacije, a zasićenost kisikom i dalje je na prihvatljivim razinama, maska AuraStraight ne smije se uklanjati. U tom slučaju pacijenta je potrebno staviti u položaj „spuštene glave“. Kratko odspojite anestezijski krug tako da se želučani sadržaj ne upuhuje u pluća. Provjerite je li dubina anestezije odgovarajuća i intravenozno produbite anesteziju, ako je primjenjivo.
- Primijenite sukciju kroz cijev za pacijenta na maski i kroz usta. Izvršite sukciju traheobronhijalnog stabla i provjerite bronhe s pomoću fleksibilnog endoskopa.

3.7. Upotreba s drugim uređajima/opremom SUSTAV ZA ANESTEZIJU I VENTILACIJSKA VREĆICA

Maska se može upotrebljavati za spontanu ili kontroliranu ventilaciju.

Tijekom anestezije dušikov oksid može se raspršiti u manšeti i uzrokovati povećanje volumena/tlaka manšete. Prilagodite tlak manšete tek toliko da postignete odgovarajuće brtvljenje (tlak manšete ne smije premašiti 60 cm H₂O).

Anestezijski dišni sustav mora se odgovarajuće poduprijeti kada je priključen na masku AuraStraight kako bi se izbjeglo okretanje maske.

UPOTREBA SA SPONTANOM VENTILACIJOM

Maska AuraStraight prikladna je za pacijente koji spontano dišu kada se upotrebljava s hlapljivim agensima ili intravenoznom anestezijom pod uvjetom da je anestezija primjerena razini kirurškog podražaja i da manšeta nije prekomjerno napuhana.

UPOTREBA S VENTILACIJOM POD POZITIVNIM TLAKOM

Kod primjene ventilacije pod pozitivnim tlakom provjerite je li brtvljenje odgovarajuće. Za poboljšanje brtvljenja preporučuje se sljedeće:

- Optimizirajte postavljanje maske AuraStraight zakretanjem glave ili povlačenjem glave.

- Prilagodite tlak u manšeti. Pokušajte s nižim i višim tlakovima (preniski ili previsoki tlak u manšeti može uzrokovati slabo brtvljenje manšete).
- Ako dođe do propuštanja oko manšete, uklonite masku i ponovno je umetnite, pazeći pritom da je dubina anestezije odgovarajuća.

MAGNETSKA REZONANCIJA (MR)

Maska AuraStraight sigurna je za upotrebu uz MR.

3.8. Postupak uklanjanja

Uklanjanje uvijek treba provesti u području u kojem su dostupne oprema za sukciju i brzu trahealnu intubaciju.

Nemojte uklanjati masku AuraStraight s potpuno napuhanom manšetom kako biste spriječili traumu tkiva i laringospazam.

3.9. Zbrinjavanje

Odložite iskorištenu masku Ambu AuraStraight na siguran način u skladu s lokalnim postupcima.

4.0. Specifikacije

Maska Ambu AuraStraight usklađena je s normom ISO 11712, Oprema za anesteziju i disanje – Supralaringealni dišni putovi i priključci.

	Za pedijatrijsku primjenu				Za odrasle			
Veličina maske	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Težina pacijenta	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maksimalni volumen unutar manšete	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
Maksimalni tlak unutar manšete	60 cm H ₂ O							
Priključak	Muški od 15 mm (ISO 5356-1)							
Maksimalna veličina instrumenta*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilnost konusa luer ventila za napuhavanje	Konus luer kompatibilan s opremom usklađenom s ISO 594-1 i ISO 80369-7							
Prikladni uvjeti skladištenja	od 10 °C (50 °F) do 25 °C (77 °F)							
Približna težina maske	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Unutarnji volumen ventilacijskog puta	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Pad tlaka prema normi ISO 11712, dodatak C	0,4cm H ₂ O pri 15 l/min	0,3cm H ₂ O pri 15 l/min	0,4cm H ₂ O pri 30 l/min	0,3cm H ₂ O pri 30 l/min	0,4cm H ₂ O pri 60 l/min	0,4cm H ₂ O pri 60 l/min	0,3cm H ₂ O pri 60 l/min	0,3cm H ₂ O pri 60 l/min
Min. interdentalni razmak	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nazivna duljina unutarnjeg ventilacijskog puta	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tablica 1: Specifikacije za masku Ambu AuraStraight.

* Maksimalna veličina instrumenta služi kao vodič za odabir odgovarajućeg promjera uređaja koji će se provoditi kroz cijev za pacijenta maske AuraStraight.

Popis objašnjenja svih simbola možete pronaći na web-adresi <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Autorska prava 2021 Ambu A/S, Danska. Sva prava pridržana.

Nijedan dio ove dokumentacije ne smije se ni u kojem obliku reproducirati, uključujući fotokopiranje, bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika autorskih prava.

1.1. Felhasználási terület/ Felhasználási javallatok

Az Ambu AuraStraight az éhgyomri betegek rutin és sürgősségi érzéstenítési eljárásai során a légutak irányítására és annak fenntartására szolgáló arcmaszok alternatívjaként használható.

1.2. Célfelhasználók és javallott alkalmazási környezet

Légútbiztosításban képzett egészségügyi szakemberek. Az AuraStraight kórházi környezetben történő használatra szolgál.

1.3. Javallott betegpopuláció

Felnőtt és 2 kg-nál nagyobb testsúlyú gyermekgyógyászati betegek, akik alkalmasak a szupraglottikus eljárásra.

1.4. Ellenjavallatok

Nem ismeretesek.

1.5. Klinikai előnyök

Biztosítja a felső légutak átjárhatóságát, lehetővé téve a gázok áthaladását.

1.6. Figyelmeztetések és óvintézkedések

Elengedhetetlen, hogy az Ambu AuraStraight behelyezése előtt az eszközt használó összes egészségügyi szakember megismerkedjen a *használati útmutatóban* foglalt figyelmeztetésekkel, óvintézkedésekkel, javallatokkal és ellenjavallatokkal.

FIGYELMEZTETÉSEK



1. A terméket kizárólag légútbiztosításban képzett egészségügyi szakemberek használhatják.
2. Kicsomagolás után és használat előtt mindig vizsgálja meg a terméket szemrevételezéssel, és végezzen működési tesztet a 3.1. Használat előtti előkészületek fejezet alapján, mert hiba vagy idegen anyag jelenléte a beteg lélegeztetésének elmaradását vagy gyengülését, a nyálkahártya károsodását, illetve a beteg fertőzését okozhatja. A használat előtti előkészületek sikertelensége esetén ne használja a terméket.
3. Ne használja újra másik betegnél az AuraStraight maszkot, mert az csak egyszeri használatra szolgál. A szennyezett termék újbóli felhasználása fertőzést okozhat.
4. Az AuraStraight nem védi a tracheát vagy a tüdőt az aspiráció veszélye ellen.
5. Az AuraStraight behelyezése és eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez szövetsérüléshez vezethet.
6. Nitrogén-monoxid, oxigén vagy egyéb orvosi gázok jelenlétében változhat a mandzsetta térfogata vagy nyomása, ami szövetsérüléshez vezethet. Gondoskodjon a mandzsettanyomás folyamatos monitorozásáról a sebészeti eljárás során.

7. Lézer és elektrokauter jelenlétében ne használja az AuraStraight maszkot, mert ez légúti égéshez és a szövetek égési sérüléséhez vezethet.
8. Ne végezzen közvetlen intubációt az AuraStraight eszközön keresztül, mert az endotracheális (ET) tubus beragadhat, ami elégtelen lélegeztetéshez vezethet.
9. Általában véve, az AuraStraight csak mély öntudatlanságban lévő betegnél használható, aki nem tanúsít ellenállást a maszk behelyezésével szemben.
10. Bár a gégemaszok okozta szövödmények aránya csekély, a felhasználónak szakmai szempontok alapján kell eldöntenie, hogy az adott esetben helyénvaló-e a gégemaszok használata. A következő betegek esetében nagyobb a súlyos szövödmények, köztük az aspiratio és a nem megfelelő lélegeztetés kockázata:
 - Felső légúti obstrukcióban szenvedő betegek
 - Nem éhgyomrú betegek (ideértve azokat az eseteket, amikor az éhgyomrúság nem igazolható)
 - Felső gastrointestinalis problémákban (pl. oesophagectomia, hiatus hernia, gastrooesophagealis reflux betegség, kóros elhízás, 10. héten túli terhesség) szenvedő betegek

- Nagy nyomású lélegeztetést igénylő betegek
- A maszk anatómiai illeszkedését potenciálisan megnehezítő pharyngeális/laryngeális patológiával (pl. tumorok, a nyak hypopharynxot érintő sugárkezelése, súlyos oropharyngealis sérülés) rendelkező betegek
- A behelyezést akadályozó szájnírással rendelkező betegek

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne áztassa, öblítse vagy sterilizálja az eszközt, mert így káros anyagok maradhatnak vissza, vagy meghibásodhat az eszköz. Kialakítása és a felhasznált anyagok miatt az eszköz nem tisztítható és sterilizálható hagyományos eljárásokkal.
2. Használat előtt mindig győződjön meg az AuraStraight és a külső eszközök kompatibilitásáról, hogy ne olyan eszközt használjon, amely nem vezethető keresztül az AuraStraight lumenjén.
3. A mandzsettanyomást azon a minimális értéken kell tartani, amely még biztosítja a megfelelő tömítést; az érték nem haladhatja meg a 60 H₂Ocm-t.

4. Rendszeresen monitorozni kell a légúti problémákra és a nem megfelelő lélegeztetésre utaló jeleket. A légutak átjárhatóságának fenntartása érdekében szükséges lehet az AuraStraight pozíciójának módosítása, újbóli behelyezése vagy cseréje.
5. A beteg feje vagy nyaka pozíciójának módosítása után mindig újból győződjön meg a légutak átjárhatóságáról.

1.7. Lehetséges nemkívánatos események

A gégemaszkok használatának lehetnek kisebb nemkívánatos hatásai (pl. torokfájás, vérzés, dysphonia, dysphagia) és jelentősebb nemkívánatos hatásai (pl. regurgitatio/aspiratio, laryngospasmus, idegsérülés) lehetnek.

1.8. Általános megjegyzések

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incidens történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.

2.0. Az eszköz leírása

Az AuraStraight egyszeri használatra szolgáló steril gégemaszok, amelyet a disztális végén felfújható mandzsettával ellátott íves betegcső alkot. A mandzsetta visszacsapó szelepen keresztül fújható fel, így az ellenőrző

ballon jelezni tudja a felfújási/leeresztési állapotot. A hypopharynx kontúrjaihoz illeszkedő mandzsetta lumenje a beteg gége nyílásához igazodik. A mandzsetta csúcsa a felső oesophagealis sphincterhez nyomódik, proximális vége pedig a nyelvgyökre támaszkodik.

Az AuraStraight 8-féle méretben kapható. Az AuraStraight fő elemei az **1** ábrán láthatók.

1. Ábra (4. oldal): Az AuraStraight részeinek áttekintése:

1. Csatlakozó; **2.** Betegcső; **3.** Mandzsetta; **4.** Visszacsapó szelep; **5.** Ellenőrző ballon; **6.** Ellenőrző cső; **7.** A belső lélegeztetési útvonal névleges hossza*
*A centiméterben megadott névleges hosszúság megtalálható az 1. táblázatban.

2. Ábra (4. oldal): Az AuraStraight megfelelő pozíciója – az AuraStraight részei és az anatómiai behatárolópontok

Az AuraStraight részei: **1.** Felfújható mandzsetta; **2.** Méretjelölés; **3.** Lélegeztetőnyílás; **4.** Lélegeztetési útvonal; **5.** Normál behelyezési mélység jelei; **6.** Gép felőli vég.

Anatómiai behatárolópontok: **A.** Oesophagus; **B.** Trachea; **C.** Cricoid porc; **D.** Thyroid porc; **E.** Hangszalagok; **F.** Laryngeális bemenet; **G.** Epiglottis; **H.** Nyelvcsont; **I.** Nyelv; **J.** Szájüreg; **K.** Nasopharynx; **L.** Metszőfogak.

KOMPATIBILITÁS EGYÉB ESZKÖZÖKKEL/ BERENDEZÉSEKKEL

A következők használhatók az AuraStraight eszközzel együtt:

- Lélegeztetőberendezések; az ISO 5356-1 szabványnak megfelelő 15 mm-es kúpos csatlakozók
- Légútbiztosító eszközök; bronchoszkópok és tubuscserélő katéterek*
- Egyéb tartozékok; standard 6 %-os kúpos Luer-zárás fecskendő, manóméter standard 6 %-os kúpos Luer-csatlakozóval, vízalapú síkosító, leszívókatéter

Ha eszközt használ a maszkon keresztül, akkor gondoskodjon az eszköz kompatibilitásáról és a bevezetés előtti megfelelő síkosításáról.

* Az eszköz maximális méretét az 1. táblázat ismerteti.

3.0. A termék használata

3.1. Használat előtti előkészületek A MÉRET KIVÁLASZTÁSA

Az Ambu AuraStraight többféle méretben áll rendelkezésre a különböző testsúlyú betegeknél történő használathoz.

Gyermekgyógyászati beteg esetén az Ambu AuraStraight maszkot lehetőleg a gyermekgyógyászati anesztéziában jártas egészségügyi szakember használja.

A kiválasztási iránymutatást és a mandzsettán belüli max. nyomást illetően lásd az 1. táblázatot a 4.0. fejezetben (Műszaki jellemzők).

AZ AURASTRAIGHT ELLENŐRZÉSE

Az Ambu AuraStraight előkészítése és behelyezése során a szennyeződés minimalizálása érdekében mindig viseljen kesztyűt.

Finoman bánjon az AuraStraight maszkkal, nehogy elszakadjon vagy kilyukadjon. Óvja az éles vagy hegyes tárgyakkal történő érintkezéstől.

Felnyitás előtt ellenőrizze, hogy a tasak zárása sértetlen-e. Ha a zárás sérült, akkor dobja ki az Ambu AuraStraight maszkot.

Gondosan vizsgálja meg, hogy nincs-e az AuraStraight maszkon perforáció, karcolás, bevágás, szakadás, hiányzó rész, éles szél stb.

Győződjön meg róla, hogy a mandzsettáról el van távolítva a mandzsettavédő.

Győződjön meg róla, hogy a betegcső és a mandzsetta átjárhatóságát semmi sem akadályozza, és nem található bennük laza részek. A blokkolt vagy sérült AuraStraight maszkot ne használja.

Teljesen eressze le az AuraStraight mandzsettáját. Leeresztés után gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e a mandzsettán gyűrődés vagy ránc. Fújja fel a mandzsettát az 1. táblázatban meghatározott térfogatra. Győződjön meg róla, hogy a felfújt mandzsetta szimmetrikus és sima. A mandzsettán, az ellenőrző csövön és az ellenőrző ballonon nem lehet kidudorodás és semmilyen szivárgásra utaló jel. Behelyezés előtt ismét eressze le a mandzsettát.

3.2. Előkészítés a használatra BEHELYEZÉS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK

- Teljesen eressze le a mandzsettát úgy, hogy az sima és gyűrődésmentes legyen – ennek érdekében nyomja sima, steril felületre (pl. steril gézre), miközben fecskendő segítségével leereszti az eszközt. ③

- Behelyezés előtt kenje meg a mandzsetta hátsó végének felületét steril, vízalapú síkosítóval.
- Mindig tartson kéznél azonnal felhasználható Ambu AuraStraight maszkot.
- Végezzen előoxigenizálást, és alkalmazza a szabványos monitorozási eljárásokat.
- Mielőtt megpróbálkozna a behelyezéssel, bizonyosodjon meg róla, hogy az anesztézia (vagy az öntudatlanság) mértéke megfelelő. A tracheális intubációhoz megfelelő mértékű anesztéziának elegendőnek kell lennie a sikeres behelyezéshez.
- A beteg fejének nyújtott helyzetben kell lennie, és a nyakat a tracheális intubációnál használatos helyzetbe (ún. „szimatoló” pozícióba) kell hajtani.

3.3. Behelyezés

- Soha ne alkalmazzon túl nagy erőt.
- Fogja meg az Ambu AuraStraight eszközt úgy, mint egy ceruzát, mutatóujját a mandzsetta és a betegcső közötti átmenetre helyezve. Másik kezét tartsa a beteg feje alatt. ④
- Helyezze be a mandzsetta csúcsát úgy, hogy az felfelé a kemény szájpadhoz nyomódjon, és a mandzsetta rásimuljon. ⑤
- Mielőtt folytatná, győződjön meg róla, hogy a mandzsetta csúcsa a szájpadra simult – nyissa

nagyobbra a beteg száját úgy, hogy középső ujjával finoman lehúzza az alsó állkapcsát.

- Ügyeljen rá, hogy a mandzsetta csúcsa ne kerüljön a valleculába vagy a glottisba, és ne akadjon el az epiglottison vagy az arytenoidokon. A mandzsettának a beteg hátsó garatfalához kell nyomódnia.
- Amikor a maszk a helyére kerül, ellenállást fog érezni.
- Mielőtt elhúzná a maszkot tartó kezét, a másik kezével nyomja le a légúti tubust. Ezzel biztosítható, hogy a mutatóujja elhúzásakor az Ambu AuraStraight a helyén maradjon.
- A behelyezés után ügyeljen rá, hogy az ajkak ne szoruljanak a betegcső és a fogak közé, mert így megsérülhetnek.

Behelyezési problémák

- Gyermekegyógyászati beteg esetén javasolt részleges rotációs technikát alkalmazni, ha a behelyezés nehézségbe ütközik.
- Az Ambu AuraStraight behelyezése közbeni köhögés vagy lélegzet-visszatartás azt jelzi, hogy nem elég mély az anesztézia. Azonnal mélyítse el az anesztéziát inhalációs vagy intravénás szerekekkel, és végezzen kézi lélegeztetést.
- Ha nem tudja a maszk behelyezéséhez szükséges mértékben kinyitni a beteg száját, ellenőrizze, hogy

elégséges mértékű-e a beteg anesztéziája. Kérjen meg egy asszisztent, hogy a beteg alsó állkapcsát lejjebb húzva segítse a betekintést a beteg szájába a maszk pozíciójának ellenőrzéséhez.

- Ha az AuraStraight behelyezésekor nehézséget okoz a szögállás beigazítása a nyelv hátánál, akkor teljesen nyomja a csúcsot a szájpadhoz, ellenkező esetben a csúcs visszahajolhat, vagy rendellenességbe, például hypertrophizált tonsillákba ütközhet a hátsó pharynxnál. Ha behelyezéskor a mandzsetta nem simul el, vagy elkezd felkunkorodni, akkor húzza ki a maszkot, és kezdje előlről a behelyezést. Tonsillaris obstructio esetén ajánlott diagonálisan mozgatni a maszkot.

3.4. Rögzítés

Szükség esetén rögzítse az Ambu AuraStraight maszkot a beteg arcához ragasztószalaggal vagy a célnak megfelelő mechanikus csőtartóval. ⑦ Ajánlott géz harapásgátlót alkalmazni.

3.5. Felfújás

- Anélkül, hogy tartaná a csövet, fújja fel a mandzsettát éppen annyi levegővel, hogy létrejöjjön a tömítés (a mandzsettán belüli nyomás legfeljebb 60 H₂Ocm). ⑥ Gyakran a maximális térfogat fele is elegendő a tömítés létrehozásához – a mandzsetta maximális belső térfogatát illetően lásd az 1. táblázatot.

- Sebészeti eljárás közben a mandzsettanyomást folyamatosan monitorozni kell mandzsettanyomás-mérővel. Ez különösen fontos hosszabb használat vagy nitrogén-oxid-gázok alkalmazása esetén.
- Figyelje a megfelelő elhelyezésre utaló következő jeleket: a cső esetleges enyhe elmozdulása kifelé a mandzsetta felfújása után; a nyak finom, ovális duzzanata a thyroid és cricoid porcoknál; a mandzsetta nem látható a szájüregben.
- Az első három-négy lélegzetvétel során enyhe szivárgás léphet fel a maszknál, mielőtt az a helyére illeszkedne a pharynxban. Ha a szivárgás nem szűnik meg, akkor ellenőrizze, hogy elégséges mélységű-e az anesztézia, és nem nagy-e a pulmonális felfújási nyomás, és ennek alapján döntsön az AuraStraight újbóli behelyezésének szükségességéről.

3.6. A megfelelő pozíció ellenőrzése

- Megfelelő elhelyezés esetén a mandzsetta csúcsa szivárgásmentesen illeszkedik a glottisra a felső oesophagealis sphincternél.
- A betegcsövön található függőleges vonalnak előre, a beteg orra felé kell irányulnia.
- Az AuraStraight akkor van megfelelően behelyezve, ha a beteg metszőfogai a betegcső két vízszintes vonala közé esnek. ②, 5-ös tétel. Ha a beteg metszőfogai kívül

esnek ezen a tartományon, akkor igazítsa meg a maszkt.

- Az AuraStraight pozíciójának felméréséhez alkalmazható kapnográfia, a légzési térfogat változásainak figyelése (pl. csökkenhet a kilégzési térfogat), a kétoldali légzési hangok hallgatása és azok epigastriumnál történő megszűnésének megfigyelése és/vagy a mellkas lélegeztetési emelkedésének figyelése. Ha arra gyanakszik, hogy az AuraStraight helytelen pozícióban van behelyezve, akkor távolítsa el, és helyezze be újra – és gondoskodjon a megfelelő mélységű anesztéziáról.
- Ajánlatos szemrevételezéssel meggyőződni az anatómiailag helyes pozícióról, például flexibilis endoszkóp segítségével.

NEM VÁRT REGURGITATIO:

- A nem megfelelő szintű anesztézia regurgitációt okozhat. A regurgitatio első jelei lehetnek a spontán légzés, a köhögés vagy a légzés visszatartása.
- Ha regurgitatio fellépésekor az oxigénszaturáció elfogadható szinten marad, az AuraStraight maszkt nem kell eltávolítani. A probléma kezeléséhez döntse a beteget Trendelenburg-pozícióba. Rövid időre válassza le az anesztéziás kört, hogy a gyomortartalom ne nyomódjon a tüdőbe. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e az

anesztézia mélysége, és szükség esetén mélyítse el intravénásan.

- Alkalmazzon szívást a maszk betegcsövén és a szájon keresztül. Szívja le a tracheobronchiális rendszert, és vizsgálja meg a bronchusokat flexibilis endoszkóppal.

3.7. Használat egyéb eszközökkel/berendezésekkel

ANESZTÉZIÁS RENDSZER ÉS LÉLEGETTETŐBALLON

A maszk spontán és kontrollált lélegeztetéshez is használható.

Az anesztézia során nitrogén-oxid diffundálhat a mandzsettába, megnövelve annak térfogatát/nyomását. Úgy állítsa be a mandzsetta nyomását, hogy az éppen elegendő legyen a megfelelő tömítés kialakításához (a mandzsettanyomás nem haladhatja meg a 60 H₂Ocm értéket).

Az AuraStraight elfordulásának megelőzése érdekében a maszkhoz csatlakoztatott anesztéziás lélegeztetőrendszert megfelelően meg kell támasztani.

HASZNÁLAT SPONTÁN LÉLEGEZTETÉSSEL

Az AuraStraight használható spontán lélegző betegnél illékony anyagokkal történő vagy intravénás anesztézia alkalmazásával, amennyiben az anesztézia megfelel a sebészeti inger szintjének, és a mandzsetta nincs túlfújva.

HASZNÁLAT POZITÍV NYOMÁSÚ LÉLEGEZTETÉSSEL

Pozitív nyomású lélegeztetés esetén gondoskodjon a megfelelő tömítésről. Javaslatok a tömítés javításához:

- Optimalizálja az AuraStraight helyzetét a fej elfordításával vagy meghúzásával.
- Állítsa be a megfelelő mandzsettanyomást. Kisebb és nagyobb nyomást is próbáljon ki (túl nagy és túl kis nyomás következtében is gyenge lehet a tömítés).
- Ha a mandzsetta körül szivárgást észlel, akkor távolítsa el és helyezze be újra a maszkot, ügyelve közben a megfelelő mélységű anesztéziára.

MÁGNESES REZONANCIÁS KÉPALKOTÁS (MRI)

Az AuraStraight maszk MRI szempontjából biztonságos eszköz.

3.8. Eltávolítás

Az eltávolítást mindig olyan helyen kell végezni, ahol leszívóberendezés és a gyors tracheális intubációhoz szükséges eszközök is rendelkezésre állnak.

A szövetsérülés és a laryngospasmus megelőzése érdekében ne teljesen felfújta mandzsettával távolítsa el az AuraStraight maszkot.

3.9. Ártalmatlanítás

A használt Ambu AuraStraight maszkot a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.

4.0. Műszaki jellemzők

Az Ambu AuraStraight megfelel a ISO 11712 Altató- és lélegeztetőkészülékek. Szupralaryngeális légutak és csatlakozók szabvány előírásainak.

	Gyermek				Felnőtt			
Maszk mérete	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Beteg testsúlya	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Mandzsetta maximális belső térfogata	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Mandzsetta maximális belső nyomása	60 H ₂ Ocm							
Csatlakozó	15 mm-es, külső menetes (ISO 5356-1)							
Maximális eszközméret*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Felfűjszelep Luer-kúpjának kompatibilitása	A Luer-kúp kompatibilis az ISO 594-1 és az ISO 80369-7 szabványnak megfelelő berendezésekkel							
Megfelelő tárolási körülmények	10–25 °C (50–77 °F)							
Maszk hozzávetőleges tömege	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Lélegeztetési útvonal belső térfogata	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Nyomásesés az ISO 11712 szabvány C. melléklete szerint	0,4 H ₂ Ocm 15 l/min mellett	0,3 H ₂ Ocm 15 l/min mellett	0,4 H ₂ Ocm 30 l/min mellett	0,3 H ₂ Ocm 30 l/min mellett	0,4 H ₂ Ocm 60 l/min mellett	0,4 H ₂ Ocm 60 l/min mellett	0,3 H ₂ Ocm 60 l/min mellett	0,3 H ₂ Ocm 60 l/min mellett
Min. hézag a két fogsor között	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Belső lélegeztetési útvonal névleges hossza	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

1. táblázat: Az Ambu AuraStraight műszaki jellemzői

* A maximális eszközméret iránymutatásként szolgál az AuraStraight betegcsövén átvezetni kívánt eszköz megfelelő átmérőjének kiválasztásához.

A szimbólumok magyarázatának teljes listája megtalálható a <https://www.ambu.com/symbol-explanation címen>.

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dánia. Minden jog fenntartva.

A szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen dokumentáció semmilyen része semmilyen formában (a fénymásolást is beleértve) sem reprodukálható.

1.1. Destinazione d'uso/ Indicazioni:

L'uso di Ambu AuraStraight è previsto in alternativa a una maschera facciale, al fine di ottenere e mantenere il controllo delle vie aeree durante le procedure di anestesia di routine e di emergenza, in pazienti a digiuno.

1.2. Utenti previsti e ambiente di utilizzo

Personale medico specializzato nella gestione delle vie aeree.

AuraStraight è destinata all'uso in ambiente ospedaliero.

1.3. Popolazione di pazienti di destinazione

Pazienti adulti e pediatrici a partire da 2 kg valutati idonei per un presidio sovraglottico.

1.4. Controindicazioni

Nessuna nota.

1.5. Vantaggi clinici

Mantiene aperte le vie aeree superiori per consentire il passaggio dei gas.

1.6. Avvertenze e avvisi

Prima dell'inserimento, è essenziale che tutti i professionisti medici che utilizzano Ambu AuraStraight abbiano familiarità con avvertenze, precauzioni, indicazioni e controindicazioni riportate nelle *Istruzioni per l'uso*.

AVVERTENZE



1. Il prodotto è destinato all'uso da parte di professionisti medici formati esclusivamente sulla gestione delle vie aeree.
2. Ispezionare sempre visivamente il prodotto ed eseguire un test di funzionalità dopo disimballaggio e montaggio e prima dell'uso secondo la sezione 3.1 poiché difetti e corpi estranei possono causare ventilazione assente o ridotta del paziente. Non utilizzare il prodotto in caso di mancato superamento dei passaggi descritti in Preparazione prima dell'uso.
3. Non riutilizzare AuraStraight su un altro paziente poiché si tratta di un dispositivo monouso. Il riutilizzo di un prodotto contaminato può causare infezioni.
4. AuraStraight non protegge la trachea o i polmoni dal rischio di aspirazione.
5. Non esercitare una forza eccessiva durante l'inserimento e la rimozione di AuraStraight poiché questo potrebbe causare traumi ai tessuti.
6. Il volume o la pressione della cuffia possono variare in presenza di ossido di azoto, ossigeno o altri gas medici causando traumi ai tessuti. Assicurarsi di monitorare costantemente la pressione della cuffia durante l'intervento chirurgico.

7. Il volume o la pressione della cuffia possono variare in presenza di ossido di azoto, ossigeno o altri gas medici causando traumi ai tessuti. Assicurarsi di monitorare costantemente la pressione della cuffia durante l'intervento chirurgico.
8. Non utilizzare AuraStraight in presenza di laser ed elettrocauteri poiché potrebbero verificarsi incendi alle vie aeree e ustioni ai tessuti.
9. Non eseguire l'intubazione diretta tramite AuraStraight poiché il tubo endotracheale (ET) potrebbe bloccarsi con conseguente ventilazione insufficiente.
10. Il tasso complessivo di complicità della maschera laringea è basso, ma l'utente deve effettuare un giudizio professionale per decidere se l'uso della maschera laringea è appropriato. I seguenti pazienti sono a maggior rischio di gravi complicanze, tra cui aspirazione e ventilazione inadeguata:
 - Pazienti con ostruzione delle vie aeree superiori.
 - Pazienti non a digiuno (inclusi i casi in cui il digiuno non può essere confermato).
 - Pazienti che soffrono di problemi gastrointestinali superiori (per es. esofagectomia, ernia iatale, malattia da reflusso gastroesofageo, obesità patologica, gravidanza >10 settimane).
 - Pazienti che necessitano di ventilazione ad alta pressione.

- Pazienti che presentano una patologia faringea/laringea che potrebbe complicare l'adattamento anatomico della maschera (per es. tumori, radioterapia al collo che coinvolge l'ipofaringe, trauma orofaringeo grave).
- Pazienti con apertura della bocca inadeguata per consentire l'inserimento.

AVVISI

1. Non immergere, risciacquare o sterilizzare il dispositivo: tali procedure possono infatti lasciare residui nocivi o causare malfunzionamenti del dispositivo stesso. Il design e i materiali usati non sono compatibili con le procedure di detersione e sterilizzazione convenzionali.
2. Prima dell'uso, verificare sempre la compatibilità tra AuraStraight e il dispositivo esterno per evitare che i dispositivi non possano passare attraverso il lumen di AuraStraight.
3. La pressione della cuffia deve essere la più bassa possibile, pur mantenendo una tenuta sufficiente, e non deve superare i 60 cm H₂O.

4. Monitorare con regolarità eventuali segni di problemi alle vie aeree o ventilazione inadeguata e riposizionare, reinserire o rimuovere AuraStraight secondo necessità per mantenere la pervietà delle vie aeree.
5. Riconfermare sempre la pervietà delle vie aeree dopo ogni cambiamento di posizione della testa o del collo del paziente.

1.7. Potenziali eventi avversi

L'uso di maschere laringee è associato a eventi avversi minori (per es. mal di gola, sanguinamento, disfonia, disfagia) ed effetti avversi maggiori (per es. rigurgito/aspirazione, laringospasmo, lesioni ai nervi).

1.8. Note generali

Se durante o dopo l'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali.

2.0. Descrizione dispositivo

AuraStraight è una maschera laringea sterile monouso composta da un tubo paziente con una cuffia gonfiabile

all'estremità distale. La cuffia può essere gonfiata attraverso la valvola di gonfiaggio che permette al palloncino pilota di indicare lo stato di gonfiaggio/sgonfiaggio. La cuffia si adatta ai contorni dell'ipofaringe con il lumen rivolto verso l'apertura laringea del paziente. La punta della cuffia preme contro lo sfintere esofageo superiore e l'estremità prossimale della cuffia poggia sulla base della lingua.

AuraStraight è disponibile in 8 misure diverse. I componenti principali di AuraStraight sono illustrati nella figura ①.

Figura 1 (pagina 4): Panoramica dei componenti di AuraStraight:

1. Connettore; 2. Tubo paziente; 3. Cuffia; 4. Valvola di gonfiaggio; 5. Palloncino pilota; 6. Tubo pilota; 7. Lunghezza nominale del percorso di ventilazione interno*.

* Vedere la Tabella 1 per la lunghezza nominale espressa in centimetri.

Figura 2 (pagina 4): Posizione corretta di AuraStraight rispetto alle parti di AuraStraight e ai punti di riferimento anatomici

Componenti di AuraStraight: **1.** Cuffia gonfiabile; **2.** Marker dimensionale; **3.** Apertura di ventilazione; **4.** Via di ventilazione; **5.** Marker di profondità di inserimento normale; **6.** Estremità della macchina.

Punti di riferimento anatomici: **A.** Esofago; **B.** trachea; **C.** Anellocricicoide; **D.** Cartilagine tiroidea; **E.** Cordevocali; **F.** Ingresso laringeo; **G.** Epiglottide; **H.** Ossoioide; **I.** Tongue; **J.** Cavità vestibolare; **K.** Nasofaringe; **L.** Incisivi.

**COMPATIBILITÀ CON ALTRI DISPOSITIVI/
APPARECCHIATURE**

AuraStraight può essere utilizzato con:

- Apparecchiature di ventilazione; connettori conici da 15 mm conformi alla norma ISO 5356-1.
- Dispositivi di gestione delle vie aeree; broncoscopi e cateteri exchange*.
- Altri accessori; siringa Luer conica standard al 6 %, manometro con connettore Luer conico standard al 6 %, lubrificante a base acquosa, catetere di aspirazione.

Quando si utilizzano gli strumenti attraverso la maschera, assicurarsi che lo strumento sia compatibile e ben lubrificato prima dell'inserimento.

** Vedere la Tabella 1 per informazioni sulle dimensioni massime dello strumento.*

3.0. Utilizzo del prodotto

3.1. Preparazione prima dell'uso

SCELTA DELLA MISURA

Ambu AuraStraight è disponibile in diverse misure da utilizzare in pazienti di peso diverso.

Per i pazienti pediatrici, si raccomanda l'uso di Ambu AuraStraight da parte di un medico esperto in anestesia pediatrica.

Vedere le linee guida per la selezione e la pressione intracuffia massima nella Tabella 1, sezione 4.0. (Specifiche).

ISPEZIONE DI AURASTRAIGHT

Indossare sempre i guanti durante la preparazione e l'inserimento di Ambu AuraStraight per ridurre al minimo la contaminazione.

Maneggiare AuraStraight con cautela poiché potrebbe lacerarsi o forarsi. Evitare il contatto con oggetti taglienti o appuntiti.

Controllare che il sigillo della busta sia intatto prima dell'apertura e smaltire Ambu AuraStraight se il sigillo sterile è danneggiato.

Esaminare attentamente AuraStraight per individuare eventuali danni come perforazioni, graffi, tagli, strappi, parti allentate, bordi taglienti, etc.

Accertarsi che la protezione della cuffia sia stata rimossa.

Controllare che non siano presenti ostruzioni o parti allentate all'interno del tubo paziente e della cuffia. Non utilizzare AuraStraight se bloccata o danneggiata.

Sgonfiare completamente la cuffia di AuraStraight. Una volta sgonfiata, controllare la presenza di eventuali pieghe o parti corrugate sulla cuffia. Gonfiare la cuffia al volume indicato nella Tabella 1. Verificare che la cuffia gonfiata sia simmetrica e liscia. Non devono essere presenti rigonfiamenti né segni di perdita nella cuffia, nel tubo pilota o nel palloncino pilota. Sgonfiare nuovamente la cuffia prima dell'inserimento.

3.2. Preparazione all'uso

PREPARAZIONE PRIMA DELL'INSERIMENTO

- Sgonfiare completamente la cuffia in modo da eliminare le pieghe premendola su una superficie piana sterile (per es. un lembo di garza sterile) e sgonfiando contemporaneamente il dispositivo con una siringa. ③
- Lubrificare l'estremità posteriore della cuffia prima dell'inserimento applicando un lubrificante sterile a base acquosa sulla superficie distale posteriore della cuffia.
- Approntare sempre all'uso un dispositivo Ambu AuraStraight di riserva.
- Pre-ossigenare e attenersi alle procedure di monitoraggio standard.
- Verificare che il livello di anestesia (o incoscienza) sia adeguato prima di tentare l'inserimento. L'inserimento dovrebbe riuscire allo stesso livello di anestesia idoneo per l'intubazione tracheale.
- La testa del paziente deve essere in posizione estesa con flessione del collo nella posizione usata di solito per l'intubazione tracheale (la cosiddetta "posizione di sniffing").

3.3. Inserimento

- Non applicare mai una forza eccessiva.
- Impugnare Ambu AuraStraight come una matita, con l'indice posizionato in corrispondenza della transizione

tra la cuffia e il tubo paziente. L'altra mano deve essere sotto la testa del paziente. ④

- Inserire la punta della cuffia premendo verso l'alto contro il palato duro e appiattire la cuffia contro il palato duro. ⑤
- Verificare che la punta della cuffia sia appiattita contro il palato prima di procedere, poi spingere delicatamente la mandibola verso il basso con il dito medio per aprire ulteriormente la bocca.
- Assicurarsi che la punta della cuffia non entri nella vallecchia o nell'apertura della glottide e che non rimanga impigliata contro l'epiglottide o le aritenoidi. La cuffia va premuta contro la parete faringea posteriore del paziente.
- Quando la maschera è inserita in sede si avvertirà una resistenza.
- Prima di ritirare la mano che trattiene la maschera, usare l'altra mano per premere verso il basso il tubo della via aerea. In questo modo, AuraStraight resta in posizione quando il dito viene tolto.
- Dopo l'inserimento, assicurarsi che le labbra non siano intrappolate tra il tubo paziente e i denti per evitare traumi alle labbra.

PROBLEMI DI INSERIMENTO

- Per i pazienti pediatrici, si consiglia una tecnica di rotazione parziale in caso di difficoltà di posizionamento.
- Tosse e trattenimento del respiro durante l'inserimento di Ambu AuraStraight indicano un'anestesia non sufficientemente profonda. Intensificare immediatamente l'anestesia mediante agenti inalatori o endovenosi e iniziare la ventilazione manuale.
- Se non è possibile aprire la bocca del paziente a sufficienza per inserire la maschera, verificare che l'anestesia del paziente sia adeguata. Chiedere a un assistente di tirare la mandibola verso il basso agevolando la visibilità all'interno della bocca e verificare la posizione della maschera.
- In caso di difficoltà di manovra nell'angolo posteriore della lingua durante l'inserimento di AuraStraight, premere la punta contro il palato per l'intera operazione poiché la punta potrebbe ripiegarsi su sé stessa o incontrare un'irregolarità nella faringe posteriore, per es. tonsille ipertrofiche. Se la cuffia non si appiattisce o inizia ad arrotolarsi durante l'inserimento, estrarre la maschera e reinserirla. In caso di ostruzione tonsillare, si consiglia un movimento diagonale della maschera.

3.4. Fissaggio

Se necessario, fissare AuraStraight al viso del paziente con nastro adesivo o con un supporto meccanico per tubi idoneo allo scopo. ⑦ Si consiglia l'uso di un blocco occlusale in garza.

3.5. Gonfiaggio

- Senza reggere il tubo, gonfiare la cuffia con l'aria sufficiente a ottenere una tenuta ermetica equivalente a una pressione intracuffia di massimo 60 cm H₂O. ⑥ Spesso è sufficiente la metà del volume massimo per ottenere la tenuta – Consultare la Tabella 1 per i volumi massimi.
- Monitorare costantemente la pressione della cuffia con un manometro durante l'intervento chirurgico. Questo è particolarmente importante in caso di uso prolungato o quando si utilizza ossido di azoto.
- Verificare la presenza dei seguenti segni di corretto posizionamento: Verificare la presenza dei seguenti segni di corretto posizionamento: l'eventuale leggero movimento verso l'esterno del tubo al gonfiaggio della cuffia, la presenza di un liscio rigonfiamento ovoidale nell'area tiroidea e cricoidea o il fatto che la cuffia non è visibile nella cavità orale.
- La maschera può perdere leggermente per i primi tre o quattro respiri, prima di assestarsi in posizione nella

faringe. Se le perdite persistono, verificare che l'anestesia sia adeguatamente profonda e che le pressioni di gonfiaggio polmonare siano basse prima di ritenere necessario il reinserimento di AuraStraight.

3.6. Verifica della posizione corretta

- Il posizionamento corretto deve produrre una tenuta ermetica contro la glottide con la punta della cuffia sullo sfintere esofageo superiore.
- La linea verticale sul tubo paziente deve essere orientata in direzione anteriore verso il naso del paziente.
- AuraStraight è inserita correttamente quando gli incisivi del paziente si trovano tra le due linee orizzontali sul tubo paziente. ②, elemento 5. Riposizionare la maschera se gli incisivi del paziente sono al di fuori di questo intervallo.
- La posizione di AuraStraight può essere valutata mediante capnografia, osservando le variazioni del volume corrente (per es. una riduzione del volume corrente espirato), mediante l'auscultazione di suoni respiratori bilaterali e l'assenza di suoni sull'epigastrio e/o osservando il sollevamento del torace con la ventilazione. Se si sospetta che AuraStraight sia posizionata in modo non corretto, rimuoverla e reinserirla – assicurandosi che l'anestesia sia abbastanza profonda.

- Verificare a livello visivo la posizione anatomicamente corretta, per es. utilizzando un endoscopio flessibile.

RIGURGITO IMPREVISTO:

- Il rigurgito può essere dovuto a un livello di anestesia inadeguato. I primi segnali di rigurgito possono essere respirazione spontanea, tosse o trattenimento del respiro.
- In caso di rigurgito, se la saturazione di ossigeno rimane a livelli accettabili, AuraStraight non deve essere rimossa. La situazione deve essere gestita portando il paziente in una posizione "a testa bassa". Scollegare brevemente il circuito anestetico in modo che i contenuti gastrici non vengano spinti nei polmoni. Verificare che l'anestesia sia adeguatamente profonda e, se necessario, intensificarla per via endovenosa.
- Effettuare l'aspirazione attraverso il tubo paziente della maschera e attraverso la bocca. Aspirare l'albero tracheobronchiale e ispezionare i bronchi con un endoscopio flessibile.

3.7. Utilizzo con altri dispositivi/attrezzature SISTEMA ANESTETICO E PALLONE PER VENTILAZIONE

La maschera può essere usata per la ventilazione spontanea o controllata.

Durante l'anestesia, l'ossido di azoto può diffondersi nella cuffia e aumentare il volume o la pressione della cuffia.

Regolare la pressione della cuffia quanto basta per ottenere una tenuta adeguata (la pressione della cuffia non deve superare i 60 cm H₂O).

Il sistema di respirazione in anestesia deve essere sorretto adeguatamente quando è collegato a AuraStraight per evitare la rotazione della maschera.

USO CON VENTILAZIONE SPONTANEA

AuraStraight è adatta a pazienti che respirano spontaneamente se utilizzata con anestesia intravenosa o mediante agenti volatili, a condizione che l'anestesia sia adeguata rispetto ai livelli di stimolazione chirurgica e la cuffia non sia eccessivamente gonfia.

USO CON VENTILAZIONE A PRESSIONE POSITIVA

Quando si utilizza la ventilazione a pressione positiva, assicurarsi che la tenuta sia adeguata. Per migliorare la tenuta, si consiglia quanto segue:

- Ottimizzare il posizionamento di AuraStraight ruotando o tirando la testa.
- Regolare la pressione della cuffia. Provare con pressioni più basse e più alte (una cattiva tenuta può essere causata da una pressione troppo bassa o troppo alta della cuffia).

- Se si verificano perdite attorno alla cuffia, rimuovere la maschera e reinserirla assicurandosi che la profondità dell'anestesia sia adeguata.

RISONANZA MAGNETICA PER IMMAGINI (RMI)

AuraStraight è compatibile con la RMI.

3.8. Procedura di rimozione

La rimozione deve essere eseguita sempre in un'area in cui siano disponibili dispositivi per l'aspirazione e per una rapida intubazione tracheale.

Non rimuovere AuraStraight con la cuffia completamente gonfia per evitare traumi ai tessuti e laringospasmo.

3.9. Smaltimento

Smaltire Ambu AuraStraight in modo sicuro secondo le procedure locali.

4.0. Specifiche

Ambu AuraStraight è conforme allo standard ISO 11712 per Apparecchiature anestetiche e respiratorie – Connettori e vie aeree sovralaringei.

	Pediatico				Adulto			
Misura della maschera	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Peso del paziente	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Pressione massima intracuffia	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 mL	40 ml	50 ml
Pressione massima intra-cuffia	60 cm H ₂ O							
Connettore	Maschio 15 mm (ISO 5356-1)							
Dimensione massima dello strumento*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibilità con il cono Luer della valvola di gonfiaggio	Cono Luer compatibile con apparecchiature conformi alle norme ISO 594-1 e ISO 80369-7							
Condizioni di conservazione appropriate	Da 10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)							
Peso approssimativo della maschera	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Volume d'insufflazione	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Caduta di pressione determinata in base a ISO 11712 allegato C	(0,4 cm H ₂ O) a 15 l/min	(0,3 cm H ₂ O) a 15 l/min	(0,4 cm H ₂ O) a 30 l/min	(0,3 cm H ₂ O) a 30 l/min	(0,4 cm H ₂ O) a 60 l/min	(0,4 cm H ₂ O) a 60 l/min	(0,3 cm H ₂ O) a 60 l/min	(0,3 cm H ₂ O) a 60 l/min
Min. Gap interdentale	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Lunghezza nominale del percorso di ventilazione interno	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabella 1: Specifiche di Ambu AuraStraight.

* La dimensione massima dello strumento è da intendersi come guida per la selezione del diametro appropriato di un dispositivo da far passare attraverso il tubo paziente di AuraStraight.

l'elenco completo delle spiegazioni dei simboli è disponibile su <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Danimarca. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte della presente documentazione può essere riprodotta in alcuna forma, incluse le fotocopie, senza previa autorizzazione scritta del detentore del copyright.

1.1. 使用目的/適応:

Ambu AuraStraight は、ルーチンおよび緊急麻酔薬処置中、患者の気道確保および維持するフェイスマスクの代替えとしての使用を意図しています。

1.2. 使用対象者および使用環境

気道管理に関する訓練を受けた医療従事者。

AuraStraight は、病院環境での使用を目的としています。

1.3. 対象患者

成人および体重が2 kg 以上の小児患者で、声門上器具が使用可能と評価された患者。

1.4. 禁忌

既知の禁忌はありません。

1.5. 臨床的有益性

上気道を開いたままにして、ガスを通過させます。

1.6. 警告および使用上の注意

Ambu AuraStraight を使用する医療従事者は、挿入前に、取扱説明書に記載されている警告、注意事項、適応、禁忌についてよく理解しておくことが重要です。



警告

1. 本製品は、気道管理の訓練を受けた医療従事者のみが使用することを意図しています。
2. 欠陥や異物があると、患者の換気ができなくなったり、換気量が低下したり、粘膜壁を傷つけたり、患者が感染したりすることがあるので、開梱後使用前に、必ずセクション 3.1 の「使用前の準備」に従って目視点検と機能テストを行ってください。「使用前の準備」のいずれかの手順に適合していない場合は、本製品を使用しないでください。
3. AuraStraight はシングルユース製品です。他の患者に再使用しないでください。汚染された製品を再使用すると、感染につながる可能性があります。
4. AuraStraight は、誤嚥リスクから気管や肺を保護しません。
5. AuraStraight を挿入または抜去する際は、力を過度に加えないでください。組織の損傷を招くおそれがあります。
6. 亜酸化窒素、酸素、他の医療用ガスが存在する場合には、カフ容量やカフ圧が変化し、組織の損傷を招くおそれがあります。手技中はカフ圧を常に監視するようにしてください。
7. AuraStraight をレーザーおよび電気焼灼器と併用しないでください。気道熱傷や組織の熱傷を引き起こす可能性があります。

8. AuraStraight から直接挿管しないでください。気管チューブが詰まって換気が不十分になる可能性があります。

9. 一般的に、AuraStraight は、鎮静が十分に挿入時の抵抗がない患者のみに使用してください。

10. ラリゲルマスクの全体的な合併症発生率は低いです。ラリゲルマスクの使用が適切かどうかを決定するには、ユーザーは専門的な判断が必要になります。以下の患者は、誤嚥や換気不全を含む重篤な合併症のリスクが高くなります。

- 上気道閉塞患者
- 絶食していない患者（絶食を確認できない患者を含む）
- 上部消化管疾患の患者（例：食道切除術、食道裂孔ヘルニア、胃食道逆流疾患、病的肥満、妊娠 10 週以上）
- 高圧換気を必要とする患者
- 咽頭 / 喉頭に病状のある患者は、マスクの解剖学的フィットを潜在的に複雑化する可能性がある（例えば、腫瘍、下咽頭を伴う頸部への放射線治療、重度の中咽頭外傷）。
- 挿入には開口が不十分な患者

注意

1. 有害な残留物を残したり、装置の故障を引き起こすことがあるため、この装置を水に浸したり、水ですすいだり、消毒したりしないでください。設計構造や使用されている原材料は、従来の洗浄や滅菌手順と互換性がありません。
2. 使用前に AuraStraight と他の機器との間の互換性を常に確認し、AuraStraight の内腔に通すことのできない機器を使用しないようにしてください。
3. カフ圧は、できるだけ低く維持し、十分な密着性を確保する必要があります。また、60 cm H₂O を超えないようにしてください。
4. 患者の気道維持のため、気道の問題の兆候や換気不十分の兆候を定期的に監視し、必要に応じて AuraStraight の位置調整、再挿入、交換を行う必要があります。
5. 患者の頭部や首の位置を変更した後は、気道の開通性を必ず再確認してください。

1.7. 潜在的な有害事象

ラリンゲルマスクの使用に関連する有害事象は、軽微な有害事象（例えば、咽頭痛、出血、発声障害、嚥下障害）及び重大な有害事象（例えば、逆流/吸引、喉頭痙攣、神経損傷）などです。

1.8. 一般的な注意事項

本機器の使用時、または使用の結果、重篤な事象が発生した場合は、メーカーに報告してください。

2.0. 機器の説明

AuraStraight は滅菌済みのシングルユースラリンゲルマスクで、遠位端に膨張カフを備えたエアウェイチューブで構成されています。カフはチェックバルブを通して膨張させることができ、パイロットバルーンが膨張/収縮の状態を示します。カフは、下咽頭の輪郭に合わせ、その内腔を患者の喉頭開口部に向けて装着します。カフの先端は上部食道括約筋を圧迫し、カフの近位端は舌根に接しています。

AuraStraight には 8 種類のサイズがあります。
AuraStraight の主要コンポーネントを図 ① に示します。

図 1 (4 ページ) : AuraStraight 部品の概要:

1. コネクタ; 2. エアウェイチューブ; 3. カフ; 4. チェックバルブ; 5. パイロットバルーン; 6. インフレーショングチューブ; 7. 内部換気経路の公称長さ*。
*公称長さ(センチメートル単位)については表1を参照してください。

図 2 (4 ページ) : AuraStraight の部品と解剖学的ランドマークに対する AuraStraight の正しい位置

AuraStraight 部品: 1. 膨張カフ; 2. サイズマーク; 3. 換気開口部; 4. 換気経路; 5. 通常の挿入深度マーク; 6. 機械端。

解剖学的ランドマーク A. 食道、B. 気管; C. 輪状軟骨; D. 甲状軟骨; E. 声門; F. 喉頭入口、G. 喉頭蓋; H. 舌骨; I. 舌、J. 頬側口腔、K. 鼻咽頭、L. 門歯

他の機器との互換性

AuraStraight は以下の製品と併用可能です:

- 換気装置; ISO 5356-1 に準拠した 15 mm 円錐形コネクタ。
- 気道管理機器; 気管支鏡および交換カテーテル*。
- その他のアクセサリ: 標準 6% 円錐形ルアーシリンジ、標準 6% 円錐形ルアーコネクタ付きマノメータ、水性潤滑剤、吸引カテーテル。

マスクを通して器具を使用する際は、挿入する前に器具が適合しており、十分に潤滑されていることを確認してください。

*最大機器サイズについては、表1を参照してください。

3.0. 製品の使用

3.1. 使用前の準備

サイズの選択

Ambu AuraStraight は、患者の体重に合わせて使用できる様々なサイズをご用意しています。

小児患者には、小児麻酔に精通した医療従事者が Ambu AuraStraight を使用することが推奨されます。

選択ガイドラインと最大カフ内圧はセクション 4.0 の表 1 を参照してください。（仕様）。

Ambu AuraStraight の確認

Ambu AuraStraight の準備および挿入中は、汚染を最小限に抑えるために必ず手袋を着用してください。

Ambu AuraStraight は破れたり穴が開いたりする可能性があるため、慎重に取り扱ってください。鋭いものや先の尖ったものと接触させないでください。

Ambu AuraStraight を開く前にパウチシールが破損していないことを確認し、破損している場合は AuraStraight を破棄してください。

Ambu AuraStraight に穿孔、傷、切れ目、裂け目、緩んだ部分、鋭利な端などの損傷がないか注意深く確認してください。

カフプロテクタをカフから取り外します。

エアウェイチューブの内側、カフに閉塞や部品のゆるみがないことを確認します。Ambu AuraStraight が閉塞していたり、破損している場合は使用しないでください。

Ambu AuraStraight のカフを完全に脱気します。脱気したら、カフにしわやひだがないかしっかりと確認します。カフを表 1 で示す容量まで膨らませます。カフが左右対称で滑らかであることを確認します。カフ、インフレーションチューブ、パイロットバルーンに膨らみやリークの兆候がないか確認します。挿入する前にカフを再び脱気します。

3.2. 使用前の準備

挿入前の準備

- カフを平らな無菌表面（例えば、無菌ガーゼ片）に押し当て、同時にシリンジで空気を抜き、カフが平らでしわが生じないように完全に脱気します。③
- カフの遠位後面に滅菌済みの水性潤滑剤を塗布し、挿入前にカフの後部先端を潤滑します。

- 予備の Ambu AuraStraight を必ず使用できる状態にしておいてください。
- 前酸化を行い、標準的なモニタリング手順を使用します。
- 挿入を試みる前に、麻酔（または鎮静）のレベルが十分であることを確認してください。挿入は、気管挿管に適するのと同じレベルの麻酔で成功するはずですが、
- 患者の頭部は通常気管挿管を行う体位（すなわち「スニッフingポジション」）で、首の屈曲、伸展を行ってください。

3.3. 挿入

- 過度な力を加えないでください。
- Ambu AuraStraight を鉛筆のように持ち、カフとエアウェイチューブの間の切り換え部に人差し指を当てます。もう片方の手は患者の頭の下に置きます。④
- カフの先端を上方向に押し、硬口蓋に当て、カフを平らにします。⑤
- 次に進む前に、カフの先端が口蓋に対して平らになっていることを確認します。中指で顎をそっと押し下げて、口をさらに開きます。
- カフの先端が喉頭蓋谷や声門開口部に入り込み、喉頭蓋骨や喉頭蓋に挟まれないようにしてください。カフは、患者の後咽頭壁に押し当ててください。
- マスクを留置すると、抵抗が感じられます。

- ・ マスクを片手で持ちながら、もう一方の手でエアウェイチューブを押し下げ、マスクを持っている方の手を引きまします。指を離すと Ambu AuraStraight が所定位置に留まります。
- ・ 口唇の損傷防止のために、挿入後はエアウェイチューブと歯の間に唇が挟まっていないことを確認してください。

挿入時の問題

- ・ 小児患者については、留置が困難な場合は部分回転テクニックが推奨されます。
- ・ Ambu AuraStraight 挿入中の咳や呼吸停止は、麻酔深度が不十分であることを示しています。- 吸引または静脈内投与剤で麻酔深度を直ちに調節し、用手換気を開始してください。
- ・ マスク挿入のための患者の開口が不十分な場合は、患者の麻酔が適正かどうかチェックします。助手に患者のあごを下に引き、口の中が見えやすく、マスクの位置が確認しやすくなるよう依頼します。
- ・ AuraStraight 挿入時に舌の後方の角度を操作しにくい場合は、先端を口蓋に押し当ててください。そうしないと、先端が折れ曲がったり、後咽頭の凹凸（肥大した扁桃など）に当たることがあります。カフが平らにならなかったり、挿入時に巻き上げられたりした場合は、マスクを抜去し再度挿入します。扁桃腺閉塞の場合は、マスクを対角線方向に動かすことを推奨します。

3.4. 固定

必要に応じて、テープまたはチューブホルダーで AuraStraight を患者の顔に固定します。⑦ガーゼバイトブロックの使用を推奨します。

3.5. インフレーション

- ・ チューブを保持しないで、密閉するのに十分なだけの空気でカフを膨らませます。これは、最大 60 cm H₂O のカフ内圧に相当します。⑥多くの場合、カフ最大空気容量の半分で十分な密閉が得ることができます。最大カフ容量については表 1 を参照してください。
- ・ 手技中はカフ圧計でカフ圧を継続的に監視してください。これは、長期間使用したり亜酸化窒素ガスを使用したりする際に特に重要です。
- ・ 正しい留置を示すサインは以下です。カフの膨張時にチューブがわずかに外側に動くことがあること、甲状腺と輪状軟骨周囲の頸部に滑らかな楕円形の膨らみ存在すること、又は口腔内にカフが見えないこと。
- ・ 咽頭の正しい位置に落ち着く前に、最初の 3~4 回の呼吸ではマスクにわずかなリークが見られることがあります。リークが継続する場合、AuraStraight の再挿入の必要性を想定する前に、十分な麻酔深度であるかと、肺の膨張圧が低いことを確認してください。

3.6. 正しい位置の確認

- ・ 正しく留置すれば、カフの先端が上部食道括約筋にある状態で声門に対してシールされ、リークは起きません。
- ・ エアウェイチューブの垂直線は、患者の鼻に向かって前向きになります。
- ・ AuraStraight は、患者の門歯がエアウェイチューブ上の 2 本の水平線の間に来ると正しく挿入されます。②、5。患者の門歯がこの範囲外の場合、マスクの位置を変えます。
- ・ AuraStraight の位置は、カプノグラフィ、一回換気量の変化の観察（呼吸一回換気量の減少など）、両側呼吸音の聴診と上腹部音の欠如、および/または換気による胸の挙上の観察によって評価できます。AuraStraight の位置が適切でないと思われる場合は、抜去、再挿入し、麻酔深度が適切であることを確認してください。
- ・ 軟性内視鏡の使用などで、解剖学的に正しい位置を目視で確認することを推奨します。

予期しない逆流：

- ・ 逆流は、麻酔レベルが不十分であることが原因である可能性があります。逆流の最初の徴候は、自発呼吸、咳、または呼吸停止などです。
- ・ 逆流が発生しても、酸素飽和度が許容レベルに維持されている場合は、AuraStraight を抜去しないでください。この場合、患者を「頭低位」姿勢にして管理する必要があります。胃内容物が肺に押し込まれないよう

に、麻酔回路の接続を短時間解除します。必要に応じて、麻酔深度が適切であることを確認し、静脈内麻酔を深くします。

- マスクのエアウェイチューブを介し口から吸引します。気管気管支樹を吸引し、軟性内視鏡を使用して気管支を観察します。

3.7. 他の機器との併用

麻酔システムおよび換気バッグ

マスクは自発呼吸と機械換気のどちらにも使用できます。

麻酔中、亜酸化窒素がカフ内に拡散し、カフ容量/圧力を上昇させる可能性があります。適切な密閉状態になるようにカフ圧を調整します（カフ圧は 60 cm H₂O を超えないこと）。

AuraStraight に接続するときは、マスクが回転しないよう、麻酔回路システムを適切にサポートする必要があります。

自発呼吸による使用法

AuraStraight が自発呼吸患者に適しているのは、麻酔が外科的刺激レベルに最適であり、カフが過剰に膨らんでいないという条件で、揮発性薬剤または静脈内麻酔と併用する場合です。

陽圧換気による使用法

陽圧換気を行うときは、シールが十分であることを確認してください。密閉状態を改善するには、以下が推奨されます。

- 頭部の向きを変えたり牽引したりして AuraStraight を最適な位置にします。
- カフ圧を調整します。圧力は上下たり下げたり両方試してください（カフ圧が低すぎたり、高すぎたりするとしっかり密閉されなくなることがあります）。
- カフ周辺にリークが発生した場合は、マスクを抜去し、麻酔深度が適切であることを確認しながら再挿入してください。

核磁気共鳴画像法(MR)

AuraStraight は MR 適合です。

3.8. 抜去手順

抜去は、吸引装置と迅速な気管挿管のための設備が使用可能な場所で必ず行ってください。

組織の外傷や喉頭痙攣を防ぐため、カフが完全に膨張した状態で AuraStraight を抜去しないでください。

3.9. 廃棄

使用済み Ambu AuraStraight は、地域（施設）の手順に従って安全な方法で廃棄してください。

4.0. 仕様

Ambu AuraStraight は、ISO 11712 麻酔及び呼吸機器 - 咽頭上気道及びコネクタに適合しています。

	子供				成人			
マスクサイズ	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
患者の体重	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
最大カフ容量	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
最大カフ内圧	60 cm H ₂ O							
コネクタ	15 mm オス (ISO 5356-1)							
最大機器サイズ*	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.5 mm	9.0 mm	9.5 mm	10.5 mm	11.0 mm
膨張弁ルーアークーンの互換性	ISO 594-1 および ISO 80369-7 に準拠した機器と互換性のあるルーアークーン							
適切な保管条件	10 °C (50 °F) ~ 25 °C (77 °F)							
マスクのおおよその重量	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
換気経路の内部容量	4.3 ± 0.5 mL	5.7 ± 0.5 mL	7.1 ± 0.5 mL	10.2 ± 0.6 mL	13.4 ± 0.4 mL	15.3 ± 0.4 mL	20.6 ± 0.4 mL	22.2 ± 0.5 mL
ISO 11712 附属書 C に従って定められた定した圧力降下	15リットル/分で 0.4 cm H ₂ O	15リットル/分で 0.3 cm H ₂ O	30リットル/分で 0.4cm H ₂ O	30リットル/分で 0.3 cm H ₂ O	60リットル/分で 0.4cm H ₂ O	60リットル/分で 0.4cm H ₂ O	60リットル/分で 0.3cm H ₂ O	60リットル/分で 0.3cm H ₂ O
最小 歯間隙	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
内部換気経路の公称長さ	10.2 ± 0.6 cm	11.8 ± 0.7 cm	13.4 ± 0.8 cm	15.3 ± 0.9 cm	17.1 ± 1.0 cm	17.6 ± 1.1 cm	19.6 ± 1.2 cm	20.8 ± 1.2 cm

表 1: Ambu AuraStraight の仕様。

* 最大器具サイズは、AuraStraight のエアウェイチューブを通過する器具の適切な直径を選択するためのガイドとして意図したものです。

記号の説明の一覧は、<https://www.ambu.com/symbol-explanation> から入手できます

© Copyright 2021 Ambu A/S, Denmark. 無断転載を禁じます。

本書のいかなる部分も、著作権所有者の書面による事前の許可なしに、コピーを含むいかなる形式においても複製することはできません。

1.1. Paskirtis ir indikacijos

„Ambu AuraStraight“ skirta naudoti kaip alternatyvi veido kaukė, padedanti kontroliuoti kvėpavimo takus ir palaikyti jų kontrolę anestezinių procedūrų metu įprastiniais ir kritiniais atvejais nevalgusiems pacientams.

1.2. Numatytieji naudotojai ir naudojimo aplinka

Medicinos specialistai, išmokyti atlikti procedūras kvėpavimo takuose.

„AuraStraight“ skirta naudoti ligoninėje.

1.3. Numatytoji pacientų grupė

Suaugusieji ir 2 kg arba didesnio svorio vaikai, kuriems galima naudoti viršgerklinį vamzdelį.

1.4. Kontraindikacijos

Nėra žinomos.

1.5. Klinikinė nauda

Palaiko atvirus viršutiniuosius kvėpavimo takus, kad jais galėtų tekėti dujos.

1.6. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Svarbu, kad prieš įvedimą visi „Ambu AuraStraight“ naudojantys medicinos specialistai perskaitytų visus *naudojimo instrukcijoje* pateikiamus įspėjimus, atsargumo priemones, indikacijas ir kontraindikacijas.

ĮSPĖJIMAI



1. Šis gaminys skirtas naudoti tik medicinos specialistams, išmokytiems atlikti procedūras kvėpavimo takuose.
2. Gaminį išpakavę ir prieš naudodami visuomet jį apžiūrėkite ir atlikite funkcijų bandymą, kaip aprašyta 3.1 skyriuje „Paruošimas prieš naudojimą“, nes defektai ir pašalinės medžiagos gali blokuoti arba silpninti paciento ventiliavimą, pažeisti gleivinę arba sukelti infekciją. Nenaudokite gaminio, jeigu nepavyksta atlikti kurio nors paruošimo prieš naudojimą žingsnio.
3. „AuraStraight“ nenaudokite pakartotinai kitam pacientui, nes tai yra vienkartinis įtaisas. Pakartotinai naudojant užterštą gaminį gali kilti infekcija.
4. „AuraStraight“ neapsaugo trachėjos ar plaučių nuo aspiracijos pavojaus.
5. Nenaudokite pernelyg didelės jėgos įvesdami ir ištraukdami „AuraStraight“, nes galite pažeisti audinius.
6. Movos tūris ar slėgis gali pasikeisti veikiant azoto oksidui, deguoniui ar kitokioms medicininėms dujoms, todėl gali įvykti audinių pažeidimas. Chirurginės procedūros metu nuolat stebėkite movos slėgį.
7. Nenaudokite „AuraStraight“ kartu su lazeriais arba elektrokauterių įranga, nes tai gali sukelti liepsną kvėpavimo takuose ir nudeginti audinius.
8. Neatlikite tiesioginio intubavimo per „AuraStraight“, nes endotrachėjinis (ET) vamzdelis gali įstrigti, todėl ventiliavimas bus nepakankamas.
9. „AuraStraight“ galima naudoti tik pacientams, kurie yra gilioje nesąmoningumo būsenoje ir nesipriešina įvedimui.
10. Bendras laringinės kaukės sukeliamų komplikacijų dažnumas retas, tačiau sprendamas, ar tinkama naudoti laringinę kaukę, naudotojas turi remtis profesionaliais žiniomis. Toliau nurodytiems pacientams kyla didesnė sunkių komplikacijų, įskaitant aspiravimą ir nepakankamą ventiliavimą, rizika:
 - Pacientams su viršutinių kvėpavimo takų obstrukcija;
 - Jeigu pacientai yra valgę (įskaitant atvejus, kai negalima patvirtinti, kad pacientas yra nevalgęs);
 - Virškinimo trakto ligomis sergantys pacientai (pvz., stemplės pašalinimas, diafragmos išvarža, gastroezofaginė reflukso liga, didelio laipsnio nutukimas, > 10 sav. nėštumas);
 - Pacientai, kuriems reikalingas aukšto slėgio ventiliavimas;
 - Pacientai, turinys ryklės / gerklų patologiją, potencialiai komplikuojančią kaukės anatominį tinkamumą (pvz., augliai, kaklo radioterapija apimanti viršutinę ryklės dalį, rimta orofaringinė trauma);
 - Pacientai, kurių burnos anga per maža, kad būtų galima įvesti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Nemirkykite, neplaukite ir nesterilizuokite prietaiso, nes dėl šių procedūrų gali likti kenksmingų nuosėdų arba prietaisas gali sugesti. Prietaiso konstrukcija ir medžiagos nepritaikytos įprastoms valymo ir sterilizavimo procedūroms.
2. Prieš naudodami būtinai patikrinkite „AuraStraight“ ir išorinio prietaiso suderinamumą, kad įsitikintumėte, ar prietaisai praeina pro „AuraStraight“ spindį.
3. Movos slėgis turi būti kuo mažesnis, tačiau užtikrinantis pakankamą sandarumą, ir neturi viršyti 60 cm H₂O.
4. Būtina reguliariai stebėti, ar nepasireiškia kokių nors su kvėpavimo takais susijusių problemų arba netinkamo ventiliavimo požymių, ir „AuraStraight“ reikia įstatyti į kitą padėtį, įvesti iš naujo arba tinkamai pakeisti, kad kvėpavimo takai būtų atviri.
5. Pasikeitus paciento galvos arba kaklo padėčiai visada patikrinkite, ar kvėpavimo takai atviri.

1.7. Galimi nepageidaujami reiškiniai

Gerklų kaukės susijusios su lengvais nepageidaujamais reiškiniais (pvz., gerklės skausmas, kraujavimas, disfonija, disfagija) ir sunkiais nepageidaujamais reiškiniais (pvz., regurgitacija / aspiracija, gerklų spazmai, nervų pažeidimas).

1.8. Bendrosios pastabos

Jeigu šios priemonės naudojimo metu ar dėl šios priemonės naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo šalies atsakingajai institucijai.

2.0. Priemonės aprašymas

„AuraStraight“ yra sterili vienkartinė gerklų kaukė, sudaryta iš paciento vamzdelio ir distaliname gale esančios pripučiamos movos. Movą galima pripūsti naudojant kontrolinį vožtuvą, kurio pagrindinis balionas rodo pripūtimo / išleidimo lygį. Mova atitinka gerklinės ryklės kontūrą, o jos spindis yra nukreiptas į paciento gerklės angą. Movos galiukas priglunda prie viršutinio stemplės sutraukiamojo raumens, o proksimalinis movos galas priglunda prie liežuvio pagrindo.

„AuraStraight“ būna 8 skirtingų dydžių. Pagrindinės „AuraStraight“ dalys pateikiamos ① pav.

1 pav. (4 psl.) „AuraStraight“ dalių apžvalga.

1. Jungtis. 2. Paciento vamzdelis. 3. Mova.
4. Kontrolinis vožtuvas. 5. Pagrindinis balionas.
6. Pagrindinis vamzdelis. 7. Vidinio ventiliavimo tako vardinis ilgis*.

* Vardinį ilgį centimetrais žr. 1 lentelėje.

2 pav. (4 psl.) Tinkama „AuraStraight“ padėtis, atsižvelgiant į „AuraStraight“ dalis ir anatominius orientyrus.

- „AuraStraight“ dalys. 1. Pripučiamą movą. 2. Dydžio žyma. 3. Ventiliavimo anga. 4. Ventiliavimo kanalas. 5. Normalus įvedimo žymų gylis. 6. Prietaiso galas.

Anatominiai orientyrai. A. Stemplė. **B.** Trachėja. **C.** Žiedinė kremzlė. **D.** Skydinė kremzlė. **E.** Balso stygos. **F.** Gerklų anga. **G.** Antgerklis. **H.** Poliežuvinis kaulas. **I.** Liežuvis. **J.** Burnos ertmė. **K.** Nosiaryklė. **L.** Kandžiai.

SUDERINAMUMAS SU KITAIŠ PRIETAISAIŠ AR ĮRANGA

„AuraStraight“ galima naudoti kartu su:

- Ventiliavimo įranga; 15 mm kūginėmis jungtimis, atitinkančiomis ISO 5356-1;
- Kvėpavimo takų procedūrų prietaisais, bronchoskopais ir keitimo kateteriais*;
- Kitais priedais; švirkštu su standartinė 6 % kūgine Luerio jungtimi, manometru su standartinė 6 % kūgine Luerio jungtimi, lubrikantu vandens pagrindu, siurbimo kateteriu.

Prieš įvesdami instrumentą pro kaukę įsitikinkite, ar instrumentas yra suderinamas ir gerai suteptas.

* Informacijos apie didžiausią instrumento dydį ieškokite 1 lentelėje.

3.0. Gaminio naudojimas

3.1. Paruošimas prieš naudojimą

DYDŽIO PARINKIMAS

„Ambu AuraStraight“ būna įvairių dydžių, kad būtų galima naudoti skirtingo svorio pacientams.

Jeigu pacientas yra vaikas, rekomenduojama, kad „Ambu AuraStraight“ naudotų medicinos specialistas, mokantis atlikti anestetines procedūras vaikams.

Pasirinkimo gairių ir maks. vidinio movos spaudimo ieškokite 1 lentelėje, 4.0 skyriuje „Specifikacijos“.

„AURASTRAIGHT“ PATIKRA

Ruošdami ir įvesdami „Ambu AuraStraight“ visuomet mūvėkite pirštines, kad sumažintumėte užteršimo tikimybę.

Atsargiai elkitės su „AuraStraight“, kad jos nesuplėšytumėte ir nepradurtumėte. Saugokite nuo sąlyčio su aštriais ar smailiais daiktais.

Prieš atidarydami patikrinkite, ar nepažeistas maišelio sandarumas; jeigu maišelio sandarumas pažeistas, „Ambu AuraStraight“ išmeskite.

Atidžiai apžiūrėkite, ar „AuraStraight“ nepažeista, pavyzdžiui, nėra pradūrimų, įbrėžimų, įpjovimų, plyšimų, atsilaisvusių dalių, aštrių kraštų ir t. t.

Įsitikinkite, ar nuo movos nuimtas apsauginis movos gaubtas.

Patikrinkite, ar paciento vamzdelio ir movos vidus neužsikimšęs ir ar nėra laisvų dalių. Nenaudokite, jeigu „AuraStraight“ užsikimšusi arba pažeista.

Visiškai išleiskite orą iš „AuraStraight“ movos. Išleidę orą patikrinkite, ar movoje nėra raukšlių ir klosčių. Pripūskite

movą iki 1 lentelėje nurodyto tūrio. Įsitikinkite, ar pripūsta mova yra simetriška ir lygi. Mova, pagrindinis vamzdelis ar pagrindinis balionas negali būti deformuotas ir juose negali vykti jokio pratekėjimo. Prieš įvesdami, vėl išleiskite orą iš movos.

3.2. Paruošimas naudoti PARUOŠIMAS PRIEŠ ĮVEDIMĄ

- Visiškai išleiskite orą iš movos, spausdami ją prie plokščio sterilaus paviršiaus (pvz., sterilios marlės gabalėlio), kad mova būtų plokščia ir be raukšlių, tuo pačiu metu švirkštu išleisdami orą iš prietaiso. ③
- Prieš įvesdami sutepkite užpakalinį movos galą, steriliu tepalu vandens pagrindu tepdami distalinį užpakalinį movos paviršių.
- Visuomet turėkite paruoštą naudoti atsarginę kaukę „Ambu AuraStraight“.
- Iš anksto pripildykite deguonimi ir taikykite standartinės stebėjimo procedūras.
- Prieš įvesdami patikrinkite, ar taikoma tinkamo lygio anestezija (sąmonės nebuvimas). Įvedimas turėtų vykti sėkmingai esant tokio pačio lygio anestezijai, kuris tinkamas atliekant trachėjos intubaciją.
- Paciento galva turi būti ištiesta, kaklas sulenktas į padėtį, paprastai naudojamą trachėjai intubuoti (t. y. „uostymo padėtyje“).

3.3. Įvedimas

- Niekada nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
- Laikykite „Ambu AuraStraight“ kaip pieštuką, rodomąjį pirštą uždėję ant movos ir paciento vamzdelio sujungimo vietos. Kitą ranką padėkite po paciento galva. ④
- Įveskite movos galiuką, jį spausdami aukštyn kietojo gomurio link ir išlyginkite movą, kad prie jo priglustų. ⑤
- Prieš tęsdami patikrinkite, ar movos galiukas yra lygiai prigludęs prie gomurio – viduriniuju pirštu švelniai patraukite žandikaulį žemyn, kad smarkiau atvertumėte burną.
- Įsitinkinkite, ar movos galiukas nepatenka į įdubą ar gerklų angą ir neįstringa ties antgerkliu arba vedeginėmis kremzlėmis. Mova turi priglusti prie paciento užpakalinės ryklės sienelės.
- Įstačius kaukę į vietą, bus juntamas pasipriešinimas.
- Prieš atitraukiant kaukę laikančią ranką, kita ranka prispaudžiamas kvėpavimo takų vamzdelis. Taip užtikrinama, kad „Ambu AuraStraight“ liktų vietoje patraukus pirštą.
- Įvedę įsitinkinkite, ar paciento lūpos nesuspaustos tarp paciento vamzdelio ir dantų, kad neįvyktų lūpos traumų.

SU ĮVEDIMU SUSIJUSIOS PROBLEMOS

- Jeigu procedūra atliekama vaikui, kilus įstatymo į reikiamą padėtį problemų, rekomenduojama taikyti dalinio pasukimo metodą.

- Kosulys arba kvėpavimo sulaikymas „Ambu AuraStraight“ įvedimo procedūros metu reiškia nepakankamą anesteziją – nedelsdami sustiprinkite anesteziją įkvepiamosiomis arba intraveninėmis medžiagomis ir pradėkite taikyti ventiliavimą rankiniu būdu.
- Jeigu nepavyksta pakankamai atverti paciento burnos, kad būtų galima įvesti kaukę, patikrinkite, pacientui taikoma tinkama anestezija. Paprašykite padėjėjo patraukti žandikaulį žemyn, kad geriau matytumėte burną ir patikrintumėte kaukės padėtį.
- Jeigu įvedant „AuraStraight“ sunku reguliuoti kampą ties liežuvio galu, visą galiuką prispauskite prie gomurio, nes kitu atveju ant galiuko gali susiformuoti klosčių arba jis gali prisiliesti prie nelygumų, esančių ant užpakalinės ryklės sienelės, pavyzdžiui, hipertrofinių tonzilių. Jeigu movos nepavyksta ištiesinti arba įvedant ji pradeda linkti, kaukę ištraukite ir įveskite iš naujo. Jeigu įvyksta tonzilių obstrukcija, rekomenduojama kaukę pajudinti įstrižai.

3.4. Tvirtinimas

Jeigu būtina, pritvirtinkite „AuraStraight“ prie paciento veido lipnia juosta arba tam tikslui tinkamu mechaniniu vamzdelio laikikliu. ⑦ Rekomenduojama naudoti sąkandžio fiksatorių iš marlės.

3.5. Pripūtimas

- Nelaikydami vamzdelio, pripūskite movą, pumpuodami tiek oro, kad būtų užtikrinamas sandarumas, lygus ne didesniai nei 60 cm H₂O vidiniam movos slėgiui. ⑥ Dažnai užtenka pusės maksimalaus tūrio sandarumui užtikrinti – žr. 1 lentelėje pateikiamą didžiausią leistiną vidinį movos tūrį.
- Chirurginės procedūros metu movos slėgio matuokliu nuolat stebėkite movos slėgį. Tai ypač svarbu, jeigu mova naudojama ilgai arba jeigu naudojamos azoto oksido dujos.
- Atkreipkite dėmesį į šiuos tinkamo įstatymo požymius: pripūtus movą galimas nestiprus vamzdelio judėjimas į išorę, matomas lygus ovalo formos patinimas ant kaklo aplink skydliaukę ar žiedinės kremzlės srityje arba burnos ertmėje nesimato movos.
- Kaukė gali šiek tiek pratekėti per tris-keturis pirmuosius įkvėpimus, prieš įsitvirtindama reikiamoje padėtyje ryklėje. Jeigu pratekėjimas neišnyksta, prieš nusprenddami, ar būtina iš naujo įvesti „AuraStraight“, patikrinkite, ar taikoma pakankamai stipri anestezija ir ar plaučių pripūtimo slėgis yra mažas.

3.6. Tinkamos padėties patikra

- Tinkamai įvedus, movos galiukas turi sandariai priglusti prie balsaskylės ties viršutiniu stemplės sfinkteriu.

- Vertikali linija ant paciento vamzdelio turėtų būti priekyje, nukreipta link paciento nosies.
- „AuraStraight“ yra įvesta tinkamai, jeigu paciento kandžiai yra tarp dviejų horizontalių paciento vamzdelio linijų. ②, 5 elementas. Jeigu paciento kandžiai yra už šių ribų, nustatykite kaukės padėtį iš naujo.
- „AuraStraight“ padėtį galima įvertinti kapnografijos būdu, stebint iškvėpiamojo tūrio pokyčius (pvz., pastebėjus iškvėpiamojo tūrio sumažėjimą), atliekant abipusę kvėpavimo garso auskultaciją ir pastebėjus garso nebuvimą virš epigastriumo ir (arba) stebint, ar ventiliuojant pakyla krūtinės ląsta. Jeigu įtariate, kad „AuraStraight“ įstatyta netinkamai, išimkite ir iš naujo įveskite kaukę bei įsitikinkite, kad taikoma pakankamo stiprumo anestezija.
- Rekomenduojama vizualiai, t. y. naudojant lankstų endoskopą, patvirtinti, kad kaukė įstatyta reikiamoje anatominėje padėtyje.

NENUMATYTA REGURGITACIJA

- Regurgitaciją gali sukelti netinkamo lygio anestezija. Pirmieji regurgitacijos požymiai gali būti spontaniškas kvėpavimas, kosulys arba kvėpavimo sulaikymas.
- Jeigu pasireiškia regurgitacija, bet prisotinimas deguonimi išlieka tinkamo lygio, „AuraStraight“ nereikia išimti. Šią problemą galima pašalinti nuleidus paciento

galvą žemyn. Trumpam atjunkite anestezijos kontūrą, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius. Patikrinkite, ar pakankamas anestezijos lygis ir, jei reikia, sustiprinkite anesteziją intraveniniu būdu.

- Siurbkite pro kaukės paciento vamzdelį ir burną. Siurbkite iš trachėjos bei bronchų ir stebėkite bronchus lanksčiuoju endoskopu.

3.7. Naudojimas kartu su kitais prietaisais / įranga

ANESTETINĖ SISTEMA IR VENTILIAVIMO MAIŠAS

Kaukė gali būti naudojama taikant spontaninį arba kontroliuojamą ventiliavimą.

Anestezijos metu azoto oksido gali patekti į movą ir sukelti vidinio movos tūrio / slėgio padidėjimą. Sureguliuokite pakankamą movos slėgį, kad būtų užtikrinamas tinkamas sandarumas (movos slėgis negali viršyti 60 cm H₂O).

Prie „AuraStraight“ prijungta anestetinė kvėpavimo sistema turi būti tinkamai prilaikoma, kad kaukė nesisuktų.

NAUDOJIMAS TAIKANT SPONTANINĮ VENTILIAVIMĄ

„AuraStraight“ tinkama spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, kai kartu naudojamos lakiosios medžiagos arba intraveninė anestezija, tačiau su sąlyga, kad anestezija atitinka chirurginio stimuliavimo lygį ir mova nėra pernelyg pripūsta.

NAUDOJIMAS TAIKANT TEIGIAMO SLĖGIO VENTILIAVIMĄ

Taikydami teigiamo slėgio ventiliavimą užtikrinkite, kad sandarumas yra pakankamas. Norint pagerinti sandarumą, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite optimalią „AuraStraight“ padėtį pasukdami arba patraukdami galvą.
- Sureguliuokite movos slėgį. Išbandykite ir mažesnį, ir didesnį slėgį (netinkamą movos sandarumą gali lemti ir pernelyg žemas, ir pernelyg aukštas movos slėgis).
- Jeigu aplink movą vyksta pratekėjimas, išimkite ir iš naujo įstatykite kaukę bei užtikrinkite, kad taikoma pakankamo stiprumo anestezija.

MAGNETINIO REZONANSO TYRIMAS (MRT)

„AuraStraight“ saugu naudoti MR aplinkoje.

3.8. Ištraukimo procedūra

Ištraukti galima tik tokioje aplinkoje, kurioje yra siurbimo įranga ir skubaus trachėjos intubavimo įranga.

Neištraukite „AuraStraight“, kai mova yra visiškai pripūsta, kad nepažeistumėte audinių ir neįvyktų gerklų spazmai.

3.9. Šalinimas

Panaudotą „Ambu AuraStraight“ kaukę išmeskite saugiai, laikydamiesi vietos procedūrų.

4.0. Specifikacijos

„Ambu AuraStraight“ atitinka ISO 11712 „Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Viršgerkliniai oro takų vamzdeliai ir jungtys“ reikalavimus.

	Vaikų				Suaugusiųjų			
	Nr. 1	Nr. 1½	Nr. 2	Nr. 2½	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6
Kaukės dydis								
Paciento svoris	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Didžiausias leistinas vidinis movos tūris	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Didžiausias leistinas vidinis movos slėgis	60 cm H ₂ O							
Jungtis	15 mm išorinis sriegis (ISO 5356-1)							
Maks. instrumento dydis*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Pripūtimo vožtuvo Luerio kūgio suderinamumas	Kūginė Luerio jungtis suderinama su įranga, atitinkančia ISO 594-1 ir ISO 80369-7 reikalavimus							
Tinkamos laikymo sąlygos	Nuo 10 °C (50 °F) iki 25 °C (77 °F)							
Apytikslis kaukės svoris	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Vidinis ventiliavimo kanalo tūris	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Slėgio sumažėjimas, nustatytas pagal ISO 11712 C priedą	0,4 cm H ₂ O, esant 15 l/min	0,3 cm H ₂ O, esant 15 l/min	0,4 cm H ₂ O, esant 30 l/min	0,3 cm H ₂ O, esant 30 l/min	0,4 cm H ₂ O, esant 60 l/min	0,4 cm H ₂ O, esant 60 l/min	0,3 cm H ₂ O, esant 60 l/min	0,3 cm H ₂ O, esant 60 l/min
Min. tarpelis tarp dantų	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominalusis vidinio ventiliavimo kanalo ilgis	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

1 lentelė. „Ambu AuraStraight“ specifikacijos.

* Maksimalus instrumento dydis naudojamas kaip orientyras pasirenkant tinkamo skersmens įtaisą, kuris bus įvedamas pro „AuraStraight“ paciento vamzdelį.

Išsamų simbolių paaiškinimų sąrašą galite rasti adresu <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© „Ambu A/S“, 2021, Danija. Visos teisės saugomos.

Jokios šio dokumento dalies negalima atkurti jokia forma, įskaitant fotokopijavimą, be išankstinio rašytinio autoriaus teisių turėtojo leidimo.

1.1. Paredzētais lietojums/ Lietošanas indikācija

Ambu AuraStraight lieto kā alternatīvu sejas masku elpošanas kontroles nodrošināšanai un uzturēšanai anestēzijas procedūru laikā parastās un ārkārtas situācijās, pacientam esot tukšā dūšā.

1.2. Paredzētais lietotājs un lietošanas vide

Elpceļu kontrolei apmācīti medicīnas speciālisti.
Maska AuraStraight ir paredzēta lietošanai slimnīcas apstākļos.

1.3. Paredzētā pacientu populācija

Pieaugušie un pediatrikie pacienti svarā no 2 kg un vairāk, kas atzīti kā piemēroti supraglotiskas elpceļu ierīces lietošanai.

1.4. Kontrindikācijas

Nav zināmas.

1.5. Klīniskie ieguvumi

Uztur atvērtus augšējos elpceļus, lai nodrošinātu gāzu izvadīšanu.

1.6. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Pirms ievietošanas medicīnas speciālistiem, kas izmanto Ambu AuraStraight, ir svarīgi iepazīties ar *lietošanas instrukcijā* iekļautajiem brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem, indikācijām un kontrindikācijām.

BRĪDINĀJUMI



1. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai apmācītiem medicīnas speciālistiem, kas apguvuši elpceļu kontroli.
2. Pēc izņemšanas no iepakojuma un pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet izstrādājumu un veiciet funkcionālo pārbaudi saskaņā ar 3.1. sadaļā "Sagatavošana pirms lietošanas" sniegtajiem norādījumiem, jo bojājumu un svešķermeņu ietekmē var tikt apturēta vai samazināta ventilēšana, rasties gļotādu bojājumi vai var tikt inficēts pacients. Nelietojiet izstrādājumu, ja neizdodas kāda no darbībām, sagatavojot masku pirms lietošanas.
3. Maska AuraStraight ir paredzēta vienreizējai lietošanai, tādēļ nelietojiet to atkārtoti citam pacientam. Inficēta izstrādājuma atkārtota lietošana var izraisīt infekciju.
4. AuraStraight neaizsargā traheju vai plaušas no aspirācijas riska.
5. Nelietojiet pārmērīgu spēku, ievietojot un izņemot masku AuraStraight, jo tas var izraisīt ausu traumu.
6. Slāpekļa oksīda, skābekļa vai citu medicīnisko gāzu klātbūtnē var mainīties manšetes tilpums vai spiediens, kas var izraisīt ausu traumu. Ķirurģiskās procedūras laikā nodrošiniet nepārtrauktu manšetes spiediena uzraudzību.
7. Nelietojiet masku AuraStraight lāzera un elektrokauterizācijas iekārtu klātbūtnē, jo tas var izraisīt elpceļu un ausu apdegumus.

8. Neveiciet tiešu intubāciju maskā AuraStraight, jo endotraheālā (ET) caurule var iestrēgt, izraisot nepietiekamu ventilēšanu.
9. Parasti masku AuraStraight drīkst lietot tikai pacientiem, kuri ir dziļā bezsamaņā un nepretojas ievadīšanai.
10. Vispārējais komplikāciju biežums laringeālās maskas gadījumā ir mazs, taču lietotājam ir jāizmanto profesionālas zināšanas, lemjot, vai laringeālās maskas lietošana ir piemērota. Palielināts nopietnu komplikāciju risks, tostarp aspirācijas un nepietiekamas ventilēšanas risks, pastāv šādiem pacientiem:
 - Pacienti ar augšējo elpceļu nosprostojumu.
 - Pacienti, kas nav tukšā dūšā (tostarp gadījumos, kad to nav iespējams pārbaudīt).
 - Pacienti, kuriem ir augšējā kuņģa un zarnu trakta problēmas (piemēram, ezofagektomija, barības vada trūce, gastroezofageālā refluksa slimība, morbīda aptaukošanās, grūtniecība, ilgāka par 10 nedēļām).
 - Pacienti, kuriem nepieciešama augstspiediena ventilēšana.
 - Pacienti, kuriem ir faringeālās un laringeālās patoloģijas, kas var apgrūtināt maskas anatomisko piemērotību (piemēram, audzēji, kakla staru terapija, kas skar balsenes daļu, smagas orofaringeālas traumas).
 - Pacienti ar nepietiekamu mutes atvērumu maskas ievietošanai.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Šo ierīci nedrīkst iegremdēt, skalot vai sterilizēt, jo šīs procedūras var atstāt kaitīgas atliekas vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ierīces konstrukcija un materiāls nav saderīgi ar standarta tīrīšanas un sterilizēšanas procedūrām.
2. Pirms lietošanas obligāti pārbaudiet AuraStraight un ārējās ierīces saderību, lai izvairītos no situācijas, kad ierīci nevar izvadīt caur AuraStraight lūmenu.
3. Manšetes spiedienam jābūt pēc iespējas zemākam, vienlaikus nodrošinot pietiekamu hermētiskumu, un tas nedrīkst pārsniegt 60 cm H₂O.
4. Regulāri jānovēro elpceļu problēmu vai nepietiekamas ventilēšanas pazīmes, un, ja nepieciešams, jāmaina AuraStraight pozīcija, jāizņem un atkārtoti jāievieto vai jānomaina maska AuraStraight, lai saglabātu gaisa caurlaidīgus elpceļus.
5. Ja pacienta galvas vai kakla pozīcija mainās, vienmēr vēlreiz pārliedzieties par elpceļu gaisa caurlaidību.

1.7. Iespējamie nevēlamie notikumi

Laringeālo masku lietošana ir saistīta ar nenozīmīgām blakusparādībām (piemēram, sāpes kaklā, asiņošana, disfonija, disfāģija) un nozīmīgām blakusparādībām (piemēram, regurgitācija/aspīrācija, laringospazmas, nervu bojājumi).

1.8. Vispārējās piezīmes

Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās dēļ rodas kāds nopietns incidents, lūdzam par to ziņot ražotājam un savas valsts kompetentajai iestādei.

2.0. Ierīces apraksts

AuraStraight ir sterila, vienreizlietojama laringeālā maska, kas sastāv no pacienta caurules ar piepūšamu manšeti distālajā galā. Manšeti var piepūst caur kontrolvārstu, kas ļauj pilotbalonam norādīt piepūšanas/gaisa izlaišanas stāvokli. Manšete pielāgojas rīkles balsenes daļas kontūrām, un tās lūmens ir vērsts pret pacienta laringeālo atveri. Manšetes gals piespiežas pie augšējā barības vada sfinktera, un manšetes proksimālais gals balstās uz mēles pamatnes.

Maskas AuraStraight ir pieejamas 8 dažādos izmēros. AuraStraight galvenās sastāvdaļas ir redzamas ① attēlā.

1. attēls (4. lpp.): AuraStraight daļu pārskats:

1. Savienotājs; 2. Pacienta caurule; 3. Manšete; 4. Pretvārsts; 5. Izmēģinājuma balons; 6. Izmēģinājuma caurule; 7. Iekšējā ventilācijas ceļa nominālais garums*.

* Nominālo garumu centimetros skatiet 1. tabulā.

2. attēls (4. lpp.): Maskas AuraStraight pareiza pozīcija attiecībā pret AuraStraight daļām un anatomiskajiem orientieriem

- AuraStraight daļas:** 1. Piepūšama manšete; 2. Izmēra marķējums; 3. Ventilēšanas atvere; 4. Ventilēšanas ceļš; 5. Normāla dziļuma ievietošanas atzīmes; 6. Aparāta daļa.

Anatomiskie orientieri: A. Barības vads. B. Traheja. C. Gredzenskrīmsļa plātnīte. D. Vairogskrimšļa plātnīte. E. Balssaites. F. Balss priekštelpa. G. Uzbalsenis. H. Mēles kauls. I. Mēle. J. Mutes dobums. K. Rīkles deguna daļa. L. Priekšzobi.

SADERĪBA AR CITĀM IERĪCĒM/APRĪKOJUMU

Masku AuraStraight var izmantot kopā ar tālāk norādītajām ierīcēm.

- Ventilēšanas iekārta; 15 mm koniskie savienotāji saskaņā ar standartu ISO 5356-1.
- Elpceļu kontroles ierīces; bronhoskopi un apmaiņas katetri*;
- Citi piederumi; standarta 6 % koniskā Luera šļirce, manometrs ar standarta 6 % konisko Luera savienotāju, ūdeni saturoša ziežviela, atsūkšanas katetrs.

Lietojot instrumentus caur masku, pirms ievietošanas pārlicinieties, vai instruments ir saderīgs un pietiekami lubricēts.

* Informāciju par maksimālo instrumentu izmēru sk. 1. tabulā.

3.0. Izstrādājuma lietošana

3.1. Sagatavošana pirms lietošanas

IZMĒRA IZVĒLE

Ambu AuraStraight maskas ir pieejamas dažādos izmēros, lai tās varētu lietot pacientiem ar dažādu svaru.

Pediatrisku pacientu gadījumā ieteicams, lai ārstam, kas lieto Ambu AuraStraight, būtu zināšanas bērnu anestēzijas jomā.

Norādījumus par izmēra izvēli un maksimālo manšetes iekšējo spiedienu sk. 1. tabulas 4.0. sadaļā (Specifikācijas).

AURASTRAIGHT PĀRBAUDE

Ambu AuraStraight sagatavošanas un ievietošanas laikā obligāti lietojiet cimdus, lai pēc iespējas samazinātu piesārņojuma risku.

Rīkojieties ar masku AuraStraight uzmanīgi, jo to var saplēst vai caurdurt. Izvairieties no saskares ar asiem vai spiciem priekšmetiem.

Pirms atvēršanas pārbaudiet, vai iepakojums ir hermētiski noslēgts, un, ja tas ir bojāts, izmetiet Ambu AuraStraight.

Rūpīgi pārbaudiet, vai maska AuraStraight nav bojāta, piemēram, caurdurta, saskrāpēta, sagriezta, saplēsta, tai nav vajīgu detaļu, asu malu un citu bojājumu.

Pārlicinieties, ka no manšetes ir noņemts manšetes aizsargs.

Pārbaudiet, vai pacienta caurules un manšetes iekšpusē nav aizsērējumu un vajīgu detaļu. Nelietojiet masku AuraStraight, ja tā ir aizsērējusi vai bojāta.

Pilnībā izlaidiet gaisu no AuraStraight manšetes. Pēc gaisa izlaišanas rūpīgi pārbaudiet, vai manšete ir bez krokām un

locījuma vietām. Piepūstiet manšeti līdz 1. tabulā norādītajam tilpumam. Pārbaudiet, vai manšete piepūstā stāvoklī ir simetriska un gluda. Manšetē, pilotcaurulē un pilotbalonā nedrīkst būt nekādu izliekumu vai noplūdes pazīmju. Pirms ievietošanas vēlreiz izlaidiet gaisu no manšetes.

3.2. Sagatavošana lietošanai

SAGATAVOŠANĀS PIRMS IEVADIŠANĀS

- Manšeti spiežot pret līdzenu, sterilu virsmu (piemēram, sterilas marles gabalu) un ierīci vienlaikus iztukšojot ar šļirci, izlaidiet no manšetes visu gaisu, lai manšete būtu plakana un bez krokām. ③
- Pirms ievietošanas lubricējiet manšetes aizmugurējo galu, uz manšetes distālās aizmugurējās virsmas uzklājot sterilu ūdens bāzes lubrikantu.
- Vienmēr nodrošiniet lietošanai sagatavotu rezerves masku Ambu AuraStraight.
- Bagātiniet masku ar skābekli un izmantojiet standarta uzraudzības procedūras.
- Pirms ievadišanas mēģinājuma pārbaudiet, vai anestēzijas (vai nesamaņas) līmenis ir pietiekams. Ievietošanai jābūt veiksmīgai tādā pašā anestēzijas līmenī, kāds būtu piemērots trahejas intubācijai.
- Pacienta galva jānovieto izstieptā pozīcijā, noliecot kaklu pozīcijā, kādā parasti tiek veikta trahejas intubācija (t. i., "šņaukšanas pozīcijā").

3.3. Ievietošana

- Nekādā gadījumā nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Satveriet masku Ambu AuraStraight kā zīmuli, novietojot rādītājpirkstu uz pārejas starp manšeti un pacienta cauruli. Otrā roka jānovieto zem pacienta galvas. ④
- Ievadiet manšetes galu, spiežot uz augšu pie cietajām ausklējām, un manšeti izlīdziniet pie tām. ⑤
- Pirms turpināt, pārliecinieties, vai manšetes gals ir plakaniski piespiests pie ausklējas^o- ar vidējo pirktu viegli paspiediet žokli uz leju, lai vēl vairāk atvērtu muti.
- Sekojiet, lai manšetes gals neiekļūtu rīkles bedrītē vai balss saišu spraugā un neaizķertos pret uzbalseni vai aritenoidiem. Manšete jāpiespiež pie pacienta rīkles mugurējās sienas.
- Kad maska ir vietā, ir jūtama pretestība.
- Pirms pavelkat atpakaļ roku, ar kuru turat masku, ar otru roku piespiediet elpceļu cauruli. Tādējādi pēc pirksta noņemšanas maska Ambu AuraStraight paliks vietā.
- Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka pacienta lūpas nav iespiestas starp pacienta cauruli un zobiem, lai izvairītos no lūpu traumēšanas.

IEVIETOŠANAS PROBLĒMAS

- Pediatriem pacientiem ievietošanas grūtību gadījumā ieteicams izmantot daļējas pagriešanas tehniku.

- Klepus un elpas aizturēšana Ambu AuraStraight ievietošanas laikā norāda uz nepietiekamu anestēzijas dziļumu - nekavējoties padziļiniet anestēziju, izmantojot inhalācijas vai intravenozos anestēzijas līdzekļus, un sāciet manuālu ventilāciju.
- Ja nevarat pietiekami atvērt pacienta muti, lai ievietotu masku, pārbaudiet, vai pacients ir pietiekami anestezēts. Palūdziet palīgam paviļkt pacienta žokli uz leju, tādējādi uzlabojot redzamību mutē, un pārbaudiet maskas stāvokli.
- Ja, ievietojot AuraStraight, ir grūtības ar manevrēšanu mēles aizmugurējās daļas leņķa dēļ, piespiediet manšetes galu pie ausklējas; pretējā gadījumā manšetes gals var salocīties vai saskarties ar nelidzenumiem rīkles aizmugurē, piemēram, hipertrofētām mandelēm. Ja, ievietojot masku, manšete neizlīdzinās vai sāk locīties, izņemiet masku un ievietojiet to no jauna. Mandeļu pietūkuma gadījumā ieteicams masku virzīt pa diagonāli.

3.4. Fiksācija

Ja nepieciešams, piestipriniet AuraStraight pie pacienta sejas ar limlenti vai šim nolūkam piemērotu mehānisku caurules turētāju. ⑦ Ieteicams izmantot marles sakodiena bloku.

3.5. Piepūšana

- Neturot cauruli, piepūtiet manšeti ar tik daudz gaisa, lai nodrošinātu hermētiskumu, kas atbilst maksimālajam

manšetes iekšējam spiedienam 60 cm H₂O. ⑥ Bieži vien hermētiskuma nodrošināšanai pietiek ar presi no maksimālā tilpuma - informāciju par maksimālo manšetes iekšējo tilpumu sk. 1. tabulā.

- Ķirurģiskās procedūras laikā nepārtraukti uzraugiet manšetes spiedienu, izmantojot manšetes spiediena mērierīci. Tas ir īpaši svarīgi ilgstošas lietošanas laikā vai ja tiek izmantota slāpekļa oksīda gāze.
- Pazīmes, kas ļauj noteikt, vai ievietošana ir veikta pareizi: Pēc manšetes piepūšanas iespējama neliela caurules kustība uz āru, gluds ovāls piebriedums kaklā vairogskrimšļa un gredzenskrimšļa plātnītes apvidū, vai manšete nav redzama mutes dobumā.
- Pirmajās trijās vai četrās ieelpās var būt novērojama neliela noplūde, pirms maska rīklē novietojas vietā. Ja noplūde turpinās, pirms lēmuma par atkārtotu AuraStraight ievietošanu pārbaudiet, vai anestēzijas dziļums ir pietiekams un plaušu inflācijas spiediens ir mazs.

3.6. Pareizas pozīcijas pārbaude

- Pareiza pozīcija veido hermētisku blīvējumu pret balss spraugu, izmantojot manšetes galu, kas novietota pie barības vada augšējā sfinktera.
- Vertikālajai līnijai uz pacienta caurules jābūt vērstai uz priekšu pret pacienta degunu.

- Maska AuraStraight ir pareizi ievietota, ja pacienta priekšzobi atrodas starp divām horizontālajām līnijām uz pacienta caurules. ②, 5. elements. Ja pacienta priekšzobi atrodas ārpus šī intervāla, mainiet maskas pozīciju.
- AuraStraight pozīciju var novērtēt ar kapnogrāfijas pali-dzību, novērojot elpošanas tilpuma izmaiņas (piemē-ram, izelpas tilpuma samazināšanos), auskultējot abpu-sējas elpošanas skaņas un skaņu trūkumu virs epigastri-ja un/vai novērojot krūškurvja pacelšanos ventilācijas brīdī. Ja rodas aizdomas, ka maska AuraStraight ir novie-tota nepareizi, izņemiet un ievietojiet to atkārtoti, kā arī pārlicinieties, vai anestēzijas dziļums ir pietiekams.
- Ieteicams vizuāli pārlicināties par anatomiski pareizu pozīciju, piemēram, izmantojot elastīgo laringoskopu.

NEPAREDZĒTA REGURGITĀCIJA

- Regurgitāciju var izraisīt nepietiekams anestēzijas līmenis. Pirmās regurgitācijas pazīmes var būt spontāna elpošana, klepus vai elpas aizturēšana.
- Ja rodas regurgitācija, bet skābekļa piesātinājums saglabājas pieņemamā līmenī, masku AuraStraight nevajag izņemt. Regurgitācija jānovērš, novietojot pacientu "ar galvu uz leju". Uz brīdi atvienojiet anestēzijas slēgumu, lai kuņģa saturs neiekļūtu plaušās. Pārbaudiet, vai anestēzijas dziļums ir pietiekams, un, ja nepieciešams, padziļiniet anestēziju intravenozi.

- Veiciet atsūkšanu caur maskas pacienta cauruli un caur muti. Atsūciet traheobronhiālo sekrētu un pārbaudiet bronhus, izmantojot elastīgo laringoskopu.

3.7. Lietošana kopā ar citām ierīcēm/

aprikojumu

ANESTĒZIJAS SISTĒMA UN VENTILĒŠANAS MAISS

Masku var izmantot gan spontānai, gan kontrolētai ventilēšanai.

Anestēzijas laikā slāpekļa oksīds var iesūkties manšetē un izraisīt manšetes tilpuma/spiediena palielināšanos. Spiedienu manšetē pielāgojiet tā, lai panāktu pietiekamu noslēgšanu (spiediens manšetē nedrīkst pārsniegt 60 cm H₂O).

Anestēzijas elpošanas sistēmai, kad tā ir savienota ar AuraStraight, jābūt novietotai pietiekami stabili, lai izvairītos no maskas grozīšanās.

LIETOŠANA AR SPONTĀNO VENTILĒŠANU

Maska AuraStraight ir piemērota spontānai pacientu elpi-nāšanai, lietojot kopā ar gaistošām vielām vai intravenozu anestēziju, ar nosacījumu, ka anestēzija atbilst ķirurģiskās stimulācijas līmenim un manšete nav pārlietu piepūsta.

LIETOŠANA AR POZITĪVĀ SPIEDIENA VENTILĒŠANU

Lietoja pozitīvā spiediena ventilēšanu, pārlicinieties, vai hermētiskums ir pietiekams. Lai uzlabotu hermētiskumu, ieteicams veikt šādas darbības:

- Optimizējiet AuraStraight novietojumu, pagriežot vai pavelkot pacienta galvu.
- Pielāgojiet manšetes spiedienu. Mēģiniet izmantot gan zemāku, gan augstāku spiedienu (nepietiekamu manšetes hermētiskumu var izraisīt gan pārāk zems, gan pārāk augsts manšetes spiediens).
- Ja ap manšeti rodas noplūde, noņemiet masku un ievietojiet to no jauna, pārlicinoties, ka anestēzijas dziļums ir pietiekams.

MAGNĒTISKĀ REZONANSE (MR)

Maska AuraStraight ir droša lietošanai MR vidē.

3.8. Izņemšanas procedūra

Izņemšana vienmēr jāveic vietā, kur ir pieejams sūkšanas aprikojums un pastāv iespēja veikt ātru trahejas intubāciju.

Lai izvairītos no audu traumēšanas un laringospazmām, neizņemiet AuraStraight ar pilnībā piepūstu manšeti.

3.9. Atbrīvošanās

Lietotu masku Ambu AuraStraight iznīciniet drošā veidā saskaņā ar vietējām procedūram.

4.0. Specifikācijas

Maska Ambu AuraStraight atbilst standarta ISO 11712 "Anestēzijas un elpināšanas iekārtas - virsbalsenes elpceļi un savienotāji" prasībām.

	Bērniem				Pieaugušajiem			
Maskas izmērs	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Pacienta svars	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Maksimālais manšetes iekšējais tilpums	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksimālais manšetes iekšējais spiediens	60 cm H ₂ O							
Savienotājs	ar izcilni, 15 mm (ISO 5356-1)							
Maksimālais instrumenta izmērs*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Piepūšanas vārsta šļirces korpusa saderība	Šļirces korpus, saderīgs ar iekārtām, kas atbilst standartam ISO 594-1 un ISO 80369-7							
Atbilstoši uzglabāšanas apstākļi	No 10 °C (50 °F) līdz 25 °C (77 °F)							
Aptuvenais maskas svars	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Ventilācijas ceļa iekšējais tilpums	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Spiediena kritums, kas noteikts saskaņā ar ISO 11712 C pielikumu	0,4 cm H ₂ O pie 15 l/min	0,3 cm H ₂ O pie 15 l/min	0,4 cm H ₂ O pie 30 l/min	0,3 cm H ₂ O pie 30 l/min	0,4 cm H ₂ O pie 60 l/min	0,4 cm H ₂ O pie 60 l/min	0,3 cm H ₂ O pie 60 l/min	0,3 cm H ₂ O pie 60 l/min
Minimālā starpzobu sprauga	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Iekšējā ventilācijas ceļa nominālais garums	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

1. Tabula. Ambu AuraStraight specifikācija.

* Maksimālais instrumenta izmērs ir paredzēts kā atsaucis lielums, lai izvēlētos piemērotu tādas ierīces diametru, ko paredzēts virzīt cauri AuraStraight pacienta caurulei.

Pilns simbolu skaidrojumu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Autortiesības 2021 Ambu A/S, Dānija. Visas tiesības aizsargātas.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot nekādā veidā, tostarp fotokopējot, bez iepriekšējas rakstiskas autortiesību īpašnieka atļaujas.

1.1. Bedoeld gebruik/ Indicatie

De Ambu AuraStraight is bedoeld voor gebruik als alternatief voor het gezichtsmasker voor het verwerven en behouden van de controle over de luchtweg tijdens routineuze en noodanesthesieprocedures bij nuchtere patiënten.

1.2. Beoogde gebruikers en gebruiksomgeving

Medisch personeel gespecialiseerd in luchtwegbehandeling. AuraStraight is bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving.

1.3. Beoogde patiëntenpopulatie

Volwassen en pediatrie patiënten vanaf 2 kg die in aanmerking komen voor een supraglottische luchtweg.

1.4. Contra-indicaties

Geen bekend.

1.5. Klinische voordelen

Houdt de bovenste luchtweg open om het passeren van gassen mogelijk te maken.

1.6. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Voorafgaand aan het inbrengen is het van essentieel belang dat alle medische professionals die Ambu AuraStraight gebruiken, bekend zijn met de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, indicaties en contra-indicaties in de *gebruiksaanwijzing*.

WAARSCHUWINGEN



1. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door medisch personeel gespecialiseerd in luchtwegbehandeling.
2. Inspecteer het product altijd visueel en voer na het uitpakken en vóór gebruik altijd een werkingstest uit volgens hoofdstuk 3.1 Voorbereiding vóór gebruik, aangezien defecten en vreemde voorwerpen kunnen leiden tot geen of verminderde beademing, schade aan het slijmvlies of infectie van de patiënt. Gebruik het product niet als een van de stappen in Voorbereiding vóór gebruik mislukt.
3. Gebruik de AuraStraight niet opnieuw bij een andere patiënt, aangezien het een hulpmiddel voor eenmalig gebruik is. Hergebruik van een verontreinigd product kan leiden tot infectie.
4. AuraStraight beschermt de luchtpijp of longen niet tegen het risico van aspiratie.
5. Gebruik geen overmatige kracht bij het inbrengen en verwijderen van de AuraStraight, aangezien dit kan leiden tot weefseltrauma.

6. Het cuffvolume of de cuffdruk kan veranderen in de aanwezigheid van stikstofoxide, zuurstof of andere medische gassen, wat kan leiden tot weefseltrauma. Zorg ervoor dat de cuffdruk tijdens de chirurgische ingreep continu wordt bewaakt.
7. Gebruik de AuraStraight niet in de aanwezigheid van lasers en elektrocauterisatieapparatuur, omdat dit kan leiden tot brand in de luchtwegen en brandwonden aan weefsel.
8. Voer geen directe intubatie met behulp van de AuraStraight uit, aangezien de endotracheale (ET) slang vast kan komen te zitten, wat leidt tot onvoldoende beademing.
9. Over het algemeen mag de AuraStraight alleen worden gebruikt bij patiënten die grondig bewusteloos zijn en geen weerstand bieden tegen het inbrengen.

10. Het totale complicatiepercentage voor larynxmaskers is laag, maar de gebruiker moet professioneel beoordelen of het gebruik van een larynxmasker geschikt is. De volgende patiënten lopen een hoger risico op ernstige complicaties, waaronder aspiratie en onvoldoende beademing:

- Patiënten met obstructie van de bovenste luchtwegen.
- Niet-nuchtere patiënten (inclusief in gevallen waarin nuchterheid niet kan worden bevestigd).
- Patiënten met bovenste gastro-intestinale problemen (bijv. oesofagectomie, hiatale hernia, refluxziekte van de maag-darm, morbide obesitas, zwangerschap > 10 weken).
- Patiënten die hogedrukbeademing nodig hebben.
- Patiënten met een faryngeale/laryngeale pathologie die de anatomische pasvorm van het masker mogelijk bemoeilijkt (bijv. tumoren, radiotherapie tot aan de nek met betrekking tot de hypofarynx, ernstig orofaryngeaal trauma).
- Patiënten met onvoldoende mondopening om het inbrengen mogelijk te maken.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. U mag dit hulpmiddel niet weken, spoelen of steriliseren; dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van het hulpmiddel veroorzaken. Het ontwerp en het gebruikte materiaal zijn niet compatibel met conventionele reinigings- en sterilisatieprocedures.
2. Controleer vóór gebruik altijd op compatibiliteit tussen de AuraStraight en het externe hulpmiddel om te voorkomen dat hulpmiddelen niet door het lumen van de AuraStraight kunnen worden doorgevoerd.
3. De cuffdruk moet zo laag mogelijk worden gehouden terwijl er toch voldoende afdichting is en mag niet hoger zijn dan 60 cm H₂O.
4. Alle tekenen van luchtwegproblemen of ontoereikende beademing moeten regelmatig worden gecontroleerd en de AuraStraight moet zo nodig worden verplaatst, opnieuw ingebracht of vervangen om een doorgankelijke luchtweg in stand te houden.
5. Controleer de doorgankelijkheid van de luchtweg altijd na elke verandering in de hoofd- of nekpositie van de patiënt.

1.7. Mogelijke bijwerkingen

Het gebruik van larynxmaskers gaat gepaard met geringe bijwerkingen (bijv. keelpijn, bloedingen, dysfonie, dysfagie) en belangrijke bijwerkingen (bijv. regurgitatie/aspiratie, laryngospasme, zenuwletsel).

1.8. Algemene opmerkingen

Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw nationale autoriteit.

2.0. Beschrijving van het apparaat

AuraStraight is een steriel larynxmasker voor eenmalig gebruik dat bestaat uit een patiëntslang met een opblaasbare cuff aan het distale uiteinde. De cuff kan worden opgeblazen via het terugslagventiel, zodat de geleidingsballon de opblaas-/leegloopstatus kan aangeven. De cuff vormt zich naar de contouren van de hypofarynx en het lumen ervan is naar de larynxopening van de patiënt gericht. Het uiteinde van de cuff drukt tegen de sfincter van de bovenste oesofagus en het proximale uiteinde van de cuff rust tegen de onderkant van de tong.

AuraStraight is verkrijgbaar in 8 verschillende maten. De hoofdcomponenten van AuraStraight zijn te zien in afbeelding ①.

Afbeelding 1 (pagina 4): Overzicht van AuraStraight-onderdelen:

1. Connector; 2. Patiëntslang; 3. Cuff; 4. Terugslagventiel; 5. Geleidingsballon; 6. Geleidings slang; 7. Nominale lengte van het interne beademingstraject*.

* Zie tabel 1 voor de nominale lengte in centimeters.

Afbeelding 2 (pagina 4): Juiste positie van AuraStraight ten opzichte van AuraStraight-onderdelen en anatomische oriëntatiepunten

- AuraStraight-onderdelen:** 1. Opblaasbare cuff; 2. Maataanduiding; 3. Ventilatieopening; 4. Beademingsweg; 5. Normale diepte van insteekmarkeringen; 6. Machine-uiteinde.

- Anatomische oriëntatiepunten:** A. Slokdarm; B. Trachea; C. Cricoïde ring; D. Schildklierkraakbeen; E. Stembanden; F. Larynxinlaat; G. Epiglottis; H. Hyoïde bot; I. Tong; J. Buccale holte; K. Nasofarynx; L. Snijtanden.

COMPATIBILITEIT MET ANDERE APPARATEN/ APPARATUUR

De AuraStraight kan worden gebruikt in combinatie met:

- Beademingsapparatuur; 15 mm conische aansluitingen conform ISO 5356-1.
- Apparaten voor het beheer van de luchtwegen; bronchoscopen en wisselkatheters*.
- Andere accessoires; standaard 6 % conische Luer-spuit, manometer met standaard 6 % conische Luer-connector, smeermiddel op waterbasis, zuigkatheter.

Zorg er bij gebruik van instrumenten door het masker voor dat het instrument compatibel en goed gesmeerd is voordat u het inbrengt.

* Zie tabel 1 voor informatie over de maximale instrumentmaat.

3.0. Productgebruik

3.1. Voorbereiding voor gebruik

SELECTIE VAN MATEN

Ambu AuraStraight is verkrijgbaar in verschillende maten voor gebruik bij patiënten met verschillende gewichten.

Voor pediatrische patiënten wordt het aanbevolen dat Ambu AuraStraight wordt gebruikt door een medische professional die vertrouwd is met pediatrische anesthesie.

Zie de selectierichtlijnen en max. intracuff-druk in tabel 1, hoofdstuk 4.0. (Specificaties).

INSPECTIE VAN AURASTRAIGHT

Drag altijd handschoenen tijdens de voorbereiding en het inbrengen van de Ambu AuraStraight om besmetting tot een minimum te beperken.

Ga voorzichtig met de AuraStraight om, omdat het product kan scheuren of er kan een gat in komen. Vermijd contact met scherpe of puntige voorwerpen.

Controleer vóór het openen of de verzegeling van de zak intact is en gooi de Ambu AuraStraight weg als de verzegeling van de zak is beschadigd.

Controleer de AuraStraight zorgvuldig op schade, zoals perforatie, krassen, sneden, scheuren, losse onderdelen, scherpe randen enz.

Zorg ervoor dat de cuffbeschermer van de cuff is verwijderd.

Controleer of de binnenkant van de patiëntslang en de cuff vrij zijn van verstoppingen en losse onderdelen. Gebruik de AuraStraight niet als deze geblokkeerd of beschadigd is.

Laat de cuff van de AuraStraight volledig leeglopen. Controleer de cuff na het leeglopen grondig op rimpels of vouwen. Blaas de cuff op tot het in tabel 1 aangegeven volume. Controleer of de opgeblazen cuff symmetrisch en glad is. Er mogen geen uitstulpingen of tekenen van lekkage in de cuff, de geleidingslang of -ballon voorkomen. Laat de cuff vóór het inbrengen weer leeglopen.

3.2. Voorbereidingen voor gebruik

VOORBEREIDING VOOR HET INBRENGEN

- Laat de cuff volledig leeglopen, zodat de cuff plat is en geen rimpels bevat, door de cuff op een plat steriel oppervlak (bijv. een stuk steriel gaas) te drukken terwijl u het hulpmiddel tegelijkertijd met een injectiespuit leeg laat lopen. ③
- Smeer de posterieure tip van de cuff vóór het inbrengen door een steriel smeermiddel op waterbasis op het distale posterieure oppervlak van de cuff aan te brengen.
- Zorg dat u altijd een reserve Ambu AuraStraight bij de hand hebt.
- Voorzie het hulpmiddel van tevoren van zuurstof en gebruik standaard bewakingsprocedures.
- Controleer of het anesthesieniveau (of het bewustzijnsverlies) toereikend is voordat u probeert het instrument in te brengen. De inbrenging moet

succesvol zijn op hetzelfde anesthesieniveau dat geschikt is voor tracheale intubatie.

- Het hoofd van de patiënt moet worden uitgestrekt met flexie van de nek in een positie die gewoonlijk wordt gebruikt voor tracheale intubatie (d.w.z. 'de snuffelpositie').

3.3. Inbrengen

- Gebruik geen overmatige kracht.
- Houd de Ambu AuraStraight vast als een potlood, met de wijsvinger bij de overgang tussen de cuff en de patiëntslang. Plaats uw andere hand onder het hoofd van de patiënt. ④
- Zorg dat het uiteinde van de cuff omhoog duwt, tegen het harde gehemelte aan, en druk de cuff er plat tegenaan. ⑤
- Controleer of de tip van de cuff plat tegen het gehemelte is gedrukt voordat u verdergaat – duw de kaak voorzichtig omlaag met uw middelvinger om de mond verder te openen.
- Zorg ervoor dat de tip van de cuff niet in de valleculae of de glottische opening komt en niet vast komt te zitten tegen de epiglottis of de arytenoïden. De cuff moet tegen de posterieure faryngeale wand van de patiënt worden gedrukt.

- Wanneer het masker op zijn plaats zit, wordt weerstand gevoeld.
- Voordat u de hand terugtrekt terwijl u het masker vasthoudt, wordt de andere hand gebruikt om de luchtwegslang omlaag te drukken. Dit zorgt ervoor dat de Ambu AuraStraight op zijn plaats blijft wanneer de vinger wordt verwijderd.
- Zorg er na het inbrengen voor dat de lippen niet vast komen te zitten tussen de patiëntslang en de tanden om trauma aan de lippen te voorkomen.

INBRENGPROBLEMEN

- Voor pediatrische patiënten wordt een gedeeltelijke draaitechniek aanbevolen in geval van problemen met de plaatsing.
- Hoesten en adem inhouden tijdens het inbrengen van de Ambu AuraStraight wijst op onvoldoende anesthesiediepte – Verdiep de anesthesie onmiddellijk met inhalatie- of intraveneuze middelen en start handmatige beademing.
- Als u de mond van de patiënt niet voldoende kunt openen om het masker in te brengen, controleer dan of de patiënt voldoende onder narcose is. Vraag een assistent om de kaak naar beneden te trekken, zodat u gemakkelijker in de mond kunt kijken en de positie van het masker kunt controleren.

- Als het tijdens het inbrengen van de AuraStraight lastig is om langs de hoek aan de achterkant van de tong te manoeuvreren, drukt u de tip stevig op het gehemelte, anders kan de tip dubbelvouwen of een onregelmatigheid in de posterieure farynx vertonen, bijv. hypertrofie van de keelamandelen. Als de cuff niet plat ligt of tijdens het inbrengen begint te krullen, trekt u het masker terug en brengt u het opnieuw in. In het geval van een tonsillaire obstructie wordt een diagonale beweging van het masker aanbevolen.

3.4. Bevestiging

Bevestig de AuraStraight zo nodig met plakband of een daarvoor geschikte mechanische slanghouder op het gezicht van de patiënt. ⑦ Het wordt aanbevolen om een gaasblijblok te gebruiken.

3.5. Opblazen

- Vul de cuff zonder de slang vast te houden met precies voldoende lucht voor een afsluiting die gelijk is aan een druk in de cuff van maximaal 60 cm H₂O. ⑥ Vaak is slechts de helft van het maximale volume voldoende om een afdichting te verkrijgen – raadpleeg tabel 1 voor maximale intracuffvolumes.
- Controleer de cuffdruk continu tijdens de chirurgische ingreep met een cuffdrukmeter. Dit is vooral belangrijk bij langdurig gebruik of bij gebruik van stikstofoxidegassen.

- Let op de volgende tekenen van correcte plaatsing: De mogelijke licht naar buiten gerichte beweging van de slang bij het vullen van de cuff, de aanwezigheid van een gladde ovale zwelling in de nek rond de schildklier en het cricoïde gebied, of geen cuff zichtbaar in de mondholte.
- Het masker kan de eerste drie of vier ademhalingen enigszins lekken voordat het in de farynx op zijn plaats tot rust komt. Als de lekkage aanhoudt, controleert u of er voldoende anesthesiediepte is en of de pulmonale opblaasdruk laag is voordat u ervan uitgaat dat het opnieuw inbrengen van de AuraStraight noodzakelijk is.

3.6. Verificatie van de juiste positie

- Een correcte plaatsing moet leiden tot een lekvrije afdichting tegen de glottis met de tip van de cuff bij de sfincter van de bovenste slokdarm.
- De verticale lijn op de patiëntslang moet anterieur gericht zijn op de neus van de patiënt.
- De AuraStraight is correct ingebracht wanneer de snijtanden van de patiënt zich tussen de twee horizontale lijnen op de patiëntslang bevinden. ②, item 5. Verplaats het masker als de snijtanden van de patiënt zich buiten dit bereik bevinden.
- De positie van de AuraStraight kan worden beoordeeld door capnografie, door observatie van veranderingen

- in het teugvolume (bijv. een vermindering van het uitgeademde teugvolume), door ausculteren van bilaterale ademgeluiden en het ontbreken van geluiden boven het epigastrium en/of het omhoog gaan van de borstkas door de beademing. Als u vermoedt dat de AuraStraight verkeerd is geplaatst, verwijdert u het en brengt u het opnieuw in - en zorg daarbij dat de anesthesiediepte voldoende is.
- Een visuele bevestiging van de anatomisch correcte positie wordt aanbevolen, bijv. door het gebruik van een flexibele endoscoop.

ONVERWACHTE REGURGITATIE:

- Regurgitatie kan worden veroorzaakt door onvoldoende anesthesie. De eerste tekenen van regurgitatie kunnen spontane ademhaling, hoesten of adem inhouden zijn.
- Als er regurgitatie optreedt en de zuurstofverzadiging op een aanvaardbaar niveau blijft, mag de AuraStraight niet worden verwijderd. Er moet iets aan gedaan worden door de patiënt in een 'hoofd-omlaag'-positie te plaatsen. Koppel het anesthesiecircuït even los, zodat de maaginhoud niet de longen in wordt geforceerd. Controleer of de anesthesiediepte voldoende is en verdiep de anesthesie zo nodig intraveneus.

- Breng afzuiging aan via de patiëntslang van het masker en via de mond. Zuig de tracheobronchiale boom op en inspecteer de bronchiën met behulp van een flexibele endoscoop.

3.7. Gebruik met andere apparaten/apparatuur ANESTHESIESYSTEEM EN BEADEMINGSBALLON

Het masker kan zowel voor spontane als voor gecontroleerde beademing worden gebruikt.

Tijdens de anesthesie kan zich stikstofoxide in de cuff verspreiden, waardoor het volume/de druk van de cuff toeneemt. Pas de cuffdruk net genoeg aan om een goede afdichting te verkrijgen (de cuffdruk mag niet hoger zijn dan 60 cm H₂O).

Het anesthesiebeademingssysteem moet voldoende worden ondersteund wanneer het op de AuraStraight is aangesloten om draaien van het masker te voorkomen.

GEBRUIK MET SPONTANE BEADEMING

AuraStraight is geschikt voor spontaan ademende patiënten wanneer het masker wordt gebruikt met vluchtige middelen of intraveneuze anesthesie op voorwaarde dat de anesthesie voldoende is om het niveau van chirurgische stimulus te evenaren en de cuff niet te hard wordt opgeblazen.

GEBRUIK MET POSITIEVE-DRUKBEADEMING

Zorg er bij positieve-drukbeademing voor dat de afdichting voldoende is. Om de afdichting te verbeteren, wordt het volgende aanbevolen:

- Optimaliseer de plaatsing van de AuraStraight door het hoofd te draaien of door tractie.
- Pas de cuffdruk aan. Probeer zowel een lagere als een hogere druk uit (een slechte afdichting van de cuff kan worden veroorzaakt door een te lage of te hoge druk op de cuff).
- Als er lekkage rond de cuff optreedt, verwijdert u het masker en plaatst u het opnieuw terwijl u ervoor zorgt dat de anesthesiediepte voldoende is.

MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

AuraStraight is MRI-veilig.

3.8. Procedure voor verwijderen

Verwijdering moet altijd worden uitgevoerd in een ruimte waar afzuigapparatuur en de faciliteit voor snelle tracheale intubatie beschikbaar zijn.

Verwijder de AuraStraight niet met de cuff volledig opgeblazen om weefseltrauma en laryngospasme te voorkomen.

3.9. Afvalverwerking

Voer de gebruikte Ambu AuraStraight op veilige wijze af volgens de lokale procedures.

4.0. Specificaties

De Ambu AuraStraight is in overeenstemming met ISO 11712 Anesthesie- en ademhalingsapparatuur – Supralaryngeale luchtwegen en connectors.

	Pediatriesch				Volwassene			
Maskermaat	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Gewicht van de patiënt	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maximaal intracuffvolume	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximale intracuffdruk	60 cm H ₂ O							
connector	15 mm mannelijk (ISO 5356-1)							
Maximale instrumentgrootte*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibiliteit van het opblaasventiel met de luer-kegel	Luer-kegel compatibel met apparatuur die voldoet aan ISO 594-1 en ISO 80369-7							
Geschikte opslagomstandigheden	10 °C (50 °F) tot 25 °C (77 °F)							
Geschatte gewicht van het masker	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Intern volume van beademingstraject	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Drukdaling zoals bepaald volgens ISO 11712 bijlage C	0,4 cm H ₂ O bij 15 l/min	0,3 cm H ₂ O bij 15 l/min	0,4 cm H ₂ O bij 30 l/min	0,3 cm H ₂ O bij 30 l/min	0,4 cm H ₂ O bij 60 l/min	0,4 cm H ₂ O bij 60 l/min	0,3 cm H ₂ O bij 60 l/min	0,3 cm H ₂ O bij 60 l/min
Min. opening tussen tanden	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominale lengte van het interne beademingstraject	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabel 1: Specificaties voor Ambu AuraStraight.

* De maximale instrumentgrootte is bedoeld als leidraad voor het selecteren van de juiste diameter van een hulpmiddel dat door de patiëntslang van de AuraStraight moet worden gevoerd.

Een volledige lijst met symboolverklaringen is te vinden op <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Denemarken. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel onderdeel van deze documentatie mag in enige vorm worden gereproduceerd, inclusief het maken van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

1.1. Bruksområde/ Indikasjoner

Ambu AuraStraight er ment å brukes som et alternativ til ansiktsmaske for å oppnå og opprettholde kontroll over luftveiene under rutinemessige og akutte anestesiprosedyrer hos fastende pasienter.

1.2. Tiltente brukere og bruksmiljø

Helsepersonell med opplæring i håndtering av luftveiene. AuraStraight er ment for bruk i sykehusmiljø.

1.3. Tiltent pasientgruppe

Voksne og pediatriske pasienter fra 2 kg og oppover, som er vurdert som egnet for supraglottisk luftvei.

1.4. Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

1.5. Kliniske fordeler

Holder de øvre luftveiene åpne slik at gasser kan passere.

1.6. Advarsler og forholdsregler

Før innføring er det viktig at alt medisinsk personell som bruker Ambu AuraStraight, er kjent med advarslene, forholdsreglene, indikasjonene og kontraindikasjonene som finnes i *bruksanvisningen*.

ADVARSLER



1. Produktet er kun ment for bruk av medisinsk personell som har opplæring i luftveishåndtering.
2. Undersøk alltid produktet visuelt og utfør en funksjonstest etter utpakking og før bruk, i henhold til avsnitt 3.1. Klargjøring før bruk, ettersom defekter og fremmedlegemer kan føre til ingen eller redusert ventilasjon av pasienten, skade på slimhinner eller infeksjon. Ikke bruk produktet hvis noen av trinnene i Klargjøring før bruk mislykkes.
3. AuraStraight skal ikke gjenbrukes på en annen pasient, da den er kun beregnet for engangsbruk. Gjenbruk av et kontaminert produkt kan føre til infeksjon.
4. AuraStraight beskytter ikke luftrøret eller lungene mot risikoen for aspirering.
5. Ikke bruk overdreven makt ved innføring og fjerning av AuraStraight, da dette kan føre til vevsskade.
6. Mansjettvolumet eller -trykket kan forandre seg når nitrogenoksid, oksygen eller andre medisinske gasser er til stede. Sørg for å overvåke mansjettrykket kontinuerlig under det kirurgiske inngrepet.
7. Ikke bruk AuraStraight i nærheten av lasere og elektroauterutstyr, da dette kan føre til luftveisbrann og vevsforbrenninger.

8. Ikke utfør direkte intubering gjennom AuraStraight, da endotrakealtuben (ET) kan sette seg fast og føre til utilstrekkelig ventilasjon.
9. Generelt bør AuraStraight bare brukes på pasienter som er dypt bevisstløse og ikke vil motsette seg innsetting.
10. Den totale komplikasjonsraten for larynksmaske er lav, men brukeren må utvise faglig dømmekraft når det avgjøres om bruken av larynksmaske vil være hensiktsmessig. Følgende pasienter har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner, inkludert aspirasjon og utilstrekkelig ventilasjon:
 - Pasienter med øvre luftveisobstruksjon.
 - Ikke-fastende pasienter (inkludert pasienter der fasting ikke kan bekreftes).
 - Pasienter som lider av øvre gastrointestinale problemer (f.eks. øsofagitt, hiatusbrokk, gastroøsofageal reflukssykdom, morbid fedme, graviditet >10 uker).
 - Pasienter som trenger ventilering med høyt trykk.
 - Pasienter som har faryngeal/laryngeal patologi som potensielt kompliserer maskens tilpasning til anatomien (f.eks. tumorer, strålebehandling av nakken som involverer hypofarynks, alvorlig orofaryngealt traume).
 - Pasienter med utilstrekkelig munnåpning for å tillate innsetting.

FORSIKTIGHETSREGLER

1. Enheten må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres, da slike prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake funksjonsfeil på enheten. Konstruksjonen og materialene som er brukt, er ikke forlidelige med konvensjonelle rengjørings- og steriliseringsprosedyrer.
2. Før bruk må du alltid kontrollere at AuraStraight og den eksterne enheten er kompatible, for å unngå bruk av enheter som ikke kan passere gjennom lumen i AuraStraight.
3. Mansjettrykket skal holdes så lavt som mulig, samtidig som det gir tilstrekkelig forsegling, og skal ikke overstige 60 cm H₂O.
4. Eventuelle tegn på luftveisproblemer eller utilstrekkelig ventilasjon må overvåkes regelmessig, og AuraStraight må reposisjoneres, settes inn på nytt eller skiftes ut etter behov for å opprettholde frie luftveier.
5. Kontroller alltid at luftveiene er åpne etter at pasientens hals- eller hodestilling er endret.

1.7. Potensielle bivirkninger

Bruk av larynksmasker er forbundet med lettere bivirkninger (f.eks. sår hals, blødning, dysfoni, dysfagi) og større bivirkninger (f.eks. oppstøt/aspirasjon, laryngospasme, nerveskade).

1.8. Generelle merknader

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av eller som følge av bruk av enheten, må det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

2.0. Beskrivelse av utstyret

AuraStraight er en steril larynksmaske til engangsbruk, som består av en pasientslange med en oppblåsbar mansjett i den distale enden. Mansjetten kan fylles gjennom tilbakeslagsventilen slik at pilotballongen viser fylle-/tømmestatus. Mansjetten føyer seg etter konturene til hypopharynx, med lumenet vendt mot pasientens larynksåpning. Tuppen av mansjetten trykker mot øvre øsofagussfinkter, og den proksimale enden av mansjetten hviler mot tungeroten.

AuraStraight finnes i 8 forskjellige størrelser. Hovedkomponentene i AuraStraight er vist i figur ①.

Figur 1 (side 4): Oversikt over AuraStraight-deler:

1. Kontakt; 2. Pasientslange; 3. Mansjett;
 4. Tilbakeslagsventil; 5. Pilotballong; 6. Pilotslange;
 7. Nominell lengde på intern ventilasjonsbane*.
- * Se tabell 1 for nominell lengde oppgitt i centimeter.

Figur 2 (side 4): Riktig plassering av AuraStraight i forhold til AuraStraight-deler og anatomiske landemerker

AuraStraight-deler: 1. Oppblåsbar mansjett; 2. Størrelsesmerking; 3. Ventilasjonsåpning; 4. Ventilasjonsbane; 5. Normal dybde på innsettingsmerker; 6. Maskinende.

Anatomiske landemerker: A. Spiserør; B. Luftrør; C. Ringbrusk; D. Skjoldbruskkjertel; E. Stemmebånd; F. Strupeport; G. Epiglottis; H. Hyoidbein; I. Tunge; J. Munnhulen; K. Nesesvelgrom; L. Fortenner.

KOMPATIBILITET MED ANDRE ENHETER/UTSTYR

AuraStraight kan brukes sammen med:

- ventilasjonsutstyr; 15 mm koniske koblinger i samsvar med ISO 5356-1.
- luftveisenheter; bronkoskop og utvekslingskatetre*.
- annet tilbehør: standard 6 % konisk luersprøyte, manometer med standard 6 % konisk luerkobling, vannbasert smøring, sugekateter.

Når instrumenter brukes gjennom masken, må det sikres at instrumentet er kompatibelt og godt smurt før innsetting.

* Se tabell 1 for informasjon om maksimal instrumentstørrelse.

3.0. Bruksområde

3.1. Klargjøring før bruk

VALG AV STØRRELSE

Ambu AuraStraight leveres i ulike størrelser for bruk på pasienter med ulik vekt.

For pediatriske pasienter anbefales det at Ambu AuraStraight brukes av helsepersonell som er kjent med pediatrisk anestesi.

Se retningslinjer for valg og maks. mansjettrykk i tabell 1, avsnitt 4.0. (Spesifikasjoner).

KONTROLL AV AURASTRAIGHT

Bruk alltid hansker under klargjøring og innføring av Ambu AuraStraight, for å minimere kontaminering.

Håndter AuraStraight forsiktig, da den kan revne eller punkteres. Unngå kontakt med skarpe eller spisse gjenstander.

Kontroller at posens forsegling er intakt før den åpnes, og kasser Ambu AuraStraight hvis posens forsegling er skadet.

Undersøk AuraStraight nøye for skade, som perforering, riper, kutt, rifter, løse deler, skarpe kanter osv.

Pass på at mansjettbeskyttelsen er fjernet fra mansjetten.

Kontroller at innsiden av pasientslangen og mansjetten er fri for blokkeringer og løse deler. Ikke bruk AuraStraight hvis den er blokkert eller skadet.

Tøm mansjetten på AuraStraight helt for luft. Når luften er sluppet ut, skal du kontrollere mansjetten grundig for rynker eller folder. Blås opp mansjetten til volumet som er spesifisert i tabell 1. Kontroller at den oppblåste mansjetten er symmetrisk og glatt. Det skal ikke være noen buler eller tegn til lekkasje i mansjetten, pilotslangen eller pilotballongen. Tøm mansjetten igjen før innsetting.

3.2. Klargjøring før bruk

KLARGJØRING FØR INNSETTING

- Tøm mansjetten helt slik at den er flat og uten rynker, ved å presse mansjetten ned på en flat, steril overflate (f.eks. et stykke sterilt gasbind) samtidig som enheten tømmes med en sprøyte. ③
- Smør den bakre mansjettuppen før innføring, ved å påføre et sterilt, vannbasert smøremiddel på mansjettens distale, bakre overflaten.
- Ha alltid en ekstra Ambu AuraStraight klar til bruk.
- Preoksygener og bruk standard overvåkningsprosedyrer.
- Kontroller at anestesisnivået (eller bevisstløsheten) er tilstrekkelig før innsetting. Innsettingen skal lykkes ved samme anestesisnivå som det som er egnet for trakeal intubering.
- Pasientens hode skal posisjoneres utstrakt med fleksjon av nakken i en stilling som vanligvis brukes til trakeal intubering (dvs. "sniffing-stillingen").

3.3. Innsetting

- Ikke bruk for stor kraft.
- Hold Ambu AuraStraight som en blyant, med pekefingeren plassert i overgangen mellom mansjetten og pasientslangen. Den andre hånden skal plasseres under pasientens hode. ④

- Sett inn tuppen av mansjetten ved å trykke oppover mot den harde ganen og flate ut mansjetten mot den. ⑤
- Kontroller at tuppen på mansjetten ligger flatt mot ganen før du fortsetter – skyv kjeven forsiktig nedover med langfingeren for å åpne munnen ytterligere.
- Pass på at tuppen av mansjetten ikke kommer inn i valleculae eller den glotiske åpningen, og ikke setter seg fast i epiglottis eller arytenoidene. Mansjetten skal trykke mot pasientens bakre faryngeale vegg.
- Når masken er på plass, merkes motstand.
- Før du fjerner hånden som holder masken, brukes den andre hånden til å trykke ned på luftveisslangen. Dette sikrer at Ambu AuraStraight holder seg på plass når fingeren fjernes.
- Etter innsetting må du passe på at leppene ikke kommer i klem mellom pasientslangen og tennene, for å unngå skade på leppene.

PROBLEMER MED INNSETTING

- For pediatrike pasienter anbefales en delvis rotasjonsteknikk ved plasseringsproblemer.
- Hvis pasienten hoster og holder pusten under innføring av Ambu AuraStraight, indikerer det utilstrekkelig anestesydybde – Gjør anestesen umiddelbart dypere med inhalerbare eller intravenøse midler, og start manuell ventilering.

- Hvis du ikke kan åpne pasientens munn tilstrekkelig til å sette inn masken, må du kontrollere at pasienten er tilstrekkelig bedøvet. Be en assistent om å trekke kjeven nedover, slik at det blir lettere å se inn i munnen og kontrollere maskens plassering.
- Dersom det er vanskelig å manøvrere vinkelen bak på tungen når AuraStraight settes inn, kan du trykke tuppen mot ganen hele veien. Hvis ikke kan tuppen brette seg dobbelt eller treffe en uregelmessighet i bakre farynx, f.eks. hypertrofiske mandler. Hvis mansjetten ikke flater seg ut eller begynner å krølle seg når den settes inn, trekker du masken ut og setter den inn igjen. Ved tonsillar obstruksjon anbefales en diagonal bevegelse av masken.

3.4. Feste

Fest om nødvendig AuraStraight til pasientens ansikt med tape eller med en mekanisk slangeholder som er egnet for dette formålet. ⑦ Det anbefales å bruke en gasbindbitekloss.

3.5. Oppblåsing

- Blås opp mansjetten med akkurat nok luft til at å oppnå forsegling, tilsvarende et mansjettrykk på maksimalt 60 cm H₂O. ⑥ Ofte er det nok med halvparten av det maksimale volumet for å oppnå forsegling – se tabell 1 for maksimale mansjettvolumer.

- Overvåk mansjettrykket kontinuerlig med en mansjettrykkmåler under det kirurgiske inngrepet. Dette er spesielt viktig ved langvarig bruk eller ved bruk av nitrogenoksidgasser.
- Se etter følgende tegn på riktig plassering: Slangen beveger seg litt utover når mansjetten blåses opp, det forekommer en jevn, oval hevelse i halsen rundt skjoldbruskkjertelen og ringbrusken, eller ingen mansjett er synlig i munnhulen.
- Masken kan lekke litt de første tre eller fire åndedragene før den faller på plass i svelget. Hvis lekkasjen vedvarer, må du kontrollere at det er anestesen er dyp nok, og at inflasjonstrykket i lungene er lavt før du antar at AuraStraight må settes inn på nytt.

3.6. Kontroll av riktig posisjon

- Riktig plassering skal gi lekkasjefri forsegling mot glottis, med tuppen av mansjetten ved øvre øsofagussfinkter.
- Den vertikale linjen på pasientslangen skal vende fremover mot pasientens nese.
- AuraStraight er satt inn riktig når pasientens fortenner er mellom de to horisontale linjene på pasientslangen. ②, punkt 5. Reposisjon masken hvis pasientens fortenner er utenfor dette området.

- Posisjonen til AuraStraight kan vurderes ved kapnografi, ved å observere endringer i tidevolum (f.eks. en reduksjon i ekspirert tidevolum), ved å auskultere bilaterale respirasjonslyder og et fravær av lyder over epigastriet og/eller ved å observere brysthevingen med ventilasjon. Hvis du mistenker at AuraStraight er plassert feil, må du fjerne og sette inn på nytt – og sikre at anestesen er tilstrekkelig dyp.
- Visuell bekreftelse av anatomisk riktig posisjon anbefales, f.eks. ved å bruke et fleksibelt skop.

UVENTEDE OPPSTØT:

- Oppstøt kan forårsakes av utilstrekkelig anestesinivå. De første tegnene på oppstøt kan være spontan pust, hoste eller pustestopp.
- Hvis det oppstår oppstøt og oksygenmetningen holder seg på akseptable nivåer, skal AuraStraight ikke fjernes. Dette bør håndteres ved å plassere pasienten med hodet ned. Koble fra anestesikretsen en kort stund, slik at mageinnholdet ikke tvinges inn i lungene. Kontroller at anestesen er tilstrekkelig dyp, og gjør om nødvendig anestesen dypere intravenøst.
- Bruk sug gjennom maskens pasientslange og gjennom munnen. Sug trakeobronkialtreet og inspiser bronkiene med et fleksibelt skop.

3.7. Bruk sammen med andre enheter/utstyr ANESTESISYSTEM OG VENTILASJONSAG

Masken kan brukes til enten spontan eller kontrollert ventilering.

Under anestesi kan lystgass diffundere inn i mansjetten og gi økt volum/trykk i mansjetten. Juster mansjettrykket akkurat nok til å oppnå tilstrekkelig forsegling (mansjettrykket skal ikke overstige 60 cm H₂O).

Anestesipustesystemet må ha tilstrekkelig støtte når det er koblet til AuraStraight, for å unngå at masken roterer.

BRUK VED SPONTAN VENTILERING

AuraStraight er egnet for pasienter som puster spontant når det brukes med flyktige midler eller intravenøs anestesi, under forutsetning av at anestesen er tilstrekkelig for nivået av kirurgisk stimulering, og at mansjetten ikke er overfylt.

BRUK MED OVERTRYKKSVENTILASJON

Ved ventilering med overtrykk må det påses at forseglingen er god nok. For å forbedre forseglingen foreslås følgende:

- Optimaliser plasseringen av AuraStraight ved å dreie eller dra i hodet.

- Juster mansjettrykket. Prøv både lavere og høyere trykk (en dårlig mansjettforsegling kan skyldes enten for lavt eller for høyt mansjettrykk).
- Hvis det oppstår lekkasje rundt mansjetten, skal du fjerne du masken og sette mansjetten inn igjen mens du passer på at anestesen er tilstrekkelig dyp.

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI (MR)

AuraStraight er MR-sikker.

3.8. Fremgangsmåte ved uttaking

Enheden skal alltid fjernes i et område der sugestyr og utstyr for rask trakeal intubering er tilgjengelig.

Ikke fjern AuraStraight med mansjetten helt oppblåst, for å hindre vevstraume og laryngospasme.

3.9. Avfallshåndtering

Kasser den brukte Ambu AuraStraight på en sikker måte i henhold til lokale prosedyrer.

4.0. Spesifikasjoner

Ambu AuraStraight samsvarer med ISO 11712 Anestesi- og respirasjonsutstyr – Supralaryngeale luftveier og kontakter.

	Barn				Voksen			
Maskestørrelse	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Pasientens vekt	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Maksimalt mansjettvolum	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksimalt mansjettrykk	60 cm H ₂ O							
Kontakt	15 mm hann (ISO 5356-1)							
Maksimal instrumentstørrelse*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilitet med oppblåsingsventilens Luer-konus	Luerkonus kompatibel med utstyr som samsvarer med ISO 594-1 og ISO 80369-7							
Egnede lagringsforhold	10 °C til 25 °C							
Omtrentlig maskevekt	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Innvendig volum i ventilasjonsban	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Trykkfall som fastslått i henhold til ISO 11712 tillegg C	0,4 cm H ₂ O at 15 l/min	0,3 cm H ₂ O ved 15 l/min	0,4 cm H ₂ O ved 30 l/min	0,3 cm H ₂ O ved 30 l/min	0,4 cm H ₂ O ved 60 l/min	0,4 cm H ₂ O ved 60 l/min	0,3 cm H ₂ O ved 60 l/min	0,3 cm H ₂ O ved 60 l/min
Min. Mellomrom mellom tenner	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominell lengde på den interne ventilasjonsbanen	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabell 1: Spesifikasjoner for Ambu AuraStraight.

* Maksimal instrumentstørrelse er ment som en veiledning for å velge riktig diameter på en enhet som skal føres gjennom pasientslangen i AuraStraight.

En fullstendig liste over symbolforklaringer er tilgjengelig på <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Danmark. Med enerett.

Ingen del av denne dokumentasjonen kan gjengis i noen form, inkludert fotokopiering, uten skriftlig forhåndstillatelse fra eieren av opphavsretten.

1.1. Przeznaczenie/ Wskazania do użytkowania

Produkt Ambu AuraStraight jest przeznaczony do użycia zamiast maski twarzowej w celu uzyskania i utrzymania kontroli nad drogami oddechowymi podczas rutynowych i ratunkowych procedur anestetycznych u pacjentów będących na czczo.

1.2. Docelowi użytkownicy i środowisko użytkowania

Personel medyczny przeszkolony w zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych.

Maska AuraStraight jest przeznaczona do użytku w warunkach szpitalnych.

1.3. Docelowa populacja pacjentów

Pacjenci dorośli i dzieci od masy ciała 2 kg kwalifikujący się do zastosowania nadgłośniowego urządzenia do udrażniania dróg oddechowych.

1.4. Przeciwwskazania

Brak poznanych.

1.5. Korzyści kliniczne

Utrzymuje drożność górnych dróg oddechowych i umożliwia przepływ gazów.

1.6. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed wprowadzeniem produktu do dróg oddechowych wszyscy używający go pracownicy ochrony zdrowia muszą zapoznać się z ostrzeżeniami, środkami ostrożności, wskazaniami i przeciwwskazaniami podanymi w *instrukcji obsługi* Ambu AuraStraight.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez personel medyczny przeszkolony w zakresie udrażniania dróg oddechowych.
2. Po rozpakowaniu i przed użyciem zawsze sprawdzić wzrokowo produkt i przeprowadzić test działania zgodnie z rozdziałem 3.1 Przygotowanie przed użyciem, ponieważ jego uszkodzenia i ciała obce mogą spowodować brak wentylacji lub ją ograniczyć, prowadzić do uszkodzenia śluzówki lub zakażenia pacjenta. Nie używać produktu, jeśli którykolwiek z etapów przygotowania przed użyciem nie powiedzie się.
3. Maski AuraStraight nie należy stosować powtórnie u innych pacjentów, ponieważ jest to urządzenie jednorazowego użytku. Ponowne użycie zanieczyszczonego urządzenia może prowadzić do zakażenia.

4. Maska AuraStraight nie chroni tchawicy ani płuc przed ryzykiem aspiracji.
5. Nie stosować nadmiernej siły podczas wprowadzania i usuwania maski AuraStraight, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia tkanek.
6. Objętość mankietu lub ciśnienie może ulec zmianie w obecności podtlenku azotu, tlenu lub innych gazów medycznych, co może prowadzić do uszkodzenia tkanek. Podczas zabiegu chirurgicznego stale monitorować ciśnienie w mankiecie.
7. Nie używać maski AuraStraight w obecności laserów i sprzętu do elektrokoagulacji, ponieważ może to doprowadzić do oparzeń dróg oddechowych i tkanek.
8. Nie wykonywać bezpośredniej intubacji przez maskę AuraStraight, ponieważ rurka dotchawicza może się zablokować i ograniczyć wentylację.
9. Ogólnie rzecz biorąc, maskę AuraStraight należy stosować tylko u pacjentów głęboko nieprzytomnych i nieoponujących przy jej wprowadzaniu.

10. Ogólna częstość powikłań przy stosowaniu maski krtaniowej jest niska, ale użytkownik musi dokonać profesjonalnej oceny, decydując, czy zastosowanie maski krtaniowej jest uzasadnione. Pacjenci narażeni na większe ryzyko poważnych powikłań, w tym aspiracji i niewystarczającej wentylacji:

- Pacjenci z niedrożnością górnych dróg oddechowych.
- Pacjenci niebędący na czczo (w tym sytuacje, w których nie można potwierdzić stanu na czczo).
- Pacjenci ze schorzeniami górnego odcinka układu pokarmowego (np. po resekcji przełyku, z przepukliną rozworu przełykowego, z refluksem żołądkowo-przełykowym, chorobliwie otyli, w ciąży powyżej 10 tygodnia).
- Pacjenci wymagający wentylacji wysokociśnieniowej.
- Pacjenci ze schorzeniami gardła/krtani potencjalnie utrudniającymi anatomiczne dopasowanie maski (np. guzy, radioterapia szyi obejmująca część krtaniową gardła, poważne urazy ustnej części gardła).
- Pacjenci, u których nie da się otworzyć jamy ustnej wystarczająco szeroko, aby wprowadzić urządzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować tego wyrobu, ponieważ może to spowodować pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe działanie wyrobu. Konstrukcja i użyte materiały nie są zgodne z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i sterylizacji.
2. Przed użyciem zawsze sprawdzić kompatybilność maski AuraStraight z urządzeniem zewnętrznym, tak aby nie stosować urządzeń nie mieszczących się w światło maski AuraStraight.
3. Ciśnienie w mankiecie powinno być jak najniższe przy jednoczesnym zapewnieniu wystarczającego uszczelnienia i nie powinno przekraczać 60 cm H₂O.
4. Regularnie monitorować wszelkie oznaki problemów z drogami oddechowymi lub niewystarczającą wentylację i w zależności od potrzeb dostosować położenie maski AuraStraight, wprowadzić ją ponownie lub wymienić na inną w celu utrzymania drożności dróg oddechowych.
5. Po każdej zmianie pozycji głowy lub szyi pacjenta zawsze ponownie sprawdzić drożność dróg oddechowych.

1.7. Potencjalne niepożądane zdarzenia

Stosowanie masek krtaniowych wiąże się z niewielkimi działaniami niepożądanymi (np. ból gardła, krwawienie, dysfonia, dysfagia) i poważnymi działaniami niepożądanymi (np. zwracanie/aspiracja, skurcz krtani, uszkodzenie nerwu).

1.8. Uwagi ogólne

Jeżeli podczas lub na skutek używania urządzenia dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, należy je zgłosić do producenta i odpowiedniej krajowej instytucji.

2.0. Opis urządzenia

AuraStraight to sterylna, jednorazowa maska krtaniowa składająca się z zakrzywionej rurki wprowadzanej do organizmu pacjenta i nadmuchiwanego mankietu na końcu dystalnym. Mankiet można nadmuchać przez zawór kontrolny, dzięki czemu balonik kontrolny wskazuje stan jego napełnienia. Mankiet dopasowuje się do kształtu części krtaniowej gardła, a jego światło jest skierowane w stronę otworu krtaniowego pacjenta. Końcówka mankietu naciska na górny zwieracz przełyku, a proksymalny koniec mankietu opiera się o podstawę języka.

Maska AuraStraight jest dostępna w 8 różnych rozmiarach. Główne elementy składowe AuraStraight przedstawiono na ilustracji ①.

Ilustracja 1 (strona 4): Elementy maski AuraStraight:

1. Złącze; **2.** Rurka pacjenta; **3.** Mankiet; **4.** Zawór kontrolny; **5.** Balonik kontrolny; **6.** Rurka kontrolna; **7.** Nominalna długość wewnętrznych dróg oddechowych*.

* W Tabeli 1 podano nominalną długość w centymetrach.

Ilustracja 2 (strona 4): Prawidłowe położenie maski AuraStraight obrazujące pozycję poszczególnych elementów i anatomicznych punktów orientacyjnych

Elementy maski AuraStraight: **1.** Nadmuchiwany mankiet; **2.** Oznaczenie rozmiaru; **3.** Otwór wentylacyjny; **4.** Droga wentylacji; **5.** Normalna głębokość znaków wprowadzania; **6.** Końcówka od strony urządzenia.

Anatomiczne punkty orientacyjne: **A.** Przełyk; **B.** Tchawica; **C.** Pierścień krtaniowy; **D.** Chrząstka tarczycy; **E.** Struny głosowe; **F.** Wejście do krtani; **G.** Nagłośnia; **H.** Kość gnykowa; **I.** Język; **J.** Jama policzkowa; **K.** Nosogardziel; **L.** Siekacze.

ZGODNOŚĆ Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Maska AuraStraight może być używana w połączeniu z:

- Urządzeniami do wentylacji; 15 mm złącza stożkowe zgodne z normą ISO 5356-1.
- Urządzeniami do kontroli dróg oddechowych; bronchoskopami oraz cewnikami do wymiany*.
- Innymi akcesoriami: standardową strzykawką stożkową 6 % typu Luer, manometrem ze standardowym stożkowym łącznikiem 6 % typu Luer, lubrykantami na bazie wody, cewnikiem do odsysania.

Podczas korzystania z instrumentów przez maskę należy upewnić się, że są one kompatybilne i dobrze nasmarowane przed wprowadzeniem.

* Informacje na temat maksymalnego rozmiaru narzędzia znajdują się w Tabeli 1.

3.0. Przeznaczenie produktu

3.1. Przygotowanie przed użyciem

WYBÓR ROZMIARU

Maska Ambu AuraStraight jest dostępna w różnych rozmiarach przeznaczonych dla pacjentów o różnej masie ciała.

W przypadku pacjentów pediatrycznych zaleca się, aby produkt Ambu AuraStraight był używany przez personel medyczny znający się na znieczuleniu pediatrycznym.

Patrz wytyczne dotyczące wyboru i maksymalnego ciśnienia wewnątrz mankieta w Tabeli 1, rozdział 4.0. (Specyfikacje).

KONTROLA MASKI AURASTRAIGHT

Podczas przygotowywania i zakładania maski Ambu AuraStraight należy zawsze zakładać rękawiczki, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia.

Z maską AuraStraight należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ łatwo o jej rozdarcie lub przebicie. Unikać kontaktu z ostrymi lub ostro zakończonymi przedmiotami.

Przed otwarciem opakowania należy sprawdzić, czy jego zamknięcie jest nienaruszone i wyrzucić maskę Ambu AuraStraight, jeśli uszczelnienie opakowania zostało uszkodzone.

Dokładnie obejrzeć maskę AuraStraight pod kątem uszkodzeń, takich jak przebicie, zadrapania, nacięcia, rozdarcia, luźne części, ostre krawędzie itp.

Upewnić się, że ochraniacz mankietu został zdjęty z mankietu.

Sprawdzić, czy wewnątrz rurki pacjenta i mankieta nie są zatkałe lub nie mają w środku luźnych części. Nie używać maski AuraStraight, jeśli jest zablokowana lub uszkodzona.

Całkowicie opróżnić mankieta urządzenia AuraStraight. Po opróżnieniu dokładnie sprawdzić mankieta pod kątem zagniecień i zagięć. Napompować mankieta do objętości określonej w Tabeli 1. Sprawdzić, czy napompowany mankieta jest symetryczny i gładki. Nie powinno być żadnych wybrzuszeń ani oznak wycieku w mankiecie, rurce kontrolnej czy baloniku kontrolnym. Opróżnić mankieta przed wprowadzeniem do organizmu pacjenta.

3.2. Przygotowanie do użycia PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZENIA

- Całkowicie opróżnić mankieta, tak aby był płaski i wolny od zagniecień, przyciskając go do płaskiej, sterylnej powierzchni (np. kawałka sterylnej gazy), jednocześnie usuwając powietrze za pomocą strzykawki. ③
- Przed wprowadzeniem zwilżyć dystalny koniec mankieta, nakładając na niego sterylny środek nawilżający na bazie wody.
- Należy zawsze mieć przygotowaną zapasową maskę Ambu AuraStraight.
- Wstępnie natlenić pacjenta i zastosować standardowe procedury monitorowania.
- Przed próbą wprowadzenia urządzenia sprawdzić, czy poziom znieczulenia (lub utraty przytomności) jest odpowiedni. Wprowadzać urządzenie przy tym samym poziomie znieczulenia, co przy intubacji dotchawiczej.
- Ułożyć głowę pacjenta w pozycji z odgiętym karkiem, tak jak do intubacji dotchawiczej (tzw. sniffing position).

3.3. Wprowadzanie

- Nigdy nie stosować nadmiernej siły.
- Przytrzymać maskę Ambu AuraStraight jak ołówek, umieszczając palec wskazujący na połączeniu mankieta i rurki pacjenta. Drugą rękę umieścić pod głową pacjenta. ④
- Wprowadzić końcówkę mankieta, dociskając ją do podniebienia twardego, a następnie spłaszczyć mankieta. ⑤
- Przed kontynuowaniem upewnić się, że czubek mankieta jest spłaszczony w stosunku do podniebienia – delikatnie przesunąć żuchwę w dół środkowym palcem, aby bardziej otworzyć usta.
- Uważać, aby końcówka mankieta nie dostała się do dołków nagłośni lub otworu głośni i nie została przyciśnięta do nagłośni lub chrząstek nalewkowatych. Docisnąć mankieta do tylnej ściany gardła pacjenta.

- Po założeniu maski powinien być wyczuwalny opór.
- Przed cofnięciem ręki przytrzymującej maskę, przycisnąć drugą ręką rurkę oddechową. Dzięki temu maska Ambu AuraStraight pozostaje na miejscu po cofnięciu palca.
- Po wprowadzeniu upewnić się, że wargi nie znalazły się między rurką pacjenta a zębami, aby uniknąć urazu warg.

PROBLEMY Z WPROWADZANIEM

- W przypadku trudności z wprowadzeniem urządzenia u pacjentów pediatrycznych zaleca się częściową technikę rotacyjną.
- Kaszel i wstrzymywanie oddechu podczas wprowadzania Ambu AuraStraight wskazują na niewystarczającą głębokość znieczulenia – natychmiast pogłębić znieczulenie środkami wziewnymi lub dożylnymi i rozpocząć wentylację ręczną.
- Jeśli nie można otworzyć jamy ustnej pacjenta w stopniu umożliwiającym wprowadzenie maski, należy sprawdzić, czy pacjent jest odpowiednio znieczulony. Poprosić asystenta o pociągnięcie szczęki w dół, co poszerzy pole widzenia wewnątrz jamy ustnej i ułatwi weryfikację położenia maski.
- W przypadku trudności z manewrowaniem pod kątem tyłu języka podczas wprowadzania AuraStraight,

docisnąć końcówkę do podniebienia. W przeciwnym razie końcówka może się zgąć lub zahaczyć o nieprawidłowe struktury w gardle tylnym, np. przerośnięte migdałki. Jeśli mankiet się nie spłaszczy lub zacznie się związać podczas zakładania, wyciągnąć maskę i założyć ją ponownie. W przypadku niedrożności spowodowanej przerośniętymi migdałkami zalecane jest diagonalne przesunięcie maski.

3.4. Mocowanie

W razie potrzeby przymocować AuraStraight do twarzy pacjenta za pomocą taśmy klejącej lub odpowiedniego mechanicznego uchwytu na rurkę. ⑦ Zaleca się użycie zagryzaka z gazy.

3.5. Napełnianie powietrzem

- Napompować mankiet, nie przytrzymując rurki, ilością powietrza wystarczającą do uzyskania szczelności i dającą ciśnienie wewnątrz mankieta równe ok. 60 cm H₂O. ⑥ Często tylko połowa objętości maksymalnej jest wystarczająca do uzyskania szczelności – maksymalne objętości mankieta podano w Tabeli 1.
- Podczas zabiegu chirurgicznego stale monitorować ciśnienie w mankiecie za pomocą ciśnieniomierza do mankietów. Jest to szczególnie ważne podczas długotrwałego używania lub gdy stosowane są gazy na bazie podtlenku azotu.

- Oznaki prawidłowego umiejscowienia: Możliwe lekkie przesunięcie rurki na zewnątrz po napełnieniu mankieta, obecność gładkiego, owalnego wybrzuszenia szyi wokół tarczycy i pierścienia krtoniowego lub brak widocznego mankieta w jamie ustnej.
- Maskę może być lekko nieszczelna przez pierwsze trzy lub cztery oddechy, zanim prawidłowo osadzi się w gardle. Jeśli nieszczelność się utrzymuje, przed stwierdzeniem, że konieczne jest ponowne wprowadzenie AuraStraight, sprawdzić głębokość znieczulenia i upewnić się, że ciśnienie napełniania płuc jest niskie.

3.6. Weryfikacja prawidłowej pozycji

- Prawidłowe umieszczenie maski oznacza, że mankiet szczelnie przylega do głośni, a jego końcówka dotyka górnego zwieracza przełyku.
- Pionowa linia na rurce pacjenta powinna być skierowana do przodu w kierunku nosa pacjenta.
- Maskę AuraStraight jest założona prawidłowo, gdy siekacze pacjenta znajdują się pomiędzy dwiema poziomymi liniami na rurce pacjenta. ②, pozycja 5. Jeśli siekacze pacjenta znajdują się poza tym zakresem, należy zmienić położenie maski.
- Pozycję AuraStraight można ocenić za pomocą kapnografii, poprzez obserwację zmian w objętości

oddechowej (np. zmniejszenie objętości wydechowej), osłuchiwanie obustronnych odgłosów oddechu oraz poprzez brak dźwięków nad nadbrzuszem i/lub obserwację uniesienia klatki piersiowej podczas wentylacji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego wprowadzenia maski AuraStraight należy ją usunąć i założyć ponownie, upewniając się, że głębokość znieczulenia jest odpowiednia.

- Zaleca się wzrokowe potwierdzenie prawidłowej pozycji anatomicznej, np. za pomocą elastycznego endoskopu.

NIEOCZEKIWANE ZWRACANIE:

- Zwracanie może być spowodowane niewystarczającym poziomem znieczulenia. Pierwsze oznaki zwracania obejmują spontaniczne oddychanie, kaszel lub wstrzymywanie oddechu.
- Jeśli wystąpi zwracanie, a nasycenie tlenem utrzymuje się na akceptowalnym poziomie, nie należy usuwać maski AuraStraight. Można temu zaradzić, układając pacjenta w pozycji „głową w dół”. Na krótko odłączyć aparat anestezjologiczny, aby zawartość żołądka nie została wtłoczona do płuc. Sprawdzić, czy głębokość znieczulenia jest odpowiednia i w razie potrzeby pogłębić znieczulenie dożylnie.

- Odessać przez rurkę pacjenta i przez usta. Odessać drzewo tchawiczo-oskrzelowe i sprawdzić oskrzela za pomocą elastycznego endoskopu.

3.7. Stosowanie z innymi urządzeniami

APARAT ANESTEZJOLOGICZNY I WOREK WENTYLACYJNY

Maski można używać do wentylacji spontanicznej lub kontrolowanej.

W trakcie znieczulenia do maskietu może przedostać się podtlenek azotu, co powoduje zwiększenie objętości/ciśnienia w maskiecie. Wyregulować ciśnienie w maskiecie na tyle, aby uzyskać odpowiednie uszczelnienie (ciśnienie w maskiecie nie powinno przekraczać 60 cm H₂O).

Anestezjologiczny aparat oddechowy musi być odpowiednio ustabilizowany po podłączeniu do maski AuraStraight, aby uniknąć jej rotacji.

STOSOWANIE Z WENTYLACJĄ SPONTANICZNĄ

Maska AuraStraight nadaje się dla pacjentów oddychających spontanicznie pod wpływem znieczulenia gazowego lub dożylnego pod warunkiem, że znieczulenie jest wystarczające do zabiegu chirurgicznego, a maskiet nie jest zbyt mocno napełniony.

STOSOWANIE Z WENTYLACJĄ Z DODATNIM CIŚNIENIEM

Podczas stosowania wentylacji z dodatnim ciśnieniem należy upewnić się, że maska jest szczelna. W celu poprawy szczelności zaleca się:

- Optymalizację umiejscowienia maski AuraStraight poprzez obrócenie lub przesunięcie głowy.
- Wyregulowanie ciśnienia w maskiecie. Wypróbować obniżenie i podwyższenie ciśnienia (niewłaściwe uszczelnienie maskietu może wynikać zarówno ze zbyt niskiego, jak i zbyt wysokiego ciśnienia w maskiecie).
- Jeśli nieszczelność występuje wokół maskietu, usunąć maskę i założyć ją ponownie, upewniając się, że głębokość znieczulenia jest odpowiednia.

OBRAZOWANIE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR)

Maska AuraStraight jest bezpieczna w środowisku MR.

3.8. Procedura wyjmowania

Wyjmowanie maski powinno zawsze odbywać się w miejscu, w którym dostępne są urządzenia do odsysania i szybkiej intubacji dotchawiczej.

Nie wyjmować maski AuraStraight z całkowicie napełnionym maskietem, aby uniknąć urazu tkanek i skurczu krtani.

3.9. Utylizacja

Zużytą maskę Ambu AuraStraight zutylizować w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi procedurami.

4.0. Specyfikacje

Urządzenie Ambu AuraStraight jest zgodne z normą ISO 11712 dla sprzętu anestezjologicznego i oddechowego – Rurki i łączniki masek krtaniowych.

	Wersja pediatryczna				Wersja dla dorosłych			
Rozmiar maski	Nr 1	Nr 1½	Nr 2	Nr 2½	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 6
Masa ciała pacjenta	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maksymalne napełnienie mankietu	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksymalne ciśnienie wewnątrz mankietu	60 cm H ₂ O							
Złącze	15 mm, męskie (ISO 5356-1)							
Maksymalny rozmiar instrumentu*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatybilność złącza stożkowego Luer zaworu napełniającego	Złącze stożkowe Luer zgodne z normami ISO 594-1 i ISO 80369-7							
Warunki przechowywania	Od 10°C do 25°C (od 50°F do 77°F)							
Szacunkowa masa maski	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Objętość wewnętrzna drogi wentylacyjnej	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Spadek ciśnienia określony zgodnie z normą ISO 11712, załącznik C	0,4 cm H ₂ O przy 15 l/min	0,3 cm H ₂ O przy 15 l/min	0,4 cm H ₂ O przy 30 l/min	0,3 cm H ₂ O przy 30 l/min	0,4 cm H ₂ O przy 60 l/min	0,4 cm H ₂ O przy 60 l/min	0,3 cm H ₂ O przy 60 l/min	0,3 cm H ₂ O przy 60 l/min
Min. szczelina międzyzębowa	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominalna długość wewnętrznych dróg wentylacji	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabela 1: Dane techniczne maski Ambu AuraStraight.

* Maksymalny rozmiar narzędzia stanowi wskazówkę przy wyborze odpowiedniej średnicy urządzenia, które ma przejść przez rurkę pacjenta maski AuraStraight.

Pełną listę objaśnień symboli można znaleźć na stronie <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana w żadnej formie, w tym kopiowana, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

1.1. Utilização pretendida/ Indicação de utilização

O Ambu AuraStraight deve ser utilizado como alternativa a uma máscara facial para obter e manter o controlo das vias aéreas durante os procedimentos anestésicos de rotina e de urgência em pacientes em jejum.

1.2. Utilizadores e ambiente de utilização pretendidos

Profissionais médicos que tenham recebido formação sobre o tratamento das vias aéreas.

O dispositivo AuraStraight destina-se a ser utilizado em ambiente hospitalar.

1.3. Pacientes a que se destina

Pacientes adultos e pediátricos de 2 kg ou mais avaliados como elegíveis para uma via aérea supraglótica.

1.4. Contraindicações

Não conhecidas.

1.5. Benefícios clínicos

Mantém as vias aéreas superiores abertas para permitir a passagem de gases.

1.6. Advertências e precauções

Antes de proceder à inserção, é essencial que todos os profissionais médicos que utilizam o dispositivo Ambu AuraStraight se encontrem familiarizados com as advertências, precauções, indicações e contraindicações descritas nas *Instruções de utilização*.

ADVERTÊNCIAS



1. O produto destina-se a ser utilizado apenas por profissionais médicos com formação no tratamento das vias aéreas.
2. Inspeccione sempre visualmente o produto e realize um teste de funcionalidade depois de desembalar e antes da utilização, de acordo com a secção 3.1 Preparação antes da utilização, pois os defeitos e as matérias estranhas podem resultar na ausência ou na redução da ventilação do paciente, em danos nas mucosas ou em infeção no paciente. Não utilize o produto se algum dos passos da secção Preparação antes da utilização falhar.
3. Não reutilize o AuraStraight num outro paciente, pois o dispositivo é de utilização única. A reutilização de um produto contaminado pode resultar em infeção.

4. O dispositivo AuraStraight não protege a traqueia ou os pulmões contra o risco de aspiração.
5. Não exerça força excessiva ao inserir e remover o dispositivo AuraStraight, pois pode provocar traumatismos nos tecidos.
6. O volume ou a pressão do cuff pode alterar-se na presença de óxido nitroso, oxigénio ou outros gases médicos, podendo resultar em traumatismos nos tecidos. Certifique-se de que monitoriza continuamente a pressão do cuff durante o procedimento cirúrgico.
7. Não utilize o dispositivo AuraStraight na presença de lasers e equipamento de eletrocauterização, pois poderá resultar em incêndio nas vias aéreas e queimaduras nos tecidos.
8. Não realize a intubação direta através do AuraStraight, uma vez que o tubo endotraqueal (ET) pode ficar preso, levando a uma ventilação insuficiente.
9. De um modo geral, o dispositivo AuraStraight só deve ser utilizado em pacientes que estejam em estado de inconsciência profunda e que não resistam à inserção.

10. A taxa global de complicações da máscara laringea é baixa, mas o utilizador deve recorrer a uma avaliação profissional ao decidir se a utilização de uma máscara laringea é apropriada. Os pacientes que se seguem apresentam um risco mais elevado de complicações graves, incluindo aspiração e ventilação inadequada:

- Pacientes com obstrução das vias aéreas superiores.
- Pacientes que não efetuaram jejum (incluindo aqueles casos em que não é possível confirmar o jejum).
- Pacientes que sofram de problemas gastrointestinais superiores (por ex., esofagectomia, hérnia do hiato, doença do refluxo gastroesofágica, obesidade mórbida, gravidez >10 semanas).
- Pacientes que necessitam de ventilação de alta pressão.
- Pacientes que apresentam patologia faríngea/laringea capaz de complicar o ajuste anatómico da máscara (por exemplo, tumores, radioterapia no pescoço envolvendo a hipofaringe, traumatismo orofaríngeo grave).
- Pacientes com abertura inadequada da boca para permitir a inserção.

PRECAUÇÕES

1. Não molhe, enxague, ou esterilize este dispositivo, uma vez que estes procedimentos poderão deixar resíduos perigosos ou avariar o dispositivo. O desenho do dispositivo e os materiais utilizados não são compatíveis com os procedimentos convencionais de limpeza e esterilização.
2. Antes da utilização, verifique sempre a compatibilidade entre o dispositivo AuraStraight e o dispositivo externo para evitar a utilização de dispositivos que não consigam passar pelo lúmen do dispositivo AuraStraight.
3. A pressão do cuff deve ser mantida o mais baixa possível sem deixar de fornecer uma selagem suficiente e não deve exceder os 60 cm H₂O.
4. Os sinais de problemas das vias aéreas ou de ventilação inadequada deverão ser regularmente monitorizados e o dispositivo AuraStraight deverá ser reposicionado, reinserido ou substituído, conforme necessário, de forma a manter uma via aérea do paciente.
5. Confirme sempre a desobstrução das vias respiratórias após qualquer alteração na posição da cabeça ou pescoço do paciente.

1.7. Eventos adversos possíveis

A utilização de máscaras laringeas está associada a efeitos adversos de pequena gravidade (p. ex., garganta inflamada, hemorragia, disфонia, disfagia) e a efeitos adversos de grande gravidade (p. ex., regurgitação/aspiração, laringospasmo, lesão nervosa).

1.8. Notas gerais

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país.

2.0. Descrição do dispositivo

O dispositivo AuraStraight é uma máscara laringea estéril e de uso único, constituída por um tubo do paciente com um cuff insuflável na extremidade distal. O cuff pode ser insuflado através da válvula de verificação, permitindo que o balão piloto indique o estado de insuflação/esvaziamento. O cuff adapta-se aos contornos da hipofaringe e o seu lúmen está virado para a abertura laringea do paciente. A ponta do cuff pressiona o esfíncter esofágico superior e a extremidade proximal do cuff fica encostada à base da língua.

O dispositivo AuraStraight está disponível em 8 tamanhos diferentes. Os componentes principais do dispositivo AuraStraight encontram-se na figura ①.

Figura 1 (página 4): Descrição geral das peças do AuraStraight:

1. Conector; 2. Tubo do paciente; 3. Cuff; 4. Válvula de retenção; 5. Balão piloto; 6. Tubo piloto; 7. Comprimento nominal da via de ventilação interna*.
*Consulte a Tabela 1 para conhecer o comprimento nominal fornecido em centímetros.

Figura 2 (página 4): Posição correta do dispositivo AuraStraight em relação a peças AuraStraight e pontos de referência anatómicos

Peças do AuraStraight: 1. Cuff insuflável; 2. Marca do tamanho; 3. Abertura de ventilação; 4. Via de ventilação; 5. Marcas de profundidade normal de inserção; 6. Extremidade da máquina.

Pontos de referência anatómicos A. Esófago; B. Traqueia; C. Anel cricoide; D. Cartilagem da tiroide; E. Cordas vocais; F. Entrada laríngea; G. Epiglote; H. Osso hióide; I. Língua; J. Cavidade oral; K. Nasofaringe; L. Incisivos.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS DISPOSITIVOS/ EQUIPAMENTOS

O AuraStraight pode ser utilizado em conjunto com:

- Equipamento de ventilação; conectores cónicos de 15 mm em conformidade com a norma ISO 5356-1.
- Dispositivos de tratamento das vias aéreas; broncoscópios e cateteres de troca*.
- Outros acessórios; seringa Luer cónica padrão de 6 %, manómetro com conector Luer cónico padrão de 6 %, lubrificação à base de água, cateter de aspiração.

Quando utilizar instrumentos através da máscara, certifique-se de que o instrumento é compatível e está bem lubrificado antes da inserção.

*Consulte a Tabela 1 para obter informações sobre o tamanho máximo do instrumento.

3.0. Utilização do produto

3.1. Preparação antes da utilização

SELEÇÃO DE TAMANHO

O dispositivo Ambu AuraStraight encontra-se disponível em oito tamanhos diferentes, para utilização em pacientes com pesos diferentes.

Para pacientes pediátricos, recomenda-se que o dispositivo Ambu AuraStraight seja utilizado por um profissional médico familiarizado com a anestesia pediátrica.

Consulte as orientações de seleção e pressão máx. intracuff na Tabela 1, secção 4.0. (Especificações).

INSPEÇÃO DO AURASTRAIGHT

Use sempre luvas durante a preparação e inserção do dispositivo Ambu AuraStraight, de forma a minimizar a contaminação.

Manuseie o dispositivo AuraStraight com cuidado, uma vez que pode ser rasgado ou perfurado. Evite o contacto com objectos aguçados ou pontiagudos.

Certifique-se de que o selo da bolsa está intacto antes de abrir e elimine o Ambu AuraStraight se o selo da bolsa estiver danificado.

Examine atentamente o AuraStraight quanto a danos, tais como perfurações, riscos, cortes, rasgões, peças soltas, extremidades afiadas, etc.

Assegure-se de que o protetor do cuff é removido antes da utilização.

Certifique-se de que o interior do tubo do paciente e o cuff estão desobstruídos e que não existem peças soltas. Não utilize o dispositivo AuraStraight se estiver bloqueado ou danificado.

Esvazie completamente o cuff do dispositivo AuraStraight. Após o esvaziamento, examine o punho cuidadosamente relativamente a quaisquer irregularidades ou pregas. Encha o cuff até ao volume especificado na Tabela 1. Certifique-se de que o cuff expandido se apresenta simétrico e sem irregularidades. Não deverão existir quaisquer áreas proeminentes ou sinais de fuga no punho, tubagem piloto ou balão piloto. Esvazie novamente o cuff antes da inserção.

3.2. Preparações para utilização PREPARAÇÃO ANTERIOR À INSERÇÃO

- Esvazie completamente o cuff até que este esteja liso e sem vincos, pressionando-o contra uma superfície lisa esterilizada (por ex., pedaço de gaze esterilizada) à medida que esvazia o dispositivo com uma seringa. ③
- Lubrifique a ponta posterior do cuff antes da inserção, aplicando um lubrificante estéril à base de água na superfície posterior distal do cuff.
- Tenha sempre um dispositivo Ambu AuraStraight adicional disponível e pronto a ser utilizado.

- Efectue a pré-oxigenação e siga os procedimentos usuais de monitorização.
- Certifique-se que o grau de anestesia (ou inconsciência) do paciente é adequado antes de tentar a inserção do dispositivo. Deverá ser possível efetuar a inserção com o mesmo grau de anestesia que seria adequado para um procedimento de intubação traqueal.
- A cabeça do paciente deverá encontrar-se na posição normalmente utilizada para a intubação traqueal, com o pescoço distendido e fletido para trás (ou seja, "posição de inalar").

3.3. Inserção

- Nunca utilize força excessiva.
- Segure o dispositivo Ambu AuraStraight como um lápis, com o dedo indicador colocado na transição entre o cuff e o tubo do paciente. A outra mão deverá ser colocada sob a cabeça do doente. ④
- Insira a extremidade do punho, pressionando-a contra o palato duro, e alise o punho contra o mesmo. ⑤
- Certifique-se que a extremidade do cuff se encontra espalmada contra o palato antes de prosseguir – empurre a mandíbula do paciente suavemente para baixo, com o dedo médio, de forma a abrir mais a boca do paciente.

- Certifique-se de que a ponta do cuff evita a entrada na valéculae ou na abertura glótica e de que não fica presa na epiglote ou nos aritenóides. O cuff deverá ser pressionado contra a parede faríngea posterior posterior do paciente.
- Irá encontrar resistência quando a máscara se encontrar correctamente posicionada.
- Antes de recuar a mão que segura na máscara, a outra mão é utilizada para pressionar o tubo da via aérea para baixo. Isto assegura que o dispositivo Ambu AuraStraight permanece no lugar quando o dedo é removido.
- Após a inserção, certifique-se de que os lábios não ficam presos entre o tubo do paciente e os dentes, para evitar traumatismos nos lábios.

PROBLEMAS NA INSERÇÃO

- Para pacientes pediátricos, recomenda-se uma técnica de rotação parcial em caso de dificuldades de colocação.
- Tossir e sustar a respiração durante a inserção do dispositivo Ambu AuraStraight constituem sinais indicativos de um grau de anestesia insuficiente – Aumente imediatamente o grau de anestesia através da inalação ou administração intravenosa de agentes e inicie a ventilação manual.

- Caso seja incapaz de abrir a boca do doente o suficiente para inserir a máscara, verifique se o doente se encontra suficientemente anestesiado. Peça a um assistente para empurrar a mandíbula do doente para baixo, de forma a facilitar o exame da boca do doente e verificar a posição da máscara.
- Para facilitar a manobra no ângulo na parte posterior da língua ao inserir o dispositivo AuraStraight, prima a ponta contra toda a extensão palato, caso contrário a ponta pode dobrar-se sobre si própria ou encontrar uma irregularidade na faringe posterior, por exemplo, amígdalas hipertróficas. Caso o punho não permaneça horizontal ou comece a dobrar à medida que é inserido, remova a máscara e volte a inseri-la. Em caso de obstrução pelas amígdalas, é recomendado o movimento diagonal da máscara.

3.4. Fixação

Se for considerado necessário, fixe o dispositivo AuraStraight à face do doente com fita adesiva ou com um suporte do tubo mecânico adequado a esta finalidade. ⑦ Recomenda-se a utilização de um bloco de mordida de gaze.

3.5. Expansão

- Sem segurar o tubo, encha o cuff apenas com a quantidade suficiente de ar para vedar, equivalente a pressões máximas no interior do cuff de 60 cm H₂O. ⑥

Frequentemente, apenas metade do volume máximo é suficiente para vedar – consulte a Tabela 1 para conhecer os volumes máximos no interior do cuff.

- Monitorize continuamente a pressão do cuff durante o procedimento cirúrgico com um manómetro de pressão do cuff. Isto é especialmente importante durante a utilização prolongada ou quando são utilizados gases nitrosos.
- Procure os seguintes sinais de colocação correta: Possível movimento ligeiro do tubo para fora durante a expansão do cuff, presença de uma distensão de forma oval no pescoço do doente, na área em torno da tiróide e da cricóide, e impossibilidade de visualizar o cuff na cavidade oral.
- Poderão ocorrer fugas ligeiras na máscara durante as primeiras três ou quatro inspirações, antes da estabilização da respectiva posição na faringe. Se a fuga persistir, verifique se o grau de anestesia é adequado e se as pressões de expansão dos pulmões são baixas antes de concluir que é necessário voltar a inserir o dispositivo Ambu AuraStraight.

3.6. Verificação da posição correta

- A colocação correta deve produzir um vedante sem fugas contra a glote com a ponta do cuff no esfíncter esofágico superior.
- A linha vertical no tubo do paciente deverá ficar alinhada com o nariz do doente.

- O dispositivo AuraStraight está inserido corretamente quando os incisivos do paciente se encontram entre as duas linhas horizontais no tubo do paciente. ②, item 5. Ajuste a posição da máscara se os dentes incisivos do doente não se encontrarem dentro deste intervalo.
- A posição do AuraStraight pode ser avaliada por capnografia, através da observação de alterações no volume corrente (por ex., uma redução no volume corrente expirado), através da auscultação de sons respiratórios bilaterais e da ausência de sons sobre o epigástrico e/ou através da observação do aumento do peito com ventilação. Caso suspeite de um posicionamento incorreto do dispositivo Ambu AuraStraight, remova o mesmo e volte a inseri-lo – garantindo que o grau de anestesia é suficiente.
- Recomenda-se a confirmação visual da posição anatomicamente correta, por exemplo, utilizando uma sonda flexível.

REGURGITAÇÃO INESPERADA:

- A regurgitação poderá resultar de um grau de anestesia insuficiente. Os primeiros sinais de regurgitação poderão ser respiração espontânea, tosse ou respiração sustida.
- Em caso de regurgitação, o dispositivo AuraStraight não deverá ser removido, desde que o nível de saturação de oxigénio seja mantido dentro de valores aceitáveis.

Nesta situação, o doente deverá ser colocado numa posição de "cabeça baixa". Desligue o circuito de anestesia por um breve instante, para que o conteúdo do estômago não seja forçado para o interior dos pulmões. Verifique se o grau de anestesia é suficiente e aumente o mesmo por via intravenosa, se necessário.

- Aplique aspiração através do tubo do paciente da máscara e através da boca. Aplique aspiração à árvore traqueobrônquica e examine os brônquios através de uma sonda flexível.

3.7. Utilização com outros dispositivos/ equipamentos

SISTEMA ANESTÉSICO E SACO DE VENTILAÇÃO

A máscara poderá ser utilizada para ventilação espontânea ou controlada.

Durante a anestesia, poderá ocorrer difusão de óxido nítrico para o cuff, provocando um aumento do volume/ pressão do mesmo. Ajuste a pressão do cuff o suficiente para obter um vedante adequado (a pressão do cuff não deve exceder os 60 cm H₂O).

O sistema de respiração utilizado durante a anestesia deverá encontrar-se adequadamente suportado durante a ligação ao dispositivo AuraStraight, de forma a evitar a rotação da máscara.

UTILIZAÇÃO COM VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA

O dispositivo AuraStraight é adequado para pacientes capazes de respiração espontânea quando utilizado com agentes anestésicos voláteis ou intravenosos, desde que a anestesia seja adequada para corresponder ao nível de estímulo cirúrgico e o cuff não expanda em excesso.

UTILIZAÇÃO COM VENTILAÇÃO DE PRESSÃO POSITIVA

Ao aplicar uma ventilação de pressão positiva, certifique-se de que o vedante é adequado. Para melhorar o vedante, sugere-se o seguinte:

- Otimize a colocação do dispositivo AuraStraight por meio de rotação da cabeça ou tração.
- Ajuste a pressão do cuff. Tente pressões mais baixas e mais elevadas (uma selagem insuficiente do cuff pode ser resultado de uma pressão demasiado baixa ou demasiado alta do cuff).
- Caso ocorra uma fuga à volta do cuff, retire a máscara e volte a inseri-la ao mesmo tempo que se assegura que o grau de anestesia é adequado.

IMAGIOLOGIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

O dispositivo AuraStraight é seguro para RM.

3.8. Procedimento de remoção

A remoção deverá ser sempre efectuada numa área onde se encontre disponível equipamento de sucção e onde seja possível efectuar rapidamente um procedimento de intubação traqueal.

Não remova o AuraStraight com o cuff completamente insuflado, para evitar traumatismos nos tecidos e laringoespasmos.

3.9. Eliminação

Elimine o dispositivo Ambu AuraStraight utilizado de forma segura, de acordo com os procedimentos locais.

4.0. Especificações

O dispositivo Ambu AuraStraight está em conformidade com a norma ISO 11712 Equipamento anestésico e respiratório - Vias aéreas e conectores supralaríngeos.

Tamanho da máscara	Crianças				Adulto			
	N.º 1	N.º 1½	N.º 2	N.º 2½	N.º 3	N.º 4	N.º 5	N.º 6
Peso do doente	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Volume máximo do interior do cuff	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
Pressão máxima no interior do cuff	60 cm H ₂ O							
Conector	15 mm, macho (ISO 5356-1)							
Tamanho máximo do instrumento*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibilidade do cone Luer da válvula de enchimento	Cone Luer compatível com as normas ISO 594-1 e ISO 80369-7							
Condições de armazenamento adequadas	10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)							
Peso aproximado da máscara	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Volume interno da via de ventilação	4,3 ± 0,5 mL	5,7 ± 0,5 mL	7,1 ± 0,5 mL	10,2 ± 0,6 mL	13,4 ± 0,4 mL	15,3 ± 0,4 mL	20,6 ± 0,4 mL	22,2 ± 0,5 mL
Queda de pressão conforme determinado de acordo com a norma ISO 11712 anexo C	0,4 cm H ₂ O a 15 L/min	0,3 cm H ₂ O a 15 L/min	0,4 cm H ₂ O a 30 L/min	0,3 cm H ₂ O a 30 L/min	0,4 cm H ₂ O a 60 L/min	0,4 cm H ₂ O a 60 L/min	0,3 cm H ₂ O a 60 L/min	0,3 cm H ₂ O a 60 L/min
D.I. Intervalo interdental	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Comprimento nominal da via de ventilação interna	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabela 1: Especificações do dispositivo Ambu AuraStraight.

* O tamanho máximo do instrumento destina-se a ser utilizado como guia para selecionar o diâmetro adequado de um dispositivo a passar através do tubo do paciente do dispositivo AuraStraight.

Pode encontrar uma lista completa das explicações dos símbolos em <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dinamarca. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta documentação pode ser reproduzida de forma alguma, incluindo fotocópia, sem a autorização prévia por escrito do titular dos direitos de autor.

1.1. Utilizarea prevăzută/ Indicații de utilizare

Ambu AuraStraight este destinat utilizării ca alternativă la masca facială pentru obținerea și menținerea controlului căilor respiratorii pe durata procedurilor de administrare a anestezicelor la pacienții în repaus alimentar, în regim de rutină și de urgență.

1.2. Utilizator/mediu de utilizare vizat

Cadre medicale instruite în managementul căilor respiratorii. AuraStraight este destinat utilizării în mediul spitalicesc.

1.3. Pacienții vizați

Pacienții adulți și pediatrici începând de la greutatea de 2 kg, care au fost evaluați ca eligibili pentru o cale respiratorie supraglotică.

1.4. Contraindicații

Nu se cunosc.

1.5. Beneficii clinice

Menține deschisă calea respiratorie superioară pentru a permite trecerea gazelor.

1.6. Avertismente și măsuri de precauție

Înainte de introducerea, este esențial ca toate cadrele medicale care utilizează Ambu AuraStraight să fie

familiarizate cu avertismentele, măsurile de precauție, indicațiile și contraindicațiile din *Instrucțiunile de utilizare*.

AVERTISMENTE



1. Produsul este destinat utilizării doar de către cadrele medicale instruite în managementul căilor respiratorii.
2. Inspectați vizual produsul și efectuați un test de funcționare după despachetare și înainte de utilizare, conform prevederilor de la secțiunea 3.1 Pregătirea înainte de utilizare, deoarece defectele și materiile străine pot duce la lipsa ventilației sau la ventilația redusă, la leziuni ale mucoasei sau la infecții ale pacientului. Nu utilizați produsul în cazul în care nu s-a parcurs oricare dintre etapele din cadrul Pregătirii înainte de utilizare.
3. Nu reutilizați AuraStraight pentru un alt pacient, deoarece acesta este un dispozitiv de unică folosință. Reutilizarea unui produs contaminat poate cauza infecții.

4. AuraStraight nu protejează traheea sau plămânii față de pericolul de aspirare.
5. Nu utilizați forță excesivă la introducerea și la extragerea dispozitivului AuraStraight, deoarece acest lucru poate cauza traumatisme tisulare.
6. Volumul sau presiunea manșonului se pot modifica în prezența protoxidului de azot, a oxigenului sau a altor gaze medicale, cauzând traumatisme tisulare. Monitorizați presiunea din manșon în mod continuu în timpul procedurii chirurgicale.
7. Nu utilizați AuraStraight în prezența echipamentelor cu laser și a echipamentelor de electrocauterizare, deoarece acestea pot provoca flăcări la nivelul căilor respiratorii și arsuri la nivelul țesuturilor.
8. Nu efectuați intubarea directă prin AuraStraight, deoarece tubul endotraheal (ET) se poate bloca, cauzând ventilația insuficientă.
9. În general, AuraStraight trebuie utilizat doar la pacienții care sunt profund adormiți și care nu se vor opune la introducerea dispozitivului.

10. Rata de complicație generală pentru masca laringiană este scăzută, dar utilizatorul trebuie să exercite discernământ profesional atunci când decide dacă utilizarea măștii laringiene este adecvată. Pacienții din categoriile următoare prezintă risc mai mare de complicații grave, inclusiv aspirație și ventilație inadecvată:

- Pacienții cu obstrucție a căilor respiratorii superioare;
- Pacienții fără repaus alimentar (inclusiv cazurile în care repausul alimentar nu poate fi confirmat);
- Pacienții care suferă de afecțiuni gastrointestinale superioare (de exemplu, esofagectomie, hernie hiatală, boală de reflux gastroesofagian, obezitate morbidă, sarcină > 10 săptămâni),
- Pacienții care necesită ventilație la presiune ridicată;
- Pacienții care prezintă patologie faringiană/laringiană ce poate complica potrivirea anatomică a măștii (de exemplu, tumori, radioterapie la nivelul gâtului incluzând hipofaringele, traume orofaringiene severe);
- Pacienții cu orificiu bucal neadecvat pentru introducerea dispozitivului.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Nu introduceți în apă, nu clătiți și nu sterilizați acest instrument, deoarece în urma acestor proceduri pot rămâne reziduuri periculoase sau dispozitivul se poate defecta. Modelul și materialul utilizat nu sunt compatibile cu procedurile convenționale de curățare și sterilizare.
2. Înainte de utilizare, verificați compatibilitatea dintre AuraStraight și dispozitivul extern pentru a evita utilizarea dispozitivelor ce nu pot trece prin lumenul AuraStraight.
3. Presiunea din manșon trebuie menținută la un nivel cât mai scăzut, asigurându-se totodată o etanșare suficientă, fără a depăși 60 cm H₂O.
4. Toate semnele care indică probleme la căile respiratorii sau ventilarea necorespunzătoare trebuie monitorizate în mod regulat, iar dispozitivul AuraStraight trebuie re poziționat, reintrodus sau înlocuit, după cum este necesar, pentru a se menține o cale respiratorie deschisă.
5. Verificați deschiderea căii respiratorii după fiecare modificare a poziției capului sau gâtului pacientului.

1.7. Reacții adverse posibile

Utilizarea măștilor laringiene este asociată cu efecte adverse minore (de exemplu, dureri în gât, hemoragie, disfonie, disfagie) și reacții adverse majore (de exemplu, regurgitare/aspirație, laringospasm, leziuni nervoase).

1.8. Observații generale

Dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale, se produce un incident grav, raportați acest lucru producătorului și autorității naționale din țara dvs.

2.0. Descrierea dispozitivului

AuraStraight este o mască laringiană sterilă, de unică folosință, alcătuită dintr-un tub curbat pentru pacient, cu un manșon gonflabil la capătul distal. Manșonul poate fi umflat prin supapa de control, permițând balonului pilot să indice starea de umflare/dezumflare. Manșonul se mulează pe conturul hipofaringelui, lumenul fiind orientat spre orificiul laringian al pacientului. Vârful manșonului apasă pe sfincterul esofagian superior, iar capătul proximal al manșonului se sprijină pe baza limbii.

AuraStraight este disponibil în 8 dimensiuni diferite. Componentele principale ale AuraStraight sunt prezentate în figura ①.

Figura 1 (pagina 4): Prezentarea generală a pieselor AuraStraight:

1. Conector; **2.** Tub pentru pacient; **3.** Manșon; **4.** Supapă de reținere; **5.** Balon pilot; **6.** Tub pilot; **7.** Lungimea nominală a căii de ventilație interne*.

* Consultați Tabelul 1 pentru lungimea nominală furnizată în centimetri.

Figura 2 (pagina 4): Poziția corectă a AuraStraight în raport cu piesele AuraStraight și reperele anatomice

Piese AuraStraight: **1.** Manșon gonflabil; **2.** Marcaj dimensiune; **3.** Orificiu de ventilație; **4.** Cale de ventilație; **5.** Adâncimea normală a marcajelor de inserție; **6.** Capătul dispozitivului.

Repere anatomice: **A.** Esofag; **B.** Trahee; **C.** Inel cricoid; **D.** Cartilaj tiroidian; **E.** Corzi vocale; **F.** Orificiu laringian; **G.** Epiglotă; **H.** Os hioid; **I.** Limbă; **J.** Cavitate bucală; **K.** Nazofaringe; **L.** Incisivi.

**COMPATIBILITATEA CU ALTE DISPOZITIVE/
ECHIPAMENTE**

AuraStraight poate fi utilizat împreună cu:

- echipamente de ventilație; conectori conici de 15 mm în conformitate cu ISO 5356-1;
- dispozitive pentru managementul căilor respiratorii; bronhoscoape și catetere de schimb*;
- alte accesorii; seringă Luer conică standard 6 %, manometru cu conector Luer conic standard 6 %, lubrifiere pe bază de apă, cateter de aspirație.

Când utilizați instrumente prin mască, asigurați-vă că instrumentul este compatibil și bine lubrifiat înainte de introducere.

* Consultați Tabelul 1 pentru informații privind dimensiunea maximă a instrumentului.

3.0. Utilizarea produsului

3.1. Pregătirea înainte de utilizare

SELECTAREA DIMENSIUNII

Ambu AuraStraight este disponibil în diferite dimensiuni pentru a fi utilizat la pacienți cu greutateți diferite.

Pentru pacienții pediatrici, se recomandă ca Ambu AuraStraight să fie utilizat de un cadru medical familiarizat cu anestezia pediatrică.

Consultați instrucțiunile privind selectarea dispozitivului și presiunea maximă intramanșon în Tabelul 1, secțiunea 4.0. (Specificații).

VERIFICAREA DISPOZITIVULUI AURASTRAIGHT

Purtați întotdeauna mănuși în timpul pregătirii și introducerii dispozitivului Ambu AuraStraight pentru a reduce la minimum contaminarea.

Manevrați cu atenție AuraStraight, deoarece se poate rupe sau perfora. Evitați contactul cu obiecte tăioase sau ascuțite.

Înainte de deschidere, verificați dacă sigiliul pungii este intact și aruncați Ambu AuraStraight dacă sigiliul pungii a fost deteriorat.

Examinați cu atenție AuraStraight pentru a detecta eventualele deteriorări, cum ar fi perforație, zgârieturi, tăieturi, rupturi, piese desprinse, muchii ascuțite etc.

Asigurați-vă că protecția pentru manșon a fost scoasă.

Verificați dacă interiorul tubului pentru pacient și manșonul nu sunt blocate și nu conțin piese desprinse. Nu utilizați AuraStraight dacă dispozitivul este blocat sau deteriorat.

Dezumflați complet manșonul dispozitivului AuraStraight. După dezumflare, verificați cu atenție dacă manșonul nu prezintă cute sau pliuri. Umflați manșonul până se atinge volumul specificat în Tabelul 1. Verificați dacă manșonul umflat este simetric și neted. Manșonul, tubul pilot sau balonul pilot nu trebuie să prezinte nicio umflătură și niciun semn de scurgere. Dezumflați din nou manșonul înainte de introducere.

3.2. Pregătirea pentru utilizare PREGĂTIREA ÎNAINTE DE INTRODUCERE

- Dezumflați manșonul complet, astfel încât să fie plat și fără cute, apăsându-l pe o suprafață plată sterilă (de exemplu, o bucată de tifon steril) și dezumflând în același timp dispozitivul cu o seringă. ③
- Lubrifiați vârful posterior al manșonului înainte de introducere, prin aplicarea unui lubrifiant steril, pe bază de apă pe suprafața posterioară a manșonului.
- Pregătiți întotdeauna un dispozitiv Ambu AuraStraight de rezervă, gata de utilizare.
- Preoxigenați și utilizați procedurile standard de monitorizare.
- Verificați dacă nivelul anesteziei (sau al cunoștinței) este adecvat înainte de a încerca introducerea dispozitivului. Introducerea trebuie să aibă succes în condiții de anestezie identice precum cele aplicate pentru intubarea traheală.

- Capul pacientului trebuie așezat în poziție extinsă, cu gâtul întins în poziția aplicată în mod normal pentru intubarea traheală (adică „poziția pentru evacuarea aerului”).

3.3. Introducerea

- Nu aplicați o forță excesivă.
- Țineți Ambu AuraStraight ca pe un creion, cu degetul arătător amplasat în zona de tranziție dintre manșon și tubul pentru pacient. Așezați cealaltă mână sub capul pacientului. ④
- Introduceți vârful manșonului apăsând în sus pe palatul dur și aplatizați manșonul. ⑤
- Asigurați-vă că vârful manșonului este aplatizat pe palat înainte de a continua; împingeți ușor mandibula în jos cu degetul mijlociu pentru a deschide gura mai mult.
- Asigurați-vă că vârful manșonului nu intră în valeculă sau în orificiul glotic și că nu se prinde de epiglotă sau de cartilajul aritenoid. Manșonul trebuie apăsător pe peretele faringian posterior al pacientului.
- Când masca este fixată, se va simți o rezistență.
- Înainte de a retrage mâna care ține masca, apăsați cu cealaltă mână pe tubul respirator. În acest fel Ambu AuraStraight rămâne în poziție după ce îndepărtați degetul.
- După introducere, asigurați-vă că buzele nu sunt prinse între tubul pentru pacient și dinți pentru a evita traumatismul buzelor.

PROBLEME LA INTRODUCERE

- Pentru pacienții pediatrici, se recomandă o tehnică cu rotație parțială dacă există dificultăți de poziționare.
- Tusea și ținerea respirației în timpul introducerii dispozitivului Ambu AuraStraight indică o adâncime inadecvată a anesteziei; introduceți imediat anestezia mai adânc cu agenți de inhalare sau intravenoși și începeți ventilația manuală.
- Dacă nu puteți deschide gura pacientului suficient de mult pentru a introduce masca, verificați dacă pacientul este anesteziat în mod adecvat. Rugați un asistent să tragă falca în jos pentru a vedea mai bine în gură și verificați poziția măștii.
- Dacă întâmpinați dificultăți la manevrarea unghiului în partea posterioară a limbii atunci când introduceți dispozitivul AuraStraight, apăsați vârful contra palatului, în caz contrar, vârful se poate îndoi sau poate întâmpina denivelări în faringele posterior, de ex., amigdalele hipertrofiate. În cazul în care manșonul nu se aplatizează sau nu se răsuțește în timpul introducerii, retrageți-l și introduceți-l din nou. În cazul unei obstrucții amigdaliene, se recomandă să mișcați masca pe diagonală.

3.4. Fixarea

Dacă se consideră necesar, fixați dispozitivul AuraStraight pe fața pacientului cu bandă adezivă sau cu un suport de tub mecanic potrivit pentru acest scop. ⑦ Se recomandă utilizarea unei piese de gură (biteblock) din tifon.

3.5. Umflarea

- Fără a ține tubul, umflați manșonul cu suficient aer pentru a obține etanșarea, la o presiune intramanșon de maximum 60 cm H₂O. ⑥ Adesea, doar jumătate din volumul maxim este suficient pentru a realiza etanșarea; consultați Tabelul 1 pentru volumele maxime în interiorul manșonului.
- Folosind un manometru, monitorizați continuu presiunea din manșon în timpul procedurii chirurgicale. Acest lucru este important în special în timpul utilizării îndelungate sau dacă se folosește protoxid de azot.
- Observați următoarele semne care indică amplasarea corectă: după umflarea manșonului, tubul se poate mișca puțin spre exterior, poate să apară o umflătură ovală netedă la nivelul gâtului în jurul tiroidei și al cartilajului cricoid sau manșonul poate să nu fie vizibil în cavitatea orală.
- Masca poate prezenta o mică scurgere la primele trei sau patru respirații înainte de a fi așezată în poziție în faringe. Dacă scurgerile persistă, verificați dacă

anestezia are adâncimea adecvată și dacă presiunea de umflare pulmonară este scăzută înainte de a decide că este necesară reintroducerea dispozitivului AuraStraight.

3.6. Verificarea poziției corecte

- Amplasarea corectă trebuie să producă o etanșare perfectă față de glotă, cu vârful manșonului în sfincterul esofagian superior.
- Linia verticală de pe tubul pentru pacient trebuie să fie orientată anterior către nasul pacientului.
- AuraStraight este introdus corect atunci când incisivii pacientului se află între cele două linii orizontale ale tubului pentru pacient. ②, punctul 5. Repoziționați masca dacă incisivii pacientului sunt în afara acestui interval.
- Poziția dispozitivului AuraStraight poate fi evaluată prin capnografie, prin observarea modificărilor volumului per flux (de exemplu, o reducere a volumului per flux expirat), prin auscultarea sunetelor respiratorii bilaterale și prin absența sunetelor în epigastru și/sau prin observarea ridicării toracelui în ritmul ventilației. Dacă bănuieți că dispozitivul AuraStraight a fost poziționat incorect, scoateți-l și introduceți-l din nou și asigurați-vă că adâncimea anestezicului este corectă.

- Se recomandă confirmarea vizuală a poziției corecte din punct de vedere anatomic, de exemplu, prin utilizarea unui endoscop flexibil.

REGURGITAREA NEAȘTEPTATĂ:

- Regurgitarea poate fi cauzată de un nivel inadecvat al anesteziei. Primele semne de regurgitare pot fi respirația spontană, tusea sau ținerea respirației.
- Dacă se produce regurgitarea, dar saturația oxigenului rămâne la niveluri acceptabile, dispozitivul AuraStraight nu trebuie îndepărtat. Acesta trebuie manevrat prin așezarea pacientului în poziția „cu capul în jos”. Deconectați scurt circuitul anestezic, astfel încât conținutul gastric să nu fie forțat în plămâni. Verificați dacă adâncimea anestezicului este adecvată și adânciți anestezia intravenoasă, dacă este cazul.
- Aplicați aspirația prin tubul pentru pacient din mască și prin gură. Aspirați arborele traheobronșic și inspecțiați bronhiile utilizând un endoscop flexibil.

3.7. Utilizarea cu alte aparate/echipamente SISTEMUL ANESTEZIC ȘI BALONUL DE VENTILAȚIE

Masca poate fi utilizată pentru ventilația spontană sau controlată.

În timpul anesteziei, protoxidul de azot se poate răspândi în manșon, cauzând creșterea volumului/presiunii acestuia. Ajustați presiunea în manșon suficient pentru a obține o etanșare adecvată (presiunea în manșon nu trebuie să depășească 60 cm H₂O).

Sistemul de inhalare a anesteziei trebuie să fie susținut corespunzător atunci când este conectat la AuraStraight pentru a evita rotirea măștii.

UTILIZAREA CU VENTILAȚIE SPONTANĂ

AuraStraight este adecvat pentru respirația spontană a pacienților atunci când este utilizat cu agenți volatili sau anestezie intravenoasă în condițiile în care anestezia este adecvată pentru a corespunde nivelului de stimulare chirurgicală, iar manșonul nu este umflat excesiv.

UTILIZAREA CU VENTILAȚIE CU PRESIUNE POZITIVĂ

La aplicarea ventilației cu presiune pozitivă, asigurați-vă că se realizează o etanșare corespunzătoare. Pentru o mai bună etanșare se recomandă următoarele:

- optimizați amplasarea dispozitivului AuraStraight prin întoarcerea sau întinderea capului;
- reglați presiunea în manșon. Încercați atât presiuni mai mici, cât și mai mari (etanșarea defectuoasă a manșonului poate fi cauzată de presiunea prea mică sau prea mare în manșon);

- dacă apar scurgeri în jurul manșonului, scoateți masca și reintroduceți-o, asigurându-vă că adâncimea anesteziei este corespunzătoare.

IMAGISTICA PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (RMN)

AuraStraight este sigur pentru utilizarea cu aparate de RMN.

3.8. Procedura de îndepărtare

Extragerea trebuie efectuată întotdeauna într-o unitate în care sunt disponibile echipamente de aspirație și accesorii pentru intubarea traheală rapidă.

Nu scoateți dispozitivul AuraStraight cu manșonul complet umflat pentru a preveni traumatismele tisulare și laringospasmul.

3.9. Eliminarea

Eliminați dispozitivul Ambu AuraStraight utilizat într-un mod sigur, în conformitate cu procedurile locale.

4.0. Specificații

Ambu AuraStraight este în conformitate cu ISO 11712 Echipamente pentru anestezie și aparate de respirație – Căile respiratorii supralaringiene și conectorii.

	Copii				Adulți			
Dimensiune mască	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Greutate pacient	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Volum maxim intramașon	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Presiune maximă intramașon	60 cm H ₂ O							
Conector	15 mm tată (ISO 5356-1)							
Dimensiunea maximă a instrumentului*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Compatibilitatea cu conul Luer al valvei de umflare	Con Luer compatibil cu echipamentele conforme cu ISO 594-1 și ISO 80369-7							
Condiții de depozitare adecvate	între 10 °C (50 °F) și 25 °C (77 °F)							
Greutatea aproximativă a măștii	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Volumul intern al căii de ventilație	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Cădere de presiune conform ISO 11712 anexa C	0,4 cm H ₂ O la 15 l/min	0,3 cm H ₂ O la 15 l/min	0,4 cm H ₂ O la 30 l/min	0,3 cm H ₂ O la 30 l/min	0,4 cm H ₂ O la 60 l/min	0,4 cm H ₂ O la 60 l/min	0,3 cm H ₂ O la 60 l/min	0,3 cm H ₂ O la 60 l/min
Distanță interdentară min.	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Lungimea nominală a căii de ventilație interne	10,2 ±0,6 cm	11,8 ±0,7 cm	13,4 ±0,8 cm	15,3 ±0,9 cm	17,1 ±1,0 cm	17,6 ±1,1 cm	19,6 ±1,2 cm	20,8 ±1,2 cm

Tabelul 1: Specificații pentru Ambu AuraStraight.

* Dimensiunea maximă a instrumentului este concepută ca un ghid pentru selectarea diametrului adecvat al unui dispozitiv ce trebuie trecut prin tubul pentru pacient din AuraStraight.

Lista completă cu explicațiile simbolurilor se află la <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Danemarca. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte din această documentație nu poate fi reprodusă sub nicio formă, inclusiv prin fotocopiere, fără permisiunea prealabilă scrisă a proprietarului drepturilor de autor.

1.1. Назначение/ Показания к применению

Устройство Ambu AuraStraight предназначено для использования в качестве альтернативы лицевой маске для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей при плановых и экстренных процедурах анестезии, проводимых у пациентов натошак.

1.2. Предполагаемые пользователи и условия использования

Медицинские специалисты, имеющие квалификацию в области поддержания проходимости дыхательных путей. Устройство AuraStraight предназначено для использования в условиях стационара.

1.3. Возрастная группа

Допускается использование для верхних дыхательных путей у взрослых пациентов и пациентов-детей весом от 2 кг и более.

1.4. Противопоказания

Неизвестны.

1.5. Клинические преимущества

Сохраняет верхние дыхательные пути открытыми для прохождения газов.

1.6. Предупреждения и меры предосторожности

Медицинские специалисты, использующие маску Ambu

AuraStraight, перед ее использованием должны ознакомиться с предупреждениями, мерами предосторожности, показаниями и противопоказаниями, приведенными в инструкции по применению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Изделие предназначено только для использования медицинскими специалистами, обученными навыкам поддержания проходимости дыхательных путей.
2. Обязательно визуально обследуйте изделие и выполните функциональную проверку после распаковки и перед использованием в соответствии с разделом 3.1 «Подготовка перед использованием», поскольку дефекты и посторонние предметы могут привести к отсутствию или уменьшению вентиляции, повреждению слизистой или инфицированию пациента. Запрещается использовать изделие, если не удалось выполнить какие-либо этапы подготовки перед использованием.
3. Запрещается использовать устройство AuraStraight для другого пациента, так как это устройство предназначено для однократного применения. Повторное использование загрязненного изделия может привести к инфекции.

4. AuraStraight не защищает трахею или легкие от риска аспирации.
5. Не прилагайте чрезмерное усилие при введении и извлечении AuraStraight, так как это может привести к травмированию тканей.
6. Объем или давление в манжете могут меняться в присутствии закиси азота, кислорода или других медицинских газов, что может привести к травмированию тканей. Обеспечьте непрерывный мониторинг давления в манжете во время хирургической операции.
7. Запрещается использовать устройство AuraStraight в присутствии лазеров и оборудования для электрокоагуляции, так как это может привести к возгоранию в дыхательных путях и ожогам тканей.
8. Не выполняйте прямую интубацию через AuraStraight, так как эндотрахеальная трубка (ЭТ) может застрять, что приведет к недостаточной вентиляции.
9. В целом, устройство AuraStraight следует использовать только у пациентов, находящихся в глубоком бессознательном состоянии и не сопротивляющихся введению.

10. Общая частота осложнений, связанных с ларингеальной маской, является низкой, но пользователь должен на основании профессиональной оценки принять решение о целесообразности применения ларингеальной маски. Следующие пациенты имеют повышенный риск развития серьезных осложнений, в том числе аспирации и недостаточной вентиляции:

- пациенты с обструкцией верхних дыхательных путей;
- пациенты, которым процедуру проводят не натощак (включая случаи, когда отсутствие приема пищи нельзя подтвердить);
- пациенты с проблемами в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта (например, эзофагэктомия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагальный рефлюкс, морбидное ожирение, беременность > 10 недель);
- пациенты, которым требуется вентиляция под высоким давлением;
- пациенты с патологиями глотки/гортани, которые потенциально осложняют анатомическое прилегание маски (например, опухоли, лучевая терапия шеи, затрагивающая гортаноглотку, тяжелая ротоглоточная травма);
- пациенты с недостаточным открытием рта для введения устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не замачивайте, не мойте и не стерилизуйте данное изделие, так как в результате этих процедур на нем могут остаться вредоносные остаточные вещества или это может привести к нарушению работы изделия. Конструкция устройства и используемый в нем материал несовместимы с традиционными процедурами обработки и стерилизации.
2. Перед использованием обязательно проверяйте совместимость AuraStraight с внешним устройством, чтобы избежать использования устройств, которые не могут пройти через просвет AuraStraight.
3. Давление в манжете должно поддерживаться на максимально низком уровне, но при этом достаточном для обеспечения герметизации и не превышающем 60 см H₂O.
4. Признаки проблем дыхательных путей или недостаточной вентиляции следует регулярно контролировать. Для поддержания проходимости дыхательных путей следует изменить положение устройства AuraStraight, ввести его повторно или заменить.
5. Обязательно проверяйте проходимость дыхательных путей после любого изменения положения головы или шеи пациента.

1.7. Возможные нежелательные явления

Применение ларингеальных масок связано с незначительными нежелательными явлениями (например, болью в горле, кровотечением, дисфонией, дисфагией) и серьезными нежелательными явлениями (например, регургитация/аспирация, ларингоспазм, повреждение нерва).

1.8. Общие примечания

Если во время или в результате использования данного устройства произойдет серьезное происшествие, сообщите об этом производителю и в соответствующие государственные органы.

2.0. Описание устройства

AuraStraight представляет собой стерильную ларингеальную маску для однократного применения, состоящую из трубки пациента с надувной манжетой на дистальном конце. Манжету можно надувать через возвратный клапан, при этом контрольный баллон показывает состояние надувания/сдувания. Манжета повторяет контуры гортаноглотки, а ее просвет обращен к гортанному отверстию пациента. Дистальный конец манжеты прижимается к верхнему пищеводному сфинктеру, а проксимальный конец манжеты прилежит к основанию языка.

AuraStraight выпускается в 8 размерных вариантах. Основные компоненты AuraStraight показаны на рис. ①.

Рис. 1 (стр. 4): обзор компонентов AuraStraight:

1. Коннектор. 2. Трубка пациента. 3. Манжета.
4. Возвратный клапан. 5. Контрольный баллон.
6. Трубка контрольного баллона. 7. Номинальная длина внутреннего пути вентиляции*.

* Номинальная длина указана в таблице 1 в сантиметрах.

Рис. 2 (стр. 4): Правильное положение устройства AuraStraight относительно компонентов AuraStraight и анатомических ориентиров

Компоненты AuraStraight: 1. Надувная манжета. 2. Маркировка размера. 3. Вентиляционное отверстие. 4. Путь вентиляции. 5. Отметки нормальной глубины введения. 6. Сторона аппарата.

Анатомические ориентиры: А. Пищевод. В. Трахея. С. Кольцо перстневидного хряща. Д. Щитовидный хрящ. Е. Голосовые связки. F. Вход в гортань. G. Надгортанник. H. Подъязычная кость. I. Язык. J. Ротовая полость. K. Носоглотка. L. Резцы.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ УСТРОЙСТВАМИ/ ОБОРУДОВАНИЕМ

Устройство AuraStraight можно использовать вместе со следующим оборудованием:

- Оборудование ИВЛ с коническими коннекторами 15 мм, соответствующими стандарту ISO 5356-1;
- Устройства для поддержания проходимости дыхательных путей; бронхоскопы и сменные катетеры*;
- Другие принадлежности: шприц со стандартным коническим Люэровским наконечником (конусность 6 %), манометр со стандартным коническим Люэровским наконечником (конусность 6 %), смазывающее средство на водной основе, аспирационный катетер.

При использовании инструментов через маску перед введением убедитесь, что инструмент совместим и хорошо смазан.

* Информацию о максимальном размере инструмента см. в таблице 1.

3.0. Использование изделия

3.1. Подготовка перед использованием

ВЫБОР РАЗМЕРА

Устройство Ambu AuraStraight поставляется в различных размерных вариантах для использования у пациентов с разной массой тела.

При применении Ambu AuraStraight у пациентов-детей рекомендуется, чтобы медицинский сотрудник был знаком с педиатрической анестезией.

См. указания по выбору и макс. давлению внутри манжеты в таблице 1, раздел 4.0. («Технические характеристики»).

ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА AURASTRAIGHT

Во время подготовки и введения устройства Ambu AuraStraight всегда надевайте перчатки, чтобы свести к минимуму загрязнение.

При работе с устройством Ambu AuraStraight проявляйте осторожность и не допускайте разрывов и проколов. Избегайте контакта с острыми или заостренными предметами.

Перед вскрытием герметичной упаковки убедитесь в ее целостности и выбросьте Ambu AuraStraight, если упаковка повреждена.

Тщательно проверьте AuraStraight на наличие повреждений, таких как перфорация, царапины, порезы, разрывы, незакрепленные детали, острые края и т. д.

Убедитесь, что с манжеты снят протектор.

Убедитесь, что внутренние части трубки пациента и манжеты не засорены и не имеют незакрепленных деталей. Не используйте устройство AuraStraight, если оно засорено или повреждено.

Полностью сдуйте манжету AuraStraight. После сдувания тщательно проверьте манжету на наличие неровностей и складок. Надуйте манжету до объема, указанного в таблице 1. Проверьте, чтобы надутая манжета была симметричной и гладкой. Не должно быть вздутий или признаков утечки в манжете, контрольных трубках или контрольном баллоне. Перед введением снова сдуйте манжету.

3.2. Подготовка к применению

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ

- Полностью сдуйте манжету, чтобы она стала плоской и не имела складок, для чего надавите на манжету, расположенную на плоской стерильной поверхности (например, на куске стерильной марли), одновременно сдувая устройство шприцем. ③
- Перед введением смажьте задний дистальный конец манжеты, нанеся на дистальную заднюю поверхность манжеты стерильное смазывающее средство на водной основе.
- Всегда держите наготове запасное устройство Ambu AuraStraight.

- Выполните преоксигенацию и используйте стандартные процедуры мониторинга.
- Перед введением убедитесь, что степень анестезии (или потери сознания) является достаточной. Введение должно быть успешным при той же степени анестезии, которая подходит для интубации трахеи.
- Голову пациента следует разместить в вытянутом положении, согнув шею в положении, обычно используемом для интубации трахеи (т. е. положении «принюхивания»).

3.3. Введение

- Никогда не прикладывайте избыточное усилие.
- Держите Ambu AuraStraight как карандаш, расположив указательный палец на переходе между манжетой и трубкой пациента. Вторую руку следует поместить под головой пациента. ④
- Введите дистальный конец манжеты, прижимая его вверх к твердому небу и расплывая манжету об него. ⑤
- Прежде чем продолжить, убедитесь, что дистальный конец манжеты плотно прилегает к небу - слегка надавите средним пальцем на челюсть вниз, чтобы еще больше открыть рот.
- Убедитесь, что дистальный конец манжеты не попал в углубление или открытую голосовую щель, а также

не зацепляется за надгортанник или черпаловидный хрящ. Манжета должна быть прижата к задней стенке глотки пациента.

- Когда маска находится на месте, ощущается сопротивление.
- Перед оттягиванием назад руки, удерживающей маску, прижмите дыхательную трубку другой рукой, чтобы устройство Ambu AuraStraight осталось на месте после отведения пальца.
- После введения убедитесь, что губы не зажаты между трубкой пациента и зубами, чтобы избежать травмы губ.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ

- При возникновении трудностей с установкой у пациентов-детей рекомендуется использовать метод частичного вращения.
- Кашель и задержка дыхания во время введения Ambu AuraStraight указывают на недостаточную глубину анестезии – немедленно углубите анестезию ингаляционными или внутривенными агентами и запустите ручную вентиляцию.
- Если вы не можете открыть рот пациента в достаточной мере для введения маски, убедитесь в достаточной степени анестезии у пациента. Попросите ассистента потянуть челюсть вниз, чтобы было легче заглянуть в рот и проверить положение маски.

- Если при введении AuraStraight трудно маневрировать углом в задней части языка, прижмите дистальный конец к небу по всей длине, иначе дистальный конец может сложиться или встретиться с неровностью в задней части глотки, например с гипертрофированными миндалинами. Если манжета не расплывается или начинает закручиваться при введении, извлеките маску и введите ее повторно. При обструкции миндалинами рекомендуется выполнять диагональное перемещение маски.

3.4. Фиксация

При необходимости зафиксируйте устройство AuraStraight на лице пациента с помощью клейкой ленты или механического держателя трубки, подходящего для этой цели. ⑦
Рекомендуется использовать марлевый загубник.

3.5. Надувание

- Не удерживая трубку, надуйте манжету так, чтобы воздуха было достаточно для достижения плотного прилегания, что приблизительно соответствует давлению внутри манжеты не более 60 см H₂O. ⑥ Часто для того, чтобы маска плотно прилегала, достаточно половины от максимального объема внутри манжеты. Значения максимальных объемов см. в таблице 1.

- Во время хирургической операции постоянно контролируйте давление в манжете с помощью манометра для измерения давления манжеты. Это особенно важно при длительном использовании или при использовании газов, содержащих закись азота.
- Обратите внимание на следующие признаки правильной установки: при надувании манжеты возможно небольшое смещение трубки наружу, присутствует гладкое овальное набухание в шее вокруг области щитовидной железы и перстневидного хряща или манжета не видна в ротовой полости.
- Маска может слегка подтекать при первых трех или четырех вдохах, прежде чем займет свое положение в глотке. Если утечка сохраняется, убедитесь в достаточной глубине анестезии и низком давлении раздувания легких, прежде чем принять решение о необходимости повторного введения AuraStraight.

3.6. Проверка положения

- Правильная установка должна обеспечивать герметичное прилегание к голосовой щели, при этом дистальный конец манжеты должен находиться у верхнего пищеводного сфинктера.
- Вертикальная линия на трубке пациента должна быть ориентирована в направлении кпереди к носу пациента.

- Устройство AuraStraight введено правильно, когда резцы пациента находятся между двумя горизонтальными линиями на трубке пациента. ②, поз. 5. Измените положение маски, если резцы пациента находятся в другом положении.
- Положение AuraStraight можно оценить при помощи капнографии, наблюдая за изменениями дыхательного объема (например, снижением выдыхаемого дыхательного объема), по аускультации дыхательных звуков с двух сторон и по отсутствию звуков над эпигастрием, и (или) по наблюдениям за подъемом грудной клетки при вентиляции. Если вы подозреваете, что устройство AuraStraight размещено неправильно, извлеките устройство, введите его повторно и убедитесь, что глубина анестезии достаточна.
- Рекомендуется визуальное подтверждение анатомически правильного положения, например с помощью гибкого эндоскопа.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ:

- Недостаточная степень анестезии может привести к регургитации. Первыми признаками регургитации могут быть спонтанное дыхание, кашель или задержка дыхания.
- Если происходит регургитация, а насыщение кислородом остается на приемлемом уровне,

AuraStraight не следует извлекать. Ситуацию можно разрешить, разместив пациента в положении «голова вниз». На короткое время отсоедините анестезирующий контур, чтобы содержимое желудка не попало в легкие. Убедитесь, что глубина анестезии достаточна, и при необходимости углубите анестезию внутривенным способом.

- Выполните аспирацию через трубку пациента на маске и через рот. Выполните аспирацию из трахеобронхиального дерева и осмотрите бронхи с помощью гибкого эндоскопа.

3.7. Использование с другими устройствами/оборудованием **АНЕСТЕЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА И МЕШОК ДЛЯ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**

Маску можно использовать для спонтанной или контролируемой вентиляции.

Во время анестезии закись азота может диффундировать в манжету, вызывая увеличение объема/давления в манжете. Отрегулируйте давление в манжете для обеспечения достаточного уплотнения (давление в манжете не должно превышать 60 см H₂O).

При подключении к AuraStraight анестезирующая дыхательная система должна иметь соответствующую опору во избежание поворота маски.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ СПОНТАННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

AuraStraight подходит для пациентов со спонтанным дыханием при использовании анестезии летучими агентами или внутривенной анестезии при условии, что анестезия адекватна уровню хирургического стимула и манжета не перекачивается.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

При осуществлении вентиляции с положительным давлением убедитесь, что герметизация достаточна. Для улучшения герметизации рекомендуются следующие меры:

- Оптимизируйте установку AuraStraight путем поворота или вытяжения головы.
- Отрегулируйте давление в манжете. Попробуйте использовать более низкое и более высокое давление (недостаточная герметизация манжеты может быть вызвана либо слишком низким, либо слишком высоким давлением в манжете).
- При возникновении утечки вокруг манжеты извлеките маску и введите ее повторно, убедившись в достаточной глубине анестезии.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСКАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ)

AuraStraight может использоваться во время МРТ.

3.8. Процедура извлечения

Извлечение всегда должно выполняться в зоне, где имеется аспирационное оборудование и средства для быстрой интубации трахеи.

Во избежание травмирования тканей и ларингоспазма не извлекайте устройство AuraStraight при полностью надутой манжете.

3.9. Утилизация

Утилизируйте использованное устройство Ambu AuraStraight безопасным способом в соответствии с местными правилами.

4.0. Технические характеристики

Устройство Ambu AuraStraight соответствует стандарту ISO 11712 «Оборудование анестезиологическое и респираторное. Супрагортанные трубки и соединители».

Размер маски	Дети				Взрослые			
	№ 1	№ 1½	№ 2	№ 2½	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Вес пациента	2–5 кг	5–10 кг	10–20 кг	20–30 кг	30–50 кг	50–70 кг	70–100 кг	> 100 кг
Максимальный объем внутри манжеты	4 мл	7 мл	10 мл	14 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл
Максимальное давление внутри манжеты	60 см H ₂ O							
Коннектор	15 мм, штекерный (ISO 5356-1)							
Максимальный размер инструмента*	4,5 мм	5,0 мм	6,0 мм	7,5 мм	9,0 мм	9,5 мм	10,5 мм	11,0 мм
Совместимость клапана надувания с Люэровским наконечником	Люэровский наконечник совместим с оборудованием, соответствующим стандартам ISO 594-1 и ISO 80369-7							
Надлежащие условия хранения	от 10 °C (50 °F) до 25 °C (77 °F)							
Приблизительная масса маски	10 г	14 г	18 г	27 г	37 г	45 г	63 г	71 г
Внутренний объем пути вентиляции	4,3 ± 0,5 мл	5,7 ± 0,5 мл	7,1 ± 0,5 мл	10,2 ± 0,6 мл	13,4 ± 0,4 мл	15,3 ± 0,4 мл	20,6 ± 0,4 мл	22,2 ± 0,5 мл
Перепад давления, измеренный согласно ISO 11712, приложение С	0,4 см H ₂ O при 15 л/мин	0,3 см H ₂ O при 15 л/мин	0,4 см H ₂ O при 30 л/мин	0,3 см H ₂ O при 30 л/мин	0,4 см H ₂ O при 60 л/мин	0,4 см H ₂ O при 60 л/мин	0,3 см H ₂ O при 60 л/мин	0,3 см H ₂ O при 60 л/мин
Мин. межзубный промежуток	13 мм	15 мм	17 мм	19 мм	22 мм	24 мм	26 мм	28 мм
Номинальная длина внутреннего пути вентиляции	10,2 ± 0,6 см	11,8 ± 0,7 см	13,4 ± 0,8 см	15,3 ± 0,9 см	17,1 ± 1,0 см	17,6 ± 1,1 см	19,6 ± 1,2 см	20,8 ± 1,2 см

Таблица 1. Технические характеристики устройства Ambu AuraStraight.

* Максимальный размер инструмента служит в качестве ориентира для выбора подходящего диаметра устройства, которое будет проведено через трубку пациента устройства AuraStraight.

Полный список пояснений к символам можно найти на сайте <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Авторское право, 2021 г. Ambu A/S, Дания. Все права защищены. Никакая часть данной документации не может быть воспроизведена в любой форме, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав.

1.1. Určené použitie/ Indikácie použitia

Pomôcka Ambu AuraStraight je určená ako alternatíva k tvárovej maske na dosiahnutie a zachovanie regulácie prúdenia vzduchu počas bežných a urgentných anestetických zákrokov u pacientov nalačno.

1.2. Určení používateľa a prostredie použitia

Profesionálni zdravotnícki pracovníci vyškolení v oblasti starostlivosti o dýchacie cesty.

Maska AuraStraight je určená na použitie v nemocniciach.

1.3. Určená populácia pacientov

Dospelí a pediatrickí pacienti s hmotnosťou 2 kg a viac hodnotení ako spôsobilí na použitie supraglotického prístupu k dýchacím cestám.

1.4. Kontraindikácie

Žiadne známe.

1.5. Klinické výhody

Udržiava horné dýchacie cesty otvorené, aby umožnili priechod plynov.

1.6. Výstrahy a upozornenia

Pred zavedením pomôcky je nevyhnutné, aby boli všetci zdravotnícki pracovníci používajúci masku Ambu AuraStraight oboznámení s výstrahami, bezpečnostnými opatreniami, indikáciami a kontraindikáciami uvedenými v *návode na použitie*.

VÝSTRAHY



1. Tento výrobok je určený na použitie len profesionálnymi zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú riadne vyškolení v oblasti starostlivosti o dýchacie cesty.
2. Po vybalení a pred použitím výrobok vždy vizuálne skontrolujte a vykonajte skúšku funkčnosti podľa pokynov v časti „3.1 Príprava pred použitím“, pretože chyby a cudzie telesá môžu viesť k nulovej alebo zníženej ventilácii pacienta, poškodeniu sliznice alebo infekcii pacienta. Výrobok nepoužívajte, ak boli akékoľvek kroky uvedené v časti „Príprava pred použitím“ neúspešné.
3. Masku AuraStraight nepoužívajte opakovane u žiadneho iného pacienta, pretože ide o pomôcku určenú len na jedno použitie. Opakované použitie kontaminovaného výrobku môže viesť k infekcii.

4. Maska AuraStraight nechráni priedušnicu ani pľúca pred nebezpečenstvom aspirácie.
5. Pri zavádzaní a vyberaní masky AuraStraight nepoužívajte nadmernú silu, mohlo by dôjsť k poraneniu tkaniva.
6. Objem a tlak manžety sa môže v prítomnosti oxidu dusného, kyslíka alebo iných lekárskeho plynov zmeniť. Počas chirurgického zákroku nepretržite kontrolujte tlak manžety.
7. Masku AuraStraight nepoužívajte v blízkosti laserov a elektrokauterizačného zariadenia, pretože by to mohlo viesť k popáleniu dýchacích ciest a tkaniva.
8. Nevykonávajte priamu intubáciu cez masku AuraStraight, pretože endotracheálna (ET) trubica sa môže zaseknúť, čo môže viesť k nedostatočnej ventilácii.
9. Maska AuraStraight by sa vo všeobecnosti mala používať len u pacientov, ktorí sú v silnom bezvedomí a nekladú odpor pri zavádzaní.

10. Celková miera komplikácií v súvislosti s laryngeálnou maskou je nízka, ale používateľ musí pri rozhodovaní o tom, či bude použitie laryngeálnej masky vhodné, postupovať podľa odborného úsudku.

U nasledujúcich pacientov hrozí vyššie riziko závažných komplikácií vrátane aspirácie a nedostatočnej ventilácie:

- Pacienti s obštrukciou horných dýchacích ciest.
- Pacienti, ktorí nie sú nalačno (vrátane prípadov, kedy nie je možné potvrdiť stav nalačno).
- Pacienti trpiaci problémami s horným gastrointestinálnym traktom (napr. ezofagektómia, hiátová hernia, gastroezofageálny reflux, morbidná obezita, tehotenstvo > 10 týždňov).
- Pacienti, ktorí vyžadujú ventiláciu pod vysokým tlakom.
- Pacienti s faryngeálnou/laryngeálnou patológiou, u ktorých je potenciálne komplikované anatomicke nasadenie masky (napr. tumory, rádioterapia krku zahŕňajúca hypofarynx, závažná orofaryngeálna trauma).
- Pacienti s nedostatočným ústnym otvorom na zavedenie pomôcky.

UPOZORNENIA

1. Túto pomôcku neponárajte, neoplachujte ani nesterilizujte, pretože pri týchto postupoch môžu na nej zostať škodlivé zvyšky alebo môže dôjsť k jej poruche. Použitie konštrukčné riešenia a materiál nie sú kompatibilné s bežnými postupmi pri čistení a sterilizácii.
2. Pred použitím vždy skontrolujte kompatibilitu masky AuraStraight a externej zdravotníckej pomôcky, aby sa zabránilo tomu, že tieto pomôcky nedokážu prejsť cez lúmen masky AuraStraight.
Tlak v manžete by sa mal udržiavať čo najnižší a zároveň musí byť stále zabezpečené dostatočné utesnenie, pričom tlak by nemal prekročiť hodnotu 60 cm stĺpca H₂O.
3. Všetky príznaky problémov s dýchacími cestami alebo nedostatočnou ventiláciou sa musia pravidelne monitorovať a maska AuraStraight sa musí premiestniť, opätovne zaviesť alebo vymeniť podľa potreby na zabezpečenie ventilácie dýchacích ciest pacienta.
4. Po každej zmene polohy hlavy alebo krku pacienta vždy opätovne potvrdte priechodnosť dýchacích ciest.

1.7. Potenciálne nežiaduce udalosti

Použitie laryngeálnych masiek je spojené s menšími nežiaducimi účinkami (napr. bolesť hrdla, krvácanie, dysfónia, dysfágia) a závažnejšími nežiaducimi účinkami (napr. regurgitácia/aspirácia, laryngospazmus, poškodenie nervov).

1.8. Všeobecné poznámky

Ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej používania dôjde k vážnej nehode, ohláste to výrobcovi a príslušnému štátnemu orgánu.

2.0. Popis pomôcky

AuraStraight je laryngeálna maska určená na jedno použitie, ktorá sa skladá zo zakrivenej trubice pre pacienta s nafukovacou manžetou na distálnom konci. Manžetu možno nafúknuť cez spätnú klapku a sondážny balónik umožňuje signalizáciu stavu napustenia/vypustenia. Manžeta je prispôbená kontúram hypofarynxu a jej lúmen je otočený smerom k laryngeálnemu otvoru pacienta. Špička manžety tlačí na horný ezofageálny zvierač a proximálny koniec manžety sa opiera o koreň jazyka.

Maska AuraStraight sa dodáva v 8 rôznych veľkostiach. Hlavné komponenty masky AuraStraight sú uvedené na obrázku ①.

Obrázok 1 (strana 4): Prehľad dielov masky AuraStraight:

1. Konektor; **2.** Trubica pre pacienta; **3.** Manžeta; **4.** Spätná klapka; **5.** Sondážny balónik; **6.** Vodiaca hadička; **7.** Nominálna dĺžka vnútornej ventilačnej dráhy*.

*Nominálnu dĺžku uvedenú v centimetroch nájdete v tabuľke 1.

Obrázok 2 (strana 4): Správna poloha masky AuraStraight vo vzťahu k dielom masky AuraStraight a anatomickým orientačným bodom

Diely masky AuraStraight: **1.** Nafukovacia manžeta; **2.** Označenie veľkosti; **3.** Ventilačný otvor; **4.** Ventilačná dráha; **5.** Značky normálnej hĺbky zavedenia; **6.** Koniec zariadenia.

Anatomické orientačné body: **A.** Pažerák; **B.** Priedušnica; **C.** Prstencová chrupavka; **D.** Štítna chrupavka; **E.** Hlasivky; **F.** Vstup do hrtana; **G.** Hrtanová príklopka; **H.** Jazyk; **I.** Jazyk; **J.** Ústna dutina; **K.** Nosohltan; **L.** Hryzáky.

KOMPATIBILITA S ĎALŠÍMI POMÔCKAMI/VYBAVENÍM

Masku AuraStraight možno použiť v spojení s nasledujúcimi zariadeniami a pomôckami:

- Ventilačné zariadenie; 15 mm kónické konektory v súlade s normou ISO 5356-1.
- Pomôcky na starostlivosť o dýchacie cesty; bronchoskopy a výmena katétrov*.
- Iné príslušenstvo; štandardná 6 % kónická striekačka s konektorom Luer, manometer so štandardným 6 % kónickým konektorom Luer, mazanie na báze vody, odsávací katéter.

Ak používate nástroje cez masku, pred vložením sa uistite, že nástroj je kompatibilný a dobre namazaný.

* Informácie o maximálnej veľkosti nástroja nájdete v tabuľke 1.

3.0. Použitie výrobku

3.1. Príprava pred použitím

VÝBER VEĽKOSTI

Maska Ambu AuraStraight sa dodáva v rôznych veľkostiach a je určená na použitie u pacientov s rôznymi hmotnosťami.

U pediatrických pacientov sa odporúča, aby masku Ambu AuraStraight používal profesionálny zdravotnícky pracovník oboznámený s pediatrickou anestéziou.

Pozrite si usmernenia pre výber a max. tlak vo vnútri manžety v tabuľke 1, časť 4.0. (Špecifikácie).

KONTROLA MASKY AURASTRAIGHT

Na minimalizáciu kontaminácie vždy používajte rukavice počas prípravy a zavádzania masky Ambu AuraStraight.

S maskou AuraStraight manipulujte opatrne, pretože sa môže roztrhnúť alebo prepichnúť. Vyhybajte sa kontaktu s ostrými alebo špicatými predmetmi.

Pred otvorením skontrolujte, či je plomba vrečka neporušená, a masku Ambu AuraStraight zlikvidujte, ak je plomba vrečka poškodená.

Pozorne skontrolujte, či maska AuraStraight nevykazuje známky poškodenia, ako je napríklad perforácia, škrabance, prerezanie, roztrhnutie, uvoľnené časti, ostré hrany atď.

Uistite sa, že chránič manžety je odstránený z manžety.

Skontrolujte, či vnútro trubice pre pacienta a manžeta nie sú upchaté, a či sa tu nenachádzajú uvoľnené časti. Masku AuraStraight nepoužívajte, ak je upchatá alebo poškodená.

Úplne vypustte manžetu masky AuraStraight. Po vypustení dôkladne skontrolujte, či manžeta nie je pokrčená alebo

zložená. Nafúknite manžetu na objem uvedený v tabuľke 1. Skontrolujte, či je nafúknutá manžeta symetrická a hladká. Manžeta, vodiace hadičky alebo sondážny balónik nesmú vykazovať žiadne známky vydutia alebo netesnosti. Pred vložením manžetu znovu vypustíte.

3.2. Príprava na použitie

PRÍPRAVA PRED VLOŽENÍM

- Manžetu úplne vypustíte, aby bola plochá a bez záhybov, a to pritlačením manžety nadol na plochy sterilný povrch (napr. kus sterilnej gázy) pri súčasnom vypustení pomôcky použitím striekačky. ③
- Pred zavedením namažte zadný koniec manžety nanosením sterilného maziva na báze vody na distálnu zadnú plochu manžety.
- Vždy majte pripravenú náhradnú masku Ambu AuraStraight.
- Predbežne okysličujte a použite štandardné postupy monitorovania.
- Pred pokusom o zavedenie pomôcky skontrolujte, či je dosiahnutá dostatočná úroveň anestézie (alebo bezvedomia). Zavádzanie pomôcky by malo byť úspešné pri rovnakej úrovni anestézie, ktorá by bola vhodná na tracheálnu intubáciu.
- Hlava pacienta by mala byť vysunutá a krk zaklonený v polohe, ktorá sa normálne používa na tracheálnu intubáciu (t. j. „poloha na umelé dýchanie“).

3.3. Zavedenie

- Nikdy nepoužívajte nadmernú silu.
- Masku Ambu AuraStraight držte ako ceruzku s ukazovákou umiestneným na prechode medzi manžetou a trubicou pre pacienta. Druhú ruku by ste mali mať pod hlavou pacienta. ④
- Zasuňte špičku manžety jej zatlačením oproti tvrdému podnebiu smerom nahor a manžetu vyrovnajte. ⑤
- Skôr ako budete pokračovať, skontrolujte, či je špička manžety plocho opretá o podnebie – jemne zatlačte sánku smerom nadol prostredníkom a ešte viac otvorte ústa.
- Uistite sa, že špička manžety neprenikne do valemuly ani do glotického otvoru a nezachytí sa o epiglotis ani hlasivkové chrupavky. Manžeta by sa mala zatlačiť na zadnú laryngeálnu stenu pacienta.
- Keď je maska na svojom mieste, pocítite odpor.
- Pred potiahnutím ruky držiacej masku dozadu sa druhá ruka používa na zatlačenie trubice dýchacích ciest. Tým sa zaistí, že maska Ambu AuraStraight zostane na svojom mieste aj po odstránení prsta.
- Po zavedení sa uistite, že pery nie sú zachytené medzi trubicou pre pacienta a zubami, aby nedošlo k poraneniu pier.

PROBLÉMY PRI ZAVÁDZANÍ

- U pediatrických pacientov sa pri problémoch s umiestnením odporúča technika čiastočnej rotácie.

- Kašeľ a zadržiavanie dychu počas zavádzania masky Ambu AuraStraight signalizuje nedostatočnú hĺbku anestézie – okamžite prehlbte anestéziu inhalačnými alebo intravenóznymi anestetikami a začnite s manuálnou ventiláciou.
- Ak nemôžete dostatočne otvoriť ústa pacienta na zavedenie masky, skontrolujte, či je pacient adekvátne pod vplyvom anestézie. Požiadajte asistenta, aby sánku potiahol nadol, čím sa uľahčí náhľad do úst s cieľom skontrolovať polohu masky.
- Ak sa pri zavádzaní masky Ambu AuraStraight objavia ťažkosti s nastavením uhla v zadnej časti jazyka, pritlačte špičku o podnebie, inak sa môže špička sama sklopiť alebo môže nastať nepravidelnosť v zadnej časti hltana, napríklad pri zväčšených mandliach. Ak sa manžeta pri zavádzaní nenarovná alebo sa začne prekrúcať, vytriahnite masku a vložte ju znova. V prípade obštrukcie mandlí sa odporúča diagonálne posúvanie masky.

3.4. Fixácia

V prípade potreby upevnite masku Ambu AuraStraight na tvár pacienta pomocou lepiacej pásky alebo pomocou mechanického držiaka trubice vhodného na tento účel. ⑦ Odporúčame použiť gázový blok na zahryznutie.

3.5. Napustenie

- Bez toho, aby ste držali trubicu, nafúknite manžetu iba takým množstvom vzduchu, aby sa dosiahlo tesné spojenie, čo zodpovedá tlaku vo vnútri manžety maximálne 60 cm stĺpca H₂O. ⑥ Na dosiahnutie utesnenia často postačuje len polovica maximálneho objemu – informácie o maximálnych objemoch manžety nájdete v tabuľke 1.
- Počas chirurgického zákroku nepretržite kontrolujte tlak manžety pomocou tlakomera manžety. Toto je dôležité najmä pri dlhodobom používaní alebo pri používaní plynného oxidu dusného.
- Sledujte nasledujúce znaky správneho umiestnenia: Možný mierny pohyb trubice po nafúknutí manžety smerom von, prítomnosť hladkého oválneho opuchu v krku okolo oblasti štítnej žľazy a prstencovej chrupavky, prípadne neviditeľná manžeta v ústnej dutine.
- Masku môže pred usadením na svoje miesto v oblasti hltana mierne netesniť počas prvých troch alebo štyroch nádychoch. Ak netesnosť pretrváva, pred uvažovaním o tom, či je potrebné opätovné zavedenie masky AuraStraight, skontrolujte, či je zabezpečená dostatočná hĺbka anestézie, a či je tlak nafúknutia pľúc nízky.

3.6. Overenie správnej polohy

- Správne umiestnenie by malo zabezpečiť utesnenie bez únikov cez štrbinu hlasiviek, pričom špička manžety musí byť na hornom zvierachi pažeráka.
- Vertikálna línia na trubici pre pacienta by mala byť orientovaná dopredu smerom k nosu pacienta.
- Masku AuraStraight je správne vložená, ak sa rezáky pacienta nachádzajú medzi dvomi horizontálnymi čiarami na trubici pre pacienta. ②, položka 5. Ak sa rezáky pacienta nachádzajú mimo tohto rozsahu, zmeňte polohu masky.
- Polohu masky AuraStraight je možné posúdiť pomocou kapnografie sledovaním zmien dychového objemu (napr. redukcia dychového objemu vydychovaného vzduchu), počúvaním bilaterálnych zvukov dýchania a absencie zvukov cez epigastrium a/alebo pozorovaním zdvíhania hrudného koša počas ventilácie. Ak máte podozrenie, že maska AuraStraight je umiestnená nesprávne, vyberte ju a znovu vložte – uistite sa, že hĺbka anestézie je dostatočná.
- Odporúča sa vizuálna kontrola anatomickejšie správnej polohy, napríklad pomocou flexibilného endoskopu.

NEOČAKÁVANÁ REGURGITÁCIA:

- Regurgitácia môže byť spôsobená nedostatočnou úrovňou anestézie. Medzi prvé príznaky regurgitácie

môžu patriť spontánne dýchanie, kašeľ alebo zadržiavanie dychu.

- Ak sa objaví regurgitácia, a ak saturácia kyslíkom zostáva na prijateľných úrovniach, maska AuraStraight by sa nemala vyberať. V takomto prípade by sa mal pacient presunúť do polohy „hlavou nadol“. Na krátky čas odpojte anestetický okruh, aby sa obsah žalúdka nedostal do pľúc. Skontrolujte, či je hĺbka anestézie primeraná a v prípade potreby prehĺbte anestéziu intravenózne.
- Aplikujte odsávanie cez trubicu masky pre pacienta a cez ústa. Odsávajte tracheobronchiálny strom a kontrolujte priedušky pomocou flexibilného endoskopu.

3.7. Použitie s inými pomôckami/vybavením ANESTETICKÝ SYSTÉM A VENTILAČNÝ VAK

Maska sa môže používať na spontánnu alebo riadenú ventiláciu.

Počas anestézie môže do manžety preniknúť oxid dusný, čo môže spôsobiť zvýšenie objemu/tlaku manžety. Nastavte tlak manžety len do takej miery, aby sa dosiahlo dostatočné utesnenie (tlak manžety by nemal prekročiť 60 cm stĺpca H₂O).

Anestetický dýchací systém musí byť k maske AuraStraight pripojený tak, aby bola zabezpečená dostatočná opora na zabránenie rotačným pohybom masky.

POUŽITIE PRI SPONTÁNNEJ VENTILÁCIÍ

Maska AuraStraight je vhodná pre pacientov so spontánnym dýchaním, ak sa používa s prchavými anestetikami alebo intravenóznou anestéziou za podmienky, že anestézia je dostatočná vzhľadom na úroveň chirurgických stimulov, a že manžeta sa nadmerne nenafúkne.

POUŽITIE S PRETLAKOVOU VENTILÁCIOU

Pri použití pretlakovej ventilácie zabezpečte dostatočné utesnenie. Na zlepšenie utesnenia odporúčame vykonať nasledujúce kroky:

- Optimalizujte umiestnenie masky AuraStraight otáčaním alebo napnutím hlavy.
- Nastavte tlak manžety. Vyskúšajte nižší aj vyšší tlak (nedostatočné utesnenie manžety môže byť spôsobené buď príliš nízkym, alebo príliš vysokým tlakom manžety).
- Ak by v okolí manžety došlo k netesnosti, odstráňte masku a opätovne ju zaveďte, pričom sa uistite, že hĺbka anestézie je dostatočná.

ZOBRAZOVANIE MAGNETICKOU REZONANCIU (MR)

Maska AuraStraight sa môže bezpečne používať v prostredí MR.

3.8. Postup pri vyberaní

Odstránenie by sa malo vždy vykonávať na mieste, kde je k dispozícii odsávacie zariadenie a zariadenie na rychlu tracheálnu intubáciu.

Masku AuraStraight nevyberajte s úplne nafúknutou manžetou, aby nedošlo k poraneniu tkaniva a laryngospazme.

3.9. Likvidácia

Použitú masku Ambu AuraStraight zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi postupmi.

4.0. Špecifikácie

Maska Ambu AuraStraight spĺňa požiadavky normy ISO 11712 o anestetických a respiračných zariadeniach – supralaryngeálne dýchacie cesty a konektory.

	Pediatrická verzia				Verzia pre dospelých			
Veľkosť masky	č. 1	č. 1½	č. 2	č. 2½	č. 3	č. 4	č. 5	č. 6
Hmotnosť pacienta	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maximálny vnútorný objem manžety	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximálny vnútorný tlak manžety	60 cm stĺpca H ₂ O							
Konektor	15 mm, zasúvací (ISO 5356-1)							
Maximálna veľkosť nástroja*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilita s kónusovým napúšťacím ventilom Luer	Kónusový konektor Luer kompatibilný so zariadeniami podľa normy ISO 594-1 a ISO 80369-7							
Vhodné skladovacie podmienky	10 °C (50 °F) až 25 °C (77 °F)							
Približná hmotnosť masky	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Vnútorný objem ventilačnej dráhy	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Pokles tlaku stanovený podľa normy ISO 11712, príloha C	0,4 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 1 5 l/min	0,3 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 15 l/min	0,4 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 30 l/min	0,3 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 30 l/min	0,4 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 60 l/min	0,4 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 60 l/min	0,3 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 60 l/min	0,3 cm stĺpca H ₂ O pri prietoku 60 l/min
Min. Medzizubný priestor	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominálna dĺžka vnútornej ventilačnej dráhy	10,2 ±0,6 cm	11,8 ±0,7 cm	13,4 ±0,8 cm	15,3 ±0,9 cm	17,1 ±1,0 cm	17,6 ±1,1 cm	19,6 ±1,2 cm	20,8 ±1,2 cm

Tabuľka 1: Špecifikácie masky Ambu AuraStraight.

* Maximálna veľkosť prístroja slúži ako pomôcka na výber vhodného priemeru pomôcky, ktorá má prechádzať cez trubicu pre pacienta masky AuraStraight.

Úplný zoznam vysvetliviek k symbolom nájdete na webovej lokalite <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Dánsko Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tejto dokumentácie sa nesmie reprodukovat' v žiadnej forme vrátane fotokópie bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv.

1.1. Predvidena uporaba/ Indikacije za uporabo

Pripomoček Ambu AuraStraight je namenjen uporabi kot alternativa za masko, s katero se vzpostavlja in ohranja nadzor nad dihalnimi potmi med rutinskimi in nujnimi anestetičnimi postopki pri bolnikih, ki so tešči.

1.2. Predvideni uporabniki in okolje uporabe

Zdravstveni strokovnjaki, usposobljeni za dihala. Pripomoček Ambu AuraStraight je namenjen uporabi v bolnišničnem okolju.

1.3. Predvidena populacija bolnikov

Odrasli bolniki in pediatrični bolniki, težji od 2 kg, za katere se oceni, da so primerni za uporabo supraglotične dihalne poti.

1.4. Kontraindikacije

Ni znanih kontraindikacij.

1.5. Prednosti pri klinični uporabi

Zgornje dihalne poti ohranja odprte in omogoča prehajanje plinov.

1.6. Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred vstavljanjem se morajo vsi zdravstveni delavci, ki uporabljajo pripomoček Ambu AuraStraight, nujno seznaniti z opozorili, previdnostnimi ukrepi, indikacijami in kontraindikacijami, ki so navedeni v *Navodilih za uporabo*.

OPOZORILA



1. Uporaba pripomočka je namenjena zdravstvenim strokovnjakom, ki so usposobljeni za dihala.
2. Po razpakiranju in pred uporabo izdelek vedno pregledajte ter opravite preizkus delovanja v skladu z razdelkom 3.1 Priprava pred uporabo, saj lahko kvare in tujki povzročijo odsotnost ventilacije oziroma zmanjšano ventilacijo, poškodbe sluznice ali okužbo bolnika. Če kateri koli korak razdelka Priprava pred uporabo ni opravljen, izdelka ne uporabljajte.
3. Pripomočka AuraStraight ne uporabite ponovno pri drugem bolniku, saj gre za pripomoček za enkratno uporabo. Ponovna uporaba kontaminiranega izdelka lahko povzroči okužbo.
4. Pripomoček AuraStraight ne ščiti sapnika ali pljuč pred nevarnostjo aspiracije.
5. Pri vstavljanju in odstranjevanju pripomočka AuraStraight ne uporabljajte pretirane sile, saj lahko to povzroči poškodbo tkiv.
6. Volumen ali tlak manšete se lahko v prisotnosti dušikovega oksida, kisika ali drugih medicinskih plinov spremeni, kar lahko povzroči poškodbo tkiv. Med kirurškim posegom zagotovite stalno spremljanje tlaka manšete.
7. Pripomočka AuraStraight ne uporabljajte v prisotnosti laserjev in opreme za elektrokavterizacijo, saj lahko to povzroči požar v dihalnih poteh ter opeklino tkiv.

8. Skozi pripomoček AuraStraight ne izvajajte neposredne intubacije, saj se lahko endotrahealni tubus zagoddi, kar povzroči nezadostno ventilacijo.
9. Splošno se sme pripomoček AuraStraight uporabljati samo pri bolnikih, ki so globoko nezavestni in se ne upirajo vstavljanju.
10. Skupna pojavnost zapletov je pri laringealni maski nizka, vendar se mora uporabnik pri odločanju o primernosti uporabe laringealne maske opreti na strokovno presojo. Pri naslednjih bolnikih obstaja večje tveganje resnih zapletov, vključno z aspiracijo in nezadostno ventilacijo:
 - Bolniki z obstrukcijo zgornjih dihalnih poti.
 - Netešči bolniki (vključno s primeri, kjer teščnosti ni mogoče potrditi).
 - Bolniki, ki imajo težave z zgornjimi prebavili (npr. ezofagektomija, hiatusna hernija, gastroezofagealna refluksna bolezen, morbidna debelost, nosečnost > 10 tednov).
 - Bolniki, ki potrebujejo visokotlačno predihavanje.
 - Bolniki s patologijo žrela/grla, ki bi lahko otežila anatomsko prileganje maske (npr. tumorji, radioterapija vratu, vključno s hipofarinksom, huda orofaringealna poškodba).
 - Bolniki z nezadostnim odpiranjem ust, ki ne omogoča vstavljanja.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Pripomočka ne namakajte, spirajte ali sterilizirajte, saj lahko ti postopki pustijo škodljive ostanke ali povzročijo okvaro pripomočka. Oblika in uporabljeni material nista združljiva z običajnimi postopki za čiščenje in sterilizacijo.
2. Pred uporabo vedno preverite združljivost pripomočka AuraStraight in zunanega pripomočka, da se izognete uporabi pripomočkov, ki jih ni mogoče pomakniti skozi svetlino pripomočka AuraStraight.
3. Tlak manšete mora biti čim nižji, pri čemer mora še vedno zagotavljati zadostno tesnjenje in ne sme preseči 60 cm H₂O.
4. Morebitne znake težav z dihalnimi potmi ali neustreznega predihavanja je treba redno spremljati, pripomoček AuraStraight pa je treba ponovno namestiti, ponovno vstaviti ali zamenjati, če je to potrebno za ohranjanje bolnikove dihalne poti.
5. Po vsaki spremembi položaja bolnikove glave ali vratu vedno ponovno preverite prehodnost dihalnih poti.

1.7. Možni neželeni dogodki

Uporaba laringealnih mask je povezana z manjšimi (npr. vneto grlo, krvavitev, disfonija, disfagija) in večjimi (npr. regurgitacija/aspiracija, laringospazem, poškodbe živcev) neželenimi učinki.

1.8. Splošne opombe

Če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega incidenta, o tem obvestite proizvajalca in državni organ.

2.0. Opis pripomočka

AuraStraight je sterilna laringealna maska za enkratno uporabo, sestavljena iz cevi za bolnika in napihljive manšete na distalnem koncu. Manšeto je mogoče napihniti s pomočjo protipovratnega ventila, ki omogoča, da pilotni balon pokaže stanje napihnenosti/izpraznjenosti. Manšeta se prilagodi konturam hipofarinksa in je s svetlino obrnjena k laringealni odprtini bolnika. Konica manšete pritiska na zgornji požiralnični sfinkter, proksimalni konec manšete pa se nasloni na koren jezika.

Pripomoček AuraStraight je na voljo v 8 velikostih. Glavni sestavni deli pripomočka AuraStraight so prikazani na sliki ①.

Slika 1 (stran 4): Pregled delov pripomočka AuraStraight:

1. Priključek; 2. Cev za bolnika; 3. Manšeta;
4. Protipovratni ventil; 5. Pilotni balon; 6. Pilotna cev;
7. Nazivna dolžina notranje poti predihavanja*.

* Za nominalno dolžino v centimetrih glejte tabelo 1.

Slika 2 (stran 4): Pravilni položaj pripomočka AuraStraight glede na dele pripomočka

AuraStraight in anatomske orientacijske točke

Deli AuraStraight: 1. Napihljiva manšeta; 2. Oznaka velikosti; 3. Ventilacijska odprtina; 4. Ventilacijska pot; 5. Oznaki za običajno globino vstavljanja; 6. Končni del za aparat.

Anatomske orientacijske točke: A. Požiralnik; B. Sapnik; C. Krikoidni obroček; D. Ščitnični hrustanec; E. Glasilke; F. Vhod v grlo; G. Epiglotis; H. Hioidna kost; I. Jezik; J. Bukalna votlina; K. Nazofarinks; L. Sekalci.

ZDRUŽLJIVOST Z DRUGIMI PRIPOMOČKI/OPREMO

Pripomoček AuraStraight je mogoče uporabljati skupaj z naslednjimi pripomočki:

- Ventilacijska oprema; 15-milimetrski stožčasti priključki v skladu s standardom ISO 5356-1.

- Pripomočki za upravljanje dihalnih poti; bronhoskopi in katetri za izmenjavo*.
- Drugi pripomočki; standardna brizga s 6-odstotnim stožčastim Luerjevim nastavkom, manometer s standardnim 6-odstotnim stožčastim priključkom Luer, mazivo na vodni osnovi, sukcijski kateter.

Pri uporabi pripomočkov skozi masko se pred vstavljanjem prepričajte, da je instrument združljiv in dobro namazan z mazivom.

* Za informacije o največjih dovoljenih velikostih instrumentov glejte tabelo 1.

3.0. Uporaba izdelka

3.1. Priprava pred uporabo

IZBIRA VELIKOSTI

Pripomoček Ambu AuraStraight je na voljo v različnih velikostih za uporabo pri bolnikih z različno težo.

Pri pediatričnih bolnikih se priporoča, da pripomoček Ambu AuraStraight uporablja zdravstveni strokovnjak, ki je poučen o pediatrični anesteziji.

Glejte smernice za izbiro in največji tlak v manšeti v tabeli 1, razdelek 4.0. (Specifikacije).

PREGLED PRIPOMOČKA AURASTRAIGHT

Med pripravo in vstavljanjem pripomočka Ambu AuraStraight vedno nosite rokavice, da zmanjšate nevarnost kontaminacije.

S pripomočkom AuraStraight ravnajte previdno, saj se lahko pretrga ali preluknja. Izogibajte se stika z ostrimi ali koničastimi predmeti.

Pred odpiranjem se prepričajte, da je tesnilo vrečke nepoškodovano. Če je tesnilo vrečke poškodovano, pripomoček Ambu AuraStraight zavrzite.

Natančno preglejte, ali so na pripomočku AuraStraight prisotne poškodbe, na primer luknjice, praske, ureznine, pretrganine, nepričvrščeni deli, ostri robovi idr.

Prepričajte se, da je zaščita manšete odstranjena z manšete.

Preverite, ali so v notranjosti cevi za bolnika in manšeti zamašitve ali nepričvrščeni deli. Če je pripomoček AuraStraight zamašen ali poškodovan, ga ne uporabljajte.

Manšeto pripomočka AuraStraight popolnoma izpraznite. Ko je manšeta popolnoma izpraznjena, temeljito preglejte, ali je nagubana oziroma prepognjena. Manšeto napolnite na volumen, ki je naveden v tabeli 1. Preverite, ali je

napihnjena manšeta simetrična in gladka. Na manšeti, pilotni cevi ali pilotnem balonu ne sme biti izboklin in znakov puščanja. Pred vstavljanjem manšeto ponovno izpraznite.

3.2. Priprava za uporabo PRIPRAVA PRED VSTAVLJANJEM

- Manšeto popolnoma izpraznite, tako da bo ploska in brez gub. To storite tako, da jo pritisnete na ravno sterilno površino (npr. kos sterilne gaze) in hkrati pripomoček izpraznite z brizgo. ③
- Zadnjo konico manšete pred vstavljanjem namažite tako, da na distalno zadnjo površino manšete nanese sterilno mazivo na vodni osnovi.
- Vedno imejte pripravljen nadomestni pripomoček Ambu AuraStraight.
- Predhodno oksigenirajte in opravite standardne postopke spremljanja.
- Pred poskusom vstavljanja preverite, ali je raven anestezije (ali nezavesti) primerna. Vstavljanje bi moralo biti uspešno pri enaki ravni anestezije, kot je primerna za trahealno intubacijo.
- Bolnikova glava mora biti iztegnjena z upogibom vratu v položaju, ki se običajno uporablja za trahealno intubacijo (tj. »položaj za vdihavanje skozi nos«).

3.3. Vstavljanje

- Nikoli ne uporabljajte pretirane sile.
- Držite pripomoček Ambu AuraStraight kot svinčnik s kazalcem na prehodu med manšeto in cevjo za bolnika. Drugo roko položite pod bolnikovo glavo. ④
- Vstavite konico manšete tako, da jo potisnete navzgor ob trdo nebo in jo sploščite ob njega. ⑤
- Preden nadaljujete, preverite, ali je konica manšete sploščena ob trdo nebo – čeljust s sredincem nežno potisnite navzdol, da usta bolj odprete.
- Prepričajte se, da konica manšete ne vstopi v valemule ali glotično odprtino in se ne zatakne ob epiglotis ali aritenoidne. Manšeta mora biti pritisnjena ob bolnikovo zadnjo steno žrela.
- Ko je maska nameščena, je mogoče občutiti odpor.
- Preden umaknete roko, s katero držite masko, z drugo roko pritisnete na tubus za dihalne poti. Tako zagotovite, da pripomoček Ambu AuraStraight ostane na mestu, ko umaknete prst.
- Po vstavljanju se prepričajte, da ustnice niso ujete med cevjo za bolnika in zobmi, da preprečite poškodbe ustnic.

TEŽAVE PRI VSTAVLJANJU

- Pri pediatričnih bolnikih je v primeru težav pri nameščanju priporočljiva uporaba delne rotacijske tehnike.

- Kašljanje in zadrževanje diha med vstavljanjem pripomočka Ambu AuraStraight kaže na nezadostno globino anestezije – anestezijo nemudoma poglobite z inhalacijskimi ali intravenskimi sredstvi in začnite ročno predihavanje.
- Če bolnikovih ust ne morete odpreti dovolj, da vstavite masko, preverite, ali je bolnik ustrezno anesteziran. Prosite pomočnika, naj potegne čeljust navzdol in vam tako olajša pogled v usta ter preverjanje položaja maske.
- Če imate pri vstavljanju pripomočka Ambu AuraStraight težave z manevriranjem kota pri korenu jezika, konico pritisnite ob trdo nebo, sicer se lahko konica zvije sama nase ali v zadnjem delu žrela naleti na oviro, npr. hipertrofirane mandlje. Če se manšeta ob vstavljanju ne splošči ali se začne zvijati, masko odstranite in jo ponovno vstavite. V primeru obstrukcije mandljev je priporočeno diagonalno pomikanje maske.

3.4. Pritrditev

Če presodite, da je potrebno, pripomoček Ambu AuraStraight pritrdite na bolnikov obraz z lepilnim trakom ali mehanskim držalom cevi, ki ustreza temu namenu. ⑦ Priporočena je uporaba zaščite pred ugrizom iz gaze.

3.5. Napihovanje

- Ne da bi držali cevko, napihnite manšeto zgolj toliko, da tesni, kar je enako tlaku v manšeti največ 60 cm H₂O. ⑥

Običajno za tesnjenje zadošča polovica največjega volumna – za največje volumne v manšeti glejte tabelo 1.

- Med kirurškim posegom stalno spremljajte tlak manšete z merilnikom tlaka v manšeti. To je še posebej pomembno pri daljši uporabi ali pri uporabi plinov, ki vsebujejo dušikov oksid.
- Opazujte naslednje znake pravilne namestitve: mogoče rahel premik cevi navzven ob napihovanju manšete, prisotnost gladke ovalne otekline v vratu okoli ščitnice in krikoidnega območja ali manšete ni mogoče videti v ustni votlini.
- Masko lahko prve tri ali štiri vdihne pušča, preden se v žrelu uleže na svoj položaj. Če puščanje ostane, preverite, ali je anestezija dovolj globoka in so tlaki napihovanja pljuč nizki, preden se odločite, da je potrebno ponovno vstavljanje pripomočka Ambu AuraStraight.

3.6. Preverjanje pravilnega položaja

- Pravilna namestitvev ustvari tesnjenje brez puščanja ob glotisu s konico manšete v zgornjem požiralničnem sfinktru.
- Navpična črta na cevi za bolnika mora biti obrnjena naprej k bolnikovem nosu.
- Pripomoček Ambu AuraStraight je pravilno vstavljen, ko so bolnikovi sekalci med vodoravnima črtama na cevi za bolnika. ②, točka 5. Če so bolnikovi sekalci zunaj tega območja, ponovno namestite masko.

- Položaj pripomočka AuraStraight lahko ocenite s kapnografijo, opazovanjem sprememb dihalnega volumna (npr. zmanjšanje izdihanega dihalnega volumna), avskultacijo dvostranskih dihalnih zvokov in odsotnostjo zvokov nad epigastrijem in/ali opazovanjem dviga prsnega koša ob ventilaciji. Če sumite, da je pripomoček AuraStraight nepravilno nameščen, ga odstranite in ponovno vstavite – in zagotovite, da je globina anestezije ustrezna.
- Priporočljiva je vizualna potrditev anatomsko pravilnega položaja, npr. z uporabo fleksibilnega endoskopa.

NEPRIČAKOVANA REGURGITACIJA:

- Regurgitacija je lahko posledica neustrezne ravni anestezije. Prvi znaki regurgitacije so lahko spontano dihanje, kašljanje ali zadrževanje diha.
- Če se pojavi regurgitacija in nasičenost s kisikom ostane na sprejemljivi ravni, se pripomočka AuraStraight ne sme odstraniti. To situacijo je treba rešiti tako, da se bolnika namesti v položaj »z glavo navzdol«. Za kratek čas odklopite anestezijski tokokrog, da želodčna vsebina ne bo potisnjena v pljuča. Preverite, ali je globina anestezije ustrezna in anestezijo poglobite intravensko, če je to primerno.
- Uporabite odsesavanje skozi cev za bolnika na maski in skozi usta. Posesajte traheobronhialno drevo in bronhije pregledajte s fleksibilnim endoskopom.

3.7. Uporaba z drugimi pripomočki/opremo SISTEM ZA ANESTEZIJO IN DIHALNI BALON

Masko je mogoče uporabiti za spontano ali nadzorovano predihavanje.

Med anestezijo se lahko dušikov oksid razprši v manšeto in povzroči povečanje volumna/tlaka manšete. Tlak manšete prilagodite zgolj toliko, da dosežete primerno tesnjenje (tlak manšete ne sme preseči 60 cm H₂O).

Anestezijski dihalni sistem mora biti ob priključitvi na pripomoček AuraStraight ustrezno podprt, da se prepreči vrtenje maske.

UPORABA S SPONTANIM PREDIHAVANJEM

Pripomoček AuraStraight je primeren za bolnike, ki diha spontano, ko se uporablja skupaj s hlapnimi sredstvi ali intravensko anestezijo, pod pogojem, da anestezija ustreza ravni kirurškega dražljaja in manšeta ni preveč napihnjena.

UPORABA S PREDIHAVANJEM S POZITIVNIM TLAKOM

Pri predihavanju s pozitivnim tlakom zagotovite, da je tesnjenje ustrezno. Za izboljšanje tesnjenja se priporoča naslednje:

- Namestitev pripomočka AuraStraight izboljšajte z obračanjem glave ali trakcijo.

- Prilagodite tlak manšete. Poskusite tako z nižjim kot višjim tlakom (slabo tesnjenje manšete je lahko posledica bodisi prenizkega bodisi previsokega tlaka manšete).
- Če pride do puščanja okoli manšete, odstranite masko in jo ponovno vstavite, pri čemer se prepričajte, da je globina anestezije ustrezna.

MAGNETNORESONANČNO SLIKANJE (MR)

Pripomoček AuraStraight je varen za uporabo v magnetnoresonančnem okolju.

3.8. Postopek odstranjevanja

Odstranjevanje je treba vedno izvajati v območju, kjer sta na razpolago sesalna oprema in oprema za hitro trahealno intubacijo.

Pripomočka AuraStraight ne odstranjujte, če je manšeta popolnoma napolnjena, da preprečite poškodbe tkiv in laringospazem.

3.9. Odlaganje

Uporabljen pripomoček Ambu AuraStraight zavržite na varen način, skladno z lokalnimi postopki.

4.0. Specifikacije

Pripomoček Ambu AuraStraight je skladen s standardom ISO 11712 Anestezijska in dihalna oprema – supralaringealne dihalne poti in priključki.

	Za otroke				Za odrasle			
Velikost maske	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Teža bolnika	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Največji volumen v manšeti	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Največji tlak v manšeti	60 cm H ₂ O							
Priključek	15 mm, moški (ISO 5356-1)							
Največja velikost instrumenta*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Združljivost nastavka Luer ventila za napihovanje	Nastavek Luer je združljiv z opremo, ki je skladna s standardoma ISO 594-1 in ISO 80369-7							
Ustrezni pogoji shranjevanja	Od 10 do 25 °C (od 50 do 77 °F)							
Približna teža maske	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Notranji volumen ventilacijske poti	4,3 ± 0,5 ml	5,7 ± 0,5 ml	7,1 ± 0,5 ml	10,2 ± 0,6 ml	13,4 ± 0,4 ml	15,3 ± 0,4 ml	20,6 ± 0,4 ml	22,2 ± 0,5 ml
Padec tlaka, kot je določeno v skladu s standardom ISO 11712, priloga C	0,4 cm H ₂ O pri 15 l/min	0,3 cm H ₂ O pri 15 l/min	0,4 cm H ₂ O pri 30 l/min	0,3 cm H ₂ O pri 30 l/min	0,4 cm H ₂ O pri 60 l/min	0,4 cm H ₂ O pri 60 l/min	0,3 cm H ₂ O pri 60 l/min	0,3 cm H ₂ O pri 60 l/min
Najm. razmak med zobmi	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nazivna dolžina notranje ventilacijske poti	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tabela 1: Specifikacije pripomočka Ambu AuraStraight.

* Največja velikost instrumenta je namenjena kot vodilo pri izbiri ustreznega premera pripomočka, ki ga je treba potisniti skozi cev za bolnika pripomočka AuraStraight.

Celoten seznam razlag simbolov je na voljo na spletnem mestu <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Avtorske pravice 2021 Ambu A/S, Danska. Vse pravice pridržane.

Razmnoževanje katerega koli dela te dokumentacije v kakršni koli obliki, vključno s fotokopiranjem, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic ni dovoljeno.

1.1. Avsedd användning/ Indikation

Ambu AuraStraight är avsedd att användas som ett alternativ till en ansiktsmask för att uppnå och upprätthålla kontroll över luftvägarna under rutinmässiga och akuta anestesilogiska åtgärder hos fastande patienter.

1.2. Avsedda användare och avsedd miljö för användning

Vårdpersonal med utbildning i luftvägsbehandling. AuraStraight är avsedd att användas på sjukhus.

1.3. Avsedd patientpopulation

Vuxna och barn från 2 kg och uppåt som bedömts lämpliga för supraglottisk luftväg.

1.4. Kontraindikationer

Inga kända.

1.5. Kliniska fördelar

Håller den övre luftvägen öppen för att medge gaspassage.

1.6. Varningar och försiktighetsåtgärder

Innan Ambu AuraStraight förs in är det viktigt att alla användare är väl förtrogna med de varningar, anmärkningar, indikationer och kontraindikationer som finns i denna *bruksanvisning*.

VARNINGAR



1. Produkten får endast användas av medicinsk personal med utbildning i luftvägsbehandling.
2. Utför alltid en visuell kontroll av produkten och utför ett funktionstest efter uppackning och inför användning enligt avsnitt 3.1 Förberedelse inför användning eftersom defekter och främmande ämnen kan leda till utebliven eller försämrad ventilation, skada på slemhinnor eller infektion av patienten. Använd inte produkten om ett eller flera åtgärder i Förberedelse inför användning inte kan utföras.
3. AuraStraight får inte återanvändas för en annan patient eftersom det är en produkt avsedd för engångsbruk. Återanvändning av en kontaminerad produkt kan leda till infektion.
4. AuraStraight skyddar inte luftstrupe eller lungor från aspirationsrisk.
5. Använd inte överdriven kraft när AuraStraight ska föras in eller avlägsnas eftersom detta kan leda till vävnadsskada.
6. Kuffens volym eller tryck kan förändras vid förekomsten av lustgas, syrgas eller andra medicinska gaser som kan leda till vävnadsskada. Kontrollera kufftrycket kontinuerligt under det kirurgiska ingreppet.
7. Använd inte AuraStraight i närheten av laser och diatermiutrustning eftersom detta kan leda till brand i luftväg och vävnadsbrännkada.
8. Utför inte direktintubation genom AuraStraight eftersom endotrakealtuben kan fastna och medföra otillräcklig ventilation.
9. Rent generellt ska AuraStraight endast användas för patienter som är fullständigt medvetslösa och inte gör motstånd vid införandet.
10. Totalt sett leder larynxmasker till få komplikationer, men användaren måste göra en professionell bedömning för att avgöra huruvida det är lämpligt att använda en larynxmask. Följande patienter löper högre risk för allvarliga komplikationer, inklusive aspiration och otillräcklig ventilation:
 - Patienter med blockerad övre luftväg.
 - Ej fastande patienter (inklusive fall där fasta inte kan säkerställas).
 - Patienter med besvär i övre mag-tarmkanalen (t.ex. esofagektomi, hiatusbräck, gastroesofageal reflux, sjuklig fetma, graviditet >10 veckor).
 - Patienter som behöver högtrycksventilation.
 - Patienter med svalg- och/eller struphuvudspatologi som kan påverka maskens anatomiska passform negativt (t.ex. tumörer, strålbehandling av halsen som involverar hypofarynx, allvarligt trauma i mellansvalget).
 - Patienter vars mun inte medger införing.

FÖRSIKTIGHET

1. Produkten får inte blötläggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att produkten inte fungerar. Produktens utformning och material tål inte vanliga rengörings- och steriliseringsprocesser.
2. Kontrollera alltid att AuraStraight och den externa enheten är kompatibla för att undvika att välja enheter som inte kan föras genom lumen på AuraStraight.
3. Kufftrycket ska hållas så lågt som möjligt samtidigt som det ger tillräcklig försegling, och ska inte överstiga 60 cm H₂O.
4. Regelbundna kontroller för att upptäcka eventuella tecken på luftvägsproblem eller otillräcklig ventilation måste utföras, och AuraStraight måste vid behov flyttas, föras in på nytt eller bytas ut för att upprätthålla en öppen luftväg.
5. Kontrollera alltid att luftvägen fortfarande är öppen efter att patientens huvud eller hals har ändrat position.

1.7. Potentiellt negativa händelser

Användning av larynxmasker förknippas med mindre negativa effekter (t.ex. halsont, blödning, heshet, sväljningssvårighet) och större negativa effekter (t.ex. uppstötning/aspiration, struphuvudspasm, nervskada).

1.8. Allmänna observanda

Om allvarliga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

2.0. Beskrivning av enheten

AuraStraight är en steril larynxmask för engångsbruk som består av en patienttub med en uppblåsbar kuff i den distala änden. Kuffen går att blåsa upp via backventilen så att kuffballongen kan visa status för fyllning/tömning av luft. Kuffen anpassar sig efter hypofarynx former och dess lumen vetter mot öppningen i patientens struphuvud (larynx). Kuffens spets trycker mot den övre esofageala sfinktern och kuffens proximala ände vilar mot tungans bas.

AuraStraight finns i 8 storlekar. De viktigaste delarna av AuraStraight visas i bild ①.

Bild 1 (sida 4): AuraStraight – delar

1. Koppling. 2. Patienttub. 3. Kuff. 4. Backventil. 5. Kuffballong. 6. Kuffslang. 7. Nominell längd på intern ventilationsväg*.

* Nominell längd i centimeter framgår av tabell 1.

Bild 2 (sida 4): Korrekt placering av AuraStraight återgiven i relation till AuraStraight delar och anatomiska riktmärken

AuraStraight – delar: 1. Uppblåsbar kuff. 2. Storleksmarkering. 3. Ventilationsöppning. 4. Ventilationsväg. 5. Normaldjup för införingsmarkeringar. 6. Maskinände.

Anatomiska riktmärken: A. Matstrupe. B. Luftstrupe. C. Krikoidalbrosk. D. Sköldbrosk. E. Stämband. F. Struphuvudsingång. G. Struplock. H. Tungben. I. Tunga. J. Näshåla. K. Näs- och svalgrum. L. Framtänder.

KOMPATIBILITET MED ANDRA ENHETER/ANNAN UTRUSTNING

AuraStraight kan användas tillsammans med:

- Ventilationsutrustning – 15 mm koniska kopplingar enligt ISO 5356-1.
- Enheter för luftvägsbehandling: bronkoskop och utbyteskatetrar*.
- Andra tillbehör – 6 % konisk LuerLock-spruta av standardtyp, manometer med 6 % konisk LuerLock-koppling av standardtyp, vattenbaserad smörjning, sugkateter.

När instrument ska användas via masken, kontrollera att instrumentet är kompatibelt och väl smort innan införing.

* Information om maximal instrumentstorlek finns i tabell 1.

3.0. Produktanvändning

3.1. Förberedelse inför användning

VAL AV STORLEK

Ambu AuraStraight finns i olika storlekar för användning på patienter med olika vikt.

När det gäller barn bör Ambu AuraStraight användas av läkare med erfarenhet av pediatrik anestesi.

Urvalsriktlinjer och maximalt intrakufftryck finns i tabell 1, avsnitt 4.0 (Specifikationer).

INSPEKTION AV AURASTRAIGHT

Använd alltid handskar när Ambu AuraStraight förbereds och förs in för att minimera kontamination.

Hantera AuraStraight försiktigt eftersom enheten kan gå sönder eller punkteras. Se till att den inte kommer i kontakt med vassa eller spetsiga föremål.

Kontrollera att påsens försegling är hel. Kassera Ambu AuraStraight om förseglingen är bruten eller skadad.

Undersök AuraStraight noga med avseende på skador, t.ex. perforering, repor, hack, revor, lösa delar, vassa kanter osv.

Kontrollera att kuffskyddet har tagits bort från kuffen.

Kontrollera att patientslangens insida och kuffen inte är blockerade och att inga lösa delar förekommer. Använd inte AuraStraight om den är blockerad eller skadad.

Töm kuffen helt på AuraStraight. När kuffen har tömts på luft, kontrollera om den är skrynklig eller vikt. Blås upp kuffen till den volym som anges i tabell 1. Kontrollera att den uppblåsta kuffen har en symmetrisk form och är slät. Kuffen, kuffslangen och kuffballongen får inte ha några utbuktningar eller visa tecken på läckage. Töm kuffen på luft igen innan den förs in.

3.2. Förberedelse inför användning FÖRBEREDELSE INNAN INFÖRING

- Töm kuffen fullständigt på luft så att den blir platt och fri från veck. Gör detta genom att trycka den mot ett plant sterilt underlag (t.ex. en bit gasväv) samtidigt som enheten töms på luft med en spruta. ③
- Smörj kuffens bakre spets innan införing genom att applicera ett sterilt, vattenbaserat smörjmedel på kuffens bakre distala yta.
- Se till att en extra Ambu AuraStraight finns tillgänglig för användning.
- Utför förhandsventilering och tillämpa standardrutiner för övervakning.
- Kontrollera att anestesinivån (eller medvetandegraden) är korrekt innan införande inleds. Införandet ska utföras vid samma anestesinivå som skulle vara lämplig för trakeal intubation.
- Patientens huvud ska placeras optimalt genom att böja nedre halsryggen i en position som vanligen används vid trakeal intubation (s.k. "sniffing position").

3.3. Införing

- Använd aldrig överdriven kraft.
- Håll Ambu AuraStraight ungefär som en penna med pekfingeret vid övergången mellan kuff och

patientslang. Håll den andra handen under patientens huvud. ④

- För in kuffspetsen och tryck uppåt mot den hårda gommen och platta till kuffen mot den. ⑤
- Kontrollera att kuffspetsen plattats ut mot gommen innan du fortsätter. Tryck käken lätt nedåt med långfingret för att öppna munnen ytterligare.
- Säkerställ att kuffspetsen inte kommer in i vallecula eller glottisöppningen och heller inte fastnar i epiglottis eller kannbrosk. Kuffen ska tryckas mot patientens bakre svalgvägg.
- Ett motstånd upplevs när masken sitter på plats.
- Använd din fria hand för att trycka ned luftvägstuben innan du drar tillbaka handen som håller i masken. Detta säkerställer att Ambu AuraStraight stannar kvar på plats när du tar bort fingret.
- Kontrollera efter införandet att läpparna inte hamnat mellan patienttub och tänder. Annars kan skador på läpparna uppstå.

SVÅRIGHETER VID INFÖRING

- När det gäller barn rekommenderas en partiell rotation om svårigheter uppstår med placeringen.
- Om patienten hostar till eller håller andan när Ambu AuraStraight förs in tyder detta på otillräcklig anestesiinivå. Fördjupa i så fall omgående anestesiin

med inhalations- eller intravenösa läkemedel och inled manuell ventilation.

- Om det inte går att öppna patientens mun tillräckligt mycket för att föra in masken, kontrollera att patienten är tillräckligt sövd. Be någon om hjälp med att dra käken nedåt för att få en bättre översikt över munhålan och verifiera maskens position.
- Om det är svårt att manövrera vid vinkeln längst bak på tungan när AuraStraight ska föras in, tryck spetsen mot gommen under hela processen. Det finns annars risk för att spetsen viker sig eller stöter emot något i bakre svalget, t.ex. förstörade tonsiller. Om kuffen inte plattas till eller börjar rulla ihop sig medan den förs in, dra ut masken och försök igen. I händelse av trånga luftvägar på grund av tonsillförstoring bör masken förflyttas diagonalt.

3.4. Fixering

Vid behov kan AuraStraight fästas vid patientens ansikte med tejp eller en mekanisk tubhållare lämpad för ändamålet. ⑦ Vi rekommenderar användning av ett bitblock av gasväv.

3.5. Uppblåsning

- Utan att hålla i tuben, blås upp kuffen med tillräckligt med luft för att skapa en förslutning motsvarande ett intrakufftryck på högst 60 cm H₂O. ⑥ Oftast räcker det med hälften av den maximala volymen för att uppnå en

förslutning – maximala intrakuffvolymen framgår av tabell 1.

- Använd en kufftrycksmätare för kontinuerlig övervakning av kufftrycket under det kirurgiska ingreppet. Detta är särskilt viktigt vid längre tids användning eller när lustgas används.
- Titta efter följande tecken på korrekt placering: En tub som rör sig något utåt när kuffen blåses upp, förekomsten av en mjuk oval utbuktning i halsen i sköldkörtel- och krikoidalbroskområdet.
- Masken kan läcka lite under de tre eller fyra första andetagerna innan den hamnar på plats i svalget. Om läckaget inte upphör, kontrollera att anestesiinivån är korrekt och att inandningstrycket i lungorna är lågt innan beslut fattas om att göra ett nytt försök att föra in AuraStraight.

3.6. Verifiering av korrekt position

- En korrekt placering ska ge en läckagefri försegling mot glottis med kuffspetsen vid den övre esofageala sfinktern.
- Den vertikala linjen på patienttuben ska vara riktad framåt mot patientens näsa.
- AuraStraight är korrekt införd när patientens framtänder befinner sig mellan de två horisontella linjerna på patienttuben. ②, punkt 5. Flytta masken om patientens framtänder befinner sig utanför detta område.

- Positionen för AuraStraight kan avgöras med kapnografi, genom observation av förändringar av tidal (t.ex. en minskning av respirationsvolym vid utandning), genom auskultation av bilaterala andningsljud och avsaknad av ljud över epigastriet och/eller observation av att bröstkorgen höjs vid ventilation. Vid misstanke om att AuraStraight är felplacerad, avlägsna och för in på nytt. Säkerställ också att anestesiinivån är tillräcklig.
- Vi rekommenderar att en anatomiskt korrekt position säkerställs visuellt, t.ex. med ett flexibelt skop.

OVÄNTAD UPPSTÖTNING:

- Uppstötningar kan orsakas av otillräcklig anestesi. De första tecknen på uppstötning kan vara spontanandning, hosta eller att hålla andan.
- Om uppstötning inträffar och syrgassaturationen kvarstår på acceptabel nivå ska AuraStraight inte avlägsnas. Åtgärda problemet med hjälp av Sellicks manöver (huvud ned). Koppla kort bort anestesisikretsen tillfälligt så att maginnehållet inte hamnar i lungorna. Kontrollera att anestesiinivån är godtagbar och fördjupa vid behov anestesi intravenöst.
- Utför sugning via maskens patientslang och munnen. Sug rent den trakeobronkeala regionen och inspektera bronkerna med ett flexibelt skop.

3.7. Användning med andra enheter/annan utrustning

ANESTESISYSTEM OCH VENTILATIONSBLÅSA

Masken kan användas för antingen spontan eller kontrollerad ventilation.

Under anestesi kan lustgas komma in i kuffen och göra att kuffens volym/tryck ökar. Justera kufftrycket precis så mycket som krävs för att etablera en tillräcklig förslutning (kufftrycket ska inte överstiga 60 cm H₂O).

När det anestetiska andningssystemet ansluts till AuraStraight måste det stötta tillräckligt för att förhindra att masken roterar.

ANVÄNDNING MED SPONTAN VENTILATION

AuraStraight är lämplig för patienter med spontanandning då användning sker tillsammans med lättflytande medel eller intravenös anestesi, förutsatt att anestesi är tillräcklig för att matcha kirurgisk stimulus och att kuffen inte blåses upp för mycket.

ANVÄNDNING MED ÖVERTRYCKSVENTILATION

Säkerställ att förseglingen är tillräcklig vid användning av övertrycksventilation. Vi föreslår följande åtgärder för att förbättra förseglingen:

- Optimera placeringen av AuraStraight genom att vrida på huvudet eller etablera traktion.
- Justera kufftrycket. Försök med både lägre och högre tryck (dålig kufftätning kan orsakas av antingen för lågt eller för högt kufftryck).
- Om läckage uppstår runt kuffen, avlägsna masken och sätt tillbaka den och verifiera samtidigt att anestesiinivån är tillräcklig.

MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI (MRT)

AuraStraight är MRT-säker.

3.8. Avlägsnande

Enheten ska alltid avlägsnas på en plats där det finns tillgång till sugutrustning och möjlighet till snabb trakeal intubation.

Avlägsna inte AuraStraight med kuffen helt uppblåst för att förhindra vävnadstrauma och laryngospasm.

3.9. Kassering

Använda Ambu AuraStraight ska kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala rutiner.

4.0. Specifikationer

Ambu AuraStraight överensstämmer med ISO 11712, Anestesi- och ventilationsutrustning – Supralaryngeala tuber och kopplingar.

	Barn				Vuxna			
Maskstorlek	1	1½	2	2½	3	4	5	6
Patientvikt	2–5 kg	5–10 kg	10–20 kg	20–30 kg	30–50 kg	50–70 kg	70–100 kg	> 100 kg
Maximal intrakuffvolym	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maximalt intrakufftryck	60 cm H ₂ O							
Typ av anslutning	15 mm hane (ISO 5356-1)							
Maximal instrumentstorlek*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Kompatibilitet för uppblåsningsventilens luerkon	Luerkon kompatibel med utrustning som uppfyller kraven i ISO 594-1 och ISO 80369-7							
Lämplig förvaringsmiljö	10 till 25 °C							
Ungefärlig maskvikt	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Inre volym för ventilationsväg	4,3 ±0,5 ml	5,7 ±0,5 ml	7,1 ±0,5 ml	10,2 ±0,6 ml	13,4 ±0,4 ml	15,3 ±0,4 ml	20,6 ±0,4 ml	22,2 ±0,5 ml
Tryckfall avgjort enligt ISO 11712 bilaga C	0,4 cm H ₂ O vid 15 l/min	0,3 cm H ₂ O vid 15 l/min	0,4 cm H ₂ O vid 30 l/min	0,3 cm H ₂ O vid 30 l/min	0,4 cm H ₂ O vid 60 l/min	0,4 cm H ₂ O vid 60 l/min	0,3 cm H ₂ O vid 60 l/min	0,3 cm H ₂ O vid 60 l/min
Min. Tandradsmellanrum	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Nominell längd på intern ventilationsväg	10,2 ±0,6 cm	11,8 ±0,7 cm	13,4 ±0,8 cm	15,3 ±0,9 cm	17,1 ±1,0 cm	17,6 ±1,1 cm	19,6 ±1,2 cm	20,8 ±1,2 cm

Tabell 1: Specifikationer för Ambu AuraStraight.

* Angiven maximal instrumentstorlek är en vägledning för valet av passande diameter på ett instrument som ska föras genom patienttuben på AuraStraight.

En heltäckande lista med förklaringar finns på <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

© Copyright 2021 Ambu A/S, Danmark. Med ensamrätt.

Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i någon form, inklusive fotokopiering, utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

1.1. Kullanım Amacı/ Kullanım Endikasyonu

Ambu AuraStraight, aç olan hastalarda rutin ve acil anestezi prosedürleri sırasında hava yolunun kontrolünü sağlamak ve sürdürmek için bir yüz maskesine alternatif olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.2. Hedeflenen kullanım ortamı

Solunum yolu yönetiminde eğitim görmüş profesyoneller. AuraStraight, hastane ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1.3. Hedef hasta popülasyonu

2 kg ve üzeri yetişkin ve pediyatrik hastalar supraglottik hava yolu için uygun olarak değerlendirilmiştir.

1.4. Kontrendikasyonlar

Bilinen yok.

1.5. Klinik faydaları

Gaz geçişine izin vermek için üst solunum yolunu açık tutar.

1.6. Uyarı ve ikazlar

Ambu AuraStraight kullanan tüm tıbbi uzmanların ekipmanı yerleştirmeden önce *kullanım talimatlarındaki* uyarı, önlem, endikasyon ve kontrendikasyonları bilmesi çok önemlidir.

UYARILAR



1. Ürün, yalnızca hava yolu yönetimi konusunda eğitim almış tıbbi uzmanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Ürünü ambalajından çıkardıktan veya monte ettikten sonra ve kullanmadan önce mutlaka bölüm 3.1'e göre görsel olarak inceleyin ve bir fonksiyon testi yapın; aksi halde arızalar ve yabancı maddeler hastanın ya hiç ya da az ventilasyon almasına neden olabilir. Kullanımdan önceki Hazırlık bölümündeki adımlardan herhangi biri başarısız olursa ürünü kullanmayın.
3. Tek kullanımlık bir cihaz olduğundan AuraStraight'i başka bir hastada yeniden kullanmayın. Kontamine olmuş bir ürünün tekrar kullanımı enfeksiyona yol açabilir.
4. AuraStraight trakeyi veya akciğerleri aspirasyon riskinden korumaz.
5. Doku travmasına yol açabileceğinden AuraStraight'i yerleştirir ve çıkarırken aşırı güç kullanmayın.
6. Doku travmasına neden olabilecek azot oksit, oksijen veya diğer tıbbi gazların olduğu ortamda kaf hacmi veya basıncı değişebilir. Cerrahi prosedür sırasında kaf basıncını sürekli olarak izleyin.
7. Hava yolu yangısına ve doku yanıklarına yol açabileceğinden AuraStraight'i lazerler ve elektrokoter ekipmanı varken kullanmayın.

8. Endotrakeal (ET) tüp sıkışarak yetersiz ventilasyona yol açabileceğinden AuraStraight yoluyla doğrudan entübasyon gerçekleştirmeyin.
9. Genel olarak AuraStraight yalnızca bilinci fazla yerinde olmayan ve yerleştirmeye direnç göstermeyen hastalarda kullanılmalıdır.
10. Larengeal maske için genel komplikasyon oranı düşüktür ancak kullanıcı larengeal maske kullanımının uygun olup olmadığına karar verirken profesyonel değerlendirme yapmalıdır. Aşağıdaki hastalar aspirasyon ve yetersiz ventilasyon dahil yüksek ciddi komplikasyon riski altındadır:
 - Üst solunum yolu obstrüksiyonu olan hastalar.
 - Hızlandırılmamış hastalar (hızlanmanın doğrulanmadığı durumlar dahil).
 - Üst gastrointestinal sorunları olan hastalar (ör. özofagektomi, hiatal fıtık, gastroözofajeal reflü hastalığı, morbid obezite, gebelik >10 hafta).
 - Yüksek basınçlı ventilasyona ihtiyaç duyan hastalar.
 - Farengeal/larengeal patolojisi bulunan hastalar, maskenin anatomik oturmasını potansiyel olarak zorlaştırabilirler (örn. tümörler, hipofarenks, şiddetli orofarengeal travmayı içeren boyna radyoterapi).
 - Yerleştirmeye izin vermek için ağız yetersiz olan hastalar.

İKAZLAR

1. Cihazı sıvıya batırmayın, yıkamayın veya sterilize etmeyin; aksi takdirde bu işlemler cihaz üzerinde zararlı kalıntı bırakabilir veya cihazın arızalanmasına neden olabilir. Cihazın tasarımı ve kullanılan malzeme geleneksel temizlik ve sterilizasyon işlemleriyle uyumlu değildir.
2. Kullanmadan önce, AuraStraight'in lümeninden geçemeyen cihazların kullanımından kaçınmak için her zaman AuraStraight ile harici cihaz arasındaki uyumluluğu kontrol edin.
3. Kaf basıncı yeterli sızdırmazlık sağlarken mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve 60 cm H₂O değerini aşmamalıdır.
4. Solunum yolu sorunlarının veya yetersiz ventilasyonun belirtileri düzenli olarak izlenmeli ve AuraStraight, açık bir hava yolu sağlamak için gerektiği şekilde yeniden konumlandırılmalı, yeniden yerleştirilmeli veya yeri değiştirilmelidir.
5. Hastanın baş veya boyun pozisyonundaki bir değişikliğin ardından hava yolunun açıklığını daima tekrar doğrulayın.

1.7. Potansiyel advers etkiler

Larengeal maskelerin kullanımında küçük yan etkiler (örn. boğaz ağrısı, kanama, disfoni, disfaji) ve majör yan etkiler (örn. regürjitasyon/aspirasyon, larengospazm, sinir hasarı) görülebilir.

1.8. Genel notlar

Bu cihaz kullanılırken veya cihazın kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi hasar meydana gelirse lütfen durumu üreticiye ve yetkili ulusal makama bildirin.

2.0. Cihazın tanımı

AuraStraight, distal ucunda şişirilebilir bir kaf bulunan hasta tüpünden oluşan steril, tek kullanımlık larengeal bir maskedir. Kaf, çek valfinden şişirilerek pilot balonun şişirme/söndürme durumunu belirtmesi sağlanabilir. Kaf, hipofarenks konturlarına uygundur ve lümeni hastanın larengeal açıklığına dönüktür. Kaf ucu yemek borusundaki üst sfinktere, kafın proksimal ucu ise dilin tabanına bastırılır.

AuraStraight 8 farklı boyutta gelmektedir. AuraStraight'in ana bileşenleri ① numaralı şekilde gösterilmektedir.

Şekil 1 (sayfa 4): AuraStraight parçalarına genel bakış:

1. Konektör; 2. Hasta tüpü; 3. Kaf; 4. Çek valf; 5. Pilot balon; 6. Pilot tüp; 7. Dahili solunum yolunun nominal uzunluğu*.

*Santimetre cinsinden verilen nominal uzunluk için Tablo 1'e bakın.

Şekil 2 (sayfa 4): AuraStraight'in, AuraStraight parçalarına ve anatomik belirli noktalara göre doğru konumu

AuraStraight parçaları: 1. Şişirilebilir kaf; 2. Boyut işareti; 3. Ventilator açıklığı; 4. Solunum yolu; 5. Yerleştirme işaretlerinin normal derinliği; 6. Makine ucu.

Anatomik yer işaretleri: A. Özofagus; B. Trake; C. Cricoid halkası; D. Tiroid kıkırdak; E. Ses telleri; F. Larengeal giriş; G. Epiglottis; H. Hipoid kemik; I. Dil; J. Bukkal boşluk; K. Nazofarenks; L. İnsüzörler.

DİĞER CİHAZLAR/EKİPMANLARLA UYUMLULUK

AuraStraight şunlarla birlikte kullanılabilir:

- Ventilasyon ekipmanı; ISO 5356-1 uyarınca 15 mm konik konektörler.

- Hava yolu yönetim cihazları; Bronkoskoplar ve değişim kateterleri*.
- Diğer aksesuarlar; Standart % 6 konik Luer şırınga, Standart % 6 konik Luer konektörlü Manometre, Su bazlı yağlama, Emme kateteri.

Maskedeki aletleri kullanırken, yerleştirmeden önce enstrümanın uyumlu olduğundan ve iyice yağlandığından emin olun.

* Maksimum alet boyutu hakkında bilgi için Tablo 1'e bakın.

3.0. Ürünün kullanımı

3.1. Kullanım öncesi hazırlık

BOYUT SEÇİMİ

Ambu AuraStraight farklı kilolardaki hastalarda kullanılmak üzere farklı boylarda sunulur.

Pediyatrik hastalar için Ambu AuraStraight'in pediyatrik anestezi konusunda bilgi sahibi bir tıp uzmanı tarafından kullanılması önerilir.

Seçim kılavuzu ve maks. intra kaf basıncı için bkz. Tablo 1, bölüm 4.0. (Teknik Özellikler).

AURASTRAIGHT KONTROLÜ

Kirlenmeyi en aza indirmek için Ambu AuraStraight'i hazırlar ve yerleştirirken daima eldiven takın.

AuraStraight'i yırtılabileceği ve delinebileceği için dikkatli bir şekilde kullanın. Keskin veya sivri nesnelere temas etmekten kaçınin.

Açmadan önce torba kilidinin sağlam olduğunu kontrol edin ve torba kilidi hasar görmüşse Ambu AuraStraight'i atın.

AuraStraight'i perforasyon, çizik, kesik, yırtılma, gevşek parça, keskin kenar gibi hasarlar açısından yakından inceleyin.

Kaf koruyucunun kaftan çıkarıldığından emin olun.

Hasta tüpünün iç kısmında ve kafta tıkanıklık veya gevşek parça olmadığını kontrol edin. Tıkanmış veya hasar görmüşse AuraStraight'i kullanmayın.

AuraStraight'in kafını tamamen söndürün. Söndükten sonra kafta kırışıklık veya katlanma olup olmadığını iyice kontrol edin. Kafı, Tablo 1'de belirtilen hacme kadar şişirin. Şişirilen kafın simetrik ve pürüzsüz olduğunu kontrol edin. Kaf, pilot tüp veya pilot balonda herhangi bir kabarma veya sızıntı belirtisi olmamalıdır. Yerleştirmeden önce kafı tekrar söndürün.

3.2. Kullanım Hazırlığı ÖN YERLEŞTİRME HAZIRLIĞI

- Şırıngayla cihazı söndürürken kafı düz ve steril bir yüzeye (örn. steril gazlı bez) bastırarak kafın düz ve

kırışksız olmasını sağlamak için kafı tamamen söndürün. ③

- Yerleştirmeden önce kafın arka ucunu, kafın distal arka yüzeyine steril su bazlı kayganlaştırıcı uygulayarak yağlayın.
- Her zaman yedek bir Ambu AuraStraight'i hazır bulundurun.
- Ön oksijenleme yapın ve standart izleme prosedürlerini kullanın.
- Yerleştirmeye başlamadan önce anestezi seviyesinin (veya bilinç kaybının) yeterli olduğunu kontrol edin. Yerleştirme işlemi, trakeal entübasyona uygun olan anestezi seviyesinde başarılı olmalıdır.
- Hastanın başı, boyun fleksiyonuyla normalde trakeal entübasyon için kullanılan bir pozisyona ("koklama pozisyonu") uzatılmalıdır.

3.3. Yerleştirme

- Aşırı kuvvet uygulamayın.
- Ambu AuraStraight'i, işaret parmağı kaf ile hasta tüpü arasındaki geçişe gelecek şekilde bir kalem gibi tutun. Diğer eliniz hastanın başının altına yerleştirilmelidir. ④
- Kafın ucunu sert damağa karşı yukarı doğru bastırarak takın ve kafı düzleştirin. ⑤
- Devam etmeden önce kafın ucunun damağa karşı düzleştiğini teyit edin. Ağzı daha fazla açmak için orta parmağınızla çeneyi hafifçe aşağı doğru itin.

- Kaf ucunun çukurcuğa veya glotik açıklığa girmediğinden ve epiglotusa veya aritenoidlere takılmadığından emin olun. Kaf, hastanın posterior faringeal duvarına doğru bastırılmalıdır.
- Maske yerine oturduğunda direnç hissedilir.
- Maskeyi tutan eli geri çekmeden önce, diğer el hava yolu tüpünü bastırmak için kullanılır. Bu işlem, parmak çıkarıldığında Ambu AuraStraight'in yerinde kalmasını sağlar.
- Dudakların travmaya maruz kalmasını önlemek için yerleştirdikten sonra dudakların hasta tüpü ve dişleri arasında sıkışmadığından emin olun.

YERLEŞTİRME SORUNLARI

- Pediyatrik hastalarda, yerleştirmede güçlük yaşanması durumunda kısmi rotasyonel teknik önerilir.
- Ambu AuraStraight'in yerleştirilmesi sırasında öksürme ve nefes tutma anestezinin yetersiz derinlikte olduğunu gösterir. Soluma veya intravenöz ajanlarla anesteziyi hemen derinleştirin ve manuel solunumu başlatın.
- Hastanın ağzını maskeyi yerleştirmeye yetecek kadar açamıyorsanız hastanın anestezisi seviyesinin yeterli olduğunu kontrol edin. Bir asistandan çeneyi aşağıya doğru çekmesini isteyin ve ağzın içine bakmayı kolaylaştırıp maskenin pozisyonunu teyit edin.
- AuraStraight'i yerleştirirken dilin arkasında aç

ayarlamada zorluk yaşarsanız uç kısmını damağa doğru bastırın, aksi takdirde uç kendi üzerine katlanabilir veya posterior farenkste düzensizlikle karşılaşabilir (örn. hipertropiye tonsiller). Kaf, takıldığı sırada düzelmez veya kıvrılmaya başlarsa maskeyi çıkarın ve yeniden takın. Tonsiller obstrüksiyon durumunda maskenin çapraz olarak hareket ettirilmesi önerilir.

3.4. Sabitleme

Gerekli görülürse AuraStraight'i hastanın yüzüne yapışkan bant veya buna uygun bir mekanik tüp tutucuyla sabitleyin. ⑦ Bir gazlı bez ısırma bloğunun kullanılması önerilir.

3.5. Şişirme

- Maksimum 60 cm H₂O intra kaf basıncına eş değer bir sızdırmazlığı elde etmek için tüpü tutmadan, kafı yeterli havayla şişirin. ⑥ Maksimum hacmin sadece yarısı sızdırmazlık sağlamak için yeterlidir. Maksimum intra kaf hacimleri için lütfen Tablo 1'e bakın.
- Kaf basıncını cerrahi prosedür sırasında sürekli olarak kaf basınç ölçerleriyle izleyin. Bu, özellikle uzun süreli kullanımlarda veya azot oksit gazları kullanıldığında önemlidir.
- Doğru yerleştirme için aşağıdaki işaretleri kontrol edin: Kaf şişirildiğinde tüpün dışarı doğru bir miktar olası hareketi, tiroid ve krikoid bölge çevresinde boyunda düz oval şişlik olması veya ağız boşluğunda kafın görünmemesi.

- Maske, ilk üç veya dört nefes boyunca, farenkseye yerleştirilmeden önce hafifçe sızdırabilir. Sızıntı devam ederse AuraStraight'in yeniden takılmasının gerekli olduğunu varsaymadan önce yeterli anestezinin derinliği olduğunu ve pulmoner şişirme basınçlarının düşük olduğunu kontrol edin.

3.6. Doğru konumun doğrulanması

- Doğru yerleştirmede, üst yemek borusu sfinkterinde kafın ucuyla birlikte glotise karşı sızıntısız bir sızdırmazlık sağlanmalıdır.
- Hasta tüpündeki dikey çizgi hastanın burnuna doğru anterior yönde olmalıdır.
- AuraStraight, hastanın insizörleri hasta tüpündeki iki yatay çizginin arasında olduğunda doğru yerleştirilmiştir. ②, madde 5. Hastanın insizörleri bu aralığın dışındaysa maskeyi yeniden konumlandırın.
- AuraStraight'in konumu kapnografi yoluyla, tidal hacimdeki değişiklikler gözlenerek (örn. ekspire edilen tidal hacimde azalma), bilateral soluk sesleri dinlenerek ve epigastriyum üzerinde seslerin olmaması ve/veya ventilasyonla göğsün yükselmesi gözlemlenerek değerlendirilebilir. AuraStraight'in yanlış konumlandırıldığından şüpheleniyorsanız çıkarıp yeniden takın ve anestezik derinliğin yeterli olduğundan emin olun.

- Anatamik olarak doğru konumun görsel olarak doğrulanması önerilir, örn. esnek bir skop kullanarak.

BEKLENMEYEN REGÜRJİTASYON:

- Regürjitasyon yetersiz anestezi seviyesi nedeniyle oluşabilir. Regürjitasyonun ilk belirtileri spontan soluma, öksürme veya nefes tutma olabilir.
- Regürjitasyon durumunda oksijen satürasyonu kabul edilebilir seviyelerde kalırsa AuraStraight çıkarılmamalıdır. Bu durum, hasta "baş aşağı" pozisyona alınarak yönetilmelidir. Gastrik içeriklerin akciğerlere zorlanmaması için anestezi devreyi kısa bir süreliğine ayırın. Anestezi derinliğinin yeterli olup olmadığını kontrol edin ve uygunsuz anesteziyi intravenöz olarak derinleştirin.
- Maskenin hasta tüpünden ve ağızdan emme uygulayın. Trakeobronşiyal ağacı emdirin ve esnek bir skop kullanarak bronşu inceleyin.

3.7. Diğer cihazlar/ekipmanlarla kullanım

ANESTEZİ SİSTEMİ VE VENTİLASYON TORBASI

Maske spontan veya kontrollü solunum için kullanılabilir.

Anestezi sırasında, nitröz oksit kafın içine yayılarak kaf hacminin/basıncının artmasına neden olabilir. Kaf basıncını sadece yeterli sızdırmazlığı sağlayacak kadar ayarlayın (kaf basıncı 60 cm H₂O değerini aşmamalıdır).

Anestezi solunum sistemi, maskenin dönmesini önlemek için AuraStraight'e bağlandığında yeterli şekilde desteklenmelidir.

SPONTAN VENTİLASYONLA KULLANIM

AuraStraight, anestezinin cerrahi uyaran seviyesine uygun olması ve kafın aşırı şişirilmemesi durumunda uçucu ajanlar veya intravenöz anesteziyle kullanıldığında spontan solunum yapan hastalar için uygundur.

POZİTİF BASINÇLI VENTİLASYONLA KULLANIM

Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanırken sızdırmazlığın yeterli olduğundan emin olun. Sızdırmazlığı iyileştirmek için aşağıdakilerin yapılması önerilir:

- Baş çevirme veya traksiyon yoluyla AuraStraight yerleşimini optimize edin.
- Kaf basıncını ayarlayın. Hem düşük hem de yüksek basınçları deneyin (kötü kaf sızdırmazlığına çok düşük veya çok yüksek kaf basıncı neden olabilir).
- Kaf çevresinde sızıntı meydana gelirse maskeyi çıkarın ve anestezi derinliğinin yeterli olduğundan emin olarak yeniden takın.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)

AuraStraight MR güvenlidir.

3.8. Çıkarma prosedürü

Çıkarma işlemi daima emme ekipmanının ve hızlı trakeal entübasyon olanağının bulunduğu bir alanda yapılmalıdır.

Doku travması ve larengospazm oluşumunu önlemek için AuraStraight'i kaf tamamen şişirilmiş haldeyken çıkarmayın.

3.9. Bertaraf

Kullanılmış Ambu AuraStraight'i yerel prosedürlere uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

4.0. Teknik Özellikler

Ambu AuraStraight, ISO 11712 Anestezi ve solunum ekipmanı - Supralarngal hava yolları ve konektörlerle uyumludur.

	Pediatrik				Erişkin			
Maske Boyutu	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Hastanın ağırlığı	2 - 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Maksimum intra kaf hacmi	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksimum intra kaf basıncı	60 cm H ₂ O							
Konektör	15 mm erkek (ISO 5356-1)							
Maksimum cihaz boyutu*	4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,5 mm	9,0 mm	9,5 mm	10,5 mm	11,0 mm
Şişirme Valfi Luer konik uyumluluğu	ISO 594-1 ve ISO 80369-7 uyumlu ekipmanla uyumlu Luer konik							
Uygun depolama koşulu	10 °C (50 °F) ila 25 °C (77 °F)							
Yaklaşık maske ağırlığı	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
Solunum yolunun iç hacmi	4,3 ± 0,5 mL	5,7 ± 0,5 mL	7,1 ± 0,5 mL	10,2 ± 0,6 mL	13,4 ± 0,4 mL	15,3 ± 0,4 mL	20,6 ± 0,4 mL	22,2 ± 0,5 mL
ISO 11712 ek C'ye göre belirlenen basınç düşüşü	(0,4 cm H ₂ O) 15 lt/dak'da	(0,3 cm H ₂ O) 15 lt/dak'da	(0,4 cm H ₂ O) 30 lt/dak'da	(0,3 cm H ₂ O) 30 lt/dak'da	(0,4 cm H ₂ O) 60 lt/dak'da	(0,4 cm H ₂ O) 60 lt/dak'da	(0,3 cm H ₂ O) 60 lt/dak'da	(0,3 cm H ₂ O) 60 lt/dak'da
Min. İnterdental boşluk	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Dahili ventilatör yolunun nominal uzunluğu	10,2 ± 0,6 cm	11,8 ± 0,7 cm	13,4 ± 0,8 cm	15,3 ± 0,9 cm	17,1 ± 1,0 cm	17,6 ± 1,1 cm	19,6 ± 1,2 cm	20,8 ± 1,2 cm

Tablo 1: Ambu AuraStraight için teknik özellikler.

* Maksimum alet boyutu, AuraStraight hasta tüpünden geçirilecek bir cihazın uygun çapının seçilmesinde kılavuz olarak tasarlanmıştır.

Sembol açıklamalarının eksiksiz bir listesi <https://www.ambu.com/symbol-explanation> adresinde bulunabilir

© Telif Hakkı 2021 Ambu A/S, Danimarka. Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin önceden yazılı izni alınmadan fotokopi dahil üzere hiçbir biçimde çoğaltılamaz.

1.1. 预期用途/使用适应症

Ambu AuraStraight 适用于在常规和紧急麻醉过程中，代替面罩来实现和保持对气道的控制。

1.2. 预期用户和使用环境

受过气道管理训练的医疗专业人士。
AuraStraight 设计用于医院环境。

1.3. 目标患者人群

适合使用声门上气道的 2 kg 及以上儿童和成人患者。

1.4. 禁忌症

未知。

1.5. 临床优势

保持上气道打开，允许气体通过。

1.6. 警告和小心

插入前，所有使用 Ambu AuraStraight 的医疗专业人士都必须熟悉 *使用说明* 中包含的警告、注意事项、适应症和禁忌症。

警告

1. 本产品仅供受过气道管理培训的医疗专业人员使用。
2. 在拆开包装和使用前，务必根据第 3.1 节“使用前的准备工作”目视检查该产品并执行功能测试，因为缺陷和异物可能导致患者通气不畅、粘膜损伤或感染。如果“使用前的准备工作”中的任何步骤失败，请勿使用该产品。
3. 由于 AuraStraight 是一次性器械，请勿在其他患者身上重复使用。重复使用受污染的产品会导致感染。
4. AuraStraight 不能使气管或肺避免误吸风险。
5. 在插入和取出 AuraStraight 时，请勿用力过度，否则可能导致组织损伤。
6. 套囊充气量或压力可能会因存在一氧化二氮、氧气或其他医用气体而发生变化。确保在手术过程中持续监测套囊压力。
7. 请勿在有激光和电烙设备的地方使用 AuraStraight，否则会导致气道起火和组织灼伤。

8. 请勿直接通过 AuraStraight 进行插管，因为气管内 (ET) 插管可能会被卡住，从而导致通气不足。
9. 一般情况下，只能将 AuraStraight 用于深度失去意识且无法阻止插入的患者。
10. 喉罩的总体并发症率低，但在决定使用喉罩是否合适时，使用者必须运用专业判断。下列患者出现严重并发症（包括抽吸和通气不足）的风险更高：
 - 上气道阻塞的患者。
 - 未禁食的患者（包括无法确认禁食的患者）。
 - 患有上胃肠道疾病（例如，食管切除术、食管裂孔疝、胃食管反流性疾病、病态肥胖、怀孕 >10 周）的患者。
 - 需要高压通气的患者。
 - 具有咽/喉病理学，可能会使喉罩的解剖学贴合复杂化的患者（例如，肿瘤、涉及咽喉的颈部放射疗法、严重的口咽创伤）。
 - 口腔开口不足而不能插入的患者。

小心

1. 切勿浸泡、清洗或者对该装置进行消毒，这样做会留下有害的残余物或者导致装置出现故障。本装置的设计及所用材料不适用于传统的清洁和消毒程序。
2. 使用前，务必检查 AuraStraight 与外部器械之间的兼容性，避免使用无法通过 AuraStraight 内腔的设备。
3. 套囊压力应尽可能低，同时提供足够的密封，且不应超过 60 cm H₂O。
4. 必须定期监测任何气道问题或通气不足的迹象，并且必须根据需要进行重新放置、重新插入或更换 AuraStraight，以保持明显气道。
5. 对患者头部或颈部位置进行任何调整以后，务必重新确认气道明显可见。

1.7. 潜在不良事件

喉罩的使用与轻微不良反应（如咽喉痛、出血、发音困难、吞咽困难）和重大不良反应（如反流/吸入、喉痉挛、神经损伤）相关。

1.8. 基本注意事项

如果在设备使用过程中出现严重事故，或者因使用设备而导致严重事故，请向制造商及主管当局报告。

2.0. 设备说明

AuraStraight 是一款一次性无菌喉罩，由一根在头端部带有充气套囊的柔性患者插管组成。可通过止回阀对套囊充气，从而使导向气囊指示充气/放气状态。套囊适合咽喉的轮廓，并且其内腔面向患者的喉口。套囊的头端压在上食道括约肌上，套囊的近端紧贴着舌根。

AuraStraight 有 8 种不同尺寸。AuraStraight 的主要部件如图 ①所示。

图 1 (第 4 页): AuraStraight 部件概述:

1. 接头; 2. 患者插管; 3. 套囊; 4. 止回阀; 5. 导向气囊;
 6. 导向插管; 7. 内部通气通路的标称长度*。
- *请参见表 1 了解标称长度, 单位为厘米。

图 2 (第 4 页): AuraStraight 相对于 AuraStraight 部件和解剖学标志的正确位置

- AuraStraight 部件:** 1. 可充气套囊; 2. 尺寸标记;
3. 通气开口; 4. 通气通路; 5. 插入标记的正常深度;
 6. 机器端。

解剖学标志: A. 食道; B. 气管; C. 轮环; D. 甲状软骨; E. 声带; F. 喉口; G. 会厌; H. 舌骨; I. 舌; J. 口腔; K. 鼻咽; L. 切牙。

与其他器械/设备的兼容性

AuraStraight 可与以下设备配套使用:

- 通气设备; 符合 ISO 5356-1 标准的 15 mm 锥形接头。
- 气道管理设备; 支气管内窥镜和交换导管*。
- 其他附件: 标准 6% 锥形鲁尔注射器、带标准 6% 锥形鲁尔接头的压力计、水基润滑、抽吸导管。

通过喉罩使用器械时, 在插入前确保器械兼容且润滑良好。

*有关最大器械尺寸的信息, 请参见表 1。

3.0. 产品使用

3.1. 使用前的准备工作

尺寸选择

Ambu AuraStraight 有多种不同尺寸, 适用于不同体重的患者。

对于儿童患者, 建议由熟悉儿童麻醉的医疗专业人员使用 Ambu AuraStraight。

请参阅选型指南和第 4.0 节 (规格) 表 1 中的最大套囊内压。

AURASTRAIGHT 检查

准备和插入 Ambu AuraStraight 时务必佩戴手套, 以最大程度减少污染。

小心拿放 AuraStraight, 因为可能会被撕破或刺破。避免接触尖锐或尖利物品。

打开前先检查包装袋密封是否完好无损, 如果包装袋密封已损坏, 请弃置 Ambu AuraStraight。

仔细检查 AuraStraight 是否有任何损坏, 如穿孔、刮痕、切口、撕裂、松动部件、锋利边缘等。

确保套囊保护套已从套囊上取下。

检查病人插管和套囊内部是否堵塞, 以及是否有任何松动部件。如果 AuraStraight 堵塞或损坏, 请勿使用。

将 AuraStraight 的套囊完全放气。放气后, 彻底检查套囊是否有任何褶皱或折痕。按照表 1 中说明的充气量对套囊充气。检查充气套囊是否对称光滑。套囊、导向管或导向气囊中不应有任何凸起或任何泄漏迹象。插入前再次对套囊放气。

3.2. 使用准备

插入前准备

- 将套囊向下按压到平坦的无菌表面(例如, 一块无菌纱布), 使套囊平整且无褶皱, 对套囊完全放气, 同时使用注射器对器械放气。③
- 插入前, 在套囊的远端后表面涂抹无菌水基润滑剂, 对套囊的后头端进行润滑。

- 务必准备好备用 Ambu AuraStraight。
- 预先吸氧并使用标准监测程序。
- 在插入前, 检查麻醉(或失去意识)水平是否足够。应在与适合气管插管的麻醉水平相同的情况下成功插入。
- 患者头部应伸展, 颈部弯曲, 处于通常用于气管插管的位置(即“嗅探体位”)。

3.3. 插入

- 切勿过度用力。
- 像铅笔一样握住 Ambu AuraStraight, 食指放在套囊和患者插管之间的过渡处。另一只手应放在患者头部下方。④
- 将套囊的头端向上按到硬腭上, 并将套囊平压到上面。⑤
- 确认套囊头端紧贴于上腭, 然后再继续操作 - 用中指轻轻向下按压下颌, 进一步打开口腔。
- 确保套囊头端不会进入会厌谷或声门开口, 也不会卡在会厌或者状腺上。套囊应压在患者的后咽壁上。
- 喉罩就位后, 会感觉到阻力。
- 向后拉动握住喉罩的手之前, 用另一只手向下按压气道管。这可确保移开手指时 Ambu AuraStraight 保持在原位。
- 插入后, 确保嘴唇没有卡在患者插管和牙齿之间, 以免损伤嘴唇。

插入问题

- 对于儿科患者, 如果放置困难, 建议采用部分旋转技术。
- Ambu AuraStraight 插入期间的咳嗽和屏气表明麻醉深度不足 - 用吸入或静脉注射药剂立即加深麻醉, 并启动手动通气。
- 如果无法充分打开患者口腔插入喉罩, 请检查患者是否已充分麻醉。让助理将下颌向下拉, 以便于看到口腔内部, 验证喉罩的位置。
- 由于难以在插入 AuraStraight 时操纵舌头后部的角度, 请将头端压在腭上, 否则, 头端可能会自行折叠, 或者遭遇后咽异常, 例如肥厚扁桃体。如果套囊在插入后无法变平或开始卷曲, 请抽出喉罩并重新插入。如果存在扁桃体阻塞, 建议对角移动喉罩。

3.4. 固定

必要时, 使用胶带或适合此用途的机械管架将 AuraStraight 固定在患者面部。⑦建议使用纱布咬合块。

3.5. 充气

- 不要握住导管, 用恰好足够的空气对套囊充气以实现密封, 相当于最大 60 cm H₂O 的套囊内压。⑥通常, 仅一半最大充气量即足以实现密封 - 请参阅表 1 了解最大套囊内充气量。
- 在手术过程中, 使用套囊压力表持续监测套囊压力。在长时间使用或使用一氧化二氮气体时, 这一点尤为重要。

- 查看以下迹象，看放置是否正确：套囊充气时，甲状腺和环状部位周围颈部存在平滑椭圆形肿胀时，或者口腔中看不到套囊时，可能出现插管轻微向外移动。
- 最初三四次呼吸时，喉罩可能会轻微漏气，然后稳定在咽部位置。如果仍存在泄漏，检查麻醉深度是否足够，并且肺部的充气压力是否较低，然后再考虑是否有必要重新插入 AuraStraight。

3.6. 验证正确位置

- 正确放置后，应使套囊头端位于上食道括约肌处，从而与声门形成无泄漏密封。
- 患者插管上的垂直线应向前朝向患者鼻子。
- 患者的切牙位于患者插管的两条水平线之间时，表示 AuraStraight 已正确插入。②，第 5 项。如果患者的切牙超出此范围，请重新定位喉罩。
- 可通过观察潮气量变化（例如呼气潮气量减少）、倾听双侧呼吸声音和上腹部无声音以及/或者观察通气时的胸部上升情况，对 AuraStraight 的位置进行评估。如果您怀疑 AuraStraight 位置不正确，请取下并重新插入，并确保麻醉深度足够。
- 建议通过视觉确认解剖学正确位置，如使用柔性内窥镜。

意外反流：

- 反流可能是由于麻醉不足引起的。反流的第一征兆可能是自主呼吸、咳嗽或屏气。

- 如果发生反流，且氧气饱和度保持在可接受水平，则不应取下 AuraStraight。应通过将患者置于“低头”体位来管理患者。短暂断开麻醉回路，以免胃部物质进入肺部。适当时，检查麻醉深度是否足够，并通过静脉注射加深麻醉。
- 通过喉罩的患者插管和口腔进行抽吸。抽吸气管支气管树并使用柔性内窥镜检查支气管。

3.7. 与其他器械/设备配合使用

麻醉系统和通气袋

该喉罩可用于自发通气或控制通气。

在麻醉期间，一氧化二氮可能会扩散到套囊中，导致套囊充气量/压力增大。调节套囊压力，使其刚好达到适当密封效果（套囊压力不应超过 60 cm H₂O）。

连接 AuraStraight 时，麻醉呼吸系统必须得到充分支撑，以避免喉罩旋转。

在自主通气模式下使用

AuraStraight 适合与挥发性药剂或静脉麻醉配合用于自主呼吸的患者，前提是麻醉足以匹配手术刺激水平且套囊未过度充气。

与正压通气配合使用

使用正压通气时，确保密封良好。为了改善密封效果，建议采取以下措施：

- 通过头部转动或牵引优化 AuraStraight 的放置。
- 调节套囊压力。尝试使用更低和更高的压力（套囊密封不佳可能是由套囊压力过低或过高引起的）。
- 如果套囊周围漏气，则取下喉罩并重新插入，同时确保麻醉深度充足。

磁共振成像 (MR)

AuraStraight 是磁共振成像安全产品。

3.8. 拆卸程序

务必在抽吸设备和快速气管插管设施可用区域进行移除。

在套囊完全充气的情况下，请勿取下 AuraStraight，以防止组织创伤和喉痉挛。

3.9. 处置

按照当地程序安全处置用过的 Ambu AuraStraight。

4.0. 技术规格

Ambu AuraStraight 符合 ISO 11712 麻醉和呼吸设备 - 咽上气道和接头标准。

	小童				成人			
喉罩尺寸	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
患者体重	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
最大套囊内充气量	4 mL	7 mL	10 mL	14 mL	20 mL	30 mL	40 mL	50 mL
最大套囊内压	60 cm H ₂ O							
接头	15 mm 公头 (ISO 5356-1)							
最大仪器尺寸*	4.5 mm	5.0 mm	6.0 mm	7.5 mm	9.0 mm	9.5 mm	10.5 mm	11.0 mm
充气阀鲁尔锥头兼容性	鲁尔锥头兼容符合 ISO 594-1 和 ISO 80369-7 的设备							
适当的储存条件	10 °C (50 °F) 至 25 °C (77 °F)							
喉罩大概重量	10 g	14 g	18 g	27 g	37 g	45 g	63 g	71 g
通气通路的内部充气量	4.3 ± 0.5 mL	5.7 ± 0.5 mL	7.1 ± 0.5 mL	10.2 ± 0.6 mL	13.4 ± 0.4 mL	15.3 ± 0.4 mL	20.6 ± 0.4 mL	22.2 ± 0.5 mL
根据 ISO 11712 附录 C 确定的压降	0.4 cm H ₂ O (15 升/分钟时)	0.3 cm H ₂ O (15 升/分钟时)	0.4 cm H ₂ O (30 升/分钟时)	0.3 cm H ₂ O (30 升/分钟时)	0.4 cm H ₂ O (60 升/分钟时)	0.4 cm H ₂ O (60 升/分钟时)	0.3 cm H ₂ O (60 升/分钟时)	0.3 cm H ₂ O (60 升/分钟时)
最小值 齿间间隙	13 mm	15 mm	17 mm	19 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
内部通气通路的标称长度	10.2 ± 0.6 cm	11.8 ± 0.7 cm	13.4 ± 0.8 cm	15.3 ± 0.9 cm	17.1 ± 1.0 cm	17.6 ± 1.1 cm	19.6 ± 1.2 cm	20.8 ± 1.2 cm

表 1: Ambu AuraStraight 规格。

*最大器械尺寸用作穿过 AuraStraight 患者插管的合适直径器械的选择指南。

<https://www.ambu.com/symbol-explanation> 上提供了全套符号释义表。

© 版权所有 2021 Ambu A/S, Denmark. 保留所有权利。

未经版权所有者优先书面许可, 不得以任何形式复制本文档的任何部分, 包括复印。

Ambu



Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

